



Добре дошли в

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА PARKY

v1.6.1

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Приложението Parky е предназначено да определя количествено кинематиката на симптомите на двигателните нарушения, включително тремор и дискинезия, при възрастни (на 45-годишна възраст или повече) с лека до умерена болест на Паркинсон.

СЪДЪРЖАНИЕ

Първи стъпки	3
Настройки на смарт часовника	7
Вътре в Parky	10
Изисквания	21
Клинична интерпретация	22
Общи инструкции	23
Ограничения	24
Безопасност	26
Общи предупреждения	27
Сигурност на данните	28

Запознайте се с Parky

Parky е инструмент за дистанционно наблюдение, разработен за непрекъсната, обективна оценка на двигателните симптоми на болестта на Паркинсон, като тремор и дискинезия. Той определя количествено данните от сензора за движение чрез Apple Watch и предоставя доклади за профила на симптомите в реално време, подпомагайки управлението на грижите за пациента.

Parky използва клинично валидирания алгоритъм Motor Fluctuations Monitor for Parkinson's Disease (MM4PD), разработен от Apple Inc. (Powers et al., 2021¹)

За доклада от клиничното проучване, моля, посетете

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536284/>

За кого е предназначен Parky?

- Parky е предназначен само за потребители с клинично диагностицирана идиопатична болест на Паркинсон, които са достатъчно способни да използват Apple Watch и iPhone.
- Parky работи най-добре за хора, които изпитват предимно симптоми на тремор и дискинезия.
- Parky не е предназначен да оценява паркинсонови синдроми като множествена системна атрофия (MSA), прогресивна супрануклеарна парализа (PSP), кортикобазална дегенерация (CBD) или деменция с телца на Леви.

¹ Powers R, Etezadi-Amoli M, Arnold EM, Kianian S, Mance I, Gibiansky M, Trietsch D, Alvarado AS, Kretlow JD, Herrington TM, Brillman S, Huang N, Lin PT, Pham HA, Ullal AV. Smartwatch inertial sensors continuously monitor real-world motor fluctuations in Parkinson's disease. Sci Transl Med. 2021 Feb 3;13(579):eabd7865. doi: 10.1126/scitranslmed.abd7865. PMID: 33536284.

Бърз поглед върху Parky

Иновативно наблюдение и оценка

Parky предоставя ценни анализи, като открива тремор и дискинезия на различни етапи на заболяването. Той събира точни данни за двигателните симптоми през целия ден и позволява оценки навсякъде, дори извън контролирана среда.

Управление на лекарствата и анализ на симптомите

Parky гарантира, че следите приема на лекарствата си чрез удобни напомняния на Вашия iPhone и Apple Watch, и комбинира докладите за симптомите с данните за употребата на лекарства. Тази комбинация предоставя ясни, обективни анализи, които помагат на медицинските специалисти да откриват промени в симптомите, като по този начин подобряват плановете за лечение.

Овластяване чрез технологии

Parky интегрира носими сензори, за да Ви предложи надеждна алтернатива на пациентските дневници, като адресира субективния характер на самооценката и предотвратява пропуските в данните, които често се срещат при воденето на дневник. Тази интеграция предлага непрекъснато, пасивно проследяване, осигурявайки безпроблемно наблюдение на Вашето здраве.

Проследяване на активността и подкрепа на подвижността

Parky не само наблюдава двигателните Ви симптоми; той също проследява ежедневните Ви стъпки, предлагайки прозорец към нивата на физическата Ви активност.

Първи стъпки с Parky



Сканирайте QR кода с камерата на Вашия iPhone и следвайте изскачащия прозорец, за да изтеглите Parky от App Store.


Препоръчваме Ви да изтеглите приложението Parky от App Store, за да проверите съвместимостта на устройството.

Предоставяне на разрешения

Ще трябва да предоставите разрешения чрез показаните по-долу подкани, за да функционира Parky правилно. Тези разрешения позволяват на Parky да изпраща известия и да получава достъп до данни за стъпки, както и до проследяване на движението за анализ на тремор и дискинезия.

Parky разчита на тези разрешения, за да Ви предостави пълни анализи за Вашата физическа активност, симптоми и придържане към приема на лекарства.


1

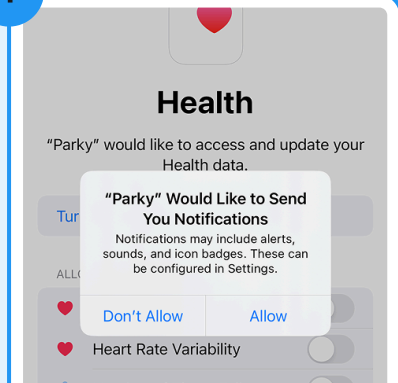

Достъп до известия

Това разрешение Ви позволява да получавате напомнания и актуализации от Parky. Без него няма да получавате известия за


2

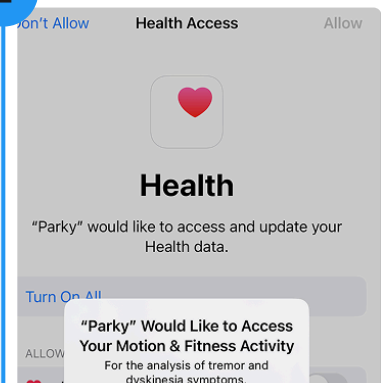

Достъп до данни за движение

Предоставянето на това разрешение позволява на Parky да проследява движението Ви, което е от

3

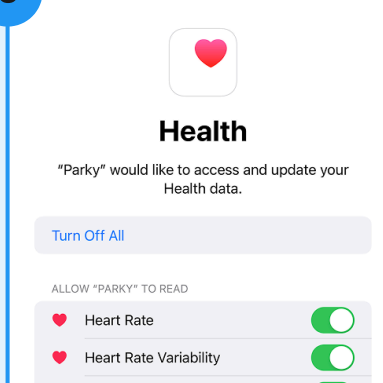


Достъп до здравни данни

Като разрешите достъп до Вашите данни за здравето, Parky може да предоставя анализи за нивата на



Първоначална настройка

Ще започнете с процес на първоначална настройка, който обхваща как да използвате Parky, важна информация за безопасността и как защитаваме Вашите данни.

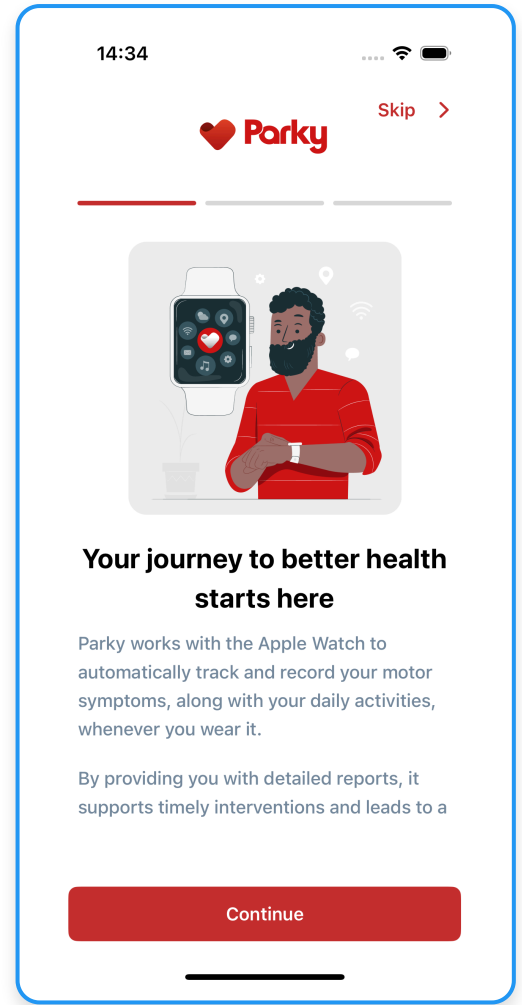

Вход

При първоначалната настройка ще въведете мобилния си номер и ще получите код за потвърждение чрез текстово съобщение.

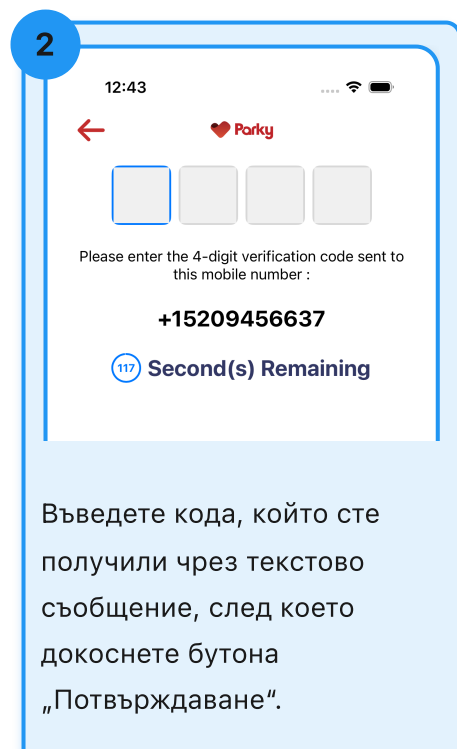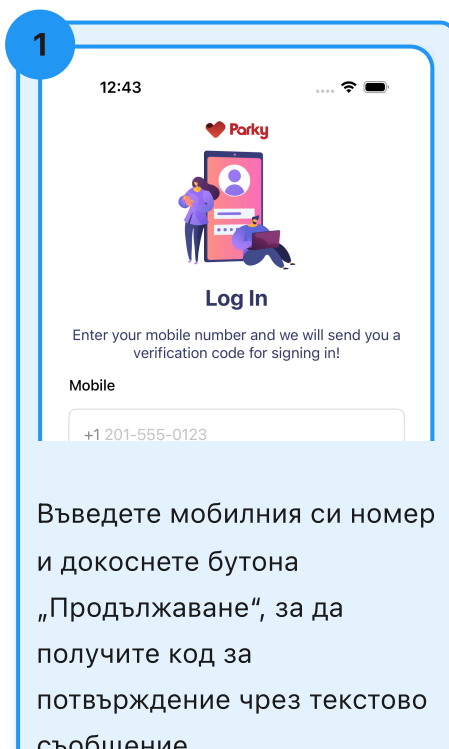

Настройка на усложненията на циферблата

Следвайте стъпките по-долу, за да добавите Parky към усложненията на циферблата. Parky може да наблюдава двигателните симптоми само когато са добавени усложнения на циферблата.

1



Докоснете и задръжете екрана.

2




Докоснете „Редактиране“.

3



Плъзгайте наляво, докато се появи заглавието „Усложнения“, и изберете който и да е слот.

4

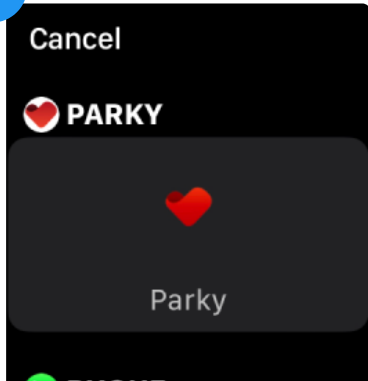

Превъртете, докато се появи „Parky“, след което докоснете.

5




Готово! Усложнението Parky е добавено.

Активиране на хаптичните известия

Следвайте стъпките по-долу, за да активирате хаптичните известия на Вашия Apple Watch. Хаптичните известия осигуряват обратна връзка чрез вибрация за известията на Parky.

1

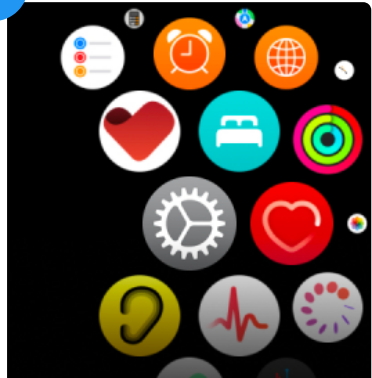


Натиснете коронката на Вашия Apple Watch, за да видите началния екран.

2




Докоснете „Настройки“ от менюто с иконите на приложенията.

3

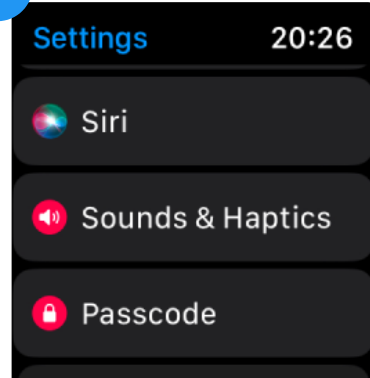


Превъртете надолу и докоснете „Звуци и хаптика“.

4

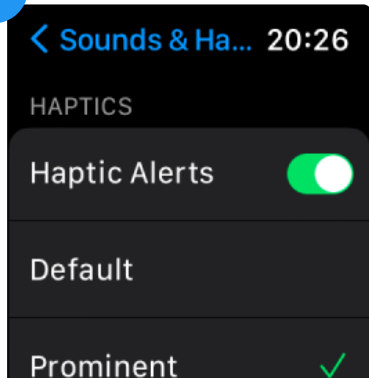

Уверете се, че „Хаптични известия“ е включено, като превъртите надолу отново.

5

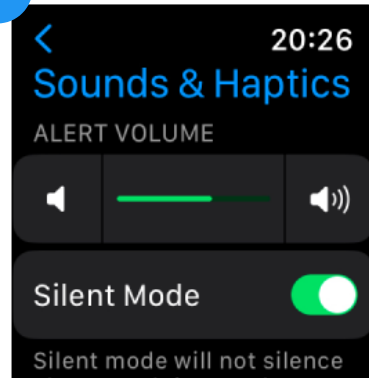

Не забравяйте, че активирането на хаптичните вибрации също ще произведе звук.

За по-фини сигнали винаги можете да се върнете тук и да включите „Безшумен режим“.

Използване на Foggy




Стартирайте „Foggy“ или като докоснете бутона на усложнението, или като натиснете бутона в приложението Parky.




Foggy започва да подава сигнали веднага щом го отворите. Докоснете, за да спрете, или го оставете да работи.


Персонализиране на Foggy

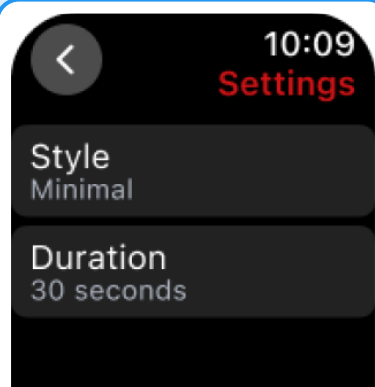

Има два типа настройки: „Стил“ и „Продължителност“.

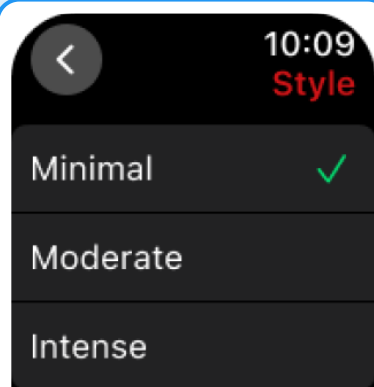


Регулирайте честотата на вибрацията в менюто „Стил“.

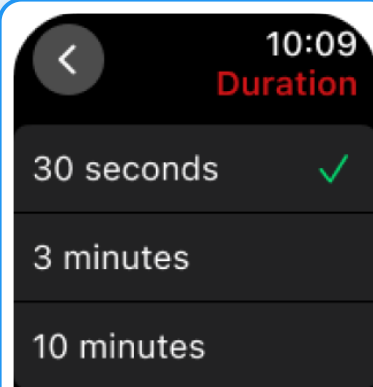

Задайте продължителността на сигналите за Foggy в менюто „Продължителност“.

Вътре в Parky

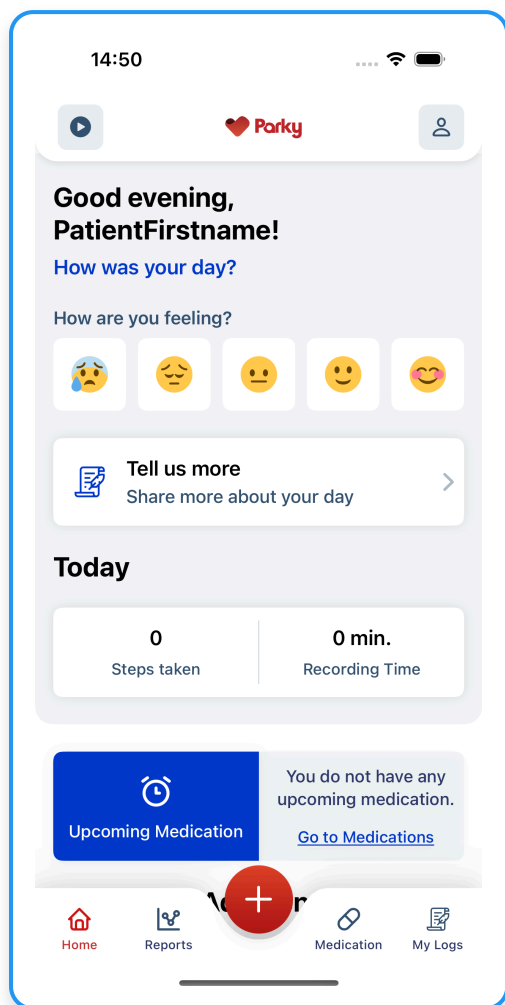

Начален екран


Началният екран на Parky предлага удобно за потребителя табло, където ще намерите напомняния за предстоящи лекарства, ще проследявате ежедневните си стъпки, ще наблюдавате времената на запис и ще преглеждате седмична и месечна информация за придържането към приема на лекарства. Освен това ще имате достъп до център с ресурси за допълнителна информация.

Достъп до докладите

Преглеждайте докладите си за симптомите в раздела „Доклади“.

По подразбиране докладите се показват дневно. Изберете менюто с раздели, за да преглеждате седмични и месечни доклади, включително за минали дати.

Докоснете бутона за експортиране, за да изтеглите конкретен доклад като PDF по всяко време.

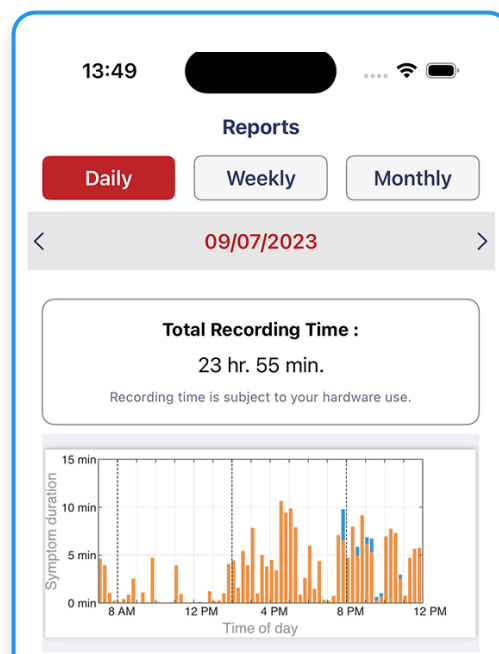




Daily report

User: Name Surname

September 07, 2023

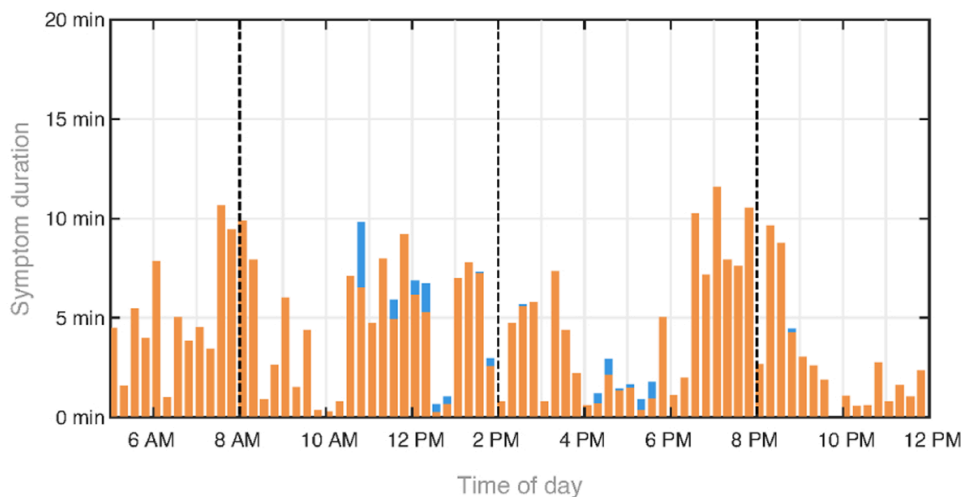

Total recording time

23 Hours 55 Minutes

Recording time is subject to users' hardware use.

Total steps

-

Step count is subject to users' hardware use.


Medication	Days	Schedule and dose	Adherence
Rasagiline	Daily	08:00 AM (1)	100%
Carbidopa / Levodopa	Daily	08:00 AM (1) 02:00 PM (1) 08:00 PM (1)	100%

Medication schedules and adherence are subject to users' input.

www.parkynow.com

Тези доклади ще бъдат достъпни за медицинския специалист, когото сте поканили чрез приложението Parky, след като той приеме поканата Ви. Медицинският специалист може да преглежда докладите Ви чрез Parky Provider Portal. Те включват графики за тремор и дискинезия, данни за придържане към приема на лекарства, брой стъпки и времена на


Записване

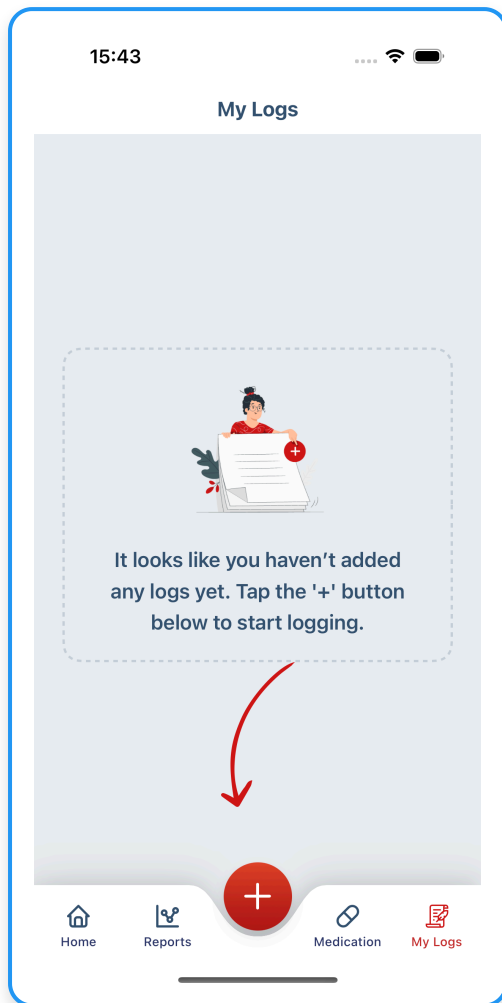

Можете лесно да записвате как се чувствате през деня. Това Ви помага да оставате в синхрон с емоционалното си състояние и да изградите по-добро разбиране за настроенятия си с течение на времето. Започнете да проследявате емоционалните си модели още днес, за да подобрите самоосъзнаването и да подпомогнете персонализираните грижи.


Добавяне на записи

Можете да записвате своето настроение, ВКЛ./ИЗКЛ. периоди или свободен персонализиран запис, свързан с Вашите грижи.

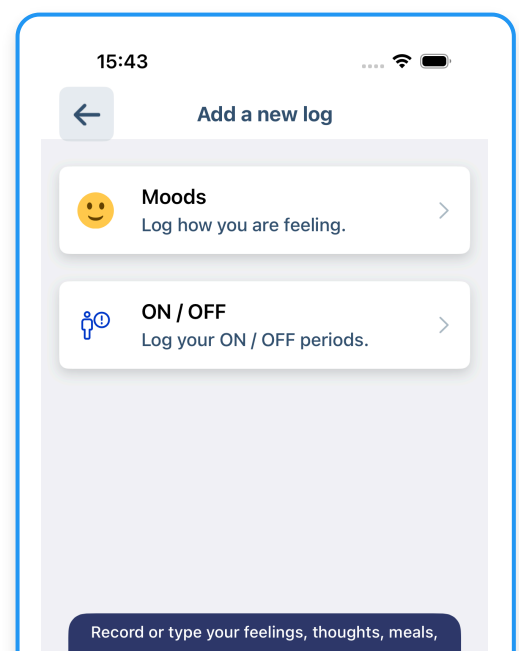


Настроения

Можете да записвате текущото си настроение през деня. След като регулирате часа на записа си, можете да го запазите и прегледате в раздела „Моите записи“.

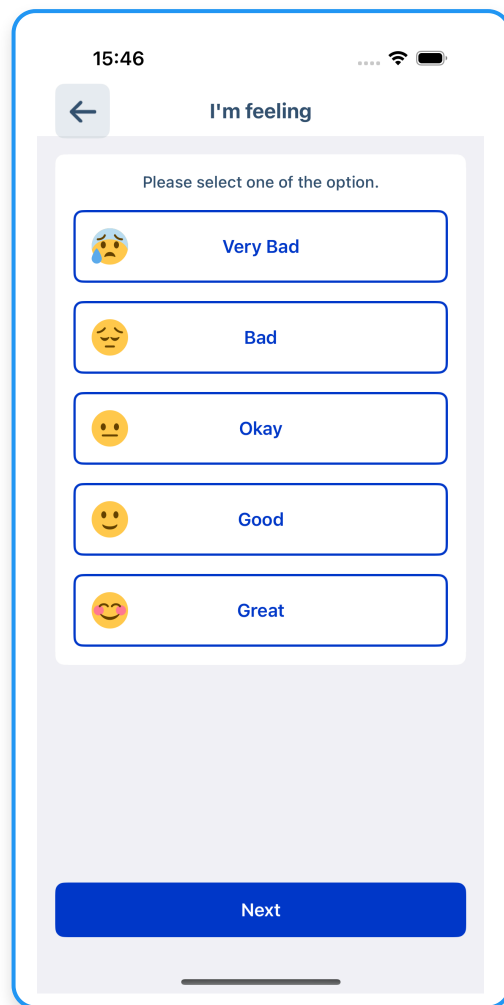


ВКЛ. / ИЗКЛ. периоди

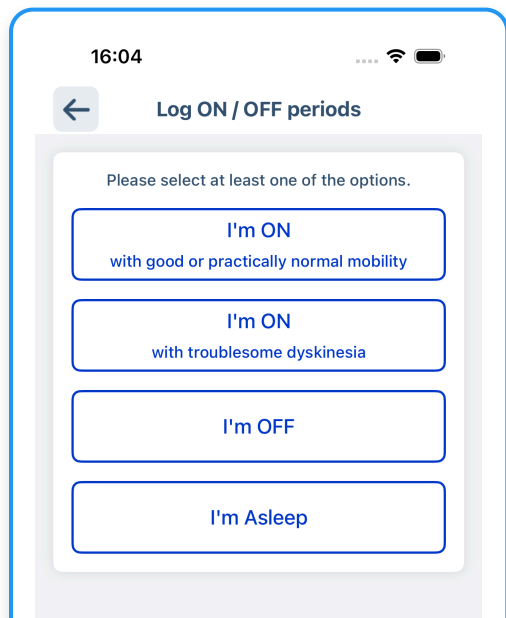

Можете да запишете най-подходящата ВКЛ./ ИЗКЛ. опция за даден период. По същия начин можете да го запазите и прегледате в раздела „Моите записи“.


Персонализиран запис с текст

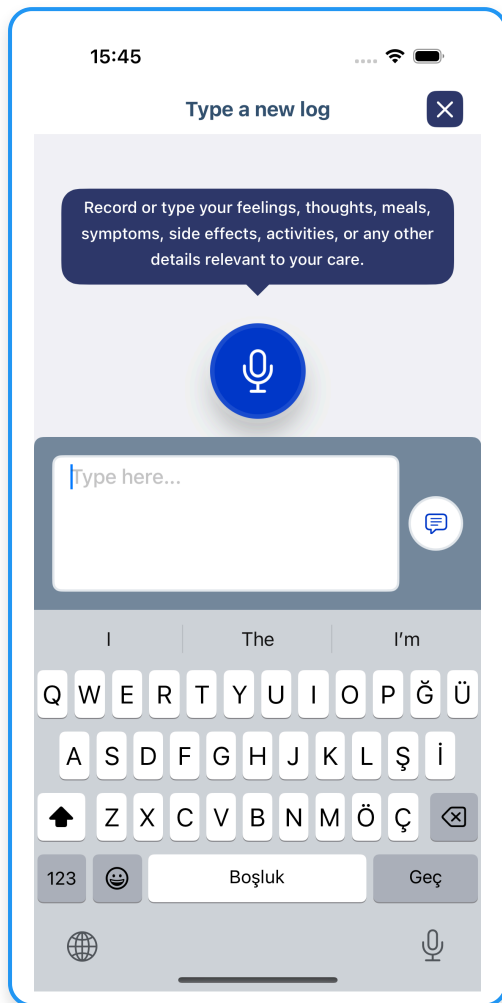


Можете да пишете свободно за чувствата, мислите, храненияята си или други подробности, които смятате за важни да запишете. Персонализираните записи могат да бъдат създадени чрез текстов или гласов вход.

Персонализиран запис с глас


Записвайте с гласа си. Гласовите записи имат времево ограничение от 120 секунди.

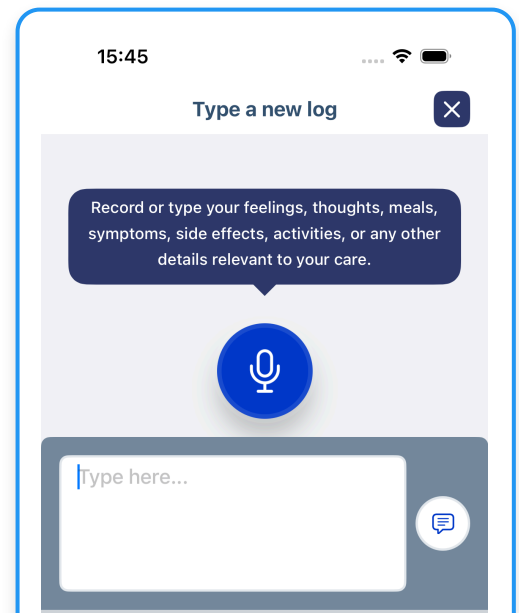


Моите записи

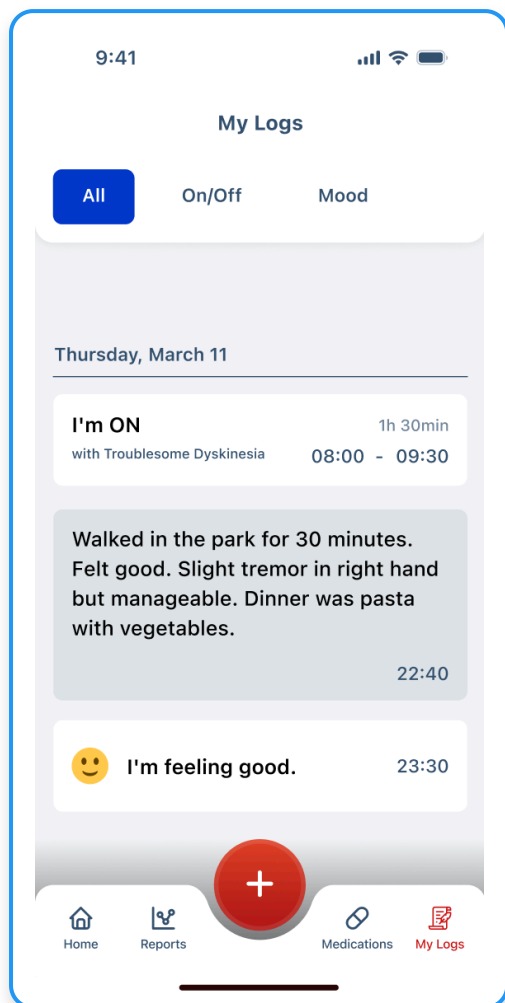


Можете да преглеждате записаните си елементи като емисия от „Моите записи“ в навигацията. Можете да започнете да добавяте записите си, като просто докоснете иконата „Плюс“. Можете също така да филтрирате прегледа на емисията си.

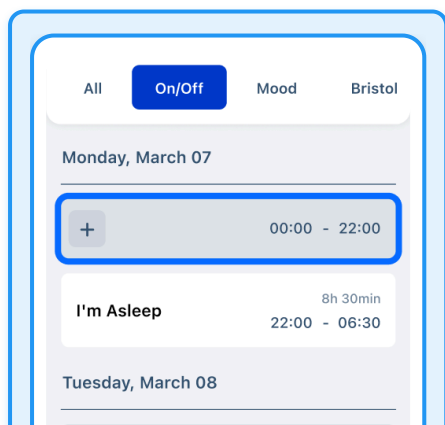

В категориите, в които непрекъснатостта е важна, можете лесно да забележите липсващите си записи. Можете да започнете да попълвате липсващите си записи, като ги докоснете.

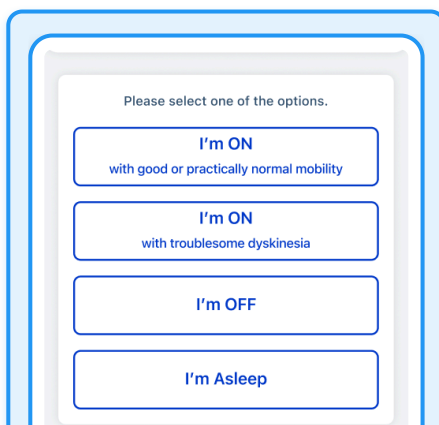


Можете да започнете да попълвате липсващите си записи, като ги докоснете.

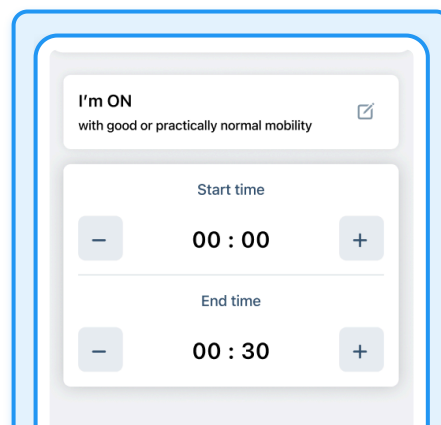


Той ще започне автоматично от началото на Вашето отсъстващо време.

Редактиране на записаните елементи


Започнете, като докоснете и задържите записания елемент, който искате да редактирате. Можете да редактирате или премахвате записите си, като ги докоснете и задържите.

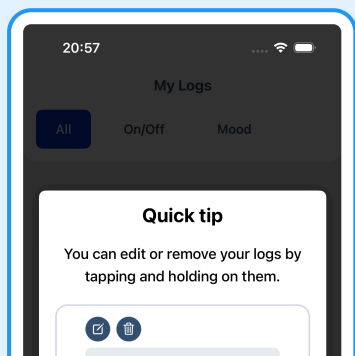


Можете да редактирате записаните си елементи, като ги докоснете и задържите.

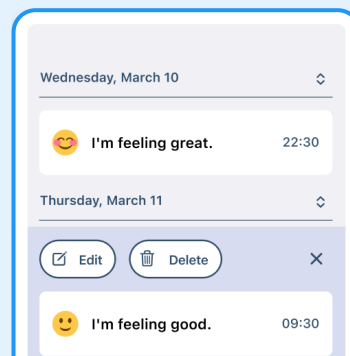

Можете да ги редактирате или изтриете от наслаждащото се меню.

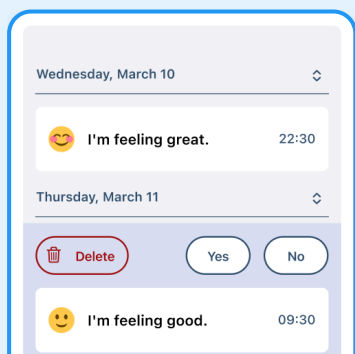

Ако докоснете бутона „Изтриване“, ще бъдете помолени да потвърдите — записът ще бъде изтрит окончателно.

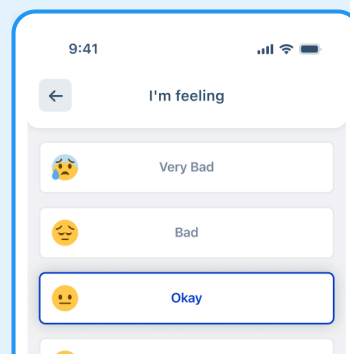


Ако докоснете бутона „Редактиране“, можете да промените подробностите на записа си.

Настройка на Вашия график за прием на лекарства

Ще трябва да въведете правилния си график за прием на лекарства, за да извлечете максимума от Parky. Ако планът Ви за лечение се промени, можете да редактирате или премахнете графика си за прием на лекарства по всяко време.


Започнете, като докоснете „Лекарства“ в долното меню.

1

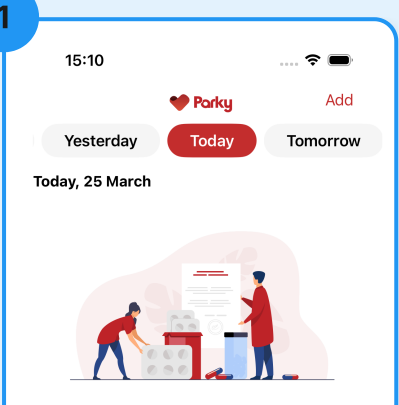


Докоснете „Добавяне на лекарство“, за да започнете да добавяте предписанията си, едно по едно.

2

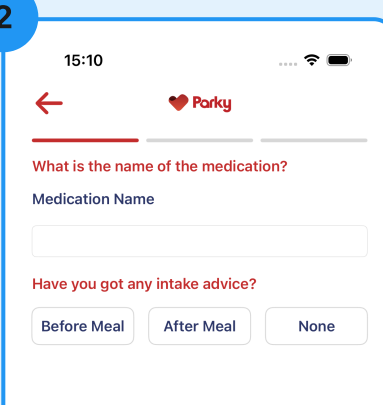


Ще бъдете подканени да въведете името на лекарството и съвет за приема.

3

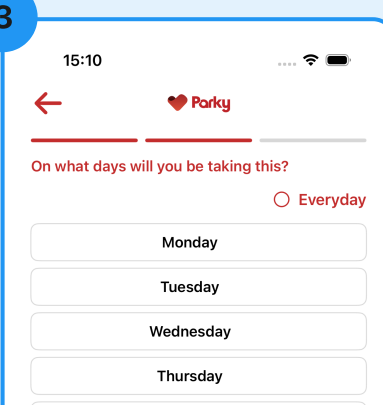


Изберете в кои дни ще приемате лекарството си.

4

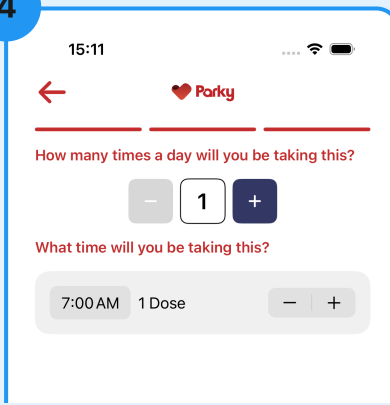

Въведете часовете и дозите на лекарството.


5

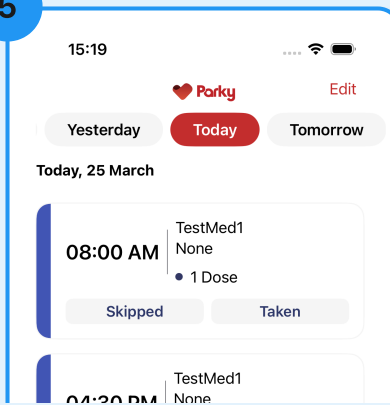

Докоснете бутона „Редактиране на лекарство“, за да редактирате или изтриете лекарството си.


Използване на напомнянията за лекарства

- Ще получавате известия с напомняния въз основа на дните и часовете, зададени в графика Ви за прием на лекарства.
- Можете да маркирате лекарството си като „Прието“ или „Пропуснато“ на Вашия iPhone или Apple Watch.
- Ако пропуснете да отговорите на известие, все още можете да отговорите по-късно чрез раздела „Лекарства“.
- За да гарантирате, че информацията за придържането Ви към приема на лекарства е точна, отговаряйте на напомнянията за лекарства своевременно и правилно.

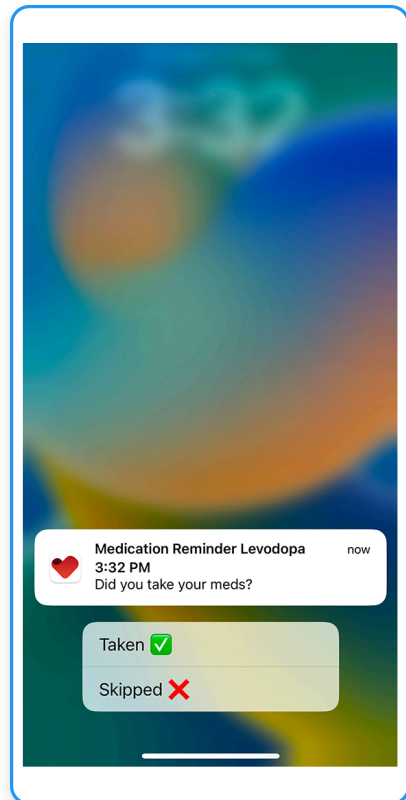

Можете да отговаряте на напомнянията като „Прието“ или „Пропуснато“ на Вашия iPhone или Apple Watch.

Отговаряйте на напомнянията с „Прието“ или „Пропуснато“.

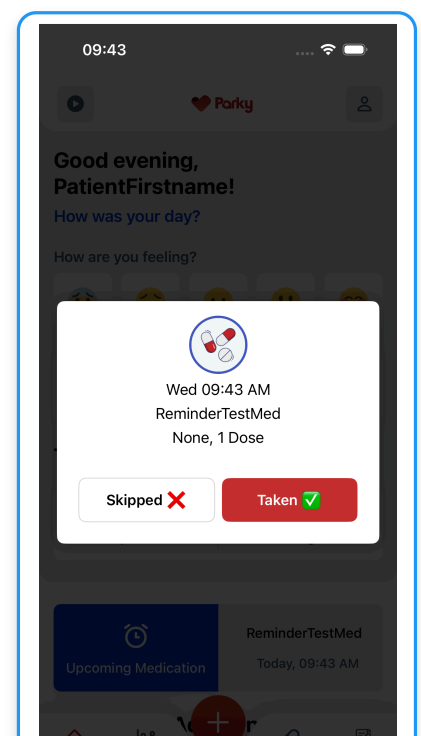


Екран на профила

Можете да преглеждате своя статус, лична информация и часова зона в раздела „Профил“.

Можете да се свържете с нас за помощ или да намерите решения на често срещани проблеми в секциите „Свържете се с нас“ и „Поддръжка и отстраняване на проблеми“.

Не пропускайте нашия „Център за знания“ в същия раздел, където ще намерите важна информация за Parky, как да запазите данните си в безопасност, примерни доклади и нашите общи условия заедно с политиката за поверителност.

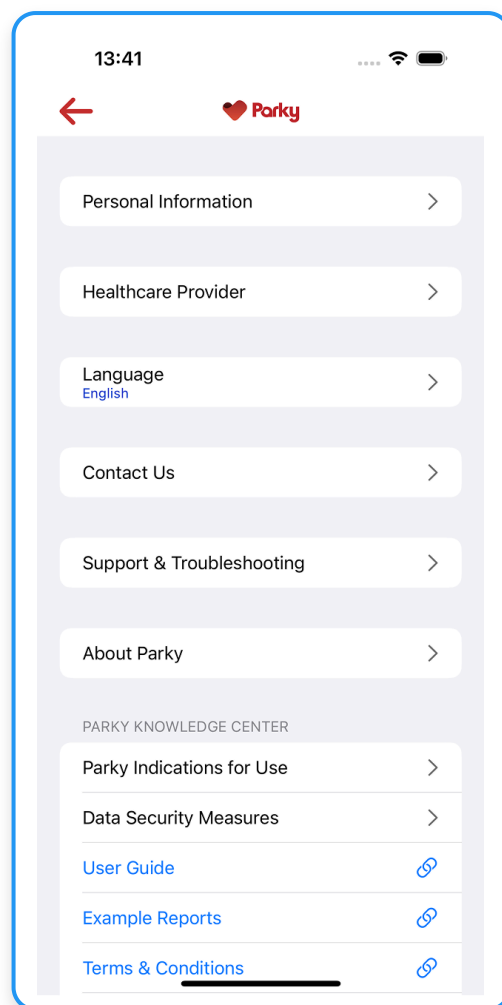


Добавяне на медицински специалист

Можете да изберете да определите медицински специалист, като споделите неговата професионална информация чрез приложението Parky.

След като бъде определен, на медицинския специалист ще бъде предоставен достъп до всички Ваши здравни записи чрез Parky Provider Portal.


Можете да премахнете определения медицински специалист по всяко време, което ще му попречи да получава достъп както до минали, така и до бъдещи данни.

1

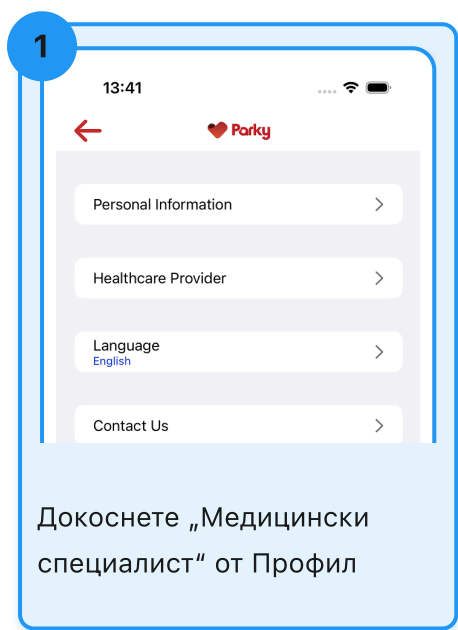


Докоснете „Медицински специалист“ от Профил

2

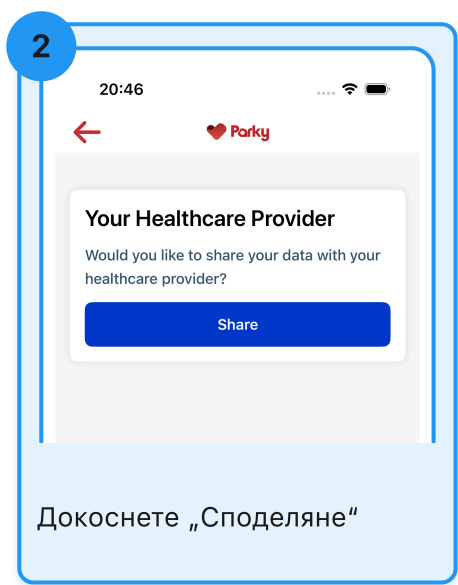


Докоснете „Споделяне“

3

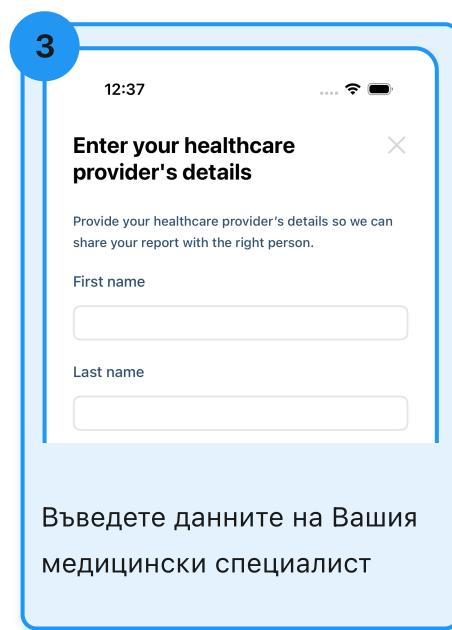


Въведете данните на Вашия медицински специалист

4

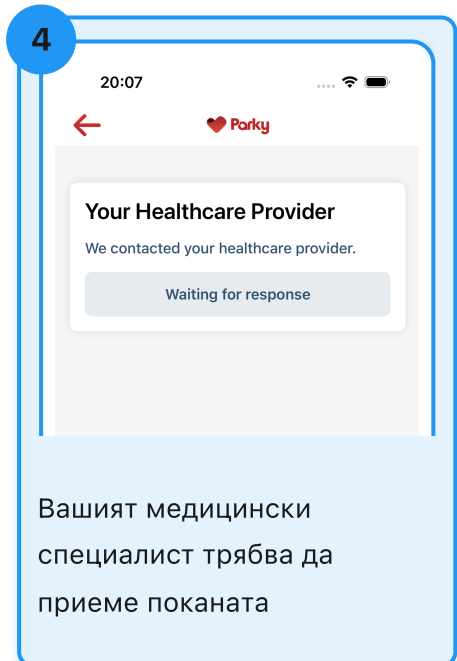


Вашият медицински специалист трябва да приеме поканата

5

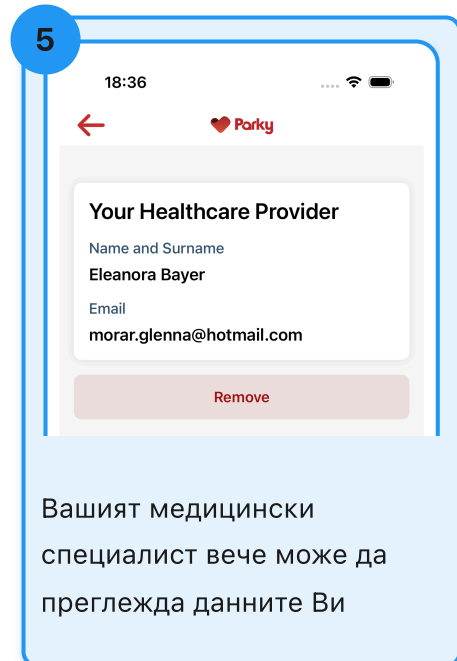

Вашият медицински специалист вече може да преглежда данните Ви

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО

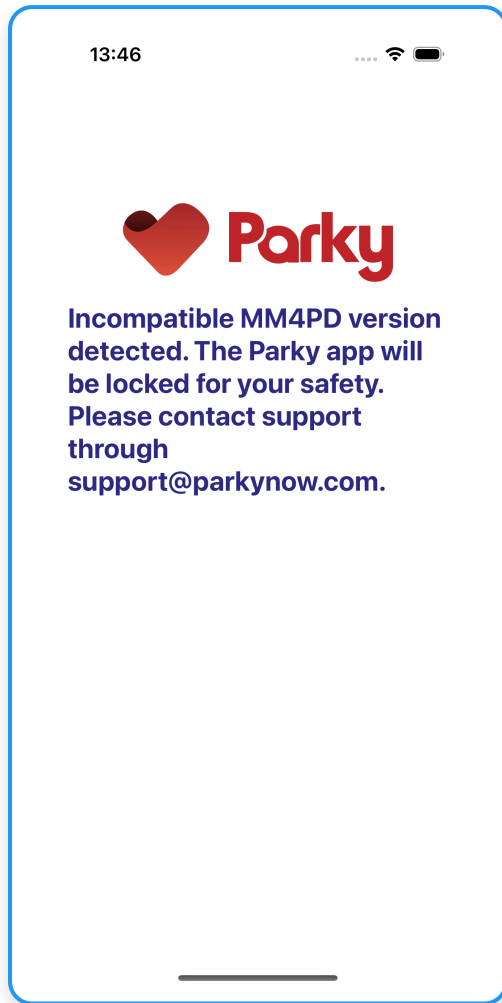

При инициализация Parky извършва процес на проверка за евентуални промени във версията на MM4PD и потвърждава съвместимостта на устройството, за да осигури безопасната и ефективна работа на своите функции.

Ако се появи екран за грешка, както е показан вляво в приложението Parky, това означава, че Parky е несъвместим с текущото устройство, операционна система или версия на софтуера.

Изисквания за хардуер и софтуер

Parky се поддържа на:

- Устройства Apple Watch Series 4 (или по-нови) с watchOS 10+
- Устройства iPhone XS (или по-нови) с iOS 17+

Клинична интерпретация на докладите

1. Всеки доклад включва симптоми на двигателни флуктуации, време на запис и преброени стъпки. Ако потребителят влезе в плана за прием на лекарства и предостави информация за приема на лекарствата, може да се види и придържането към приема.
2. В доклада за симптомите оста x показва времето, а оста y показва продължителността на симптомите.
3. Легендата за тремор, дискинезия, времена без запис и предписани часове за прием на лекарства е показана под графиката.
4. Симптомите се събират и измерват през цялото време на запис и се представят в графиката на 15-минутни интервали
5. Докладваните симптоми са средните продължителности на симптомите на дискинезия и тремор.
6. Докладите изключват данни, които е малко вероятно да представляват какъвто и да е двигателен симптом. Празна стълбовидна диаграма се очаква за безсимптомен потребител или потребител без какъвто и да е запис.
7. Времето на запис показва общото време, през което потребителят е използвал устройството правилно и през което не е имало технически проблеми по отношение на наблюдението на симптомите. Моля, вижте секцията „Ограничения“.
8. Без достатъчно времена на запис няма да бъдат генерирани доклади, както е посочено по-горе.
9. Прекъснатите линии показват планираните часове за прием на лекарства.
10. Информацията за придържането към приема на лекарства показва броя на „приетите“ лекарства спрямо броя на планираните лекарства за даден времеви интервал (седмично като последните седем дни или месечно като последните 30 дни). „Приетите“ лекарства се изчисляват въз основа на въведените от потребителя данни.
11. Информацията за броя на стъпките показва подвижността на потребителя и се показва като общата стойност в рамките на даден времеви интервал (дневно, седмично или месечно).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ

Дистанционното наблюдение на симптомите на тремор и дискинезия предоставя на медицинския специалист обективен поглед върху двигателните симптоми на болестта на Паркинсон на потребителя извън клиниката. Когато се оценява заедно с неоторни симптоми, анализи на потребителя и резултати от посещения в клиниката, Parky подпомага управлението на грижите за пациента.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

1. Потребителите трябва да носят Apple Watch на най-засегнатата си ръка по всяко време.
2. Препоръчва се зареждането на Apple Watch да се извършва през неактивните часове на потребителя (за предпочитане през нощния сън).
3. Parky не може да наблюдава симптомите, когато Apple Watch не се носи, което би причинило пропуски в данните.
4. Без достатъчно времена на запис Parky няма да може да генерира доклади за симптомите. Моля, вижте секцията „Ограничения“ за повече информация.
5. Приложението Parky не трябва да бъде изтривано нито на iPhone, нито на Apple Watch.
6. Потребителите трябва да въведат правилния график за прием на лекарства, за да гарантират надеждността на резултатите за придържане към приема. Препоръчва се графикът за прием на лекарства да се настройва в клинична среда, ако потребителят или болногледачът не може да го направи сам.
7. Потребителите трябва да отговарят на напомнянията за лекарства своевременно и правилно.

Ограничения

1. Parky работи при следните ограничения:

- Parky работи само на Apple Watch и iPhone, използвайки алгоритъма MM4PD, разработен от Apple.
- Parky не работи на неподдържани устройства.
- Препоръчва се Parky да се използва за идиопатична болест на Паркинсон, а не за други паркинсонови синдроми като прогресивна супрануклеарна парализа (PSP), множествена системна атрофия (MSA), телца на Леви и кортикобазална дегенерация (CBD).
- Потребителят трябва да носи Apple Watch на най-засегнатата ръка.
- Проследяването на дискинетичните симптоми трябва да се обмисля само за потребители с хорея на засегнатата ръка, съобщена самостоятелно или диагностицирана от медицински специалист.
- Parky изрично проследява тремор в покой; той не проследява тремор при действие или постурален тремор и може да не проследява тремор на пръстите.
- Parky не проследява изрично дистония или брадикинезия.
- Резултатите могат да включват фалшиво положителни и фалшиво отрицателни стойности. Активността на потребителя, прилягането на каишката на часовника и съпътстващите състояния (като синдром на неспокойните крака и непаркинсонов тремор) могат да повлияят на качеството на резултатите.
- Parky изрично измерва симптомите само от китката, докато се носи Apple Watch. Въпреки това Apple Watch може да усеща симптоми, предавани през тялото от други засегнати части на тялото, което вероятно води до подвеждащи или неверни показатели.

2. Parky не може да събира данни, когато Apple Watch е изключен, и не може да предава данни, когато iPhone е изключен.

Ограничения (продължение)

3. Без достатъчна продължителност на записа Parky няма да може да генерира доклади за симптомите. Докладите се генерират по следната методология:
 - Интервали от петнайсет минути, обхващащи цялата продължителност на записа, се организират според местното време на потребителя.
 - Интервалите с по-малко от 50% от необходимите данни се изключват.
 - Седмичните и месечните доклади показват средните продължителности на симптомите на тремор и дискинезия от всички дни с данни.
 - В седмичните и месечните доклади се показват само интервалите с данни, събрани от поне пет дни или представляващи над 20% от общия период.
4. Графиците за прием на лекарства зависят от правилността на въведените от потребителя данни. Ако потребителят има затруднения при използването на приложението, силно се препоръчва да се предостави подкрепа в клинична среда.
5. Точността на информацията за придържането към приема на лекарства зависи от своевременния и точен отговор на потребителя на известията с напомняния за лекарства. Неотговарянето или предоставянето на неточни взаимодействия може да доведе до неправилни резултати за придържането към приема на лекарства. За да се намали този риск, медицинските специалисти силно се насърчават да подчертават решаващото значение на точните отговори на напомнянията пред потребителите.
6. Информацията за стъпките зависи от последователното използване на Apple Watch и iPhone от потребителя. Parky не може да събира данни за стъпки, ако потребителят не използва нито едно от тези устройства.
7. Ако потребителите желаят да спрат да използват Parky окончателно, те могат да изтрият акаунта си завинаги. При изтриване на акаунта потребителят се счита за отпаднал и здравните и личните данни на потребителя ще бъдат премахнати окончателно. Както потребителят, така и медицинският специалист ще загубят достъп до докладите на потребителя в Parky.

БЕЗОПАСНОСТ

1. Използването на Parky и Apple Watch не засяга потребители с импланти за дълбока мозъчна стимулация (DBS).
2. Apple Watch е водоустойчив, но не е водонепроницаем. Може да се носи и използва по време на физически упражнения (излагането на пот е допустимо), в дъжд и при миене на ръцете.
3. Моля, вижте оригиналния документ на производителя относно ръководството за потребителя и упътванията за хардуера на Apple Watch:
<https://help.apple.com/pdf/watch/8/.../apple-watch-user-guide>
4. Упътване за Apple Watch: <https://support.apple.com/en-us/HT204665>
5. Apple Watch отговаря на следните стандарти за EMC и електрически стандарти:
Електрическата безопасност е оценена съгласно IEC 62368-1 (2014), "Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements." Apple Watch отговаря на стандартите на EC EN 301 489-1 (V2.2.20), EN 301 489-3 (V2.1.1), EN 301 489-17 (V3.2.0) и EN 301 489-52 (V1.1.0).

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Не използвайте приложението Parky за каквато и да е цел, различна от записване на движението на пациент с двигателно нарушение.
- Приложението Parky е предназначено само като помощно средство към съществуващите клинични методи. То не е предназначено да бъде единственото или основно средство за клинична оценка.
- h2o therapeutics не препоръчва използването на приложението Parky за пациенти, които не са в състояние да взаимодействат с приложението Parky нито на iOS, нито на watchOS.
- Немоторните резултати, анализите на пациента и посещенията в клиника винаги трябва да участват във вземането на решения.
- Силно се препоръчва резултатите от Parky да се сравняват с клиничните резултати и съобщенията от пациента анализи.
- При първоначална употреба, за да се провери последователността на потока от данни, се препоръчва резултатите на пациента да се наблюдават внимателно в продължение на 3 до 5 дни на пациент. Този период би позволил и откриването на евентуални технически проблеми.
- Пациентите трябва да бъдат посъветвани да носят Apple Watch на най-засегнатата ръка.
- Пациентите или болногледачите се насърчават да въведат графика за прием на лекарства. Ако пациентът не е в състояние да направи това самостоятелно или с помощта на своите болногледачи, на медицинските специалисти се препоръчва да предложат съдействие в клинична среда.
- Пациентите не трябва да оценяват самостоятелно прогреса на заболяването си единствено с данните от приложението Parky.
- В случай на неизправност на приложението Parky пациентите трябва да приемат лекарствата си съгласно предписанието.
- Приложението Parky не предполага оценка на лекарства.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

1. Parky събира данни за движение само когато потребителят носи Apple Watch.
2. Освен данни за движение, Parky не събира данни за мобилни и телефонни дейности, екран или използване на приложения.
3. Данните на потребителя могат да бъдат споделяни само с медицинския специалист, за когото потребителят или болногледачът е дал съгласие, и могат да бъдат споделяни само с един медицински специалист едновременно.
4. Данните на потребителя, включително лично идентифицируемата информация, се съхраняват на сървъри, съвместими с HIPAA, чрез усъвършенстван стандарт за шифроване (AES256). Данните на потребителя никога не се споделят с трета страна, освен с упълномощения медицински специалист.
5. Препоръчва се да инсталирате софтуер за мобилна сигурност, за да осигурите допълнително сигурността на устройството.

НЕЖЕЛАНИ СЪБИТИЯ

1. Ако докладите за симптомите на потребителя не съответстват на очакванията на медицинския специалист, незабавно спрете да използвате Parky по време на клиничната практика.
2. В случай на каквито и да е предполагаеми грешни изчисления, технически проблеми и други събития, свържете се с support@parkynow.com

 **h2o Therapeutics**
Mustafa Kemal Mah. 2131 Cad. No:15
06510 Çankaya / Ankara / Türkiye

CE
2292

MD

UDI



(01) 8685063631006
(10) P1/1.6.1
(11) 20260710



www.parkynow.com