



Vítejte v

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

PARKY

v1.6.1

PROHLÁŠENÍ O INDIKACÍCH K POUŽITÍ

Aplikace Parky je určena ke kvantifikaci kinematiky příznaků poruch pohybu, včetně tremoru a dyskineze, u dospělých (ve věku 45 let a více) s mírnou až středně závažnou Parkinsonovou chorobou.

OBSAH

Začínáme	3
Nastavení chytrých hodinek	7
Uvnitř Parky	10
Požadavky	21
Klinická interpretace	22
Obecné pokyny	23
Omezení	24
Bezpečnost	26
Obecná varování	27
Zabezpečení dat	28

Seznamte se s Parky

Parky je nástroj pro vzdálené monitorování navržený pro průběžné, objektivní hodnocení motorických příznaků Parkinsonovy choroby, jako jsou tremor a dyskineze. Kvantifikuje data z pohybových senzorů prostřednictvím Apple Watch a poskytuje přehledy profilu příznaků v reálném čase, čímž podporuje péči o pacienty.

Parky využívá klinicky validovaný algoritmus Motor Fluctuations Monitor for Parkinson's Disease (MM4PD) vyvinutý společností Apple Inc. (Powers et al., 2021¹)

Zprávu z klinické studie naleznete na adrese <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536284/>

Pro koho je Parky určen?

- Parky je určen pouze pro uživatele s klinicky diagnostikovanou idiopatickou Parkinsonovou chorobou, kteří jsou dostatečně způsobilí používat Apple Watch a iPhone.
- Parky funguje nejlépe u osob, které mají převážně příznaky tremoru a dyskineze.
- Parky není navržen k hodnocení parkinsonských syndromů, jako jsou multisystémová atrofie (MSA), progresivní supranukleární obrna (PSP), kortikobazální degenerace (CBD) nebo demence s Lewyho tělísky.

¹ Powers R, Etezadi-Amoli M, Arnold EM, Kianian S, Mance I, Gibiansky M, Trietsch D, Alvarado AS, Kretlow JD, Herrington TM, Brillman S, Huang N, Lin PT, Pham HA, Ullal AV. Smartwatch inertial sensors continuously monitor real-world motor fluctuations in Parkinson's disease. Sci Transl Med. 2021 Feb 3;13(579):eabd7865. doi: 10.1126/scitranslmed.abd7865. PMID: 33536284.

Rychlý pohled na Parky

Inovativní monitorování a hodnocení

Parky poskytuje cenné poznatky tím, že detekuje tremor a dyskinezi v různých stádiích onemocnění. Shromažďuje přesná, celodenní data o motorických příznacích a umožňuje hodnocení kdekoli, i mimo dohlížené prostředí.

Správa léků a přehledy o příznacích

Parky vám pomáhá mít své léky pod kontrolou díky praktickým připomenutím na vašem iPhoneu a Apple Watch a kombinuje přehledy příznaků s daty o užívání léků. Tato kombinace poskytuje jasné, objektivní poznatky, které pomáhají poskytovatelům zdravotní péče odhalit jakékoli změny příznaků, a tím zlepšit léčebné plány.

Posílení prostřednictvím technologie

Parky integruje nositelné senzory, aby vám nabídl spolehlivou alternativu k patientským deníkům, čímž řeší subjektivní povahu sebehodnocení a předchází datovým mezerám, které se při vedení deníků běžně vyskytují. Tato integrace nabízí průběžné, pasivní sledování a zajišťuje bezproblémové monitorování vašeho zdraví.

Sledování aktivity a podpora pohyblivosti

Parky nemonitoruje pouze vaše motorické příznaky; sleduje také vaše denní kroky a nabízí tak vhled do úrovně vaší fyzické aktivity.

Začínáme s Parky



Naskenujte QR kód fotoaparátem svého iPhoneu a podle vyskakovacího okna si stáhněte Parky z App Store.


Doporučujeme vám stáhnout aplikaci Parky z App Store, abyste zkontrolovali kompatibilitu zařízení.

Udělení oprávnění

Aby Parky fungoval správně, budete muset udělit oprávnění prostřednictvím níže zobrazených výzev. Tato oprávnění umožňují Parky odesílat oznámení a přistupovat k datům o krocích, jakož i ke sledování pohybu pro analýzu tremoru a dyskineze.

Parky se na tato oprávnění spoléhá, aby vám poskytl úplné přehledy o vaší fyzické aktivitě, příznacích a dodržování léčby.


1

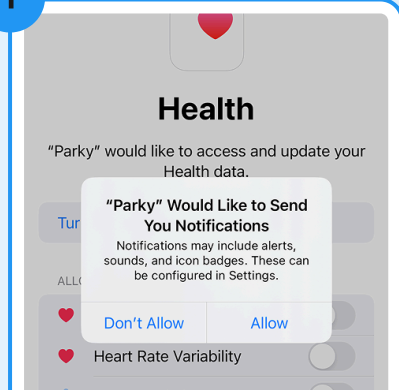

Přístup k oznámením

Toto oprávnění vám umožňuje přijímat připomenutí a aktualizace od Parky. Bez něj nebudete dostávat oznámení o rozvrhu užívání léků a aktualizacích.


2

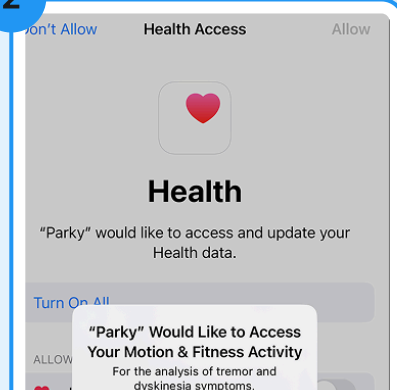

Přístup k datům o pohybu

Udělení tohoto oprávnění umožní Parky sledovat váš pohyb, což je klíčové pro monitorování příznaků, jako jsou tremor a dyskineze.

3

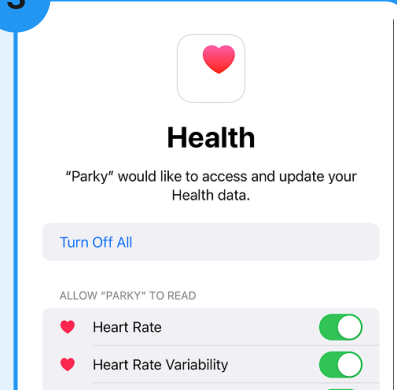


Přístup ke zdravotním datům

Povolením přístupu k vašim zdravotním datům může Parky poskytovat přehledy o úrovni vaší fyzické aktivity.



Úvodní nastavení

Začnete úvodním nastavením, které pokrývá, jak Parky používat, důležité bezpečnostní informace a jak chráníme vaše data.

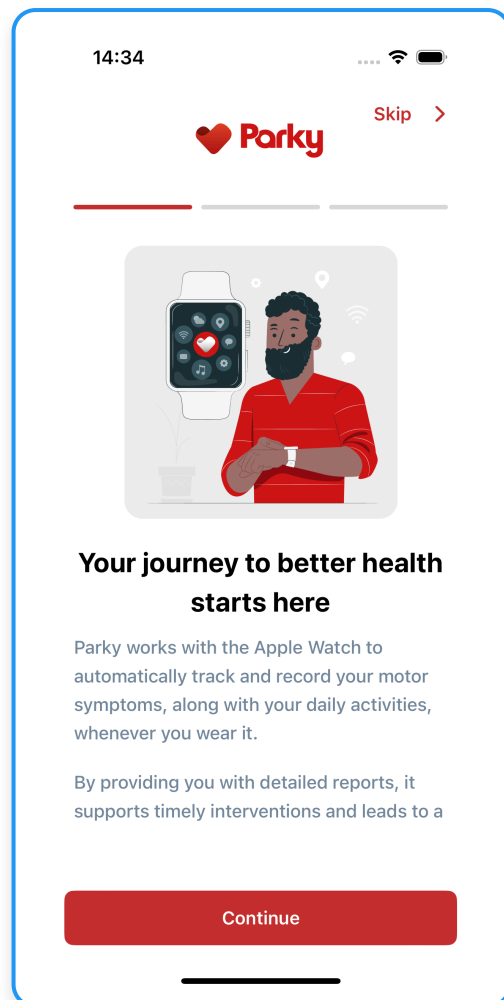

Přihlášení

Při úvodním nastavení zadáte své mobilní číslo a obdržíte ověřovací kód prostřednictvím textové zprávy.

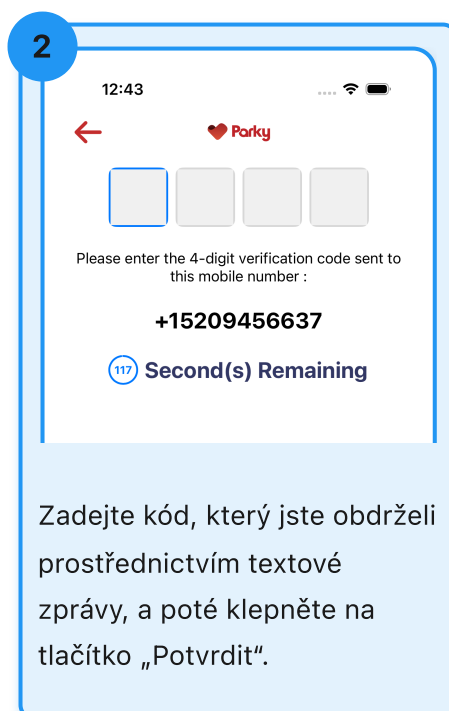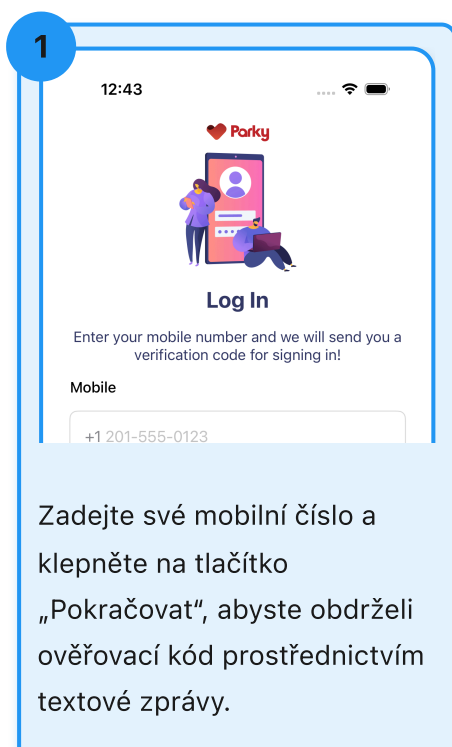

Nastavení komplikací ciferníku

Postupujte podle níže uvedených kroků a přidejte Parky do komplikací ciferníku. Parky může monitorovat motorické příznaky pouze tehdy, když jsou přidány komplikace ciferníku.

1



Klepněte na obrazovku a podržte ji.

2




Klepněte na „Upravit“.

3



Přejíždějte prstem doleva, dokud se nezobrazí nadpis „Komplikace“, a vyberte libovolnou pozici.

4

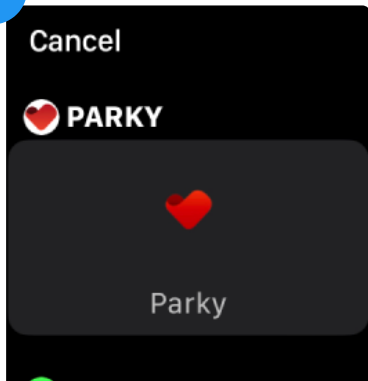

Posouvejte se, dokud se nezobrazí „Parky“, a poté klepněte.

5




Hotovo! Komplikace Parky přidána.

Povolení haptických upozornění


Postupujte podle níže uvedených kroků a povolte haptická upozornění na svých Apple Watch. Haptická upozornění poskytují vibrační zpětnou vazbu pro oznámení Parky.

1

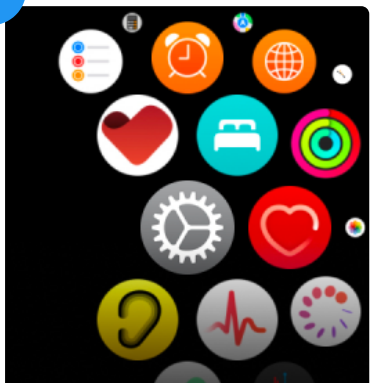


Stiskněte korunku Digital Crown svých Apple Watch, abyste zobrazili plochu.

2

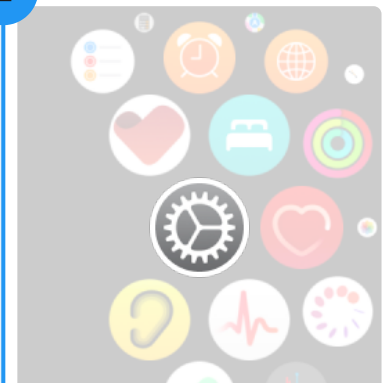


Klepněte na „Nastavení“ v nabídce ikon aplikací.

3

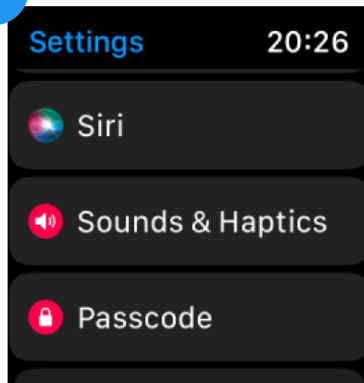


Posuňte se dolů a klepněte na „Zvuky a haptika“.

4

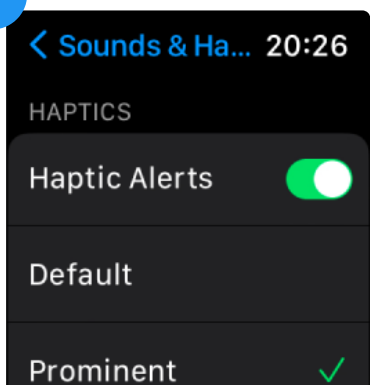

Dalším posunutím dolů se ujistěte, že je zapnutá položka „Haptická upozornění“.

5

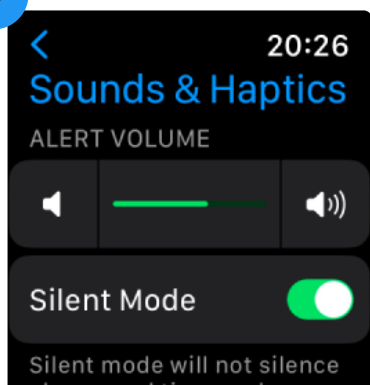

Pamatujte, že povolení haptických vibrací bude rovněž vydávat zvuk.

Pro jemnější signály se sem můžete kdykoli vrátit a zapnout „Tichý režim“.

Používání Foggy




Spustíte „Foggy“ buď klepnutím na tlačítko komplikace, nebo stisknutím tlačítka uvnitř aplikace Parky.




Foggy začne vydávat signály, jakmile jej otevřete. Klepnutím jej zastavíte, nebo jej nechte běžet.


Přizpůsobení Foggy

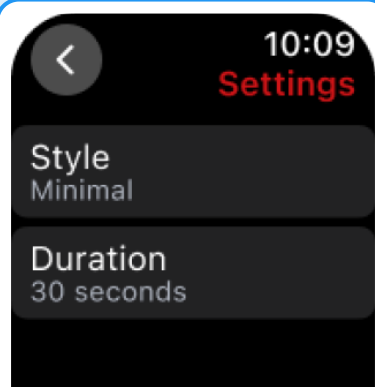

Existují dva typy nastavení: „Styl“ a „Doba trvání“.

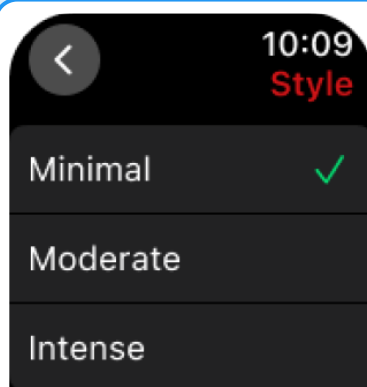


Upravte frekvenci vibrací v nabídce „Styl“.

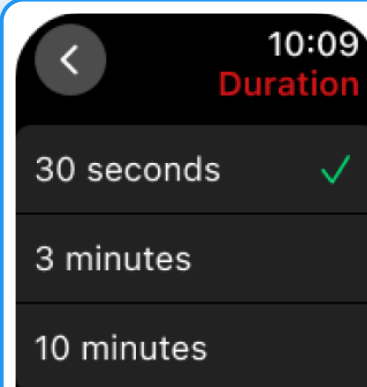

Nastavte dobu trvání signálu pro Foggy v nabídce „Doba trvání“.

Uvnitř Parky

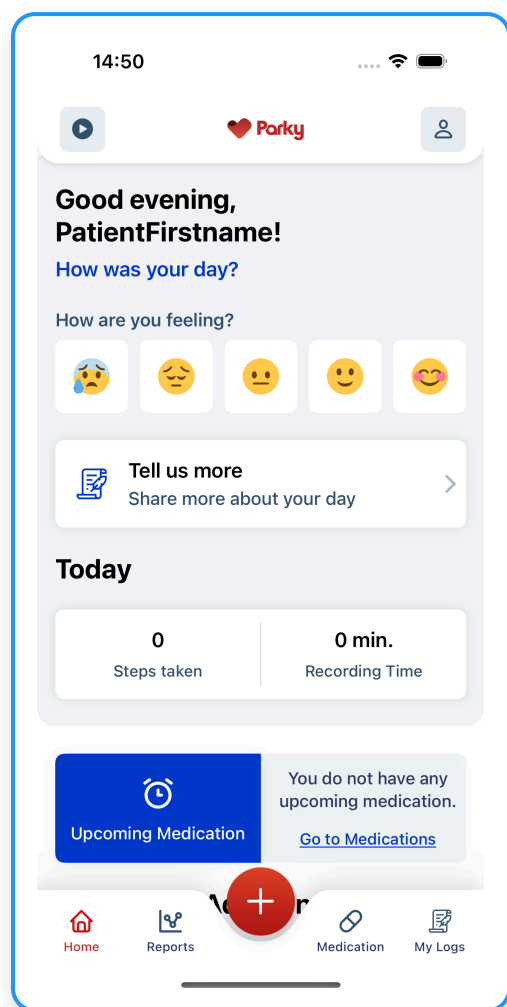

Domovská obrazovka


Domovská obrazovka Parky nabízí uživatelsky přívětivý přehled, kde najdete připomenutí pro nadcházející léky, sledujete své denní kroky, monitorujete doby nahrávání a zobrazujete týdenní a měsíční informace o dodržování léčby. Navíc budete mít přístup k centru zdrojů pro další informace.

Přístup k přehledům

Své přehledy příznaků si prohlédnete na záložce „Přehledy“.

Přehledy se ve výchozím nastavení zobrazují denně. Výběrem nabídky záložek zobrazíte týdenní a měsíční přehledy, včetně retrospektivních dat.

Klepnutím na tlačítko exportu si můžete kdykoli stáhnout konkrétní přehled jako PDF.

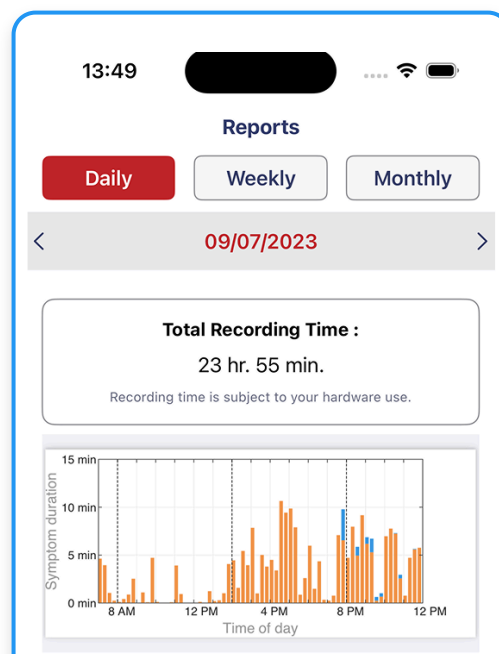




Daily report

User: Name Surname

September 07, 2023

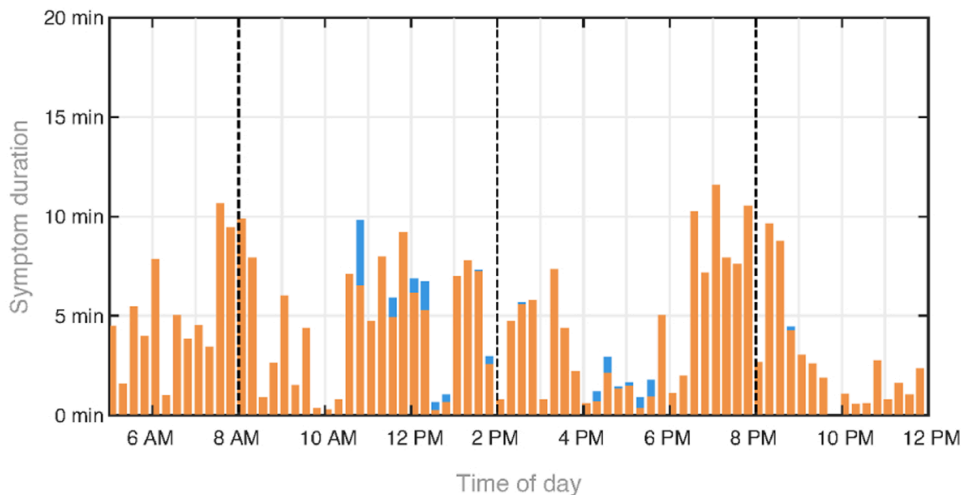

Total recording time

23 Hours 55 Minutes

Recording time is subject to users' hardware use.

Total steps

-

Step count is subject to users' hardware use.


Medication	Days	Schedule and dose	Adherence
Rasagiline	Daily	08:00 AM (1)	100%
Carbidopa / Levodopa	Daily	08:00 AM (1) 02:00 PM (1) 08:00 PM (1)	100%

Medication schedules and adherence are subject to users' input.

www.parkynow.com

Tyto přehledy budou přístupné poskytovateli zdravotní péče, kterého jste pozvali prostřednictvím aplikace Parky, jakmile vaše pozvání přijme. Poskytovatel může vaše přehledy zobrazit prostřednictvím Parky Provider Portal. Ty zahrnují grafy tremoru a dyskineze, data o dodržování léčby, počty kroků a časy záznamů za vybrané období.


Zaznamenávání

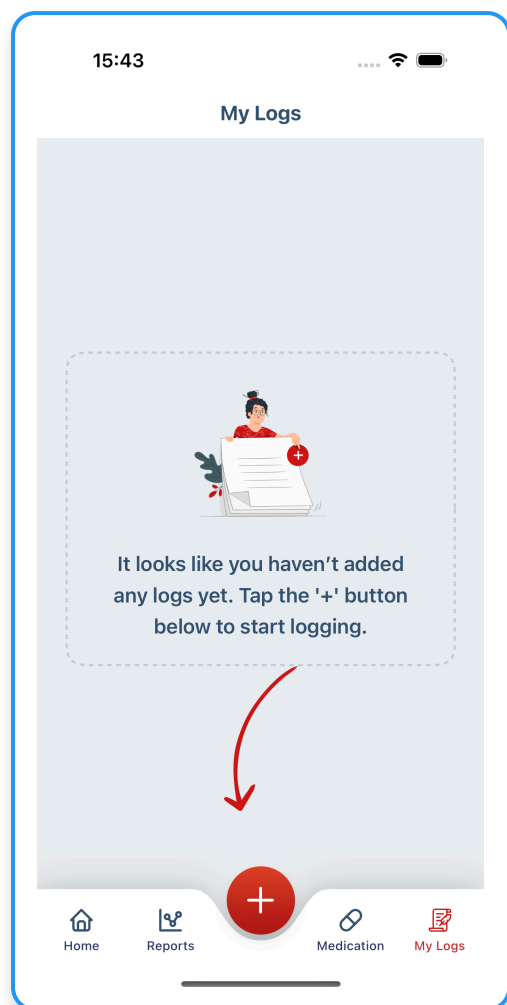

Snadno můžete zaznamenávat, jak se během dne cítíte. Pomáhá vám to zůstat v souladu s vaším emočním stavem a získat lepší porozumění svým náladám v průběhu času. Začněte ještě dnes sledovat své emoční vzorce, abyste posílili sebeuvědomění a podpořili personalizovanou péči.


Přidávání záznamů

Můžete zaznamenat svou náladu, období ON/OFF nebo volný vlastní záznam relevantní pro vaši péči.

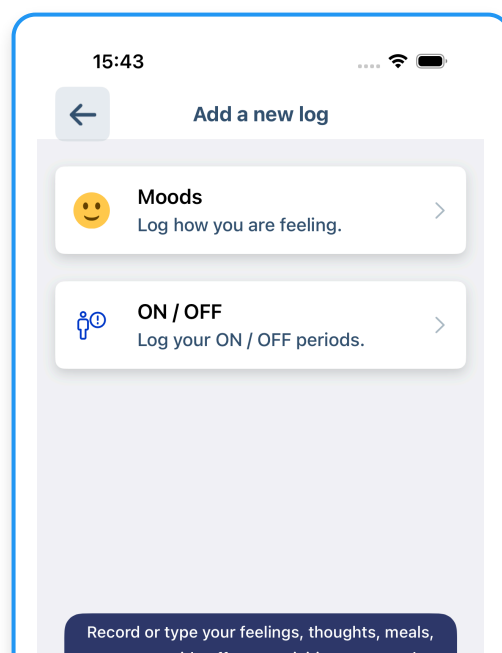


Nálady

Svou aktuální náladu můžete zaznamenávat v průběhu dne. Po úpravě času svého záznamu jej můžete uložit a prohlédnout si jej na záložce „Moje záznamy“.

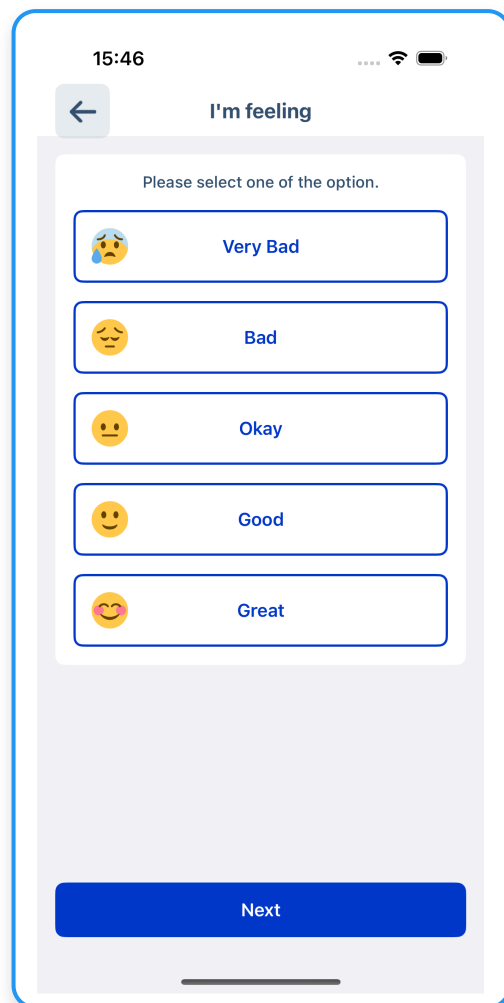


Období ON / OFF

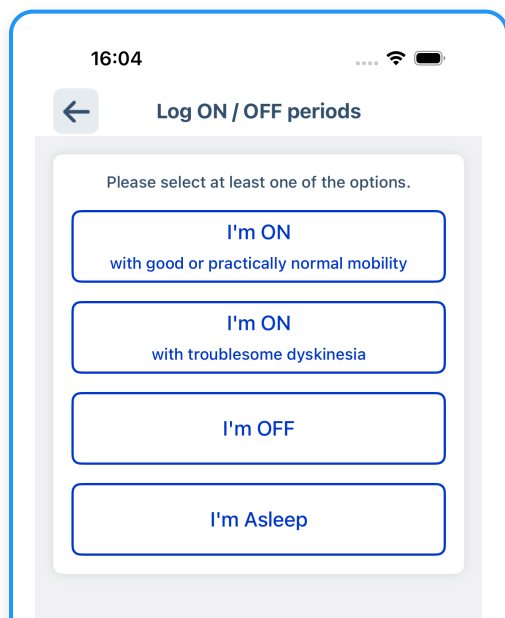

Můžete zaznamenat nejvhodnější možnost ON/OFF pro dané období. Stejně tak jej můžete uložit a prohlédnout si jej na záložce „Moje záznamy“.


Vlastní záznam pomocí textu

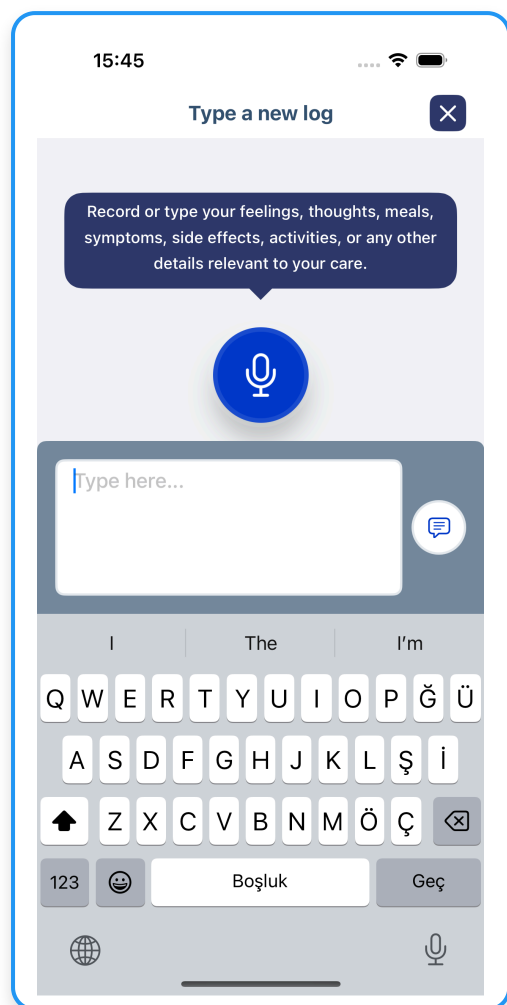


Můžete volně psát o svých pocitech, myšlenkách, jídlech nebo jakýchkoli podrobnostech, které považujete za důležité zaznamenat. Vlastní záznamy lze vytvořit pomocí textového nebo hlasového vstupu.

Vlastní záznam pomocí hlasu


Nahrávejte pomocí svého hlasu. Hlasové záznamy mají časový limit 120 sekund.

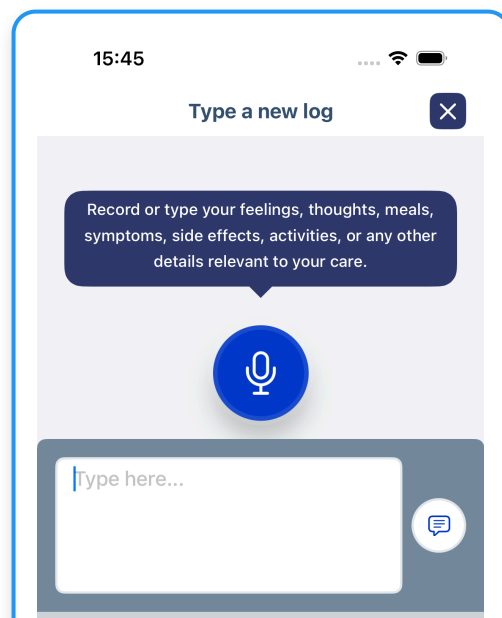


Moje záznamy

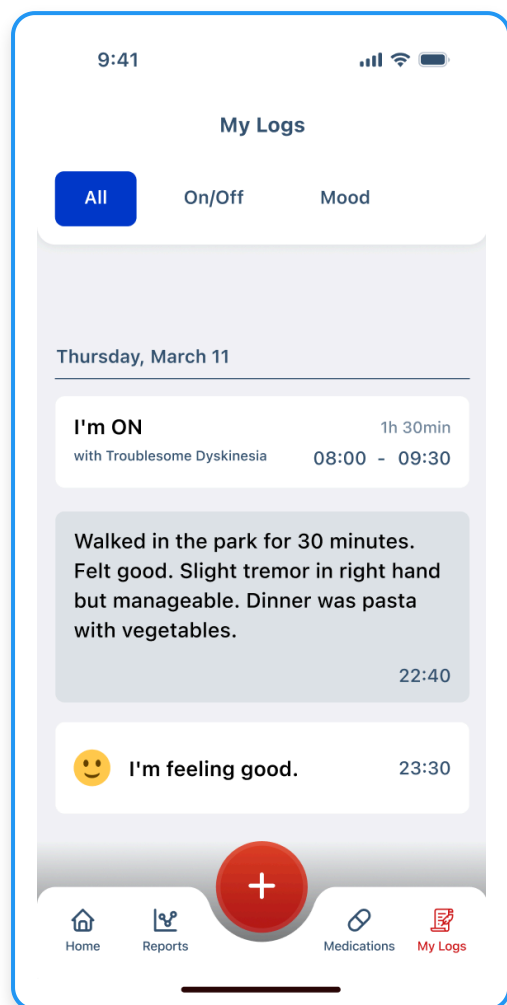


Své zaznamenané položky si můžete prohlédnout jako kanál prostřednictvím „Moje záznamy“ v navigaci. Přidávání svých záznamů můžete zahájit jednoduše klepnutím na ikonu „Plus“. Náhled svého kanálu můžete také filtrovat.

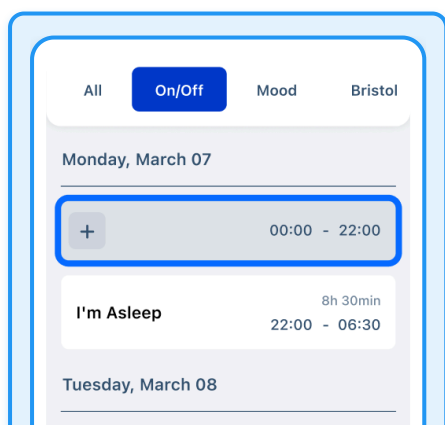

V kategoriích, kde je důležitá kontinuita, můžete snadno rozpoznat své chybějící záznamy. Vyplňování svých chybějících záznamů můžete zahájit klepnutím na ně.

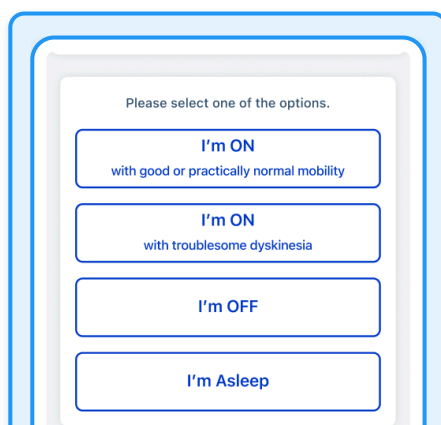


Vyplňování svých chybějících záznamů můžete zahájit klepnutím na ně.

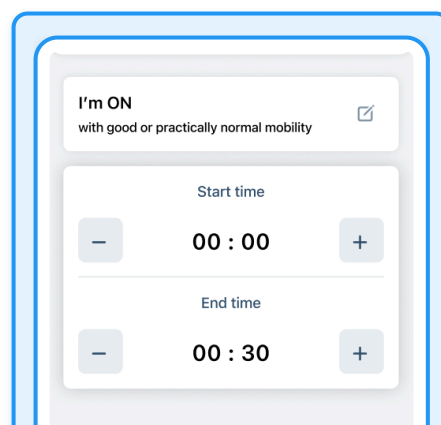


Automaticky se začne od začátku vašeho chybějícího období.

Úprava zaznamenaných položek


Začněte klepnutím a podržením zaznamenané položky, kterou chcete upravit. Své záznamy můžete upravit nebo odstranit klepnutím a podržením na nich.

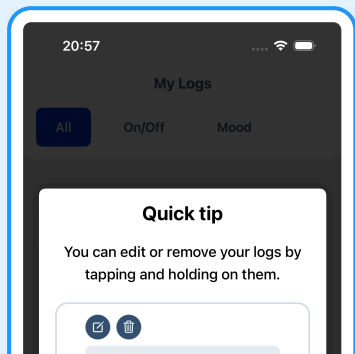


Své zaznamenané položky můžete upravit klepnutím a podržením na nich.

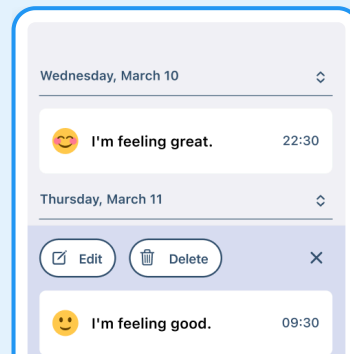

Můžete je upravit nebo odstranit z překryvné nabídky.

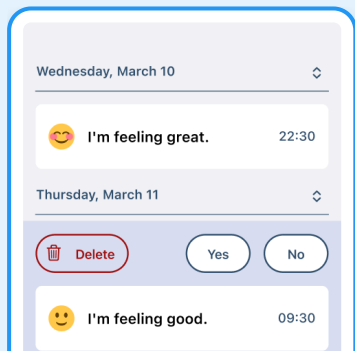

Pokud klepnete na tlačítko „Odstranit“, budete požádáni o potvrzení – záznam bude trvale odstraněn.

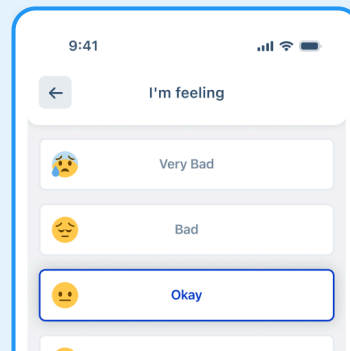


Pokud klepnete na tlačítko „Upravit“, můžete změnit podrobnosti svého záznamu.

Nastavení rozvrhu užívání léků

Abyste z Parky vytěžili co nejvíce, budete muset zadat svůj správný rozvrh užívání léků. Pokud se váš léčebný plán změní, můžete svůj rozvrh užívání léků kdykoli upravit nebo odstranit.


Začněte klepnutím na „Léky“ ve spodní nabídce.

1

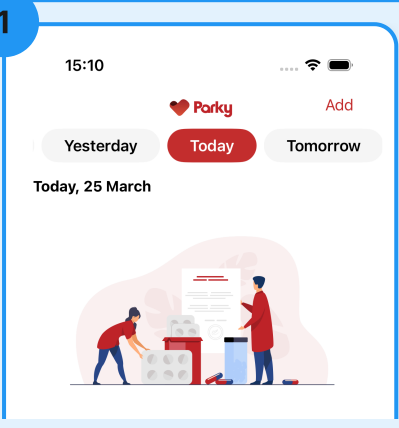


Klepnutím na „Přidat lék“ začnete přidávat své předpisy, jeden po druhém.

2

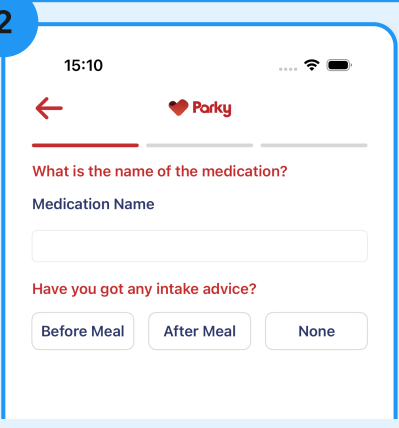


Budete vyzváni k zadání názvu léku a doporučení k užívání.

3

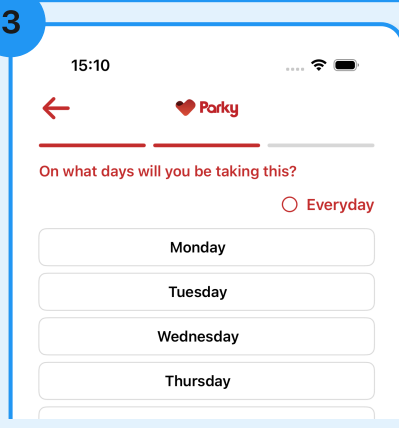


Vyberte, ve které dny budete svůj lék užívat.

4

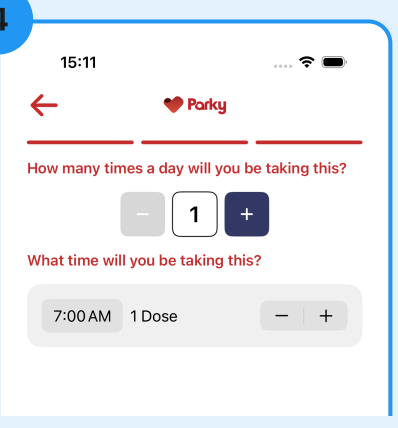

Zadejte časy a dávky léku.


5

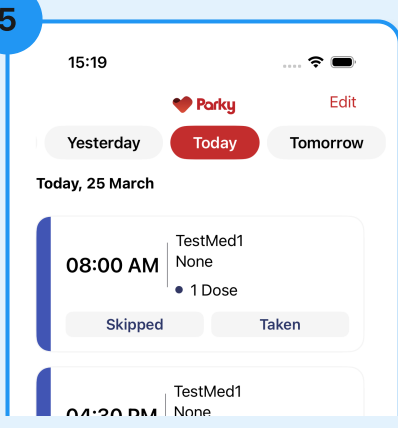

Klepnutím na tlačítko „Upravit lék“ svůj lék upravíte nebo odstraníte.


Používání připomenutí léků

- Budete dostávat oznámení s připomenutím na základě dnů a časů nastavených ve vašem rozvrhu užívání léků.
- Svůj lék můžete označit jako „Užito“ nebo „Vynecháno“ na svém iPhoneu nebo Apple Watch.
- Pokud zmeškáte reakci na oznámení, můžete stále reagovat později prostřednictvím záložky „Léky“.
- Abyste zajistili, že informace o dodržování léčby jsou přesné, reagujte na připomenutí léků pohotově a správně.

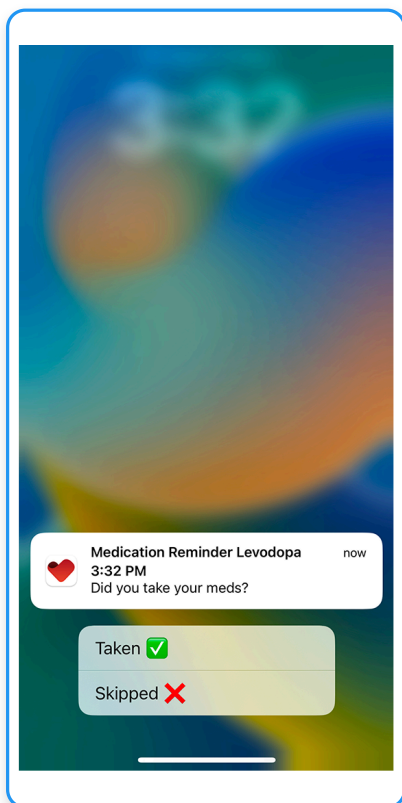

Na připomenutí můžete reagovat jako „Užito“ nebo „Vynecháno“ na svém iPhoneu nebo Apple Watch.

Reagujte na připomenutí „Užito“ nebo „Vynecháno“.

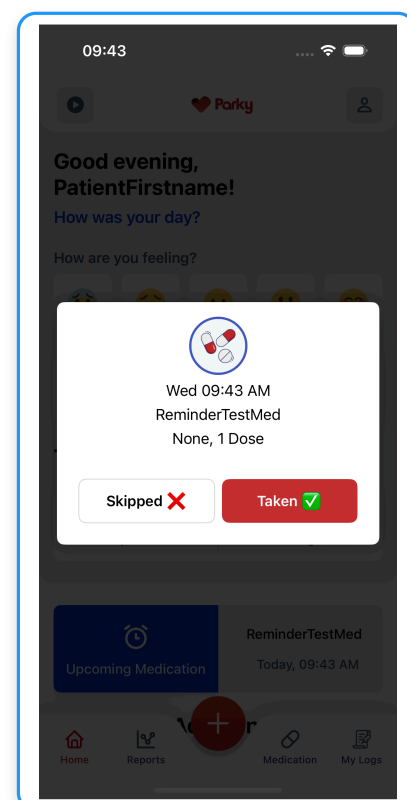


Obrázovka profilu

Svůj stav, osobní údaje a časové pásmo si můžete prohlédnout na záložce „Profil“.

V sekcích „Kontaktujte nás“ a „Podpora a řešení potíží“ nás můžete kontaktovat se žádostí o pomoc nebo najít řešení běžných problémů.

Nenechte si ujít naše „Znalostní centrum“ na téže záložce, kde najdete důležité informace o Parky, jak udržet svá data v bezpečí, ukázkové přehledy a naše smluvní podmínky spolu se zásadami ochrany osobních údajů.

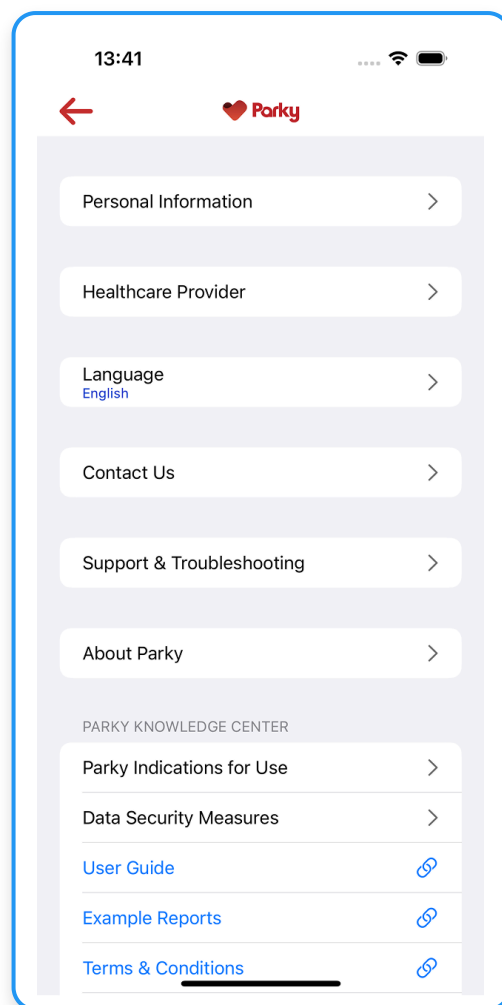


Přidání poskytovatele zdravotní péče

Můžete se rozhodnout určit poskytovatele zdravotní péče sdílením jeho profesních údajů prostřednictvím aplikace Parky.

Jakmile bude určen, poskytovateli zdravotní péče bude udělen přístup ke všem vašim zdravotním záznamům prostřednictvím Parky Provider Portal.


Určeného poskytovatele můžete kdykoli odebrat, což mu zabrání v přístupu k minulým i budoucím datům.

1

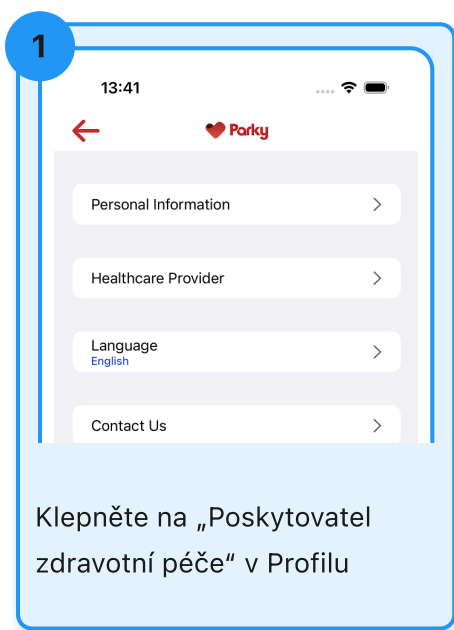


Klepněte na „Poskytovatel zdravotní péče“ v Profilu

2

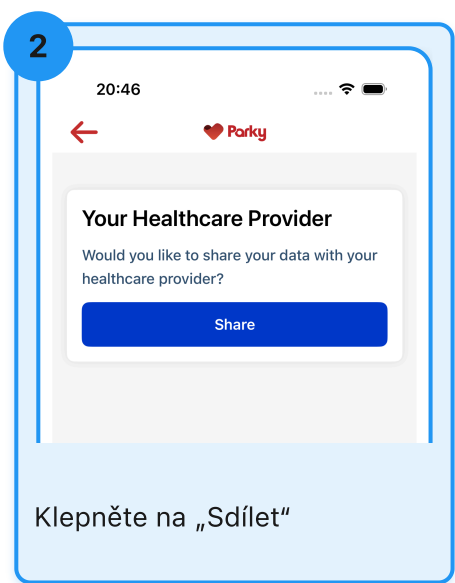


Klepněte na „Sdílet“

3

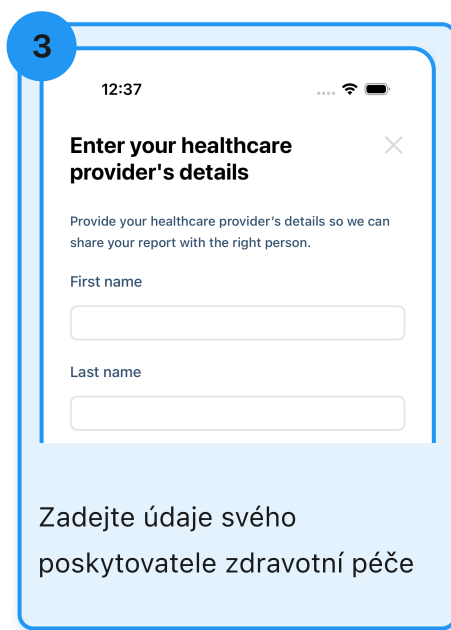


Zadejte údaje svého poskytovatele zdravotní péče

4

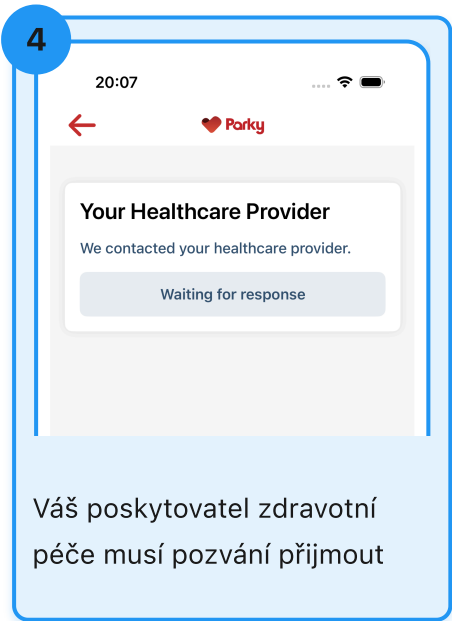


Váš poskytovatel zdravotní péče musí pozvání přijmout

5

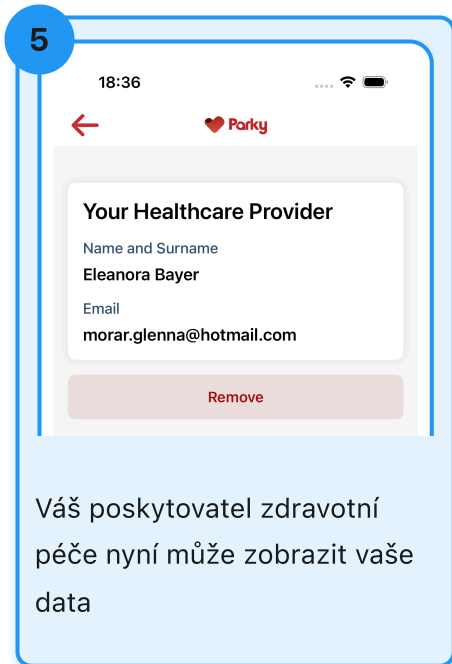

Váš poskytovatel zdravotní péče nyní může zobrazit vaše data

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ V APLIKACI

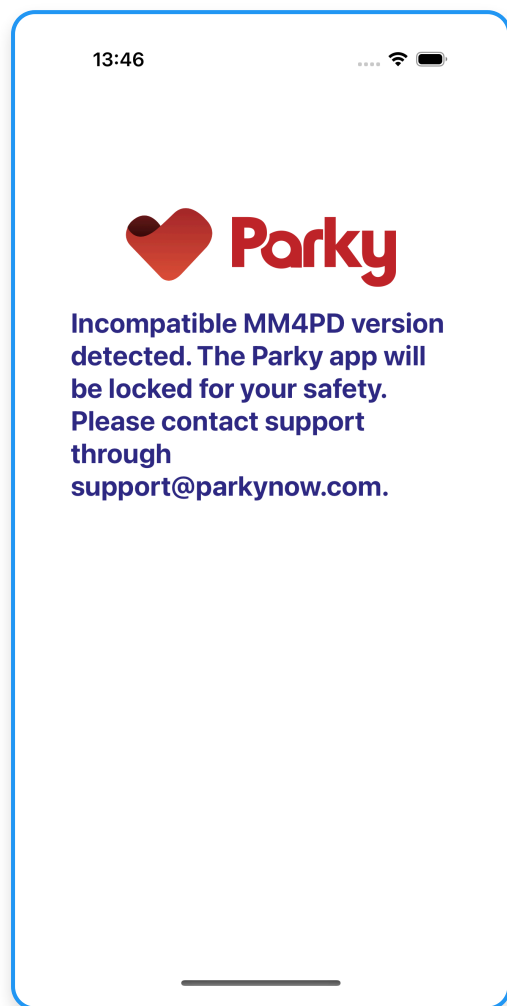

Při inicializaci Parky provádí ověřovací proces pro jakékoli změny verze MM4PD a potvrzuje kompatibilitu zařízení, aby zajistil bezpečný a efektivní provoz svých funkcí.

Pokud se objeví chybová obrazovka, jak je zobrazeno vlevo v aplikaci Parky, znamená to, že Parky není kompatibilní s aktuálním zařízením, operačním systémem nebo verzí softwaru.

Hardwarové a softwarové požadavky

Parky je podporován na:

- zařízeních Apple Watch Series 4 (nebo novějších) s watchOS 10+
- zařízeních iPhone XS (nebo novějších) s iOS 17+

Klinická interpretace přehledů

1. Každý přehled obsahuje příznaky motorických fluktuací, dobu nahrávání a započítané kroky. Pokud se uživatel přihlásí k plánu užívání léků a poskytne informace o užívání léků, lze rovněž zobrazit dodržování léčby.
2. V přehledu příznaků osa x zobrazuje čas a osa y zobrazuje dobu trvání příznaků.
3. Legenda pro tremor, dyskinezi, doby bez nahrávání a předepsané časy léků je zobrazena pod grafem.
4. Příznaky jsou shromažďovány a měřeny v průběhu doby nahrávání a jsou v grafu uvedeny v 15minutových intervalech
5. Hlášené příznaky jsou průměrné doby trvání příznaků dyskineze a tremoru.
6. Přehledy vylučují data, která pravděpodobně nepředstavují žádný motorický příznak. U asymptomatického uživatele nebo uživatele bez jakéhokoli nahrávání se očekává prázdný sloupcový graf.
7. Doba nahrávání udává celkovou dobu, po kterou uživatel správně používal zařízení a kdy nedošlo k žádným technickým problémům týkajícím se monitorování příznaků. Viz sekce „Omezení“.
8. Bez dostatečných dob nahrávání nebudou generovány žádné přehledy, jak je uvedeno výše.
9. Přerušované čáry označují naplánované časy léků.
10. Informace o dodržování léčby zobrazují počet „užitých“ léků oproti počtu naplánovaných léků za daný časový interval (týdně jako posledních sedm dní nebo měsíčně jako posledních 30 dní). „Užité“ léky se počítají na základě vstupu uživatele.
11. Informace o počtu kroků udávají pohyblivost uživatele a jsou zobrazeny jako celkové množství v daném časovém intervalu (denním, týdenním nebo měsíčním).

POUŽITÍ SHROMÁŽDĚNÝCH DAT

Vzdálené monitorování příznaků tremoru a dyskineze poskytuje poskytovateli zdravotní péče objektivní pohled na motorické příznaky Parkinsonovy choroby uživatele mimo kliniku. Při vyhodnocení s nemotorickými příznaky, poznatky uživatele a nálezy z klinických návštěv Parky podporuje péči o pacienty.

OBECNÉ POKYNY

1. Uživatelé musí Apple Watch neustále nosit na své nejvíce postižené paži.
2. Nabíjení Apple Watch se doporučuje během neaktivních hodin uživatele (nejlépe během nočního spánku).
3. Parky nemůže monitorovat příznaky, když nejsou Apple Watch nošeny, což by způsobilo datové mezery.
4. Bez dostatečných dob nahrávání nebude Parky schopen generovat přehledy příznaků. Více informací naleznete v sekci „Omezení“.
5. Aplikace Parky by neměla být odstraněna ani z iPhone, ani z Apple Watch.
6. Uživatelé by měli zadat správný rozvrh užívání léků, aby zajistili spolehlivost výstupů o dodržování léčby. Nastavení rozvrhu užívání léků se doporučuje provádět v klinickém prostředí, pokud to uživatel nebo pečovatel nedokáže sám.
7. Uživatelé by měli na připomenutí léků reagovat včas a správně.

Omezení

1. Parky funguje za následujících omezení:

- Parky funguje pouze na Apple Watch a iPhoneu pomocí algoritmu MM4PD vyvinutého společností Apple.
- Parky nefunguje na nepodporovaných zařízeních.
- Parky se doporučuje používat pro idiopatickou Parkinsonovu chorobu, a nikoli pro jiné parkinsonské syndromy, jako jsou progresivní supranukleární obrna (PSP), multisystémová atrofie (MSA), Lewyho tělíska a kortikobazální degenerace (CBD).
- Uživatel by měl nosit Apple Watch na nejvíce postižené paži.
- Sledování dyskinetických příznaků by mělo být zvažováno pouze u uživatelů s choreou na postižené paži, ať už uváděnou samotným uživatelem, nebo diagnostikovanou poskytovatelem zdravotní péče.
- Parky výslovně sleduje klidový tremor; nesleduje akční tremor ani posturální tremor a nemusí sledovat tremor prstů.
- Parky výslovně nesleduje dystonii ani bradykinezi.
- Výsledky mohou zahrnovat falešně pozitivní a falešně negativní hodnoty. Aktivita uživatele, přiléhavost řemínku hodinek a souběžné stavy (jako je syndrom neklidných nohou a neparkinsonský tremor) mohou ovlivnit kvalitu výsledků.
- Parky výslovně měří příznaky pouze ze zápěstí během nošení Apple Watch. Apple Watch však mohou snímat příznaky přenášené tělem z jiných postižených částí těla, což může mít za následek zavádějící nebo falešné metriky.

2. Parky nemůže shromažďovat data, když jsou Apple Watch vypnuté, a nemůže přenášet data, když je iPhone vypnutý.

Omezení (pokračování)

3. Bez dostatečné doby nahrávání nebude Parky schopen generovat přehledy příznaků. Přehledy jsou generovány s využitím následující metodiky:
 - Patnáctiminutové intervaly, pokrývající celou dobu nahrávání, jsou organizovány podle místního času uživatele.
 - Intervaly s méně než 50 % požadovaných dat jsou vyloučeny.
 - Týdenní a měsíční přehledy zobrazují průměrné doby trvání příznaků tremoru a dyskineze ze všech dnů s daty.
 - V týdenních a měsíčních přehledech se zobrazují pouze intervaly s daty shromážděnými z alespoň pěti dnů nebo představujícími více než 20 % celkového období.
4. Rozvrhy užívání léků podléhají správnosti dat zadaných uživatelem. Pokud má uživatel s používáním aplikace potíže, důrazně se doporučuje poskytnout podporu v klinickém prostředí.
5. Přesnost informací o dodržování léčby závisí na pohotovosti a přesné reakci uživatele na oznámení s připomenutím léků. Nereagování nebo poskytnutí nepřesných interakcí může vést k nesprávným výstupům o dodržování léčby. Pro zmírnění tohoto rizika jsou poskytovatelé zdravotní péče důrazně vyzýváni, aby uživatelům zdůraznili zásadní význam přesných reakcí na připomenutí.
6. Informace o krocích závisí na konzistentním používání jak Apple Watch, tak iPhoneu uživatelem. Parky nemůže shromažďovat data o krocích, pokud uživatel nepoužívá ani jedno z těchto zařízení.
7. Pokud chtějí uživatelé přestat používat Parky natrvalo, mohou svůj účet trvale odstranit. Po odstranění účtu je uživatel považován za vyřazeného a zdravotní a osobní data uživatele budou trvale odstraněna. Jak uživatel, tak poskytovatel zdravotní péče ztratí přístup k přehledům Parky uživatele.

BEZPEČNOST

1. Používání Parky a Apple Watch nemá vliv na uživatele s implantáty hluboké mozkové stimulace (DBS).
2. Apple Watch jsou odolné vůči vodě, ale nejsou vodotěsné. Lze je nosit a používat během cvičení (vystavení potu je v pořádku), v dešti a při mytí rukou.
3. Pokud jde o uživatelskou příručku a návody k hardwaru Apple Watch, prostudujte si původní dokument výrobce, uživatelskou příručku k hardwaru Apple Watch:
<https://help.apple.com/pdf/watch/8/.../apple-watch-user-guide>
4. Návod pro Apple Watch: <https://support.apple.com/en-us/HT204665>
5. Apple Watch splňují následující normy EMC a elektrické normy: Elektrická bezpečnost byla posouzena podle IEC 62368-1 (2014), "Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements." Apple Watch splňují normy EU EN 301 489-1 (V2.2.20), EN 301 489-3 (V2.1.1), EN 301 489-17 (V3.2.0) a EN 301 489-52 (V1.1.0).

OBEČNÁ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nepoužívejte aplikaci Parky k jinému účelu než k zaznamenávání pohybu pacienta s poruchou pohybu.
- Aplikace Parky je určena pouze jako doplněk stávajících klinických metod. Není určena k tomu, aby byla jediným nebo hlavním prostředkem klinického hodnocení.
- h2o therapeutics nedoporučuje používat aplikaci Parky u pacientů, kteří nejsou schopni pracovat s aplikací Parky na iOS ani na watchOS.
- Do rozhodování by měly být vždy zapojeny nemotorické nálezy, poznatky pacienta a klinické návštěvy.
- Důrazně se doporučuje porovnávat výsledky Parky s klinickými nálezy a poznatky uváděnými pacientem.
- Při prvním použití za účelem ověření konzistence toku dat se doporučuje pečlivě sledovat výsledky pacienta po dobu 3 až 5 dnů na pacienta. Toto období by rovněž umožnilo odhalení jakýchkoli technických problémů.
- Pacientům by mělo být doporučeno nosit Apple Watch na nejvíce postižené paži.
- Pacienti nebo pečovatelé jsou vyzýváni k zadání rozvrhu užívání léků. Pokud toho pacient není schopen samostatně nebo s pomocí svých pečovatelů, doporučuje se poskytovatelům zdravotní péče nabídnout pomoc v klinickém prostředí.
- Pacienti by neměli hodnotit průběh svého onemocnění výhradně na základě dat z aplikace Parky.
- V případě selhání aplikace Parky by pacienti měli užívat léky podle předpisu.
- Aplikace Parky neprovádí žádné implicitní hodnocení léků.

ZABEZPEČENÍ DAT

1. Parky shromažďuje data o pohybu pouze tehdy, když uživatel nosí Apple Watch.
2. Kromě dat o pohybu Parky neshromažďuje data o mobilních a telefonních aktivitách, obrazovce ani používání aplikací.
3. Data uživatele mohou být sdílena pouze s poskytovatelem zdravotní péče, pro kterého uživatel nebo pečovatel poskytl souhlas, a mohou být sdílena vždy pouze s jedním poskytovatelem zdravotní péče.
4. Data uživatele, včetně osobně identifikovatelných údajů, jsou uložena na serverech splňujících požadavky HIPAA s využitím standardu Advanced Encryption Standard (AES256). Data uživatele nejsou nikdy sdílena se třetí stranou s výjimkou autorizovaného poskytovatele zdravotní péče.
5. Pro další zajištění bezpečnosti zařízení se doporučuje nainstalovat mobilní bezpečnostní software.

NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY

1. Pokud přehledy příznaků uživatele neodpovídají očekáváním poskytovatele zdravotní péče, okamžitě přestaňte Parky během klinické praxe používat.
2. V případě jakýchkoli podezřelých chybných výpočtů, technických problémů a dalších příhod kontaktujte support@parkynow.com

 **h2o Therapeutics**
Mustafa Kemal Mah. 2131 Cad. No:15
06510 Çankaya / Ankara / Türkiye

CE
2292



(01) 8685063631006
(10) P1/1.6.1
(11) 20260710



www.parkynow.com