



Velkommen til

PARKY BRUGERVEJLEDNING

v1.6.1

ERKLÆRING OM INDIKATIONER FOR BRUG

Parky-appen er beregnet til at kvantificere kinematikken af bevægeforstyrrelsessymptomer, herunder tremor og dyskinesi, hos voksne (45 år eller derover) med mild til moderat Parkinsons sygdom.

INDHOLD

Kom godt i gang	3
Smartwatch-indstillinger	7
Inde i Parky	10
Krav	21
Klinisk fortolkning	22
Generelle instruktioner	23
Begrænsninger	24
Sikkerhed	26
Generelle advarsler	27
Datasikkerhed	28

Mød Parky

Parky er et værktøj til fjernovervågning, der er designet til den kontinuerlige, objektive vurdering af motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom, såsom tremor og dyskinesi. Det kvantificerer bevægelsessensordata via Apple Watch og leverer symptomprofilrapporter i realtid til støtte for patienthåndtering.

Parky bygger på den klinisk validerede algoritme Motor Fluctuations Monitor for Parkinson's Disease (MM4PD), udviklet af Apple Inc. (Powers et al., 2021¹)

For den kliniske studierapport, besøg venligst <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536284/>

Hvem er Parky beregnet til?

- Parky er kun beregnet til brugere med klinisk diagnosticeret idiopatisk Parkinsons sygdom, som er tilstrækkeligt kompetente til at bruge et Apple Watch og en iPhone.
- Parky fungerer bedst for personer, der primært oplever tremor- og dyskinesisyntomer.
- Parky er ikke designet til at vurdere parkinsonsyndromer såsom multipel systematrofi (MSA), progressiv supranukleær parese (PSP), kortikobasal degeneration (CBD) eller Lewy body-demens.

¹ Powers R, Etezadi-Amoli M, Arnold EM, Kianian S, Mance I, Gibiansky M, Trietsch D, Alvarado AS, Kretlow JD, Herrington TM, Brillman S, Huang N, Lin PT, Pham HA, Ullal AV. Smartwatch inertial sensors continuously monitor real-world motor fluctuations in Parkinson's disease. Sci Transl Med. 2021 Feb 3;13(579):eabd7865. doi: 10.1126/scitranslmed.abd7865. PMID: 33536284.

Et hurtigt kig på Parky

Innovativ overvågning og vurdering

Parky giver værdifuld indsigt ved at registrere tremor og dyskinesi i forskellige stadier af sygdommen. Det indsamler nøjagtige data om motoriske symptomer hele dagen og muliggør vurderinger overalt, selv uden for superviserede omgivelser.

Medicinhåndtering og symptomindsigt

Parky sikrer, at du holder styr på din medicin med praktiske påmindelser på din iPhone og dit Apple Watch og kombinerer symptomrapporter med data om medicinforbrug. Denne kombination giver klar, objektiv indsigt, som hjælper behandlere med at opdage eventuelle ændringer i symptomer og derved forbedre behandlingsplaner.

Styrkelse gennem teknologi

Parky integrerer bærbare sensorer for at tilbyde dig et pålideligt alternativ til patientdagbøger, hvilket imødegår den subjektive karakter af selvevaluering og forhindrer datahuller, der ofte ses ved dagbogsføring. Denne integration giver kontinuerlig, passiv sporing, der sikrer problemfri overvågning af dit helbred.

Aktivitetssporing og mobilitetsstøtte

Parky overvåger ikke kun dine motoriske symptomer; det sporer også dine daglige skridt og giver et indblik i dit fysiske aktivitetsniveau.

Kom godt i gang med Parky



Scan QR-koden med din iPhones kamera, og følg pop op-vinduet for at downloade Parky fra App Store.

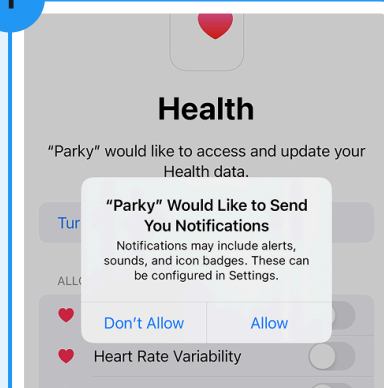
Vi opfordrer dig til at downloade Parky-appen fra App Store for at kontrollere enhedskompatibiliteten.

Tildeling af tilladelser

Du skal tildele tilladelser via de nedenfor viste anmodninger, for at Parky kan fungere korrekt. Disse tilladelser gør det muligt for Parky at sende notifikationer og få adgang til data om skridt samt bevægelsessporing til analyse af tremor og dyskinesi.

Parky er afhængig af disse tilladelser for at give dig fuldstændig indsigt i din fysiske aktivitet, dine symptomer og din medicinefterlevelse.


1



Adgang til notifikationer

Denne tilladelse giver dig mulighed for at modtage påmindelser og opdateringer fra Parky. Uden den modtager du ikke notifikationer om medicinplaner og opdateringer.

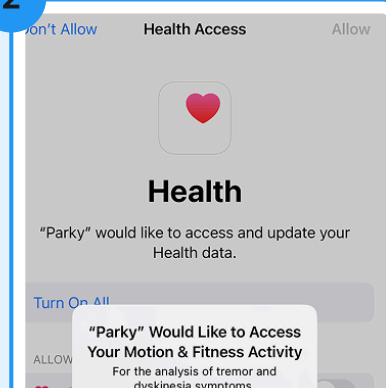
2



Adgang til bevægelsesdata

Tildeling af denne tilladelse gør det muligt for Parky at spore dine bevægelser, hvilket er afgørende for overvågning af symptomer som tremor og dyskinesi.

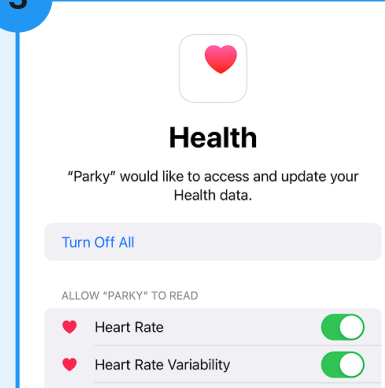3




Adgang til helbredsdata

Ved at give adgang til dine helbredsdata kan Parky give indsigt i dit fysiske aktivitetsniveau.



Onboarding

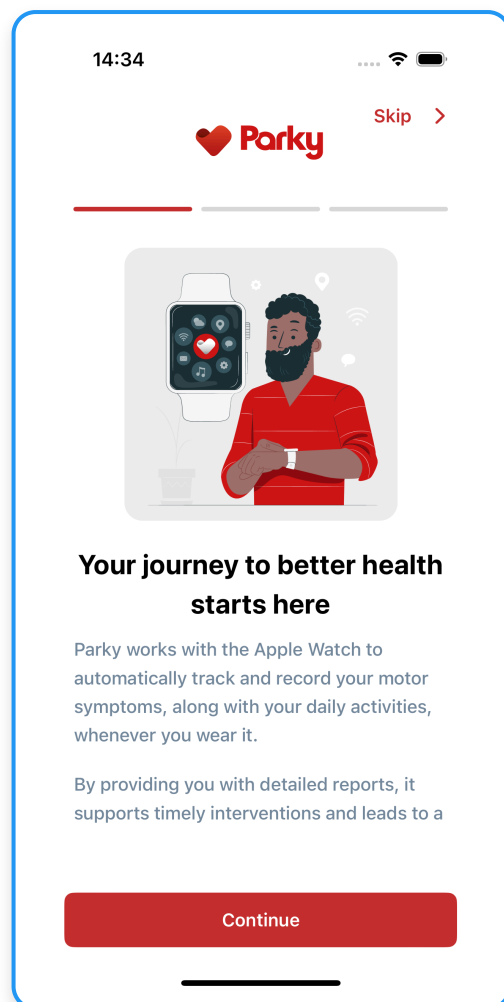Du begynder med en onboarding-proces, der gennemgår, hvordan du bruger Parky, vigtig sikkerhedsinformation, og hvordan vi beskytter dine data.



Sådan logger du ind

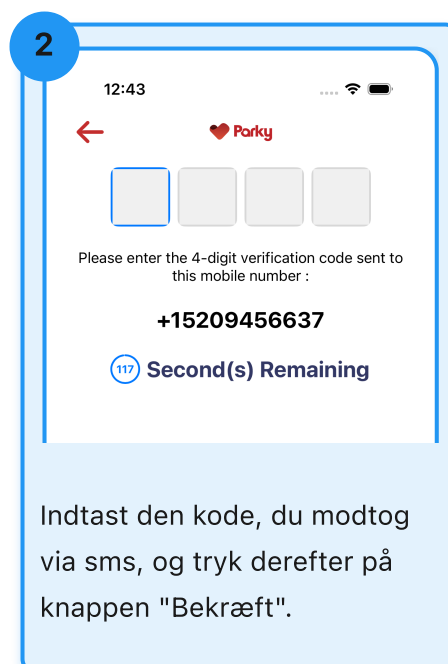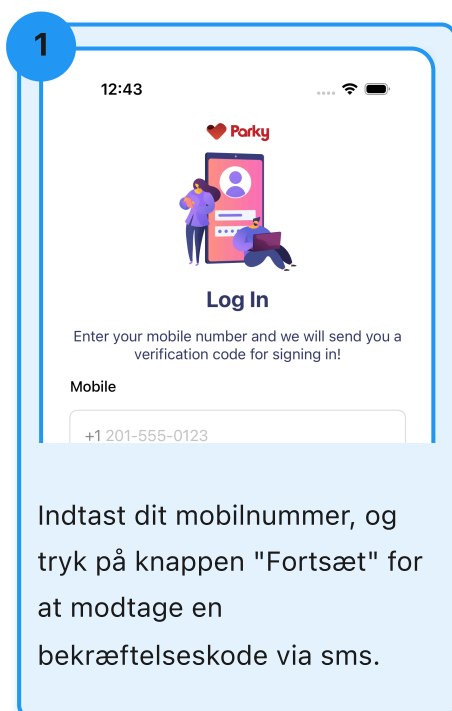Under onboarding indtaster du dit mobilnummer og modtager en bekræftelseskode via sms.



Opsætning af komplikationer på urskiven

Følg trinene nedenfor for at tilføje Parky til urskivekomplikationer. Parky kan kun overvåge motoriske symptomer, når urskivekomplikationer er tilføjet.

1



Tryk og hold på skærmen.

2



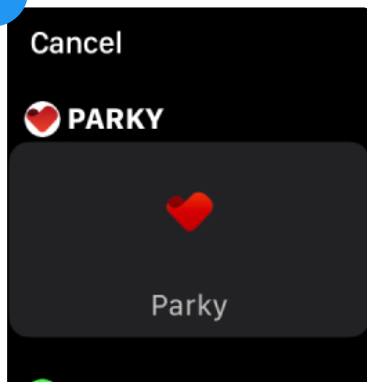
Tryk på "Rediger".

3



Stryg til venstre, indtil titlen "Komplikationer" vises, og vælg en vilkårlig plads.

4



Rul, indtil "Parky" vises, og tryk derefter.

5

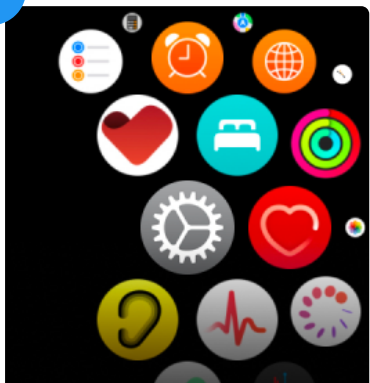


Færdig! Parky-komplikation tilføjet.

Aktivering af haptiske notifikationer


Følg trinene nedenfor for at aktivere haptiske notifikationer på dit Apple Watch. Haptiske notifikationer giver vibrationsfeedback for Parky-notifikationer.

1




Tryk på Digital Crown-knappen på dit Apple Watch for at se hjemmeskærmen.

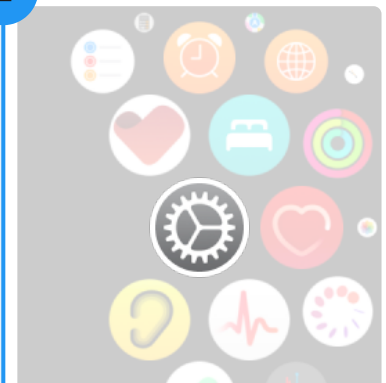2




Tryk på "Indstillinger" i menuen med app-ikoner.

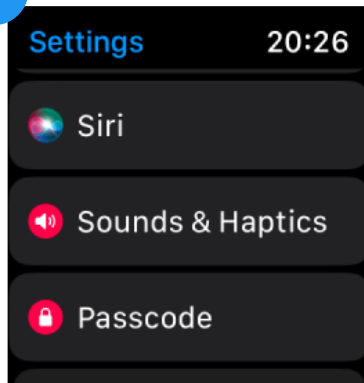3




Rul ned, og tryk på "Lyde & haptisk feedback".

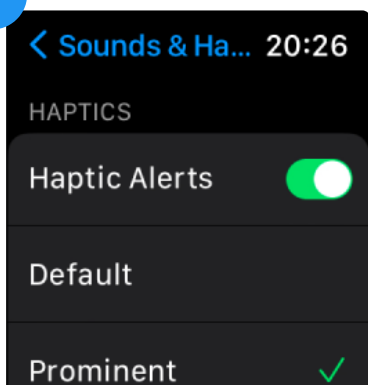4



Sørg for, at "Haptiske notifikationer" er slået til ved at rulle ned igen.

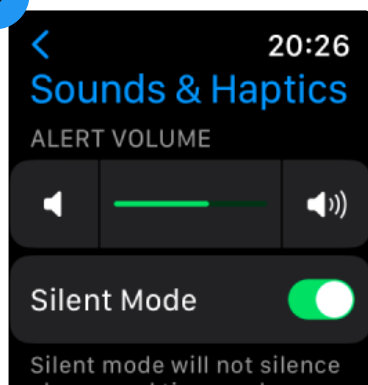5



Husk, at aktivering af haptiske vibrationer også vil frembringe en lyd.

For mere diskrete signaler kan du altid vende tilbage hertil og slå "Lydløs" til.

Sådan bruger du Foggy

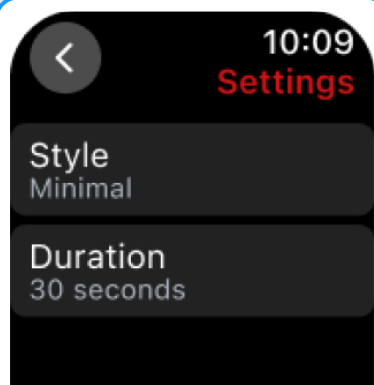


Start "Foggy" enten ved at trykke på komplikationsknappen eller ved at trykke på knappen inde i Parky-appen.




Foggy begynder at give signaler, så snart du åbner den. Tryk for at stoppe, eller lad den køre.


Tilpasning af Foggy



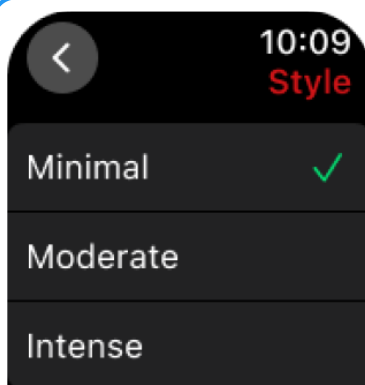Der er to indstillingstyper: "Stil" og "Varighed".




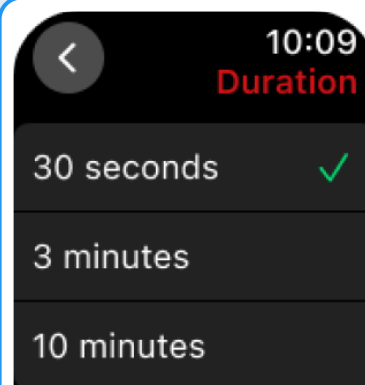Juster din vibrationsfrekvens i menuen "Stil".



Indstil signalvarigheden for Foggy i menuen "Varighed".

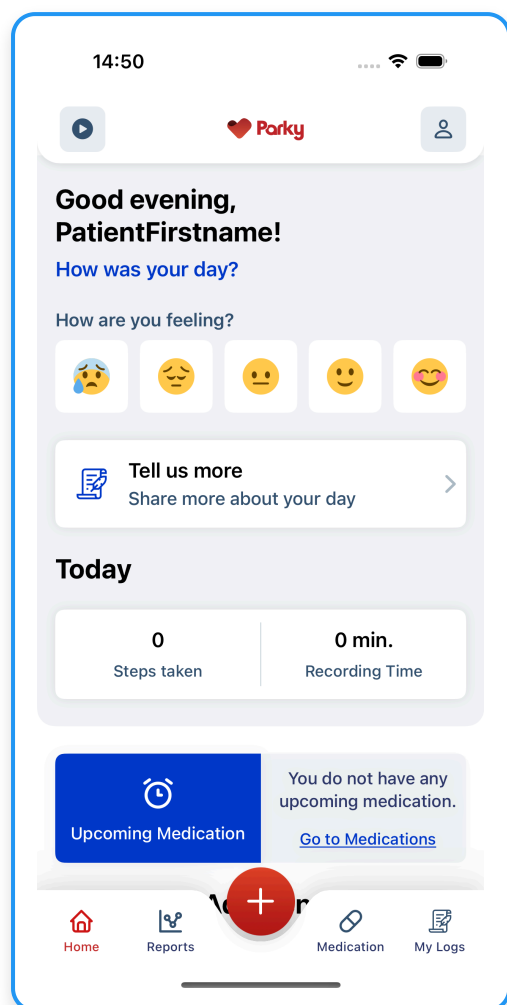Inde i Parky



Hjemmeskærm

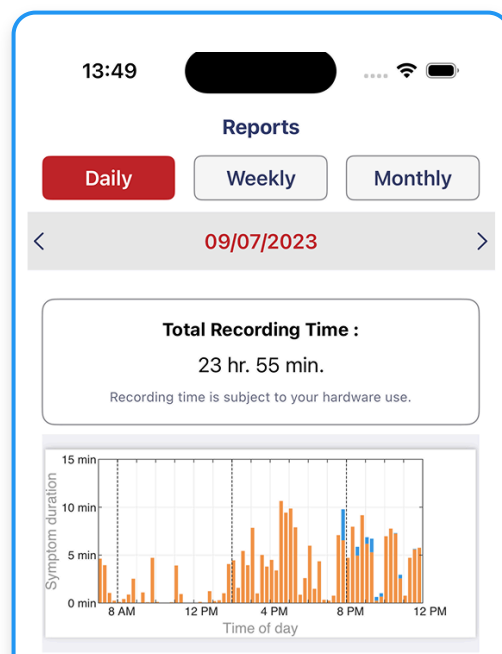
Parkys hjemmeskærm tilbyder et brugervenligt dashboard, hvor du finder påmindelser om kommende medicin, sporer dine daglige skridt, overvåger optagetider og ser ugentlig og månedlig information om medicin efterlevelse. Derudover har du adgang til et samlingssted med ressourcer til yderligere information.

Adgang til rapporterne

Se dine symptomrapporter under fanen "Rapporter".

Rapporter vises som standard dagligt. Vælg fanemenueen for at se ugentlige og månedlige rapporter, herunder tilbageliggende datoer.

Tryk på eksportknappen for når som helst at downloade en bestemt rapport som PDF.






Daily report

User: Name Surname

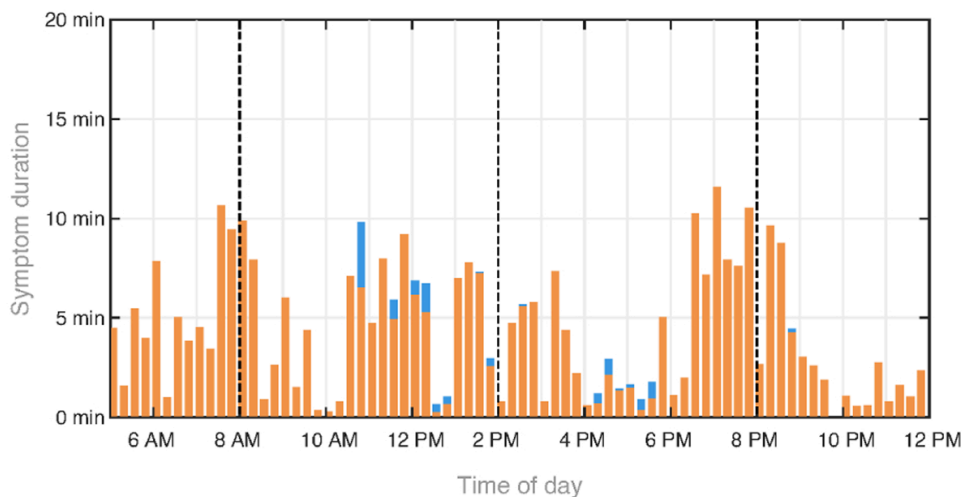September 07, 2023



Total recording time

23 Hours 55 Minutes

Recording time is subject to users' hardware use.

Total steps

-

Step count is subject to users' hardware use.


Medication	Days	Schedule and dose	Adherence
Rasagiline	Daily	08:00 AM (1)	100%
Carbidopa / Levodopa	Daily	08:00 AM (1) 02:00 PM (1) 08:00 PM (1)	100%

Medication schedules and adherence are subject to users' input.

www.parkynow.com

Disse rapporter vil være tilgængelige for den behandler, du har inviteret via Parky-appen, når vedkommende har accepteret din invitation. Behandleren kan se dine rapporter via Parky Provider Portal. Disse omfatter diagrammer over tremor og dyskinesi, data om medicin efterlevelse, skridttælling og optagetider for en valgt periode.

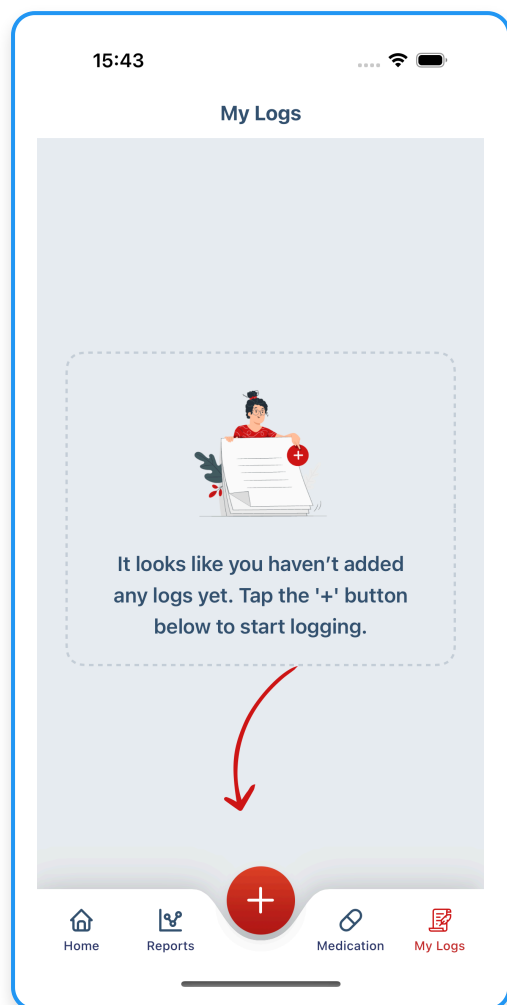
Registrering



Du kan nemt registrere, hvordan du har det i løbet af dagen. Det hjælper dig med at holde dig i kontakt med din følelsesmæssige tilstand og opbygge en bedre forståelse af dit humør over tid. Begynd at spore dine følelsesmæssige mønstre i dag for at styrke selvbevidstheden og understøtte personlig behandling.


Tilføjelse af registreringer

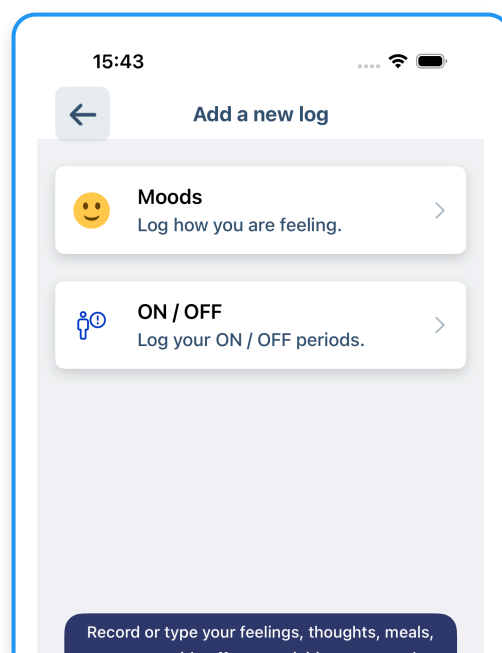Du kan registrere dit humør, ON/OFF-perioder eller en fri brugerdefineret registrering, der er relevant for din behandling.




Humør

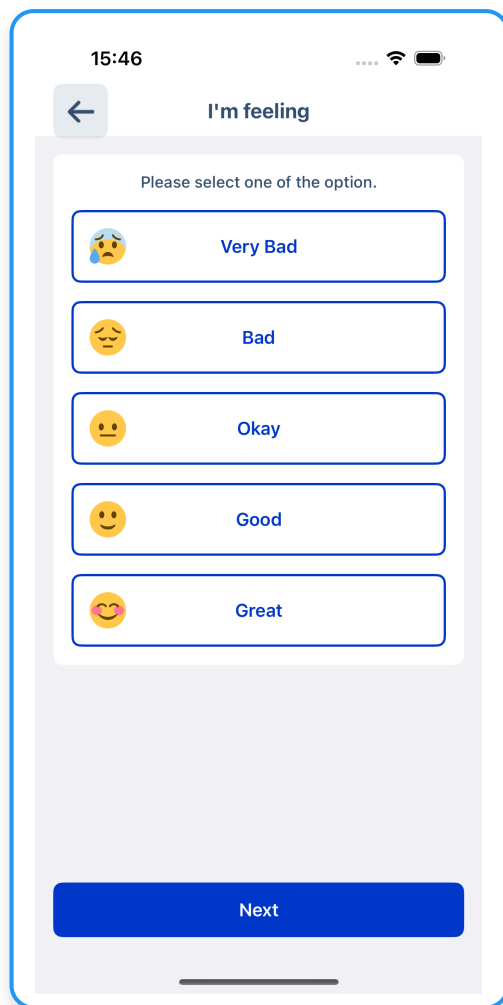Du kan registrere dit aktuelle humør i løbet af dagen. Når du har justeret tidspunktet for din registrering, kan du gemme og gennemse den under fanen "Mine registreringer".




ON/OFF-perioder

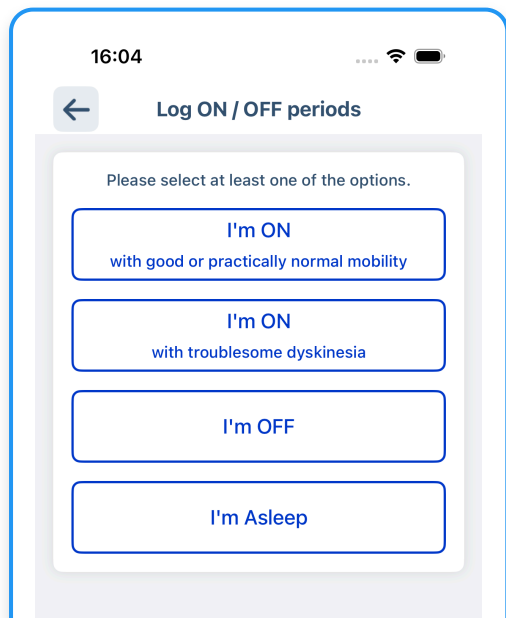

Du kan registrere den mest passende ON/OFF-mulighed for en periode. På samme måde kan du gemme og gennemse den under fanen "Mine registreringer".

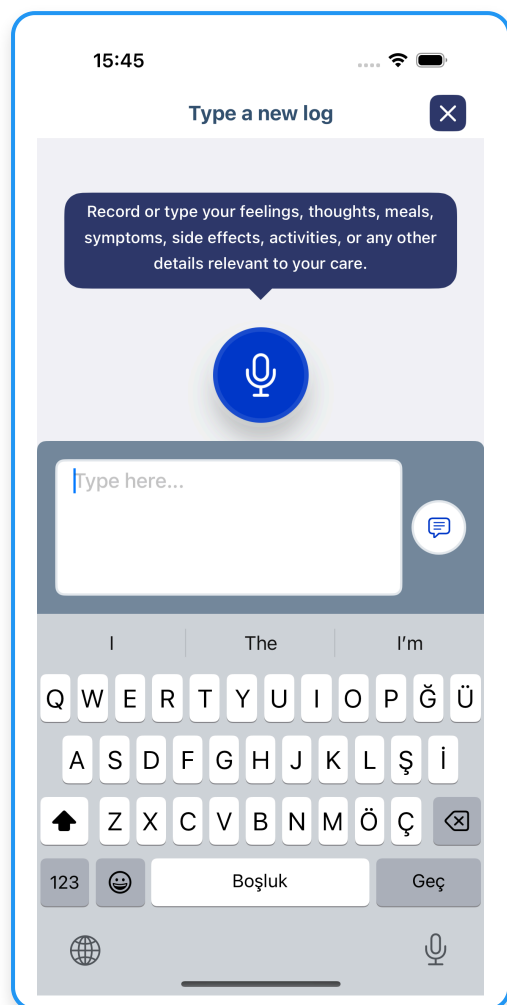
Brugerdefineret registrering med tekst




Du kan skrive frit om dine følelser, tanker, måltider eller andre detaljer, du finder vigtige at registrere. Brugerdefinerede registreringer kan oprettes ved hjælp af tekst- eller taleinput.

Brugerdefineret registrering med stemme

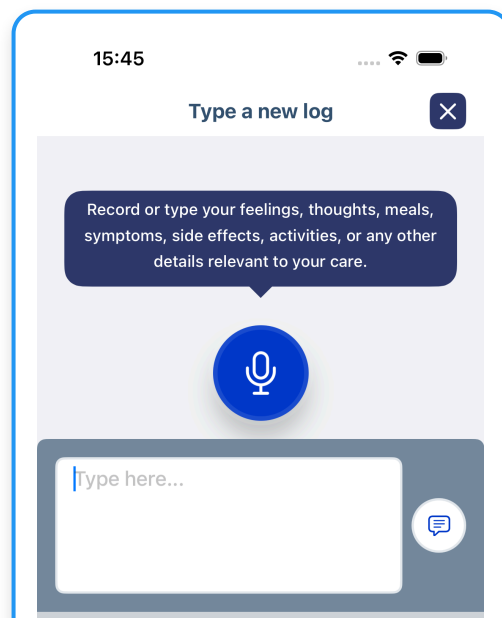
Optag med din stemme. Stemmeoptagelser har en tidsgrænse på 120 sekunder.




Mine registreringer

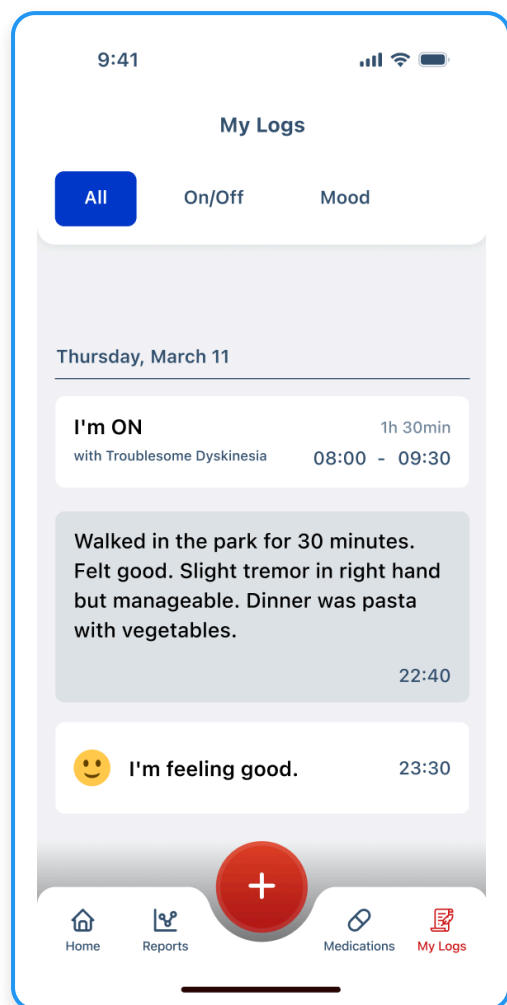

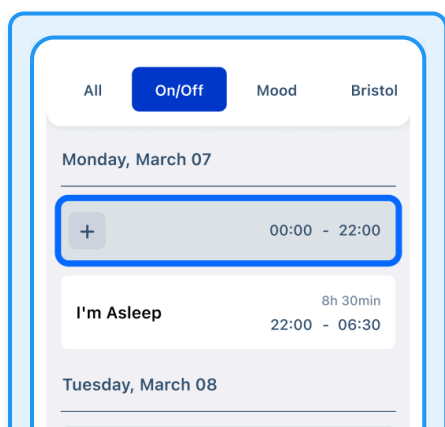
Du kan se en forhåndsvisning af dine registrerede elementer som et feed via "Mine registreringer" i navigationen. Du kan begynde at tilføje dine registreringer ved blot at trykke på "Plus"-ikonet. Du kan også filtrere forhåndsvisningen af dit feed.



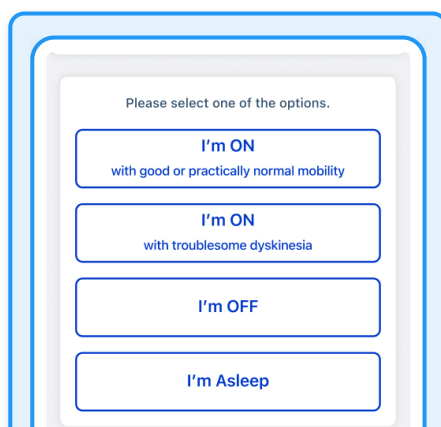I kategorier, hvor kontinuitet er vigtig, kan du nemt få øje på dine manglende registreringer. Du kan begynde at udfylde dine manglende registreringer ved at trykke på dem.



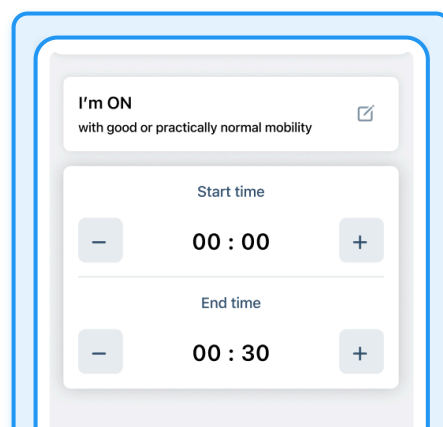
Du kan begynde at udfylde dine manglende registreringer ved at trykke på dem.




Den begynder automatisk ved starten af din fraværperiode.

Redigering af dine registrerede elementer

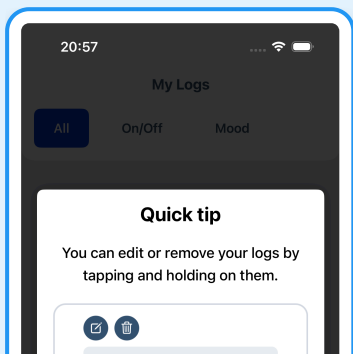
Start med at trykke og holde på det registrerede element, du vil redigere. Du kan redigere eller fjerne dine registreringer ved at trykke og holde på dem.



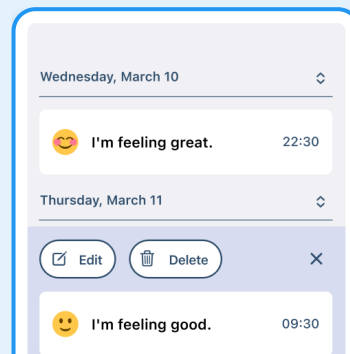
Du kan redigere dine registrerede elementer ved at trykke og holde på dem.



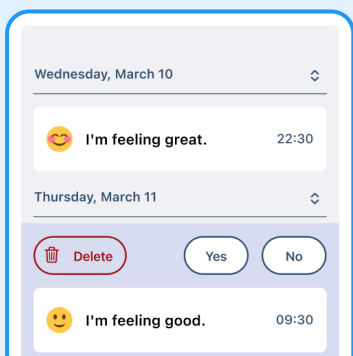Du kan enten redigere eller slette dem fra overlay-menuen.



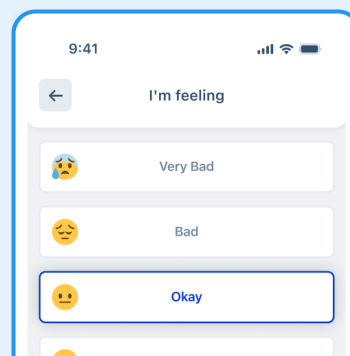Hvis du trykker på knappen "Slet", bliver du bedt om at bekræfte – registreringen slettes permanent.




Hvis du trykker på knappen "Rediger", kan du ændre detaljerne i din registrering.

Opsætning af din medicinplan

Du skal indtaste din korrekte medicinplan for at få mest muligt ud af Parky. Hvis din behandlingsplan ændrer sig, kan du når som helst redigere eller fjerne din medicinplan.


Start med at trykke på "Medicin" i den nederste menu.

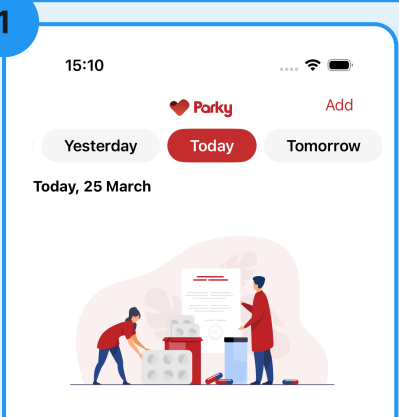1




Tryk på "Tilføj medicin" for at begynde at tilføje dine ordinationer, én ad gangen.

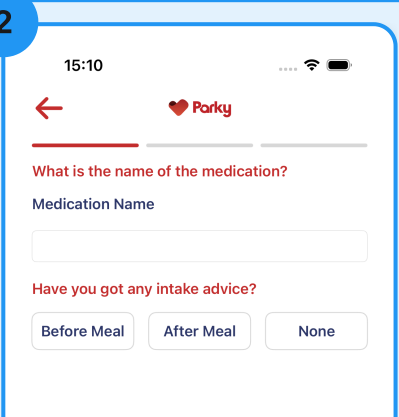2




Du bliver bedt om at indtaste medicinens navn og råd om indtagelse.

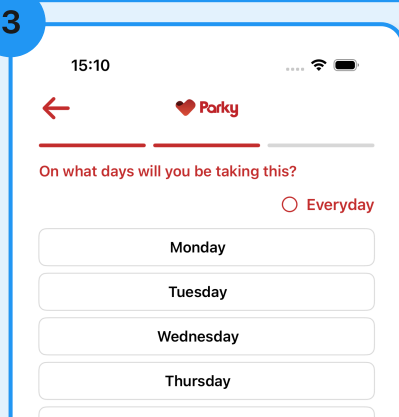3




Vælg, hvilke dage du skal tage din medicin.

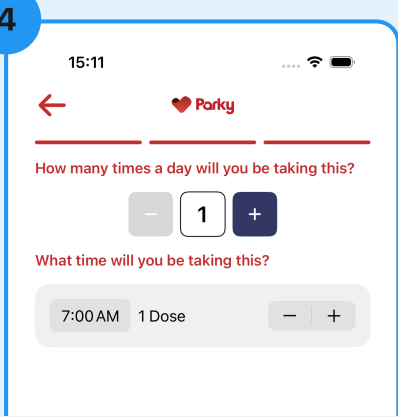4



Indtast medicinens tidspunkter og doser.

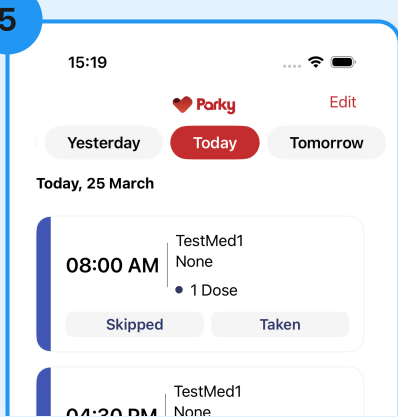5




Tryk på knappen "Rediger medicin" for at redigere eller slette din medicin.


Brug af medicinpåmindelser

- Du modtager påmindelsesnotifikationer baseret på de dage og tidspunkter, der er angivet i din medicinplan.
- Du kan markere din medicin som "Taget" eller "Sprunget over" på din iPhone eller dit Apple Watch.
- Hvis du ikke når at reagere på en notifikation, kan du stadig svare senere via fanen "Medicin".
- For at sikre, at din information om medicinefterlevelse er nøjagtig, skal du reagere hurtigt og korrekt på medicinpåmindelser.

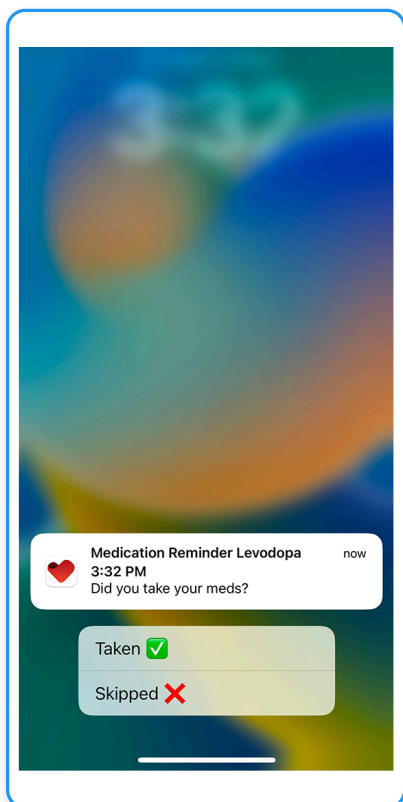Du kan reagere på påmindelserne som "Taget" eller "Sprunget over" på din iPhone eller dit Apple Watch.



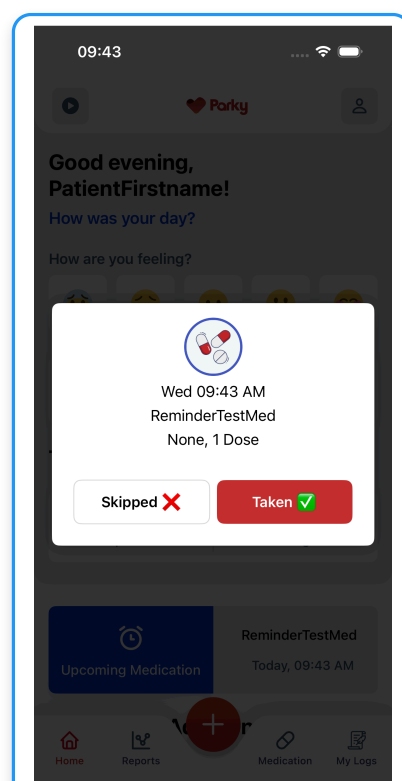Reager på påmindelser med "Taget" eller "Sprunget over".




Profilscreen

Du kan se din status, dine personlige oplysninger og din tidszone under fanen "Profil".

Du kan kontakte os for at få hjælp eller finde løsninger på almindelige problemer i afsnittene "Kontakt os" og "Support og fejlfinding".

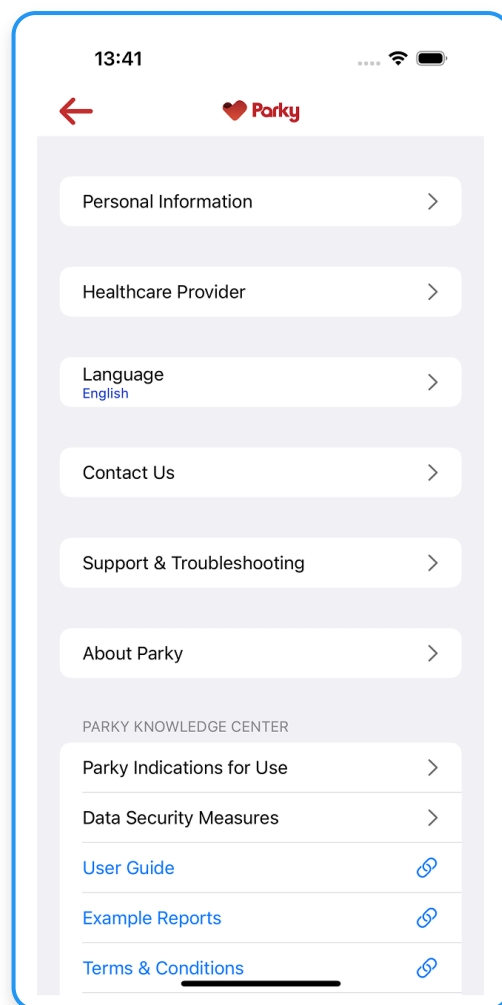Gå ikke glip af vores "Videnscenter" på samme fane, hvor du finder vigtig information om Parky, hvordan du holder dine data sikre, eksempler på rapporter og vores vilkår og betingelser sammen med privatlivspolitikken.




Tilføjelse af en behandler


Du kan vælge at udpege en behandler ved at dele deres professionelle oplysninger via Parky-appen.

Når behandleren er udpeget, får vedkommende adgang til alle dine helbredsjournaler via Parky Provider Portal.

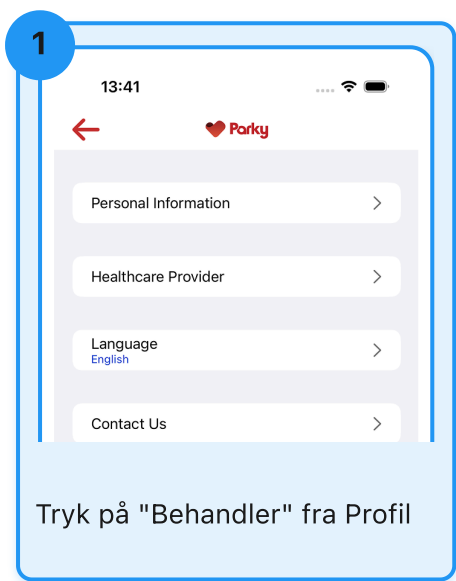
Du kan når som helst fjerne den udpegede behandler, hvilket forhindrer vedkommende i at få adgang til både tidligere og fremtidige data.

1

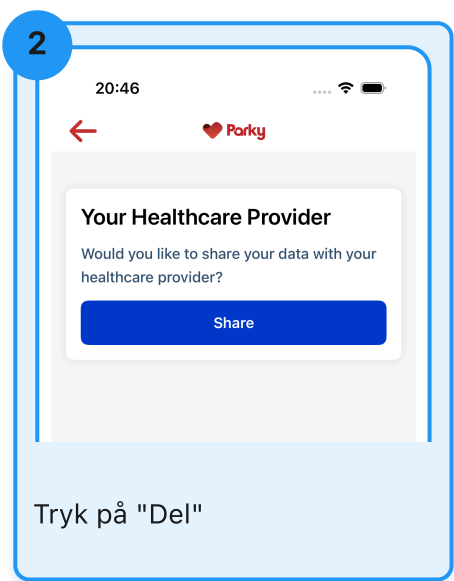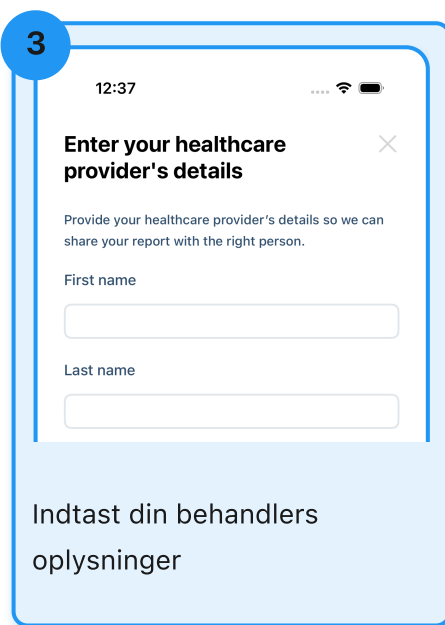
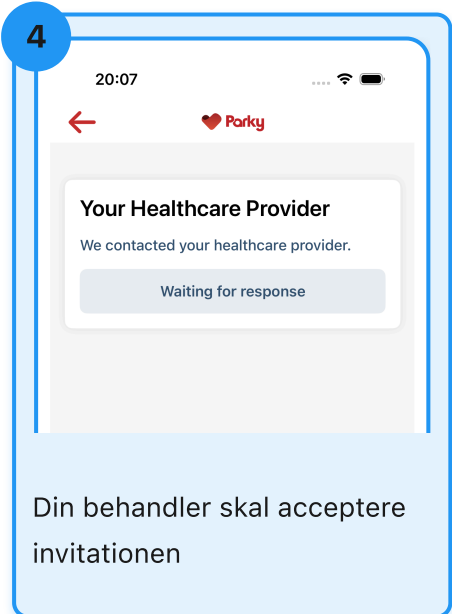
Tryk på "Behandler" fra Profil

2


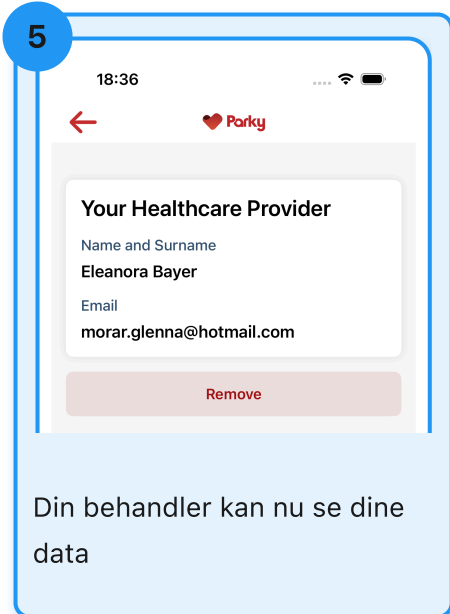
Tryk på "Del"

3


Indtast din behandlers oplysninger

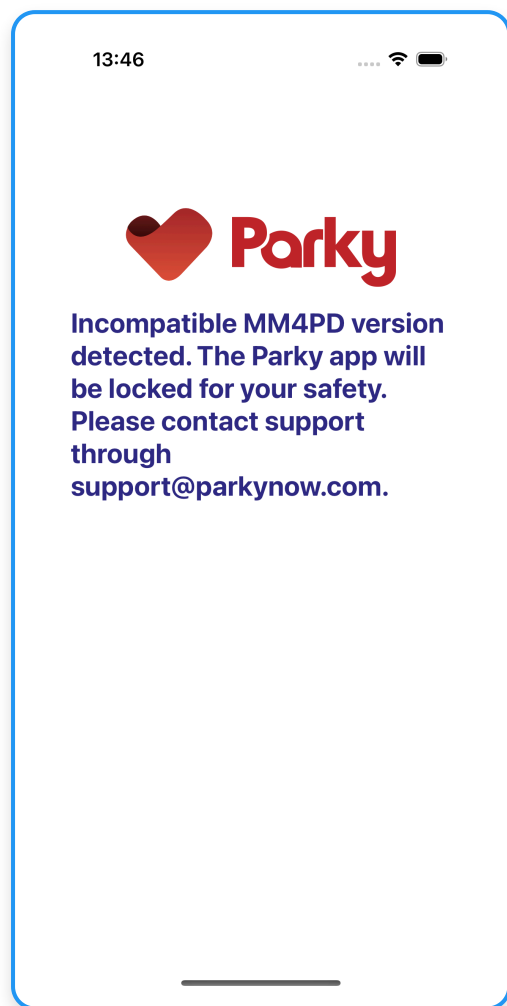
4


Din behandler skal acceptere invitationen

5


Din behandler kan nu se dine data

VIGTIG ADVARSEL I APPEN



Ved opstart gennemfører Parky en verifikationsproces for eventuelle ændringer i MM4PD-versionen og bekræfter enhedskompatibiliteten for at sikre en sikker og effektiv drift af dens funktioner.

Hvis der vises en fejlskærm, som den der vises til venstre i Parky-applikationen, betyder det, at Parky er inkompatibel med den aktuelle enhed, det aktuelle operativsystem eller den aktuelle softwareversion.

Hardware- og softwarekrav

Parky understøttes på:

- Apple Watch Series 4 (eller nyere) enheder med watchOS 10+
- iPhone XS (eller nyere) enheder med iOS 17+

Klinisk fortolkning af rapporter

1. Hver rapport indeholder symptomer på motoriske fluktuationer, optagetid og talte skridt. Hvis brugeren logger ind på medicinplanen og giver oplysninger om indtagelse af medicinen, kan efterlevelsen også ses.
2. I symptomrapporten viser x-aksen tid, og y-aksen viser symptomvarighed.
3. Signaturforklaringen for tremor, dyskinesi, tidspunkter uden optagelse og ordinerede medicintidspunkter vises under grafen.
4. Symptomer indsamles og måles i hele optagetiden og angives i grafen med 15-minutters intervaller
5. De rapporterede symptomer er de gennemsnitlige symptomvarigheder for dyskinesi og tremor.
6. Rapporterne udelukker data, som sandsynligvis ikke repræsenterer noget motorisk symptom. Et tomt søjlediagram er forventeligt for en asymptomatisk bruger eller en bruger uden nogen optagelse.
7. Optagetid angiver den samlede tid, brugeren har anvendt enheden korrekt, og at der ikke var nogen tekniske problemer med hensyn til symptomovervågning. Se venligst afsnittet "Begrænsninger".
8. Uden tilstrækkelige optagetider genereres der ingen rapporter, som angivet ovenfor.
9. Stiplede linjer angiver planlagte medicintidspunkter.
10. Information om medicin efterlevelse viser antallet af "taget" medicin i forhold til antallet af planlagt medicin for et givet tidsinterval (ugentligt som de seneste syv dage eller månedligt som de seneste 30 dage). "Taget" medicin beregnes på baggrund af brugerens input.
11. Information om skridttælling angiver brugerens mobilitet og vises som det samlede antal inden for et givet tidsinterval (dagligt, ugentligt eller månedligt).

BRUGEN AF INDSAMLEDE DATA

Fjernovervågning af symptomer på tremor og dyskinesi giver behandleren et objektivt billede af brugerens motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom uden for klinikken. Når dette vurderes sammen med ikke-motoriske symptomer, brugerindsigt og fund fra klinikbesøg, understøtter Parky patienthåndteringen.

GENERELLE INSTRUKTIONER

1. Brugere skal til enhver tid bære Apple Watch på den mest påvirkede arm.
2. Opladning af Apple Watch anbefales i brugerens inaktive timer (helst under nattesøvnen).
3. Parky kan ikke overvåge symptomer, når Apple Watch ikke bæres, hvilket vil medføre datahuller.
4. Uden tilstrækkelige optagetider vil Parky ikke kunne generere symptomrapporter. Se venligst afsnittet "Begrænsninger" for mere information.
5. Parky-appen bør ikke slettes, hverken på iPhone eller på Apple Watch.
6. Brugere bør indtaste den korrekte medicinplan for at sikre pålideligheden af resultaterne for medicinefterlevelse. Det anbefales at oprette medicinplanen i et klinisk miljø, hvis brugeren eller den pårørende ikke kan gøre det alene.
7. Brugere bør reagere på medicinpåmindelser rettidigt og korrekt.

Begrænsninger

1. Parky fungerer under følgende begrænsninger:

- Parky fungerer kun på Apple Watch og iPhone ved hjælp af MM4PD-algoritmen udviklet af Apple.
- Parky fungerer ikke på enheder, der ikke understøttes.
- Parky anbefales anvendt til idiopatisk Parkinsons sygdom og ikke til andre parkinsonsyndromer såsom progressiv supranukleær parese (PSP), multipel systematrofi (MSA), Lewy og kortikobasal degeneration (CBD).
- Brugeren skal bære Apple Watch på den mest påvirkede arm.
- Sporing af dyskinetiske symptomer bør kun overvejes for brugere med chorea på den påvirkede arm, enten selvrapporteret eller diagnosticeret af en behandler.
- Parky sporer udtrykkeligt hviletremor; den sporer ikke aktionstremor eller postural tremor, og den sporer muligvis ikke fingertremor.
- Parky sporer ikke udtrykkeligt dystoni eller bradykinesi.
- Resultaterne kan indeholde falsk positive og falsk negative. Brugers aktivitet, urremmens pasform og ledsagende tilstande (såsom restless legs-syndrom og ikke-parkinsonistisk tremor) kan påvirke kvaliteten af resultaterne.
- Parky måler udtrykkeligt kun symptomer fra håndleddet, mens Apple Watch bæres. Apple Watch kan dog registrere symptomer, der overføres gennem kroppen fra andre påvirkede kropsdele, hvilket muligvis kan resultere i vildledende eller falske målinger.

2. Parky kan ikke indsamle data, når Apple Watch er slukket, og kan ikke overføre data, når iPhone er slukket.

Begrænsninger (fortsat)

3. Uden tilstrækkelige optagevarigheder vil Parky ikke kunne generere symptomrapporter. Rapporterne genereres ved hjælp af følgende metode:
 - Intervaller på femten minutter, der dækker hele optagelsens varighed, organiseres efter brugerens lokale tid.
 - Intervaller med mindre end 50 % af de nødvendige data udelukkes.
 - De ugentlige og månedlige rapporter viser de gennemsnitlige symptomvarigheder for tremor og dyskinesi fra alle dage med data.
 - I de ugentlige og månedlige rapporter vises kun de intervaller med data indsamlet fra mindst fem dage eller som repræsenterer over 20 % af den samlede periode.
4. Medicinplaner er underlagt rigtigheden af de data, brugeren indtaster. Hvis brugeren har vanskeligheder med at bruge appen, anbefales det på det kraftigste at yde støtte i kliniske omgivelser.
5. Nøjagtigheden af information om medicin efterlevelse afhænger af brugerens hurtige og nøjagtige reaktion på notifikationer om medicin påmindelser. Manglende reaktion eller unøjagtige interaktioner kan føre til forkerte resultater for medicin efterlevelse. For at mindske denne risiko opfordres behandlere på det kraftigste til at understrege den afgørende betydning af nøjagtige svar på påmindelser over for brugerne.
6. Skridtinformationen afhænger af brugerens konsekvente brug af både Apple Watch og iPhone. Parky kan ikke indsamle skridtdata, hvis brugeren ikke anvender en af disse enheder.
7. Hvis brugere ønsker at stoppe med at bruge Parky permanent, kan de slette deres konto permanent. Ved sletning af kontoen betragtes brugeren som udgået, og brugerens helbreds- og persondata fjernes permanent. Både brugeren og behandleren mister adgangen til brugerens Parky-rapporter.

SIKKERHED

1. Brugen af Parky og Apple Watch påvirker ikke brugere med implantater til dyb hjernestimulation (DBS).
2. Apple Watch er vandafvisende, men ikke vandtæt. Det kan bæres og bruges under motion (udsættelse for sved er i orden), i regn og under håndvask.
3. Se venligst den oprindelige producents dokument vedrørende brugervejledningen og guiderne til Apple Watch-hardwarens brugervejledning:
<https://help.apple.com/pdf/watch/8/.../apple-watch-user-guide>
4. Vejledning til Apple Watch: <https://support.apple.com/en-us/HT204665>
5. Apple Watch overholder følgende EMC- og elektriske standarder: Den elektriske sikkerhed blev vurderet i henhold til IEC 62368-1 (2014), "Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements." Apple Watch overholder EU-standarderne EN 301 489-1 (V2.2.20), EN 301 489-3 (V2.1.1), EN 301 489-17 (V3.2.0) og EN 301 489-52 (V1.1.0).

GENERELLE ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Brug ikke Parky-appen til andre formål end at registrere bevægelserne hos en patient med en bevægeforstyrrelse.
- Parky-appen er kun beregnet som et supplement til eksisterende kliniske metoder. Den er ikke beregnet til at være det eneste eller primære middel til klinisk vurdering.
- h2o therapeutics anbefaler ikke at anvende Parky-appen til patienter, der ikke er i stand til at interagere med hverken Parky-appen på iOS eller watchOS.
- Ikke-motoriske fund, patientindsigt og kliniske besøg bør altid indgå i beslutningstagningen.
- Det anbefales på det kraftigste at sammenligne Parky-resultater med kliniske fund og patientrapporteret indsig.
- Ved den indledende brug anbefales det at observere patientresultaterne nøje i 3 til 5 dage pr. patient for at verificere konsistensen af datastrømmen. Denne periode vil også muliggøre opdagelsen af eventuelle tekniske problemer.
- Patienter bør rådes til at bære Apple Watch på den mest påvirkede arm.
- Patienter eller pårørende opfordres til at indtaste medicinplanen. Hvis patienten ikke er i stand til at gøre dette selvstændigt eller med hjælp fra sine pårørende, anbefales det, at behandlere tilbyder assistance i kliniske omgivelser.
- Patienter bør ikke selv vurdere deres sygdomsforløb udelukkende ud fra data fra Parky-appen.
- I tilfælde af fejl i Parky-appen bør patienter tage medicin som ordineret.
- Der er ingen underforstået lægemiddelvurdering fra Parky-appens side.

DATASIKKERHED

1. Parky indsamler kun bevægelsesdata, når brugeren bærer et Apple Watch.
2. Ud over bevægelsesdata indsamler Parky ikke data om mobil- og telefonaktiviteter, skærm- eller appforbrug.
3. Brugerdata kan kun deles med den behandler, som brugeren eller den pårørende har givet samtykke til, og kan kun deles med én behandler ad gangen.
4. Brugerdata, herunder personhenførbare oplysninger, opbevares på HIPAA-kompatible servere ved hjælp af Advanced Encryption Standard (AES256). Brugerdata deles aldrig med tredjeparter, undtagen med en autoriseret behandler.
5. Det anbefales at installere et mobilt sikkerhedssoftware for yderligere at sikre enhedens sikkerhed.

UTILSIGTEDE HÆNDELSER

1. Hvis brugerens symptomrapporter ikke svarer til behandlerens forventninger, skal du straks stoppe med at bruge Parky under klinisk praksis.
2. I tilfælde af eventuelle formodede fejlberegninger, tekniske problemer og andre hændelser, kontakt venligst support@parkynow.com

 **h2o Therapeutics**
Mustafa Kemal Mah. 2131 Cad. No:15
06510 Çankaya / Ankara / Türkiye

CE
2292

MD

UDI



(01)8685063631006
(10)P1/1.6.1
(11)20260710



www.parkynow.com