



Bienvenue dans le

# **GUIDE DE L'UTILISATEUR PARKY**

v1.6.1

# INDICATIONS D'UTILISATION

L'application Parky est destinée à quantifier la cinématique des symptômes des troubles du mouvement, y compris les tremblements et la dyskinésie, chez les adultes (âgés de 45 ans ou plus) atteints de la maladie de Parkinson légère à modérée.

# SOMMAIRE

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Premiers pas</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>Réglages de la montre connectée</b> | <b>7</b>  |
| <b>À l'intérieur de Parky</b>          | <b>10</b> |
| <b>Configuration requise</b>           | <b>21</b> |
| <b>Interprétation clinique</b>         | <b>22</b> |
| <b>Instructions générales</b>          | <b>23</b> |
| <b>Limitations</b>                     | <b>24</b> |
| <b>Sécurité</b>                        | <b>26</b> |
| <b>Avertissements généraux</b>         | <b>27</b> |
| <b>Sécurité des données</b>            | <b>28</b> |

## Découvrez Parky

Parky est un outil de surveillance à distance conçu pour l'évaluation continue et objective des symptômes moteurs de la maladie de Parkinson, tels que les tremblements et la dyskinésie. Il quantifie les données des capteurs de mouvement via l'Apple Watch et fournit des rapports de profil de symptômes en temps réel, soutenant la prise en charge du patient.

Parky s'appuie sur l'algorithme cliniquement validé Motor Fluctuations Monitor for Parkinson's Disease (MM4PD) développé par Apple Inc. (Powers et al., 2021<sup>1</sup>)

Pour le rapport de l'étude clinique, veuillez consulter <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536284/>

---

### À qui Parky est-il destiné ?

- Parky est destiné uniquement aux utilisateurs atteints de la maladie de Parkinson idiopathique cliniquement diagnostiquée, suffisamment compétents pour utiliser une Apple Watch et un iPhone.
- Parky fonctionne au mieux pour les personnes qui présentent principalement des symptômes de tremblement et de dyskinésie.
- Parky n'est pas conçu pour évaluer les syndromes parkinsoniens tels que l'atrophie multisystématisée (MSA), la paralysie supranucléaire progressive (PSP), la dégénérescence corticobasale (CBD) ou la démence à corps de Lewy.

<sup>1</sup> Powers R, Etezadi-Amoli M, Arnold EM, Kianian S, Mance I, Gibiansky M, Trietsch D, Alvarado AS, Kretlow JD, Herrington TM, Brillman S, Huang N, Lin PT, Pham HA, Ullal AV. Smartwatch inertial sensors continuously monitor real-world motor fluctuations in Parkinson's disease. Sci Transl Med. 2021 Feb 3;13(579):eabd7865. doi: 10.1126/scitranslmed.abd7865. PMID: 33536284.

# Un aperçu rapide de Parky

## Surveillance et évaluation innovantes

Parky fournit des informations précieuses en détectant les tremblements et la dyskinésie à différents stades de la maladie. Il collecte des données précises sur les symptômes moteurs tout au long de la journée et permet des évaluations en tout lieu, même en dehors des environnements supervisés.

## Gestion des médicaments et informations sur les symptômes

Parky vous aide à respecter votre traitement grâce à des rappels pratiques sur votre iPhone et votre Apple Watch, et combine les rapports de symptômes avec les données d'utilisation des médicaments. Cette combinaison fournit des informations claires et objectives, aidant les professionnels de santé à détecter tout changement dans les symptômes, améliorant ainsi les plans de traitement.

## L'autonomie par la technologie

Parky intègre des capteurs portables pour vous offrir une alternative fiable aux journaux du patient, répondant à la nature subjective de l'auto-évaluation et évitant les lacunes de données fréquemment rencontrées dans la tenue de journaux. Cette intégration offre un suivi continu et passif, garantissant une surveillance fluide de votre santé.

## Suivi de l'activité et soutien à la mobilité

Parky ne se contente pas de surveiller vos symptômes moteurs ; il suit également vos pas quotidiens, offrant un aperçu de vos niveaux d'activité physique.

## Premiers pas avec Parky



Scannez le code QR avec l'appareil photo de votre iPhone et suivez la fenêtre contextuelle pour télécharger Parky depuis l'App Store.


Nous vous encourageons à télécharger l'application Parky depuis l'App Store pour vérifier la compatibilité de l'appareil.

## Accorder les autorisations

Vous devrez accorder des autorisations via les invites présentées ci-dessous pour que Parky fonctionne correctement. Ces autorisations permettent à Parky d'envoyer des notifications et d'accéder aux données relatives aux pas, ainsi qu'au suivi des mouvements pour l'analyse des tremblements et de la dyskinésie.

Parky s'appuie sur ces autorisations pour vous fournir des informations complètes sur votre activité physique, vos symptômes et votre observance médicamenteuse.


1

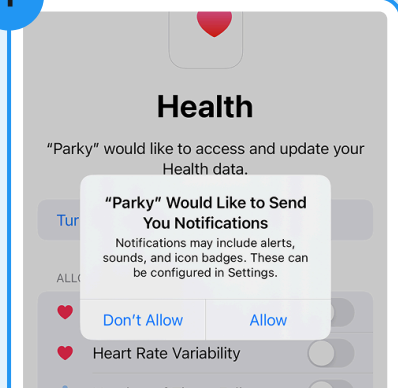

### Accès aux notifications

Cette autorisation vous permet de recevoir des rappels et des mises à jour de Parky. Sans elle, vous ne recevrez pas de notifications pour les horaires de médication et les mises à


2

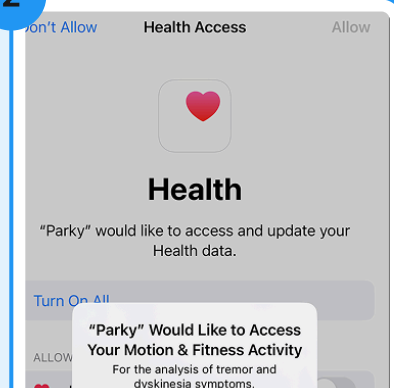

### Accès aux données de mouvement

L'octroi de cette autorisation permet à Parky de suivre vos mouvements, ce qui est essentiel pour surveiller des symptômes tels que les

3

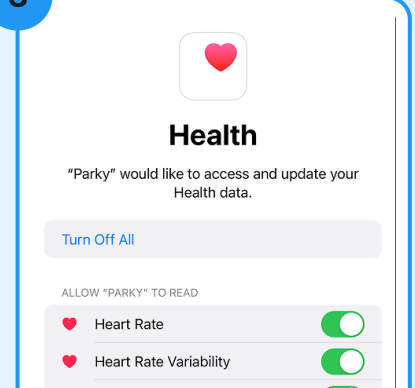


### Accès aux données de santé

En autorisant l'accès à vos données Santé, Parky peut fournir des informations sur vos niveaux d'activité physique.



## Intégration

Vous commencerez par un processus d'intégration qui couvre l'utilisation de Parky, des informations de sécurité importantes et la manière dont nous protégeons vos données.

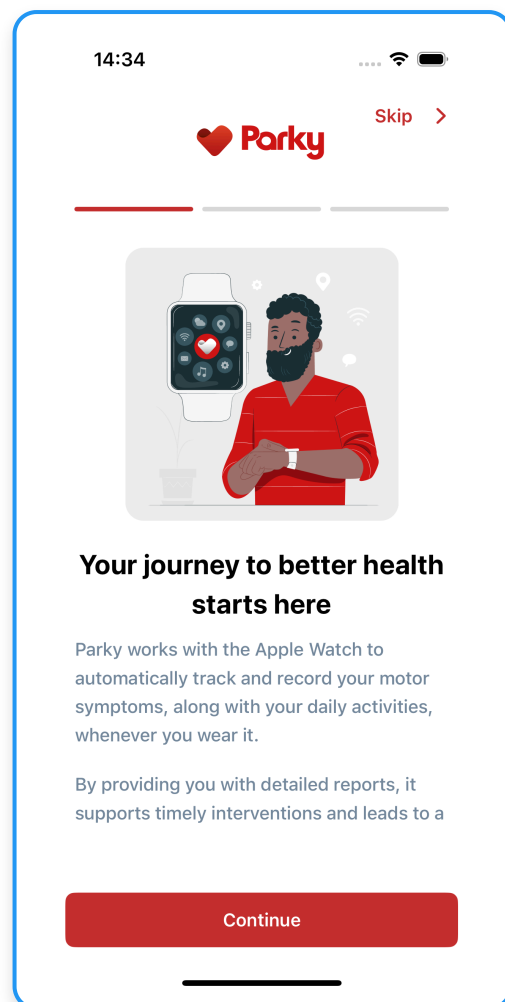

## Connexion

Lors de l'intégration, vous saisissez votre numéro de mobile et recevrez un code de vérification par message texte.

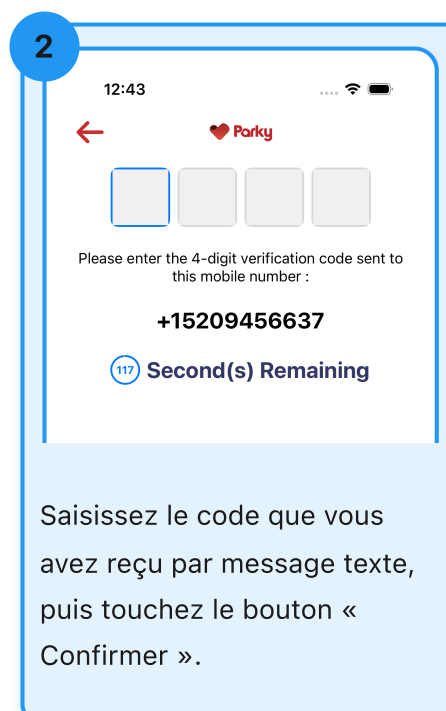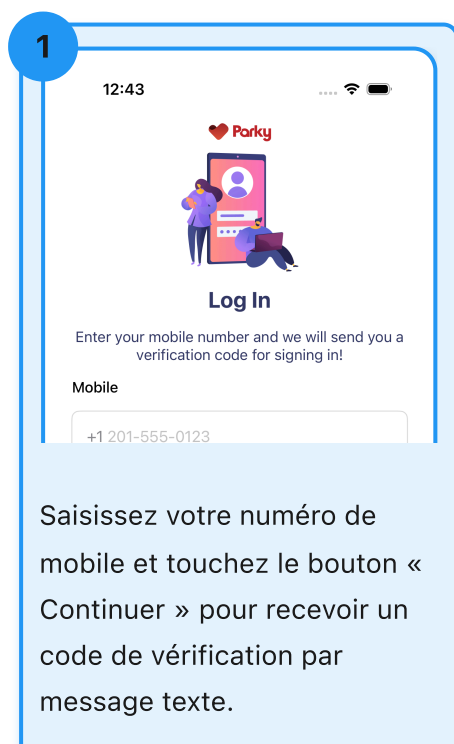

## Configurer les complications du cadran de la montre

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter Parky aux complications du cadran de la montre. Parky ne peut surveiller les symptômes moteurs que lorsque les complications du cadran de la montre sont ajoutées.

1



Touchez l'écran et maintenez appuyé.

2




Touchez « Modifier ».

3



Balayez vers la gauche jusqu'à ce que le titre « Complications » apparaisse et sélectionnez un emplacement.

4

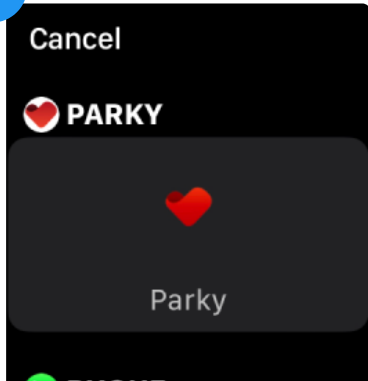

Faites défiler jusqu'à ce que « Parky » apparaisse, puis touchez.

5




Terminé ! Complication Parky ajoutée.

## Activer les alertes haptiques


Suivez les étapes ci-dessous pour activer les alertes haptiques sur votre Apple Watch. Les alertes haptiques fournissent un retour vibratoire pour les notifications Parky.

1

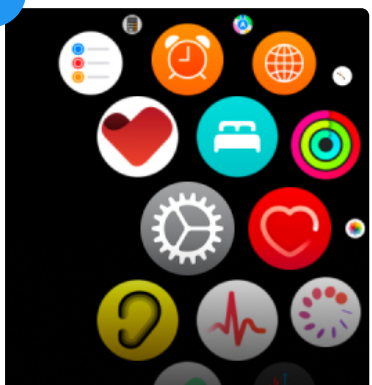


Appuyez sur la couronne de votre Apple Watch pour afficher l'écran d'accueil.

2

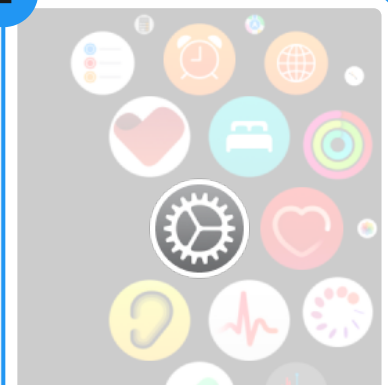


Touchez « Réglages » dans le menu des icônes d'applications.

3

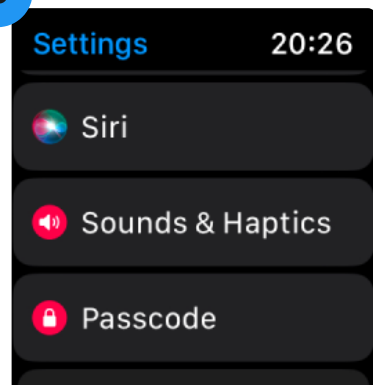


Faites défiler vers le bas et touchez « Sons et vibrations ».

4

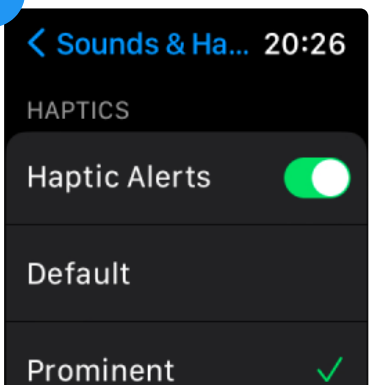

Assurez-vous que « Vibrations marquées » est activé en faisant à nouveau défiler vers le bas.

5

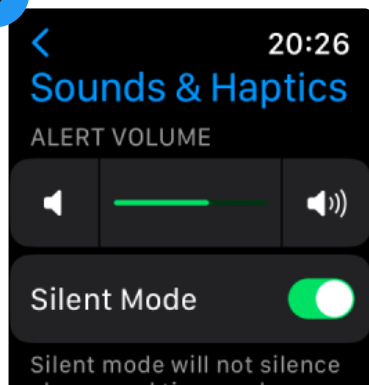

N'oubliez pas que l'activation des vibrations haptiques produira également un son.

Pour des signaux plus discrets, vous pouvez toujours revenir ici et activer le « Mode Silencieux ».

## Utiliser Foggy




Démarrez « Foggy » en touchant le bouton de la complication ou en appuyant sur le bouton à l'intérieur de l'application Parky.




Foggy commence à émettre des signaux dès que vous l'ouvrez. Touchez pour l'arrêter ou laissez-le fonctionner.


## Personnaliser Foggy

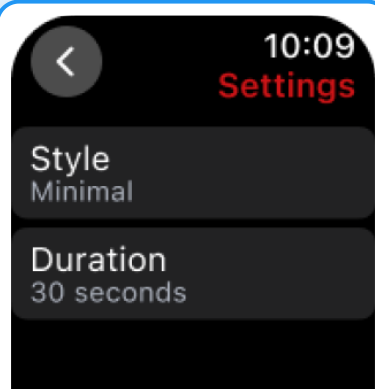

Il existe deux types de réglages : « Style » et « Durée ».

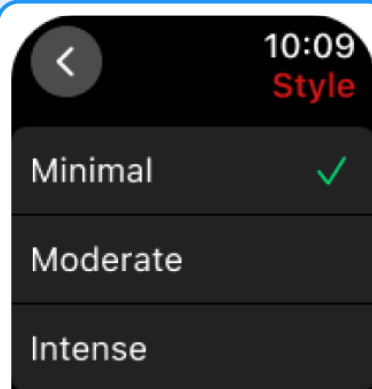


Ajustez votre fréquence de vibration dans le menu « Style ».

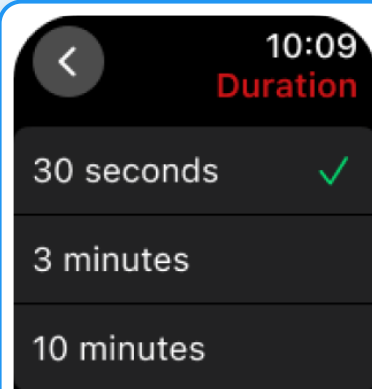

Définissez la durée des signaux de Foggy dans le menu « Durée ».

# À l'intérieur de Parky

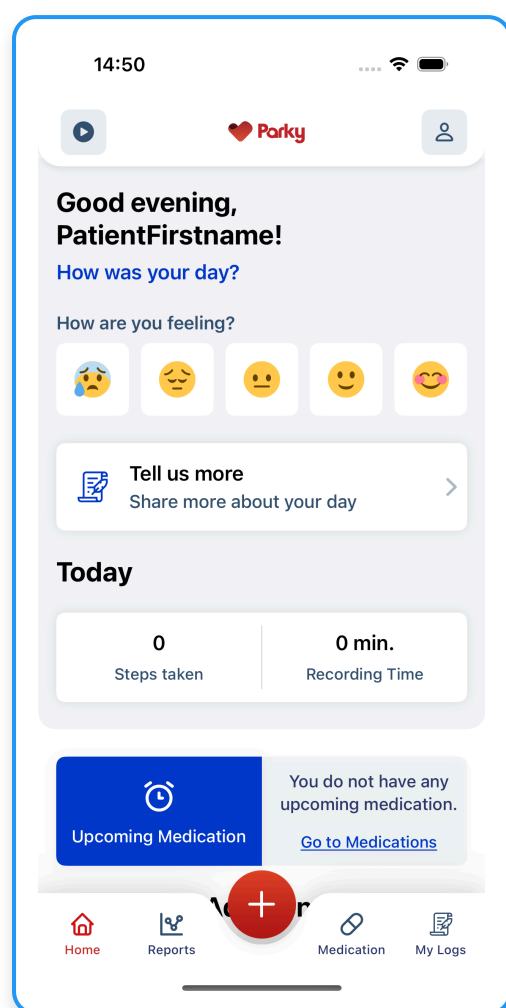

## Écran d'accueil


L'écran d'accueil de Parky offre un tableau de bord convivial où vous trouverez des rappels pour les médicaments à venir, suivez vos pas quotidiens, surveillerez les temps d'enregistrement et consulterez les informations d'observance médicamenteuse hebdomadaires et mensuelles. De plus, vous aurez accès à un espace de ressources pour plus d'informations.


## Accéder aux rapports

Consultez vos rapports de symptômes dans l'onglet « Rapports ».


Les rapports sont affichés quotidiennement par défaut. Sélectionnez le menu des onglets pour consulter les rapports hebdomadaires et mensuels, y compris les dates rétrospectives.

Touchez le bouton d'exportation pour télécharger un rapport spécifique au format PDF à tout moment.

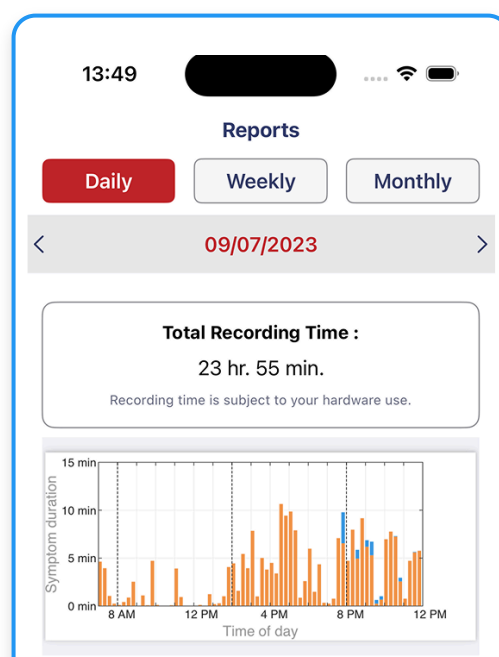

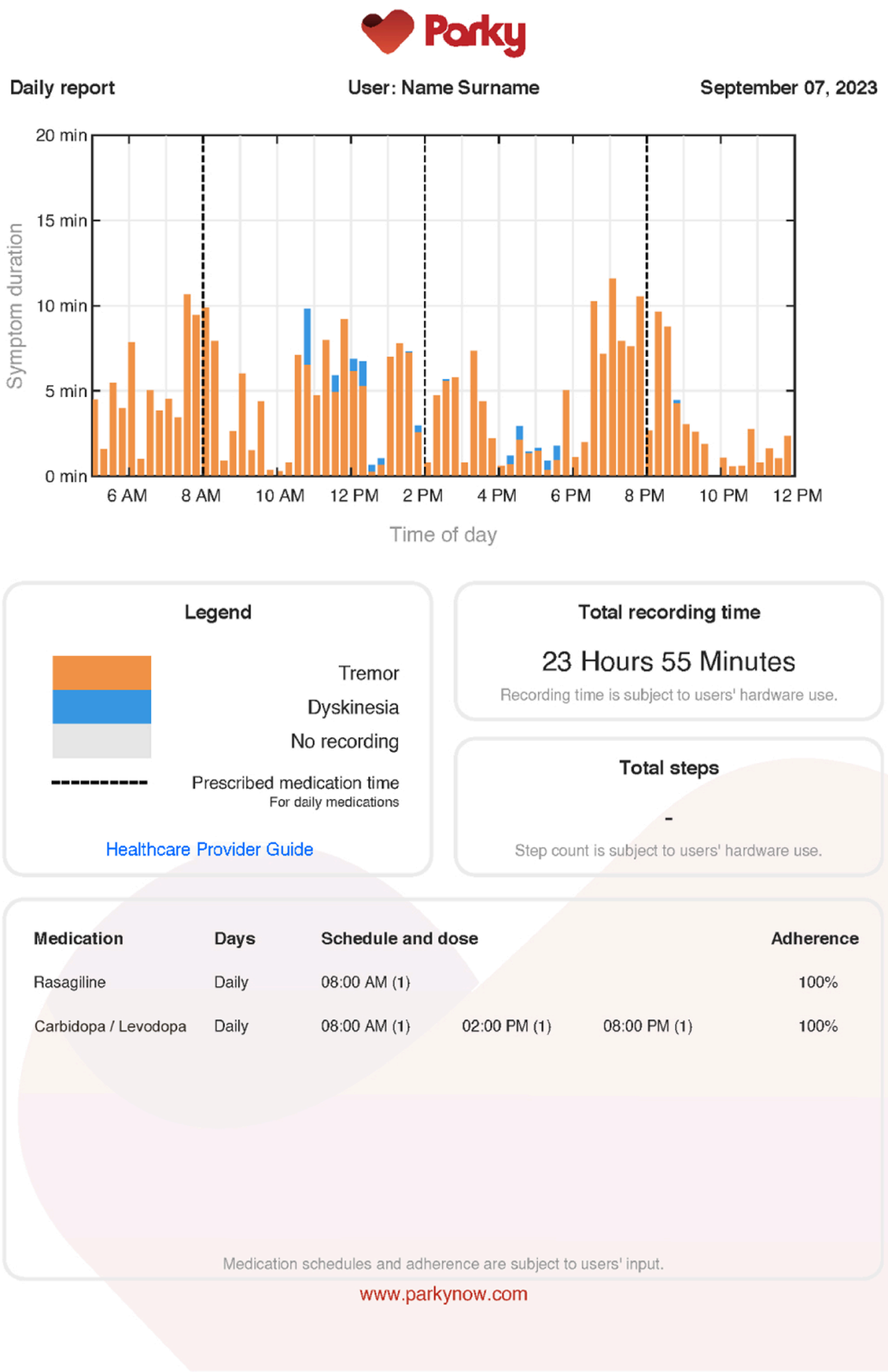


## Consignation

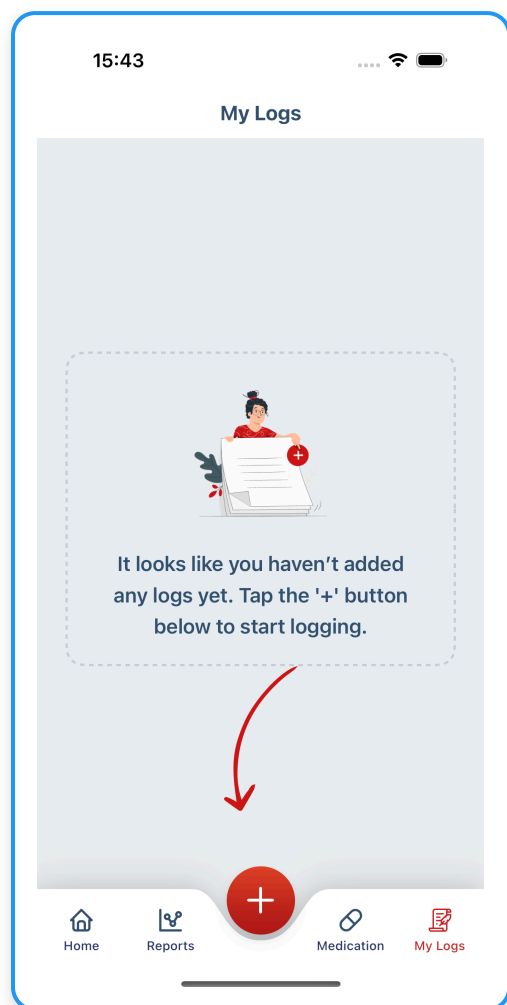

Vous pouvez facilement consigner comment vous vous sentez tout au long de la journée. Cela vous aide à rester en phase avec votre état émotionnel et à mieux comprendre vos humeurs au fil du temps. Commencez dès aujourd'hui à suivre vos schémas émotionnels pour améliorer la connaissance de soi et soutenir des soins personnalisés.


## Ajouter des journaux

Vous pouvez consigner votre humeur, vos périodes ON / OFF, ou un journal personnalisé libre pertinent pour vos soins.

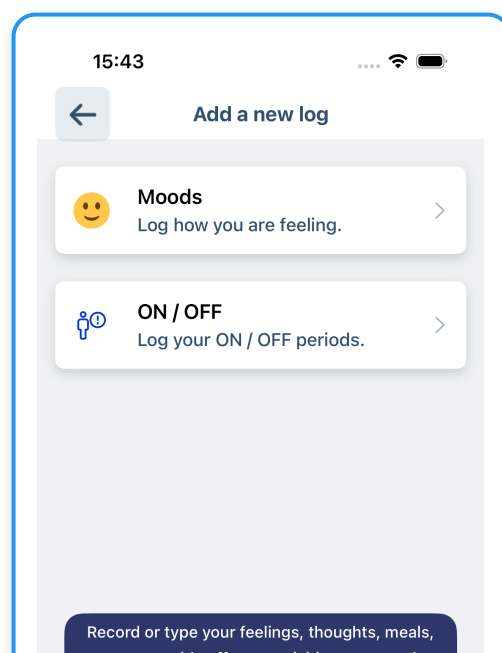

## Humeurs

Vous pouvez consigner votre humeur actuelle tout au long de la journée. Après avoir ajusté l'heure de votre journal, vous pouvez l'enregistrer et le consulter dans l'onglet « Mes journaux ».

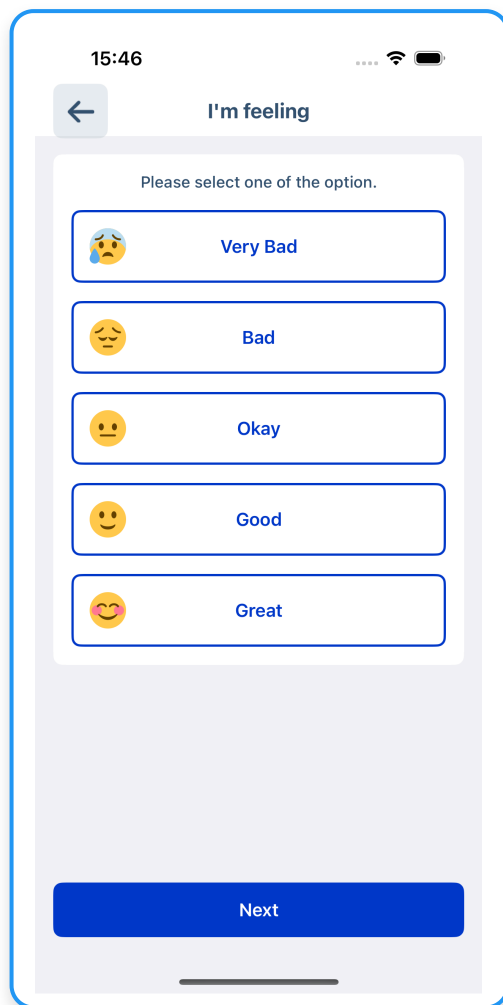

15:46


← I'm feeling

Please select one of the option.

-  Very Bad
-  Bad
-  Okay
-  Good
-  Great

Next

## Périodes ON / OFF

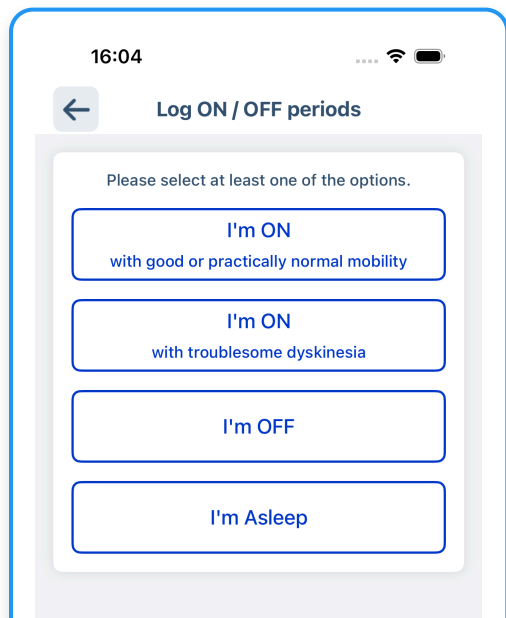

16:04


← Log ON / OFF periods

Please select at least one of the options.

- I'm ON  
with good or practically normal mobility
- I'm ON  
with troublesome dyskinesia
- I'm OFF
- I'm Asleep

Vous pouvez consigner l'option ON / OFF la plus appropriée pour une période. De même, vous pouvez l'enregistrer et le consulter dans l'onglet « Mes journaux ».


## Journal personnalisé avec texte

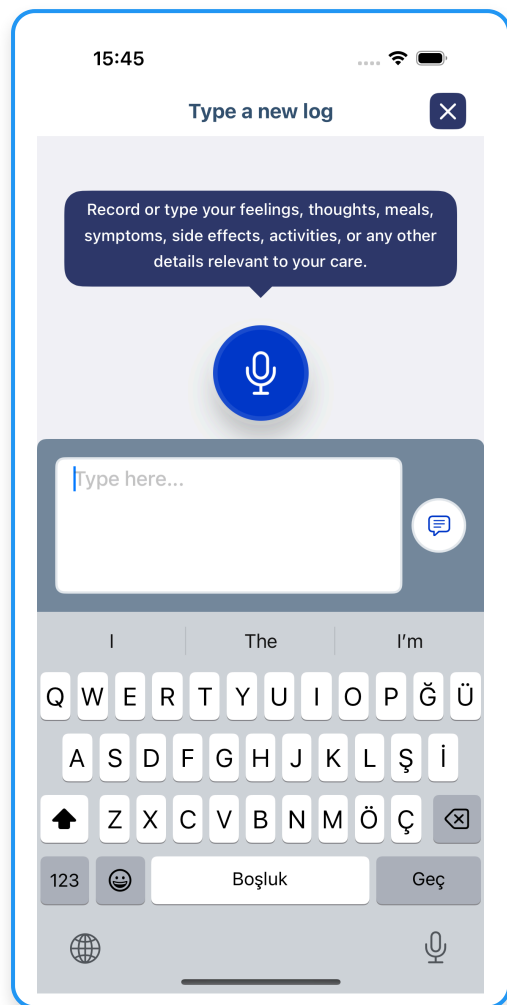


Vous pouvez écrire librement sur vos sentiments, vos pensées, vos repas ou tout détail que vous jugez important de consigner. Les journaux personnalisés peuvent être créés à l'aide d'une saisie textuelle ou vocale.

## Journal personnalisé avec voix


Enregistrez à l'aide de votre voix. Les enregistrements vocaux ont une limite de durée de 120 secondes.

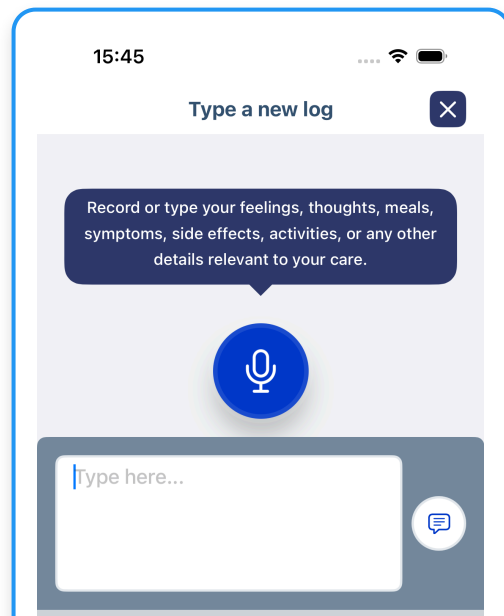


## Mes journaux

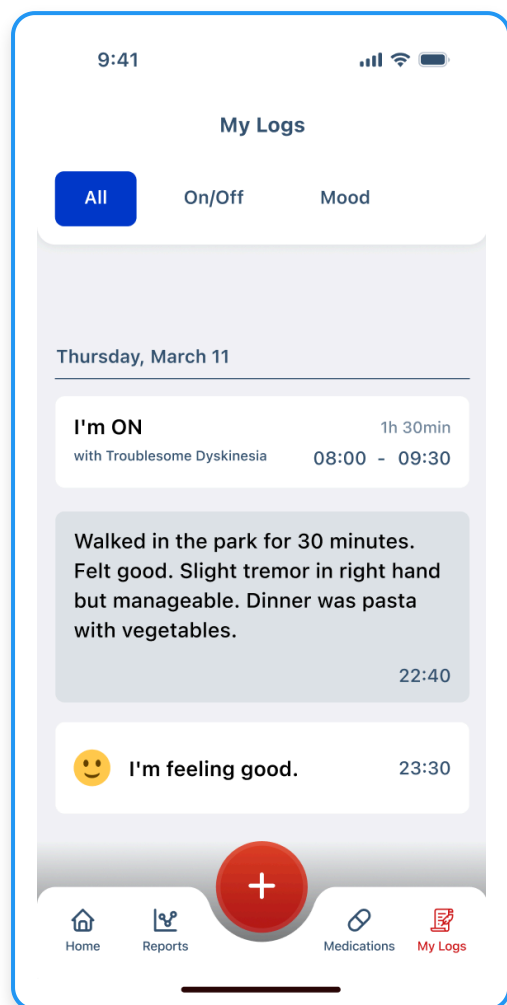


Vous pouvez prévisualiser vos éléments consignés sous forme de fil dans « Mes journaux » dans la navigation. Vous pouvez commencer à ajouter vos journaux en touchant simplement l'icône « + ». Vous pouvez également filtrer l'aperçu de votre fil.

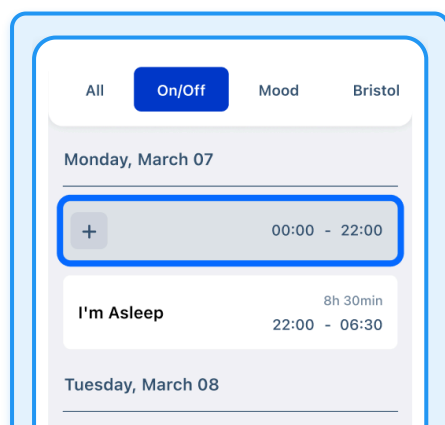

Dans les catégories où la continuité est importante, vous pouvez facilement repérer vos entrées manquantes. Vous pouvez commencer à remplir vos entrées manquantes en les touchant.

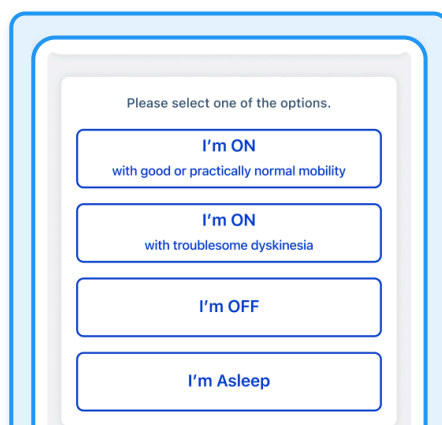


Vous pouvez commencer à remplir vos entrées manquantes en les touchant.

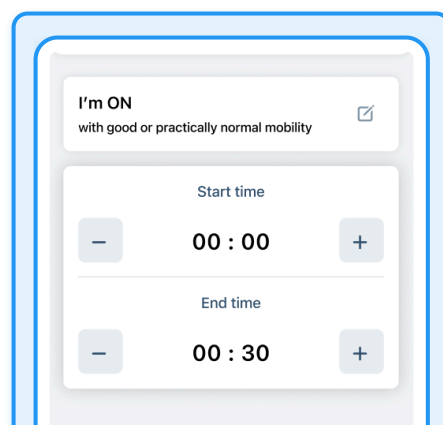


Cela commencera automatiquement au début de votre période d'absence.

## Modifier vos éléments consignés


Commencez par toucher et maintenir appuyé l'élément consigné que vous souhaitez modifier. Vous pouvez modifier ou supprimer vos journaux en les touchant et en maintenant appuyé dessus.

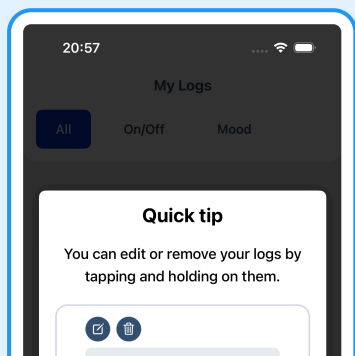


Vous pouvez modifier vos éléments consignés en les touchant et en maintenant appuyé dessus.

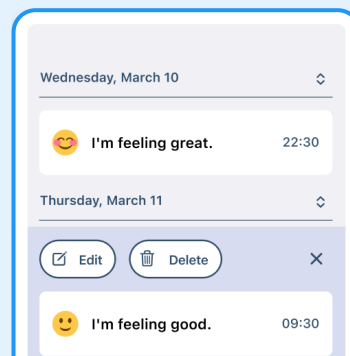

Vous pouvez les modifier ou les supprimer depuis le menu superposé.

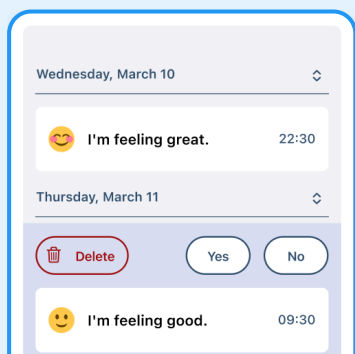

Si vous touchez le bouton « Supprimer », il vous sera demandé de confirmer - le journal sera définitivement supprimé.

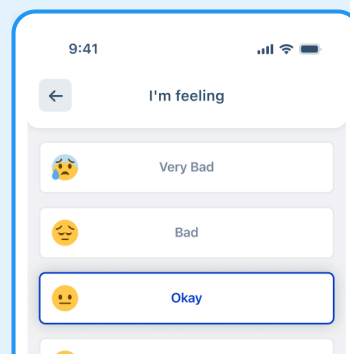


Si vous touchez le bouton « Modifier », vous pouvez changer les détails de votre journal.

## Configurer votre programme de médication

Vous devrez saisir le programme de médication correct pour tirer le meilleur parti de Parky. Si votre plan de traitement change, vous pouvez modifier ou supprimer votre programme de médication à tout moment.


Commencez par toucher « Médicaments » dans le menu inférieur.

**1**

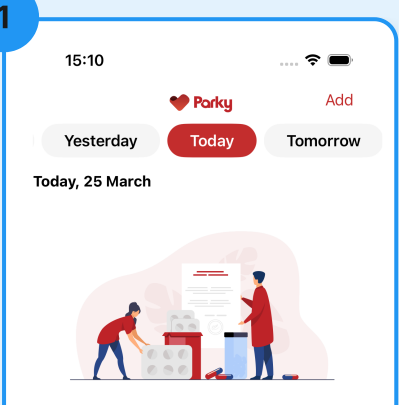


Touchez « Ajouter un médicament » pour commencer à ajouter vos prescriptions, une à la fois.

**2**

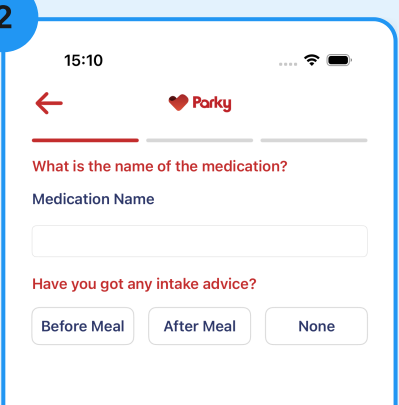


Vous serez invité à saisir le nom du médicament et les conseils de prise.

**3**

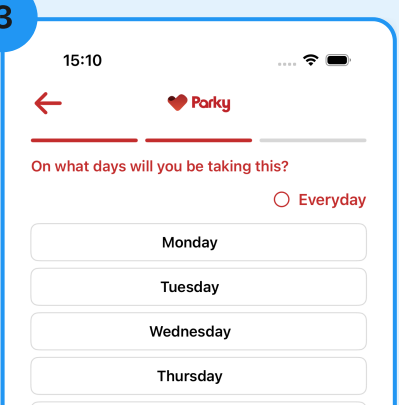


Choisissez les jours où vous prendrez votre médicament.

**4**

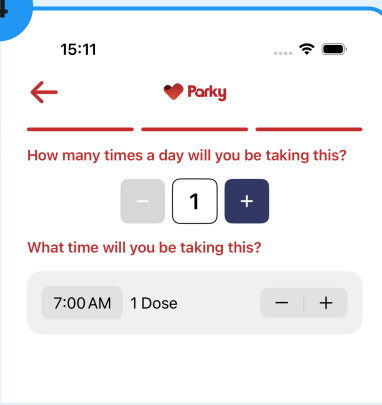

Saisissez les heures et les doses du médicament.


**5**

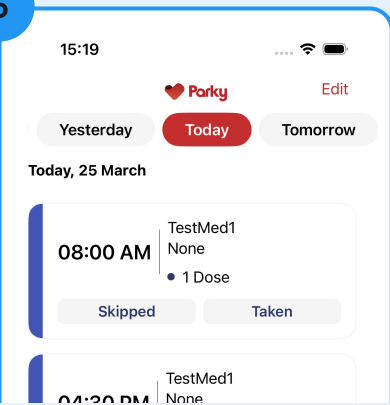

Touchez le bouton « Modifier le médicament » pour modifier ou supprimer votre médicament.


## Utiliser les rappels de médicaments

- Vous recevrez des notifications de rappel en fonction des jours et heures définis dans votre programme de médication.
- Vous pouvez marquer votre médicament comme « Pris » ou « Ignoré » sur votre iPhone ou votre Apple Watch.
- Si vous omettez de répondre à une notification, vous pouvez toujours répondre plus tard via l'onglet « Médicaments ».
- Pour garantir l'exactitude de vos informations d'observance médicamenteuse, répondez aux rappels de médicaments rapidement et correctement.

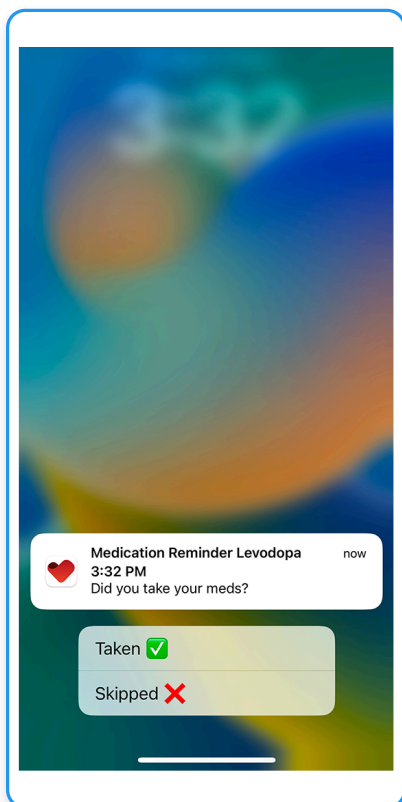

Vous pouvez répondre aux rappels par « Pris » ou « Ignoré » sur votre iPhone ou votre Apple Watch.

Répondez aux rappels par « Pris » ou « Ignoré ».

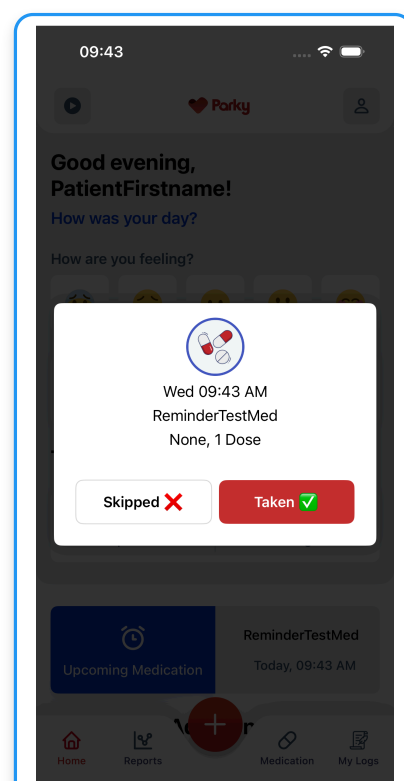


## Écran de profil

Vous pouvez consulter votre statut, vos informations personnelles et votre fuseau horaire dans l'onglet « Profil ».

Vous pouvez nous contacter pour obtenir de l'aide ou trouver des solutions aux problèmes courants dans les sections « Nous contacter » et « Support et dépannage ».

Ne manquez pas notre « Centre de connaissances » dans le même onglet, où vous trouverez des informations importantes sur Parky, comment protéger vos données, des exemples de rapports, ainsi que nos conditions générales et notre politique de confidentialité.

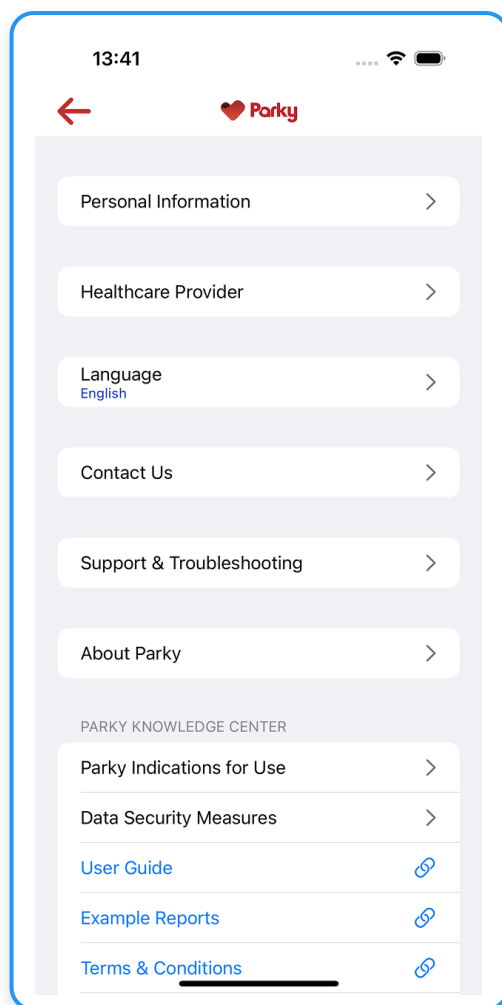


## Ajouter un professionnel de santé

Vous pouvez choisir de désigner un professionnel de santé en partageant ses informations professionnelles via l'application Parky.

Une fois désigné, le professionnel de santé se verra accorder l'accès à l'ensemble de vos dossiers de santé via le Parky Provider Portal.


Vous pouvez retirer le professionnel de santé désigné à tout moment, ce qui l'empêchera d'accéder aux données passées et futures.

**1**

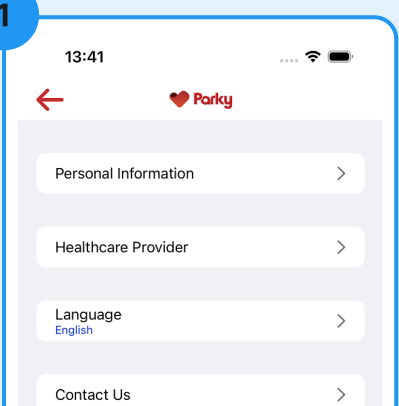


Touchez « Professionnel de santé » depuis le Profil

**2**

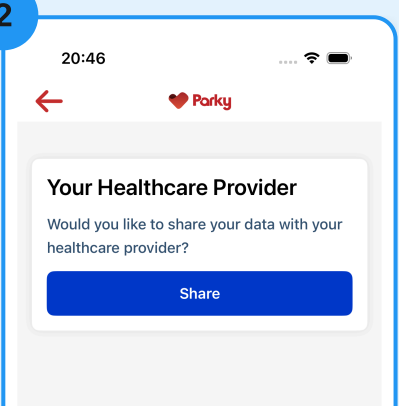


Touchez « Partager »

**3**

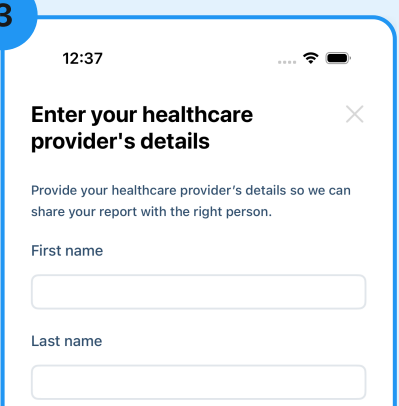


Saisissez les coordonnées de votre professionnel de santé

**4**

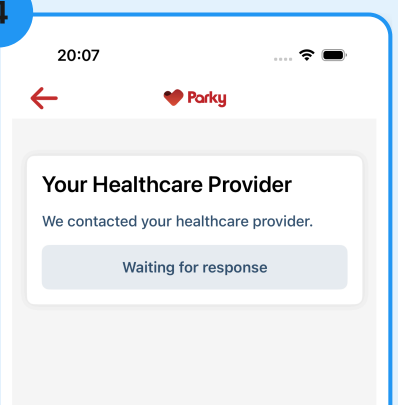


Votre professionnel de santé doit accepter l'invitation

**5**

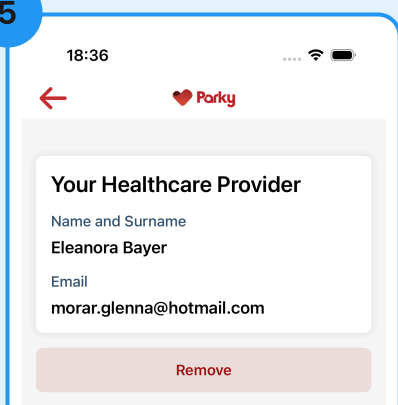

Votre professionnel de santé peut désormais consulter vos données

## AVERTISSEMENT IMPORTANT DANS L'APPLICATION

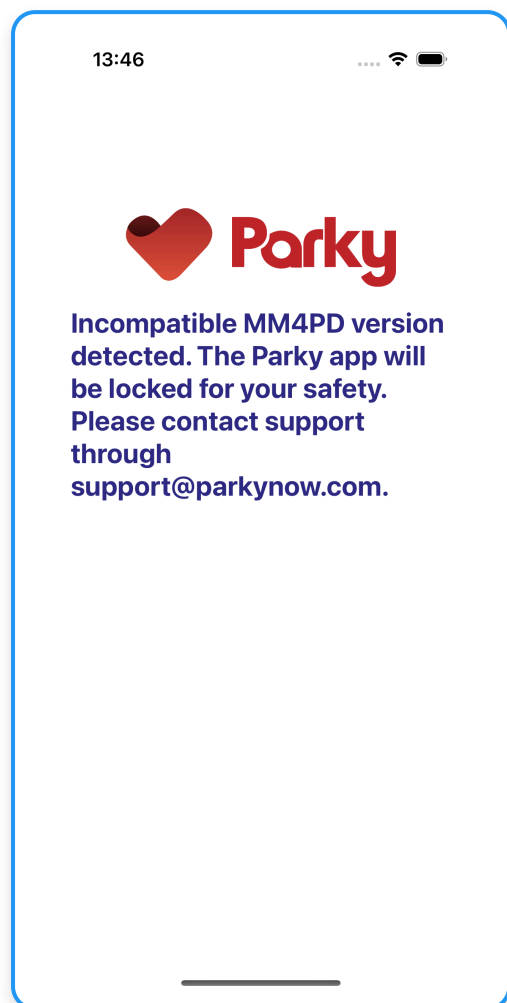

Lors de l'initialisation, Parky effectue un processus de vérification de tout changement de version de MM4PD et confirme la compatibilité de l'appareil afin de garantir le fonctionnement sûr et efficace de ses fonctions.

Si un écran d'erreur, tel qu'affiché à gauche dans l'application Parky, apparaît, cela signifie que Parky est incompatible avec l'appareil, le système d'exploitation ou la version logicielle actuels.

## Configuration matérielle et logicielle requise

Parky est pris en charge sur :

- Les appareils Apple Watch Series 4 (ou plus récents) avec watchOS 10+
- Les appareils iPhone XS (ou plus récents) avec iOS 17+

## Interprétation clinique des rapports

1. Chaque rapport comprend les symptômes de fluctuation motrice, le temps d'enregistrement et le nombre de pas comptés. Si l'utilisateur se connecte au plan de médication et fournit des informations sur la prise des médicaments, l'observance peut également être visualisée.
2. Dans le rapport de symptômes, l'axe des x indique le temps et l'axe des y indique la durée des symptômes.
3. La légende pour le tremblement, la dyskinésie, les temps sans enregistrement et les heures de prise prescrites est indiquée sous le graphique.
4. Les symptômes sont collectés et mesurés tout au long du temps d'enregistrement et sont présentés dans le graphique à des intervalles de 15 minutes.
5. Les symptômes rapportés correspondent aux durées moyennes des symptômes de dyskinésie et de tremblement.
6. Les rapports excluent les données peu susceptibles de représenter un quelconque symptôme moteur. Un diagramme à barres vide est attendu pour un utilisateur asymptomatique ou un utilisateur ne disposant d'aucun enregistrement.
7. Le temps d'enregistrement indique la durée totale pendant laquelle l'utilisateur a utilisé correctement l'appareil et durant laquelle il n'y a eu aucun problème technique concernant la surveillance des symptômes. Veuillez vous référer à la section « Limitations ».
8. Sans temps d'enregistrement suffisants, aucun rapport ne sera généré, comme indiqué ci-dessus.
9. Les lignes en pointillés indiquent les heures de prise de médicaments programmées.
10. Les informations d'observance médicamenteuse indiquent le nombre de médicaments « pris » par rapport au nombre de médicaments programmés pour un intervalle de temps donné (hebdomadaire pour les sept derniers jours ou mensuel pour les 30 derniers jours). Les médicaments « pris » sont calculés sur la base des saisies de l'utilisateur.
11. Les informations sur le nombre de pas indiquent la mobilité de l'utilisateur et sont présentées comme le total au sein d'un intervalle de temps donné (quotidien, hebdomadaire ou mensuel).

## L'UTILISATION DES DONNÉES COLLECTÉES

La surveillance à distance des symptômes de tremblement et de dyskinésie offre au professionnel de santé une vue objective des symptômes moteurs de la maladie de Parkinson de l'utilisateur en dehors de la clinique. Lorsqu'il est évalué avec les symptômes non moteurs, les observations de l'utilisateur et les constatations des visites en clinique, Parky soutient la prise en charge du patient.

## INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. Les utilisateurs doivent porter l'Apple Watch sur leur bras le plus affecté en permanence.
2. Il est recommandé de recharger l'Apple Watch pendant les heures d'inactivité de l'utilisateur (de préférence pendant le sommeil nocturne).
3. Parky ne peut pas surveiller les symptômes lorsque l'Apple Watch n'est pas portée, ce qui entraînerait des lacunes dans les données.
4. Sans temps d'enregistrement suffisants, Parky ne pourra pas générer de rapports de symptômes. Veuillez consulter la section « Limitations » pour plus d'informations.
5. L'application Parky ne doit pas être supprimée, ni sur l'iPhone, ni sur l'Apple Watch.
6. Les utilisateurs doivent saisir le programme de médication correct pour garantir la fiabilité des résultats d'observance médicamenteuse. Il est recommandé de configurer le programme de médication dans un environnement clinique si l'utilisateur ou l'aidant ne peut pas le faire seul.
7. Les utilisateurs doivent répondre aux rappels de médicaments de manière rapide et correcte.

# Limitations

## 1. Parky fonctionne selon les contraintes suivantes :

- Parky fonctionne uniquement sur Apple Watch et iPhone à l'aide de l'algorithme MM4PD développé par Apple.
- Parky ne fonctionne pas sur des appareils non pris en charge.
- Il est conseillé d'utiliser Parky pour la maladie de Parkinson idiopathique, et de ne pas l'utiliser pour d'autres syndromes parkinsoniens tels que la paralysie supranucléaire progressive (PSP), l'atrophie multisystématisée (MSA), la démence à corps de Lewy et la dégénérescence corticobasale (CBD).
- L'utilisateur doit porter l'Apple Watch sur le bras le plus affecté.
- Le suivi des symptômes dyskinétiques ne doit être envisagé que pour les utilisateurs présentant une chorée sur le bras affecté, qu'elle soit auto-déclarée ou diagnostiquée par un professionnel de santé.
- Parky suit explicitement le tremblement de repos ; il ne suit pas le tremblement d'action ou le tremblement postural, et il peut ne pas suivre le tremblement des doigts.
- Parky ne suit pas explicitement la dystonie ou la bradykinésie.
- Les résultats peuvent inclure des faux positifs et des faux négatifs. L'activité de l'utilisateur, l'ajustement du bracelet de la montre et les affections concomitantes (telles que le syndrome des jambes sans repos et le tremblement non parkinsonien) peuvent affecter la qualité des résultats.
- Parky mesure explicitement uniquement les symptômes au niveau du poignet pendant le port de l'Apple Watch. Cependant, l'Apple Watch peut détecter des symptômes transmis à travers le corps depuis d'autres parties du corps affectées, ce qui peut entraîner des métriques trompeuses ou erronées.

## 2. Parky ne peut pas collecter de données lorsque l'Apple Watch est éteinte et ne peut pas transmettre de données lorsque l'iPhone est éteint.

## Limitations (suite)

3. Sans durées d'enregistrement adéquates, Parky ne pourra pas générer de rapports de symptômes. Les rapports sont générés selon la méthodologie suivante :
  - Des intervalles de quinze minutes, couvrant l'intégralité de la durée de l'enregistrement, sont organisés selon l'heure locale de l'utilisateur.
  - Les intervalles comportant moins de 50 % des données requises sont exclus.
  - Les rapports hebdomadaires et mensuels affichent les durées moyennes des symptômes de tremblement et de dyskinésie de tous les jours disposant de données.
  - Dans les rapports hebdomadaires et mensuels, seuls les intervalles dont les données ont été collectées sur au moins cinq jours ou représentant plus de 20 % de la période totale sont affichés.
4. Les programmes de médication sont soumis à l'exactitude des données saisies par l'utilisateur. Si l'utilisateur rencontre des difficultés à utiliser l'application, il est fortement conseillé de fournir une assistance en milieu clinique.
5. L'exactitude des informations d'observance médicamenteuse repose sur la réponse rapide et précise de l'utilisateur aux notifications de rappel de médicaments. L'absence de réponse ou la fourniture d'interactions inexactes peuvent entraîner des résultats d'observance médicamenteuse incorrects. Pour atténuer ce risque, les professionnels de santé sont fortement encouragés à souligner aux utilisateurs l'importance cruciale de réponses exactes aux rappels.
6. Les informations sur les pas reposent sur une utilisation régulière par l'utilisateur de l'Apple Watch et de l'iPhone. Parky ne peut pas collecter de données de pas si l'utilisateur n'utilise aucun de ces deux appareils.
7. Si les utilisateurs souhaitent cesser définitivement d'utiliser Parky, ils peuvent supprimer définitivement leur compte. Lors de la suppression du compte, l'utilisateur est considéré comme un abandon, et les données de santé et personnelles de l'utilisateur seront définitivement supprimées. L'utilisateur et le professionnel de santé perdront tous deux l'accès aux rapports Parky de l'utilisateur.

# SÉCURITÉ

1. L'utilisation de Parky et de l'Apple Watch n'affecte pas les utilisateurs porteurs d'implants de stimulation cérébrale profonde (DBS).
2. L'Apple Watch est résistante à l'eau mais pas étanche. Elle peut être portée et utilisée pendant l'exercice (l'exposition à la sueur est acceptable), sous la pluie et lors du lavage des mains.
3. Veuillez vous référer au document original du fabricant concernant le manuel d'utilisation et les guides du matériel Apple Watch : <https://help.apple.com/pdf/watch/8/.../apple-watch-user-guide>
4. Guide de l'Apple Watch : <https://support.apple.com/en-us/HT204665>
5. L'Apple Watch est conforme aux normes CEM et électriques suivantes : La sécurité électrique a été évaluée conformément à la norme IEC 62368-1 (2014), « Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements. » L'Apple Watch est conforme aux normes de l'UE EN 301 489-1 (V2.2.20), EN 301 489-3 (V2.1.1), EN 301 489-17 (V3.2.0) et EN 301 489-52 (V1.1.0).

# AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ET PRÉCAUTIONS

- N'utilisez pas l'application Parky à d'autres fins que l'enregistrement des mouvements d'un patient atteint d'un trouble du mouvement.
- L'application Parky est destinée uniquement à compléter les méthodes cliniques existantes. Elle n'est pas destinée à être le seul ou principal moyen d'évaluation clinique.
- h2o therapeutics ne recommande pas l'utilisation de l'application Parky pour les patients qui n'ont pas la capacité d'interagir avec l'application Parky sur iOS ou watchOS.
- Les constatations non motrices, les observations du patient et les visites en clinique doivent toujours être impliquées dans la prise de décision.
- Il est fortement conseillé de comparer les résultats de Parky avec les constatations cliniques et les observations rapportées par le patient.
- Lors de la première utilisation, afin de vérifier la cohérence du flux de données, il est recommandé d'observer attentivement les résultats du patient pendant 3 à 5 jours par patient. Cette période permettrait également de détecter d'éventuels problèmes techniques.
- Il convient de conseiller aux patients de porter l'Apple Watch sur le bras le plus affecté.
- Les patients ou les aidants sont encouragés à saisir le programme de médication. Si le patient est incapable de le faire de manière autonome ou avec l'aide de ses aidants, il est recommandé aux professionnels de santé de proposer une assistance en milieu clinique.
- Les patients ne doivent pas auto-évaluer la progression de leur maladie uniquement à partir des données de l'application Parky.
- En cas de défaillance de l'application Parky, les patients doivent prendre leurs médicaments tels que prescrits.
- L'application Parky n'implique aucune évaluation des médicaments.

# SÉCURITÉ DES DONNÉES

1. Parky collecte des données de mouvement uniquement lorsque l'utilisateur porte une Apple Watch.
2. Outre les données de mouvement, Parky ne collecte pas les activités mobiles et téléphoniques, ni les données d'utilisation de l'écran ou des applications.
3. Les données de l'utilisateur ne peuvent être partagées qu'avec le professionnel de santé pour lequel l'utilisateur ou l'aidant a donné son consentement, et ne peuvent être partagées qu'avec un seul professionnel de santé à la fois.
4. Les données de l'utilisateur, y compris les informations personnellement identifiables, sont stockées sur des serveurs conformes à la norme HIPAA utilisant la norme de chiffrement avancée (AES256). Les données de l'utilisateur ne sont jamais partagées avec un tiers, à l'exception du professionnel de santé autorisé.
5. Il est conseillé d'installer un logiciel de sécurité mobile pour garantir davantage la sécurité de l'appareil.

# ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

1. Si les rapports de symptômes de l'utilisateur ne correspondent pas aux attentes du professionnel de santé, cessez immédiatement d'utiliser Parky pendant la pratique clinique.
2. En cas de soupçon d'erreurs de calcul, de problèmes techniques ou d'autres événements, veuillez contacter [support@parkynow.com](mailto:support@parkynow.com)


**h2o Therapeutics**  
 Mustafa Kemal Mah. 2131 Cad. No:15  
 06510 Çankaya / Ankara / Türkiye

  
 2292

MD

UDI



(01) 8685063631006  
 (10) P1/1.6.1  
 (11) 20260710



[www.parkynow.com](http://www.parkynow.com)