



Dobro došli u

PARKY KORISNIČKI VODIČ

v1.6.1

IZJAVA O INDIKACIJAMA ZA UPORABU

Aplikacija Parky namijenjena je kvantificiranju kinematike simptoma poremećaja pokreta, uključujući tremor i diskineziju, kod odraslih osoba (u dobi od 45 godina ili starijih) s blagom do umjerenom Parkinsonovom bolešću.

SADRŽAJ

Početak rada	3
Postavke pametnog sata	7
Unutar Parkyja	10
Zahtjevi	21
Klinička interpretacija	22
Opće upute	23
Ograničenja	24
Sigurnost	26
Opća upozorenja	27
Sigurnost podataka	28

Upoznajte Parky

Parky je alat za daljinski nadzor osmišljen za kontinuiranu, objektivnu procjenu motoričkih simptoma Parkinsonove bolesti, poput tremora i diskinezije. Kvantificira podatke senzora pokreta putem Apple Watcha i pruža izvješća o profilu simptoma u stvarnom vremenu, podržavajući upravljanje pacijentima.

Parky koristi klinički validirani algoritam Motor Fluctuations Monitor for Parkinson's Disease (MM4PD) koji je razvio Apple Inc. (Powers et al., 2021¹)

Za izvješće o kliničkom ispitivanju posjetite <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536284/>

Kome je Parky namijenjen?

- Parky je namijenjen isključivo korisnicima s klinički dijagnosticiranom idiopatskom Parkinsonovom bolešću koji su dovoljno sposobni za korištenje Apple Watcha i iPhonea.
- Parky najbolje funkcionira za osobe koje primarno doživljavaju simptome tremora i diskinezije.
- Parky nije osmišljen za procjenu parkinsonskih sindroma kao što su multisistemska atrofija (MSA), progresivna supranuklearna paraliza (PSP), kortikobazalna degeneracija (CBD) ili demencija s Lewyjevim tjelešcima.

¹ Powers R, Etezadi-Amoli M, Arnold EM, Kianian S, Mance I, Gibiansky M, Trietsch D, Alvarado AS, Kretlow JD, Herrington TM, Brillman S, Huang N, Lin PT, Pham HA, Ullal AV. Smartwatch inertial sensors continuously monitor real-world motor fluctuations in Parkinson's disease. Sci Transl Med. 2021 Feb 3;13(579):eabd7865. doi: 10.1126/scitranslmed.abd7865. PMID: 33536284.

Brzi pregled Parkyja

Inovativan nadzor i procjena

Parky pruža vrijedne uvide otkrivanjem tremora i diskinezije u različitim stadijima bolesti. Prikuplja precizne, cjelodnevne podatke o motoričkim simptomima i omogućuje procjene bilo gdje, čak i izvan nadziranih okruženja.

Upravljanje lijekovima i uvidi u simptome

Parky vam pomaže da budete u tijeku sa svojim lijekovima uz praktične podsjetnike na iPhoneu i Apple Watchu te kombinira izvješća o simptomima s podacima o uzimanju lijekova. Ova kombinacija pruža jasne, objektivne uvide, pomažući zdravstvenim djelatnicima u otkrivanju svih promjena u simptomima, čime se poboljšavaju planovi liječenja.

Osnaživanje putem tehnologije

Parky integrira nosive senzore kako bi vam ponudio pouzdanu alternativu pacijentovim dnevnicima, rješavajući subjektivnu prirodu samoprocjene i sprječavajući nedostatke podataka koji se često javljaju pri vođenju dnevnika. Ova integracija nudi kontinuirano, pasivno praćenje, osiguravajući besprijekoran nadzor vašeg zdravlja.

Praćenje aktivnosti i podrška pokretljivosti

Parky ne nadzire samo vaše motoričke simptome; također prati vaše dnevne korake, nudeći uvid u razine vaše tjelesne aktivnosti.

Početak rada s Parkyjem



Skenirajte QR kôd kamerom svog iPhonea i slijedite skočni prozor kako biste preuzeli Parky iz App Storea.

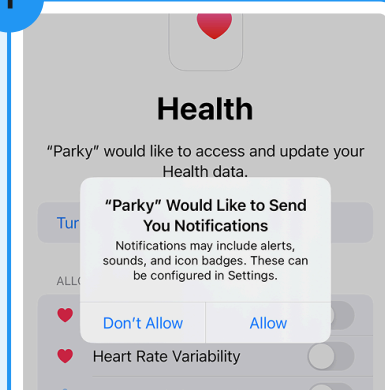
Preporučujemo vam da preuzmete aplikaciju Parky iz App Storea kako biste provjerili kompatibilnost uređaja.

Davanje dopuštenja

Morat ćete dati dopuštenja putem upita prikazanih u nastavku kako bi Parky ispravno funkcionirao. Ova dopuštenja omogućuju Parkyju slanje obavijesti i pristup podacima o koracima, kao i praćenje kretanja za analizu tremora i diskinezije.

Parky se oslanja na ova dopuštenja kako bi vam pružio potpune uvide u vašu tjelesnu aktivnost, simptome i pridržavanje terapije.


1



Pristup obavijestima

Ovo dopuštenje omogućuje vam primanje podsjetnika i ažuriranja od Parkyja. Bez njega nećete dobivati obavijesti o rasporedu uzimanja lijekova i ažuriranjima.

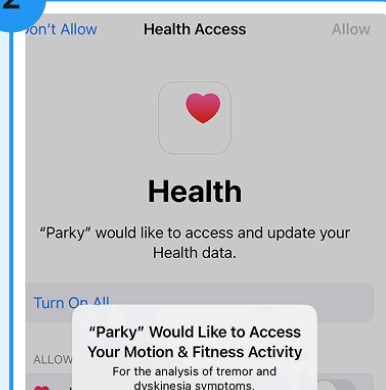
2



Pristup podacima o kretanju

Davanje ovog dopuštenja omogućuje Parkyju praćenje vašeg kretanja, što je ključno za nadzor simptoma poput tremora i diskinezije.

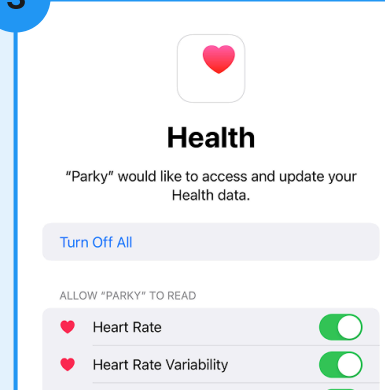3




Pristup zdravstvenim podacima

Dopuštanjem pristupa vašim zdravstvenim podacima, Parky vam može pružiti uvide o razinama vaše tjelesne aktivnosti.



Uvodni postupak

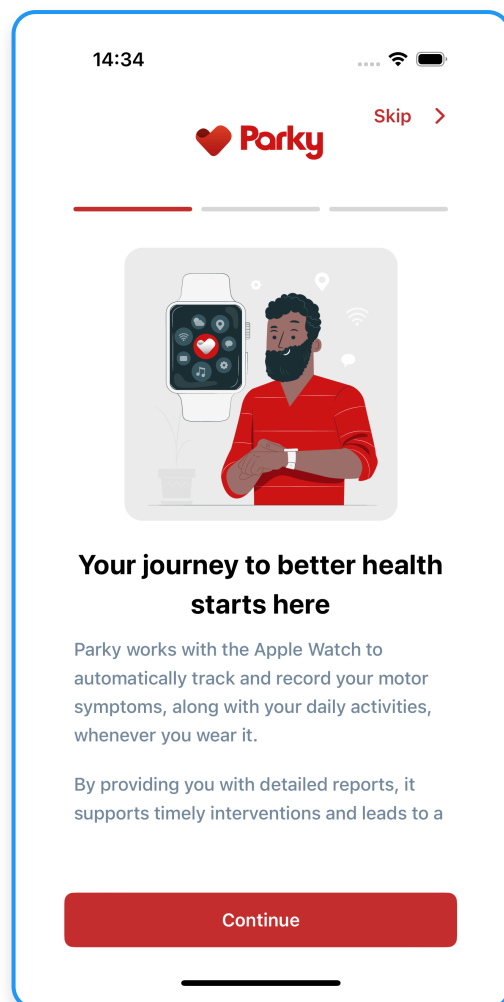Započet ćete uvodnim postupkom koji obuhvaća kako koristiti Parky, važne sigurnosne informacije i kako štitimo vaše podatke.



Prijava

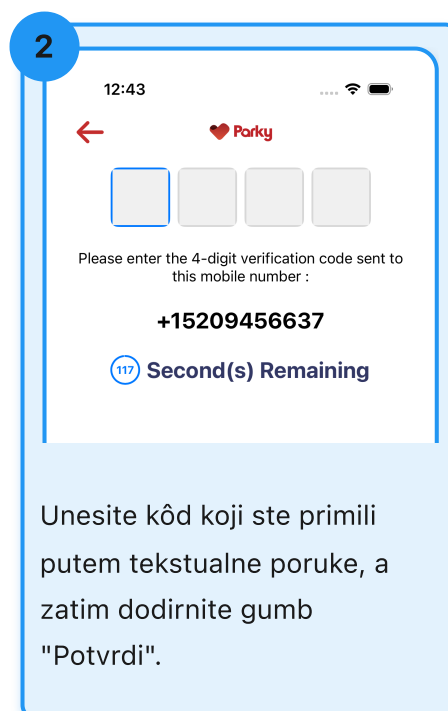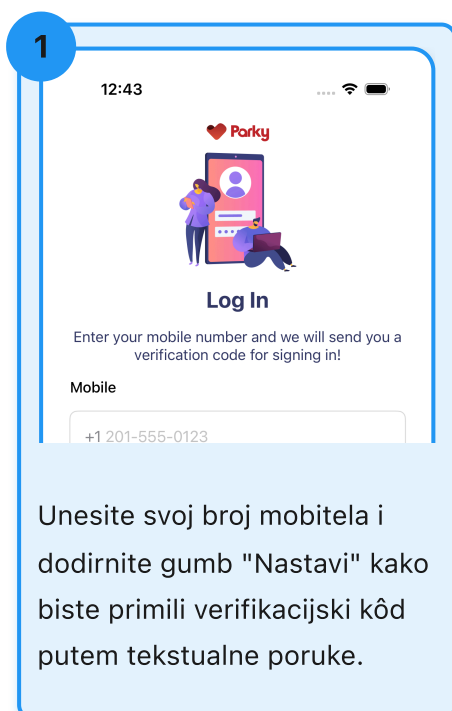Nakon uvodnog postupka unijet ćete svoj broj mobitela i primiti verifikacijski kôd putem tekstualne poruke.



Postavljanje komplikacija na brojačniku sata

Slijedite korake u nastavku kako biste dodali Parky u komplikacije brojačnika sata. Parky može nadzirati motoričke simptome samo kada su dodane komplikacije brojačnika sata.

1



Dodirnite i zadržite na zaslonu.

2



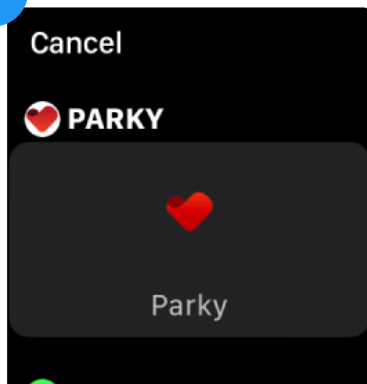
Dodirnite "Uredi".

3



Povlačite ulijevo dok se ne pojavi naslov "Komplikacije" i odaberite bilo koje mjesto.

4



Pomičite dok se ne pojavi "Parky", a zatim dodirnite.

5

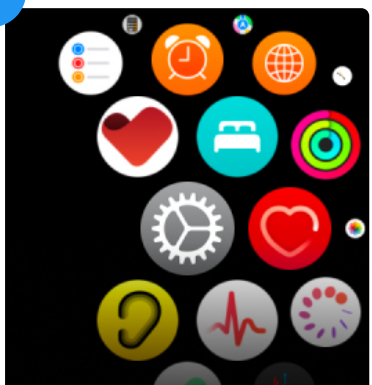


Gotovo! Parky komplikacija dodana.

Omogućavanje haptičkih upozorenja


Slijedite korake u nastavku kako biste omogućili haptička upozorenja na svom Apple Watchu. Haptička upozorenja pružaju vibracijsku povratnu informaciju za Parky obavijesti.

1




Pritisnite Digital Crown svog Apple Watcha kako biste vidjeli početni zaslon.

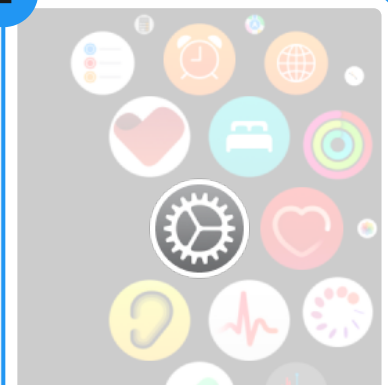2




Dodirnite "Postavke" iz izbornika ikona aplikacija.

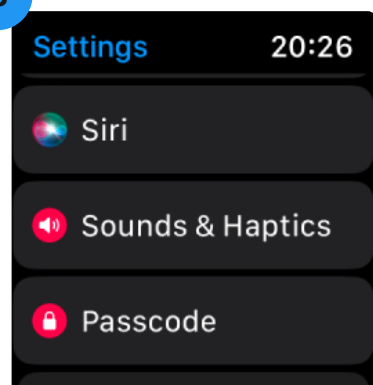3




Pomaknite se prema dolje i dodirnite "Zvukovi i haptika".

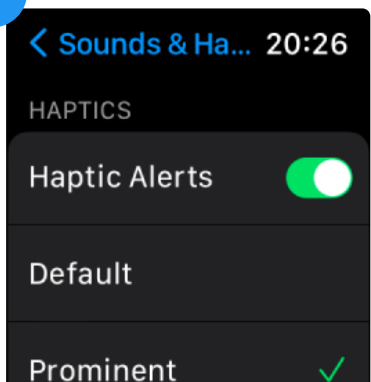4



Ponovnim pomicanjem prema dolje provjerite jesu li "Haptička upozorenja" uključena.

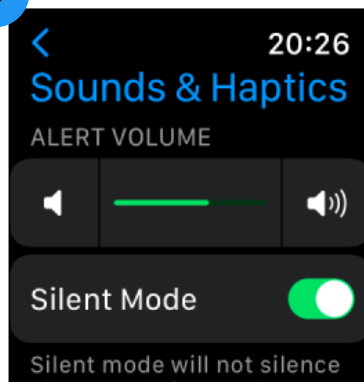5



Imajte na umu da će omogućavanje haptičkih vibracija također proizvesti zvuk.

Za suptilnije znakove uvijek se možete vratiti ovamo i uključiti "Tihi način".

Korištenje Foggyja

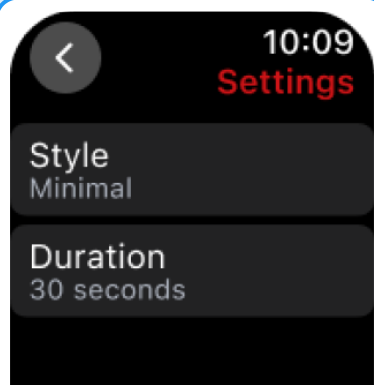


Pokrenite "Foggy" dodirom na gumb komplikacije ili pritiskom na gumb unutar aplikacije Parky.




Foggy započinje davati znakove čim ga otvorite. Dodirnite za zaustavljanje ili ga pustite da radi.


Prilagodba Foggyja



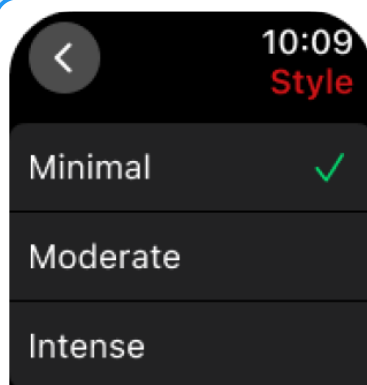Postoje dvije vrste postavki: "Stil" i "Trajanje".




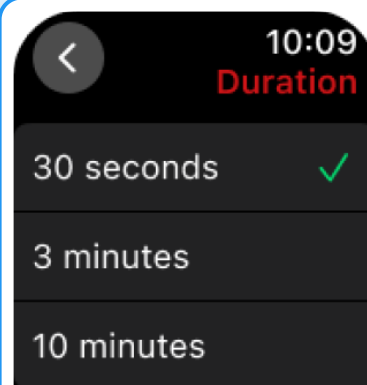Prilagodite frekvenciju vibracija u izborniku "Stil".



Postavite trajanje znakova za Foggy u izborniku "Trajanje".

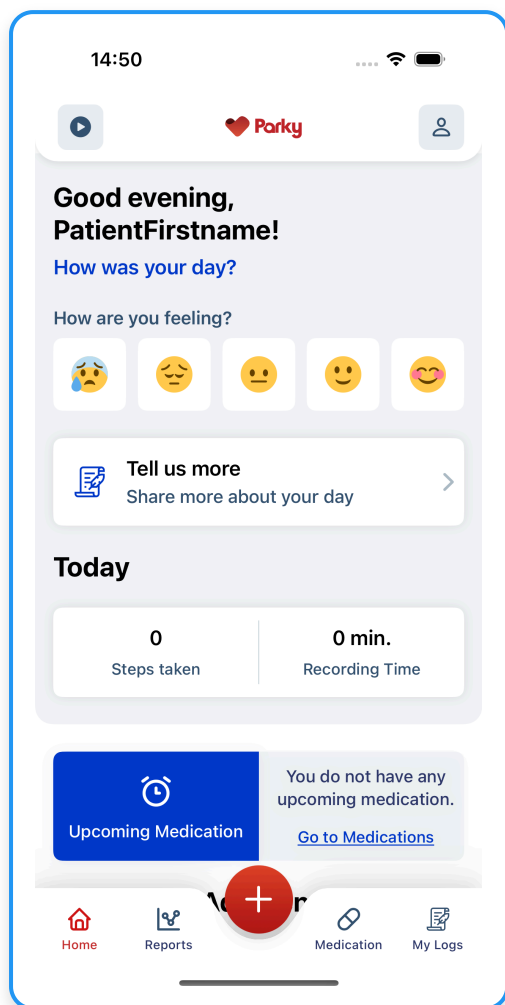Unutar Parkyja



Početni zaslon

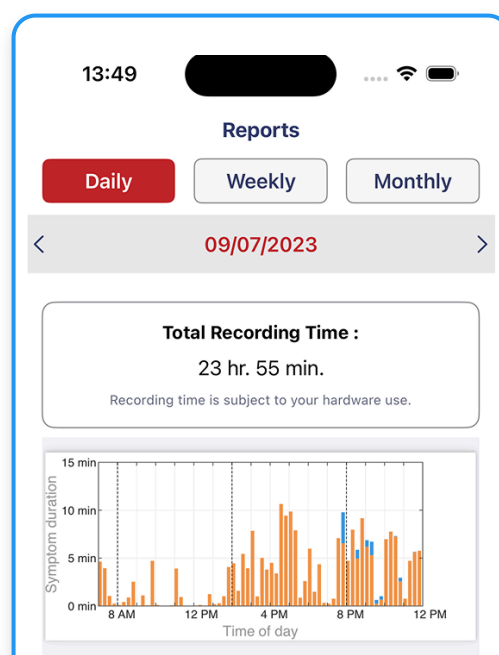
Početni zaslon Parkyja nudi nadzornu ploču jednostavnu za korištenje na kojoj ćete pronaći podsjetnike za nadolazeće lijekove, pratiti svoje dnevne korake, nadzirati vremena snimanja te pregledavati tjedne i mjesečne informacije o pridržavanju terapije. Osim toga, imat ćete pristup središtu resursa za dodatne informacije.

Pristup izvješćima

Pregledajte svoja izvješća o simptomima na kartici "Izvješća".

Izvješća se prema zadanim postavkama prikazuju dnevno. Odaberite izbornik kartica za pregled tjednih i mjesečnih izvješća, uključujući retrospektivne datume.

Dodirnite gumb za izvoz kako biste u bilo kojem trenutku preuzeli određeno izvješće kao PDF.






Daily report

User: Name Surname

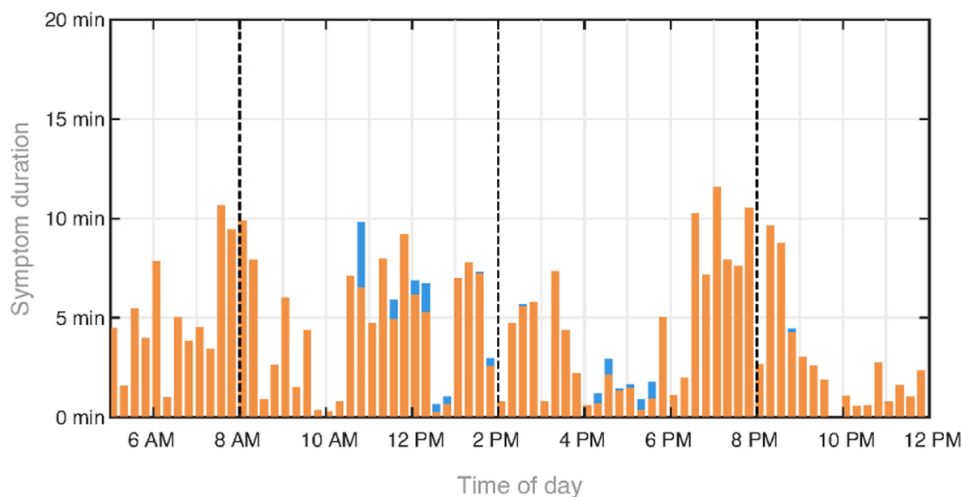September 07, 2023



Total recording time

23 Hours 55 Minutes

Recording time is subject to users' hardware use.

Total steps

-

Step count is subject to users' hardware use.


Medication	Days	Schedule and dose	Adherence
Rasagiline	Daily	08:00 AM (1)	100%
Carbidopa / Levodopa	Daily	08:00 AM (1) 02:00 PM (1) 08:00 PM (1)	100%

Medication schedules and adherence are subject to users' input.

www.parkynow.com

Ova će izvješća biti dostupna zdravstvenom djelatniku kojeg ste pozvali putem aplikacije Parky, čim prihvati vaš poziv. Djelatnik može pregledavati vaša izvješća putem Parky Provider Portala. Ona uključuju grafikone tremora i diskinezije, podatke o pridržavanju terapije, broj koraka i vremena zapisa za odabrano razdoblje.

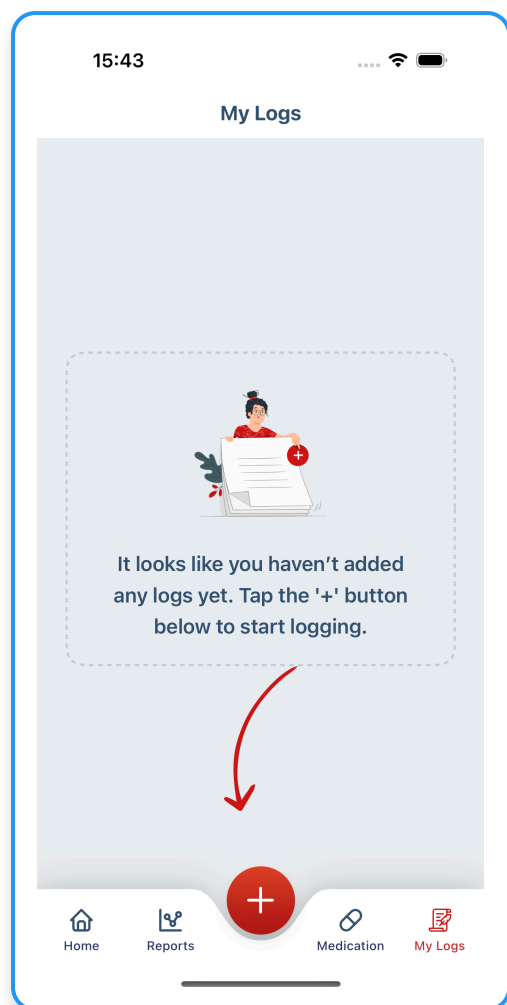
Bilježenje



Tijekom dana možete jednostavno zabilježiti kako se osjećate. Pomaže vam ostati u skladu sa svojim emocionalnim stanjem i izgraditi bolje razumijevanje svojih raspoloženja tijekom vremena. Počnite pratiti svoje emocionalne obrasce već danas kako biste poboljšali samosvijest i podržali personaliziranu skrb.


Dodavanje zapisa

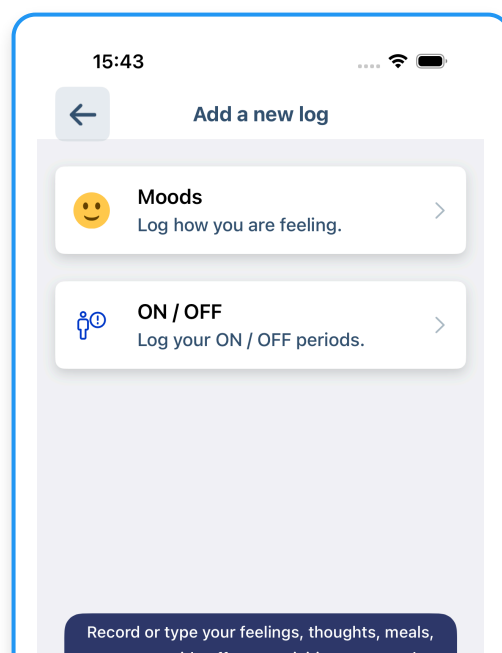Možete zabilježiti svoje raspoloženje, ON / OFF razdoblja ili slobodni prilagođeni zapis relevantan za vašu skrb.




Raspoloženja

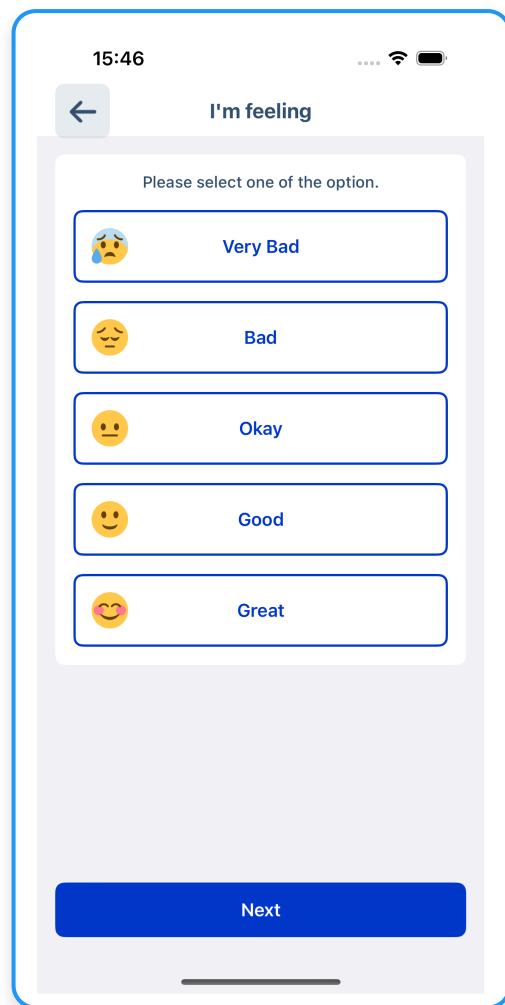Tijekom dana možete zabilježiti svoje trenutno raspoloženje. Nakon prilagodbe vremena svog zapisa, možete ga spremiti i pregledati na kartici "Moji zapisi".




ON / OFF razdoblja

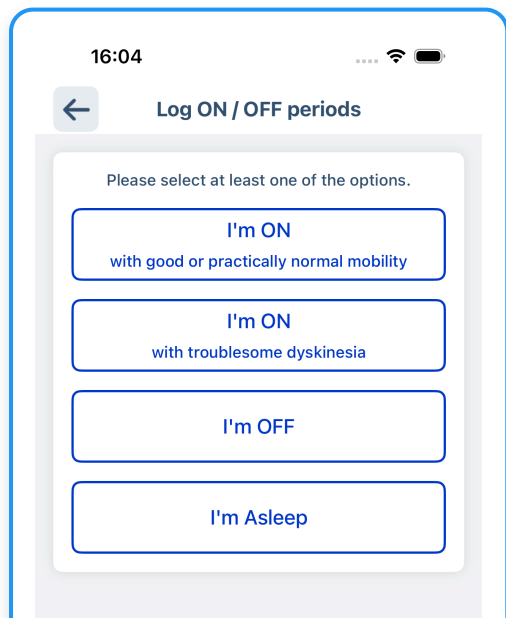

Možete zabilježiti najprikladniju ON / OFF opciju za određeno razdoblje. Slično tome, možete ga spremiti i pregledati na kartici "Moji zapisi".

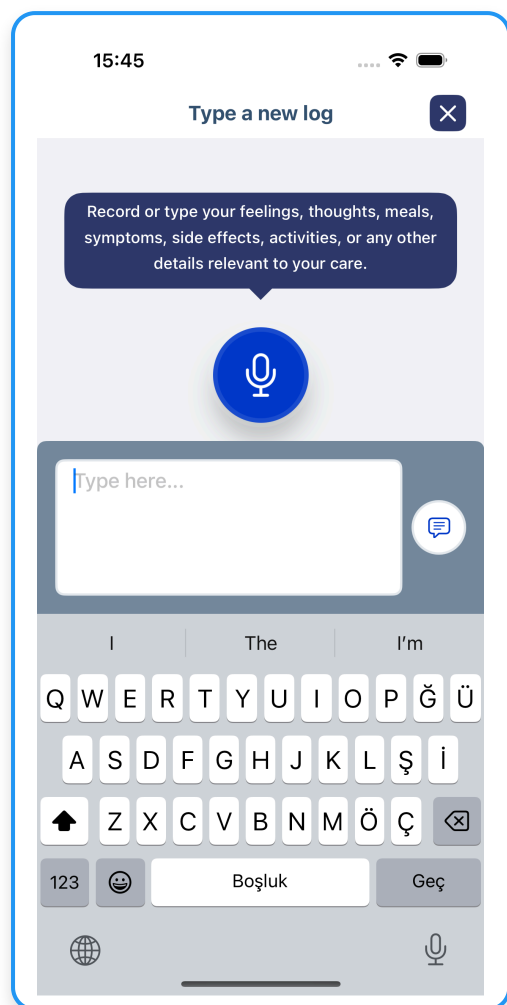
Prilagođeni zapis tekstom




Možete slobodno pisati o svojim osjećajima, mislima, obrocima ili bilo kojim pojedinostima koje smatrate važnima za bilježenje. Prilagođeni zapisi mogu se izraditi pomoću unosa tekstom ili glasom.

Prilagođeni zapis glasom

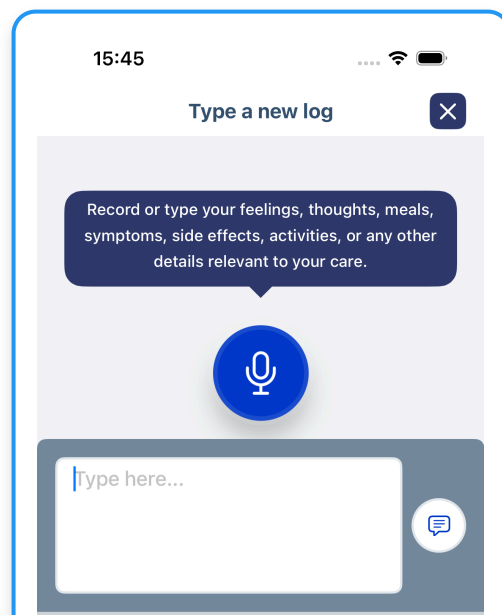
Snimajte koristeći svoj glas. Glasovni zapisi imaju vremensko ograničenje od 120 sekundi.




Moji zapisi

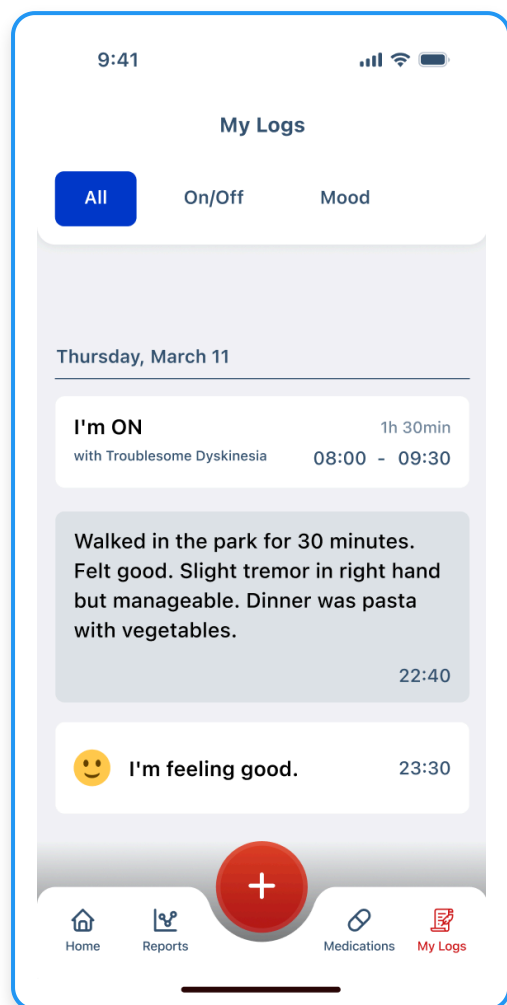

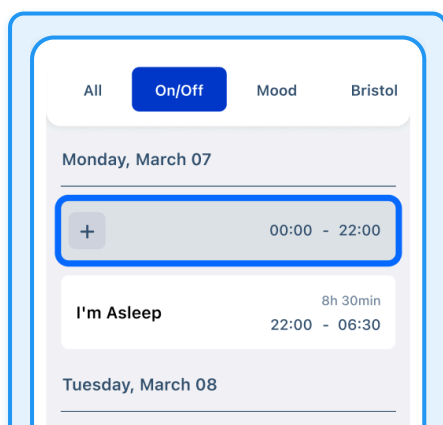
Svoje zabilježene stavke možete pregledati kao tijek putem "Moji zapisi" u navigaciji. S dodavanjem zapisa možete započeti jednostavnim dodirom na ikonu "Plus". Pregled svog tijeka možete i filtrirati.



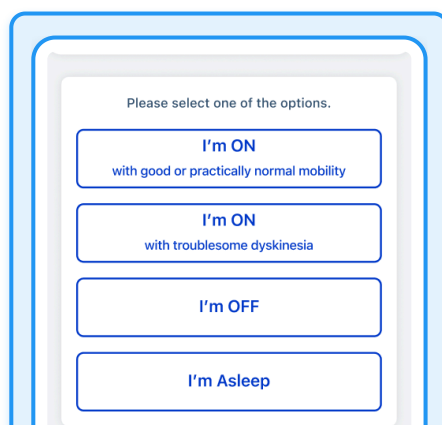U kategorijama u kojima je kontinuitet važan, lako možete uočiti svoje nedostajuće unose. S ispunjavanjem nedostajućih unosa možete započeti dodirom na njih.



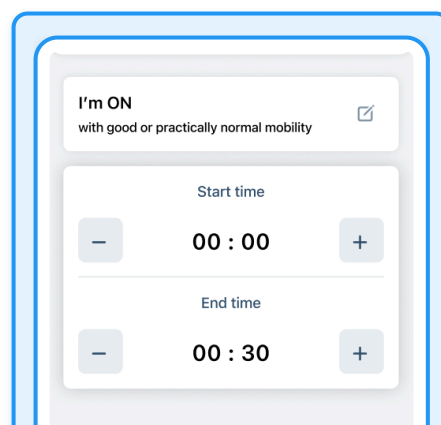
S ispunjavanjem nedostajućih unosa možete započeti dodirom na njih.




Automatski će započeti od početka vašeg razdoblja izostanka.

Uređivanje zabilježenih stavki

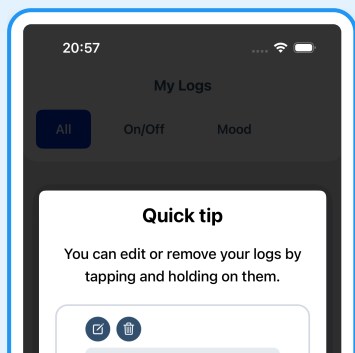
Započnite dodirom i zadržavanjem zabilježene stavke koju želite urediti. Svoje zapise možete urediti ili ukloniti tako da ih dodirnete i zadržite.



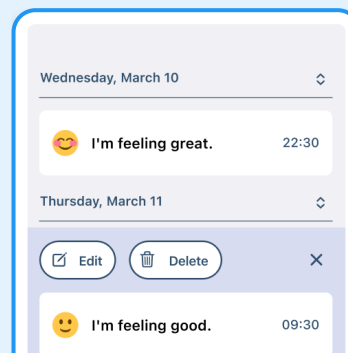
Svoje zabilježene stavke možete urediti tako da ih dodirnete i zadržite.



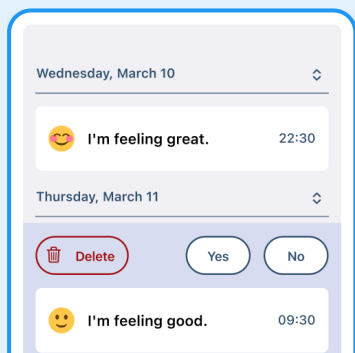Možete ih urediti ili izbrisati iz preklopnog izbornika.



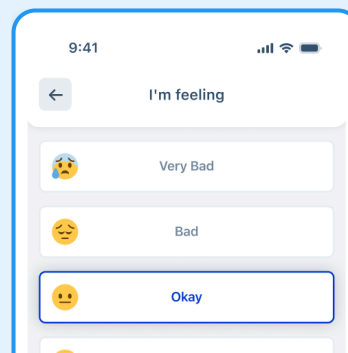Ako dodirnete gumb "Izbriši", od vas će se zatražiti potvrda – zapis će biti trajno izbrisan.




Ako dodirnete gumb "Uredi", možete promijeniti pojedinosti svog zapisa.

Postavljanje rasporeda uzimanja lijekova

Morat ćete unijeti svoj ispravan raspored uzimanja lijekova kako biste maksimalno iskoristili Parky. Ako se vaš plan liječenja promijeni, raspored uzimanja lijekova možete urediti ili ukloniti u bilo kojem trenutku.


Započnite dodirom na "Lijekovi" u donjem izborniku.

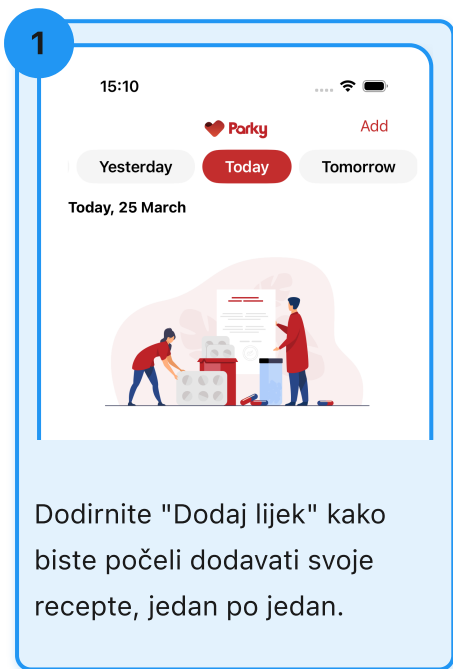1




Dodirnite "Dodaj lijek" kako biste počeli dodavati svoje recepte, jedan po jedan.

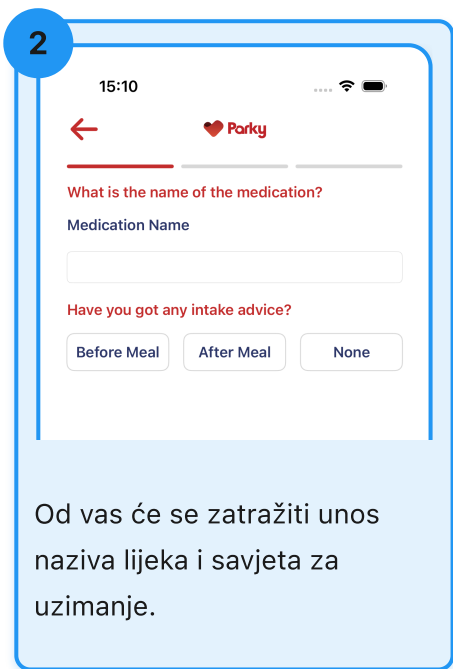2




Od vas će se zatražiti unos naziva lijeka i savjeta za uzimanje.

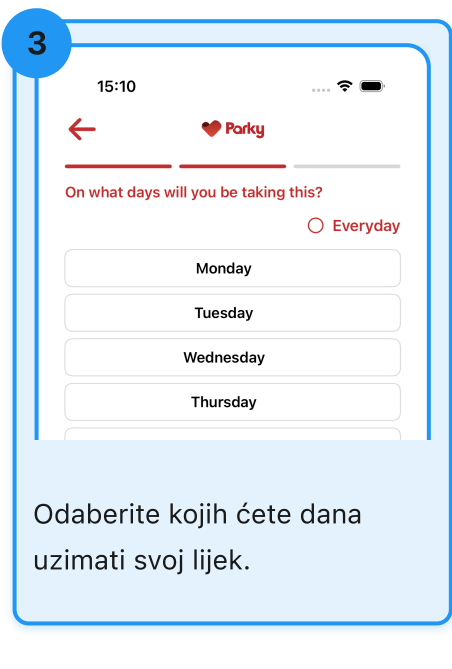3




Odaberite kojih ćete dana uzimati svoj lijek.

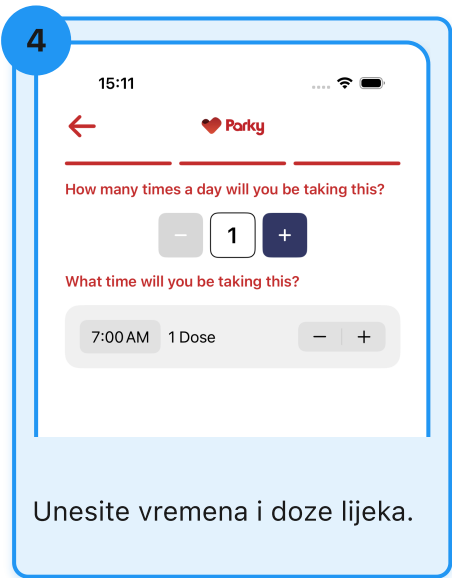4



Unesite vremena i doze lijeka.

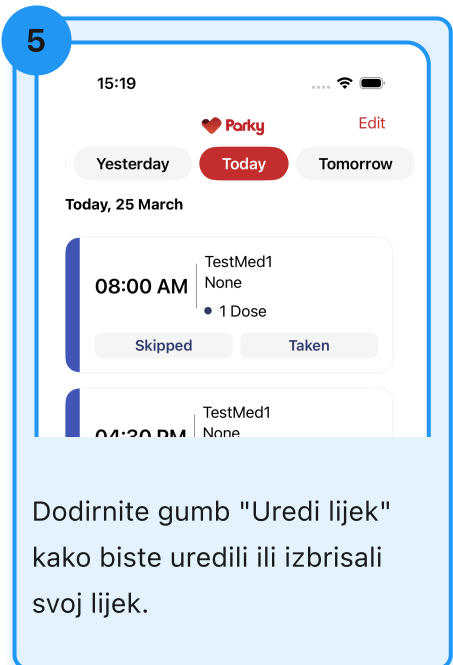5




Dodirnite gumb "Uredi lijek" kako biste uredili ili izbrisali svoj lijek.


Korištenje podsjetnika za lijekove

- Primat ćete obavijesti s podsjetnicima na temelju dana i vremena postavljenih u vašem rasporedu uzimanja lijekova.
- Svoj lijek možete označiti kao "Uzeto" ili "Preskočeno" na svom iPhoneu ili Apple Watchu.
- Ako propustite odgovoriti na obavijest, i dalje možete odgovoriti kasnije putem kartice "Lijekovi".
- Kako biste osigurali točnost informacija o pridržavanju terapije, odgovorite na podsjetnike za lijekove pravovremeno i ispravno.

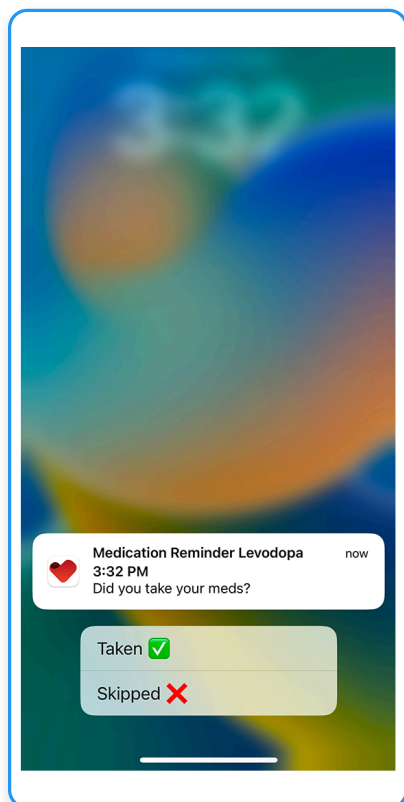Na podsjetnike možete odgovoriti kao "Uzeto" ili "Preskočeno" na svom iPhoneu ili Apple Watchu.



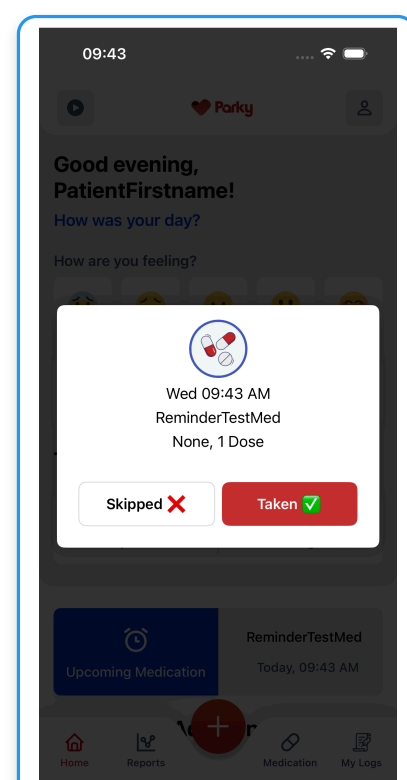Odgovorite na podsjetnike s "Uzeto" ili "Preskočeno".




Zaslon profila

Svoj status, osobne podatke i vremensku zonu možete pregledati na kartici "Profil".

Možete nas kontaktirati za pomoć ili pronaći rješenja za uobičajene probleme u odjeljcima "Kontaktirajte nas" i "Podrška i rješavanje problema".

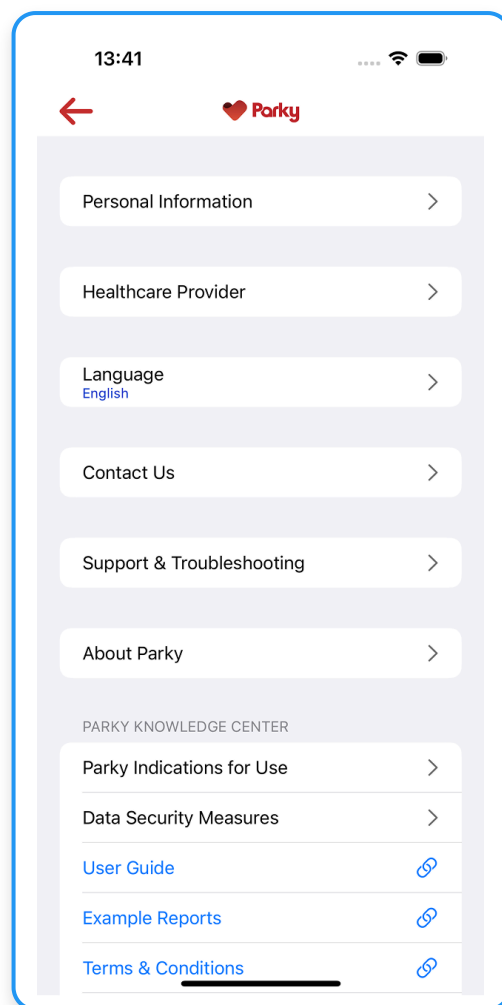Ne propustite naš "Centar znanja" na istoj kartici, gdje ćete pronaći važne informacije o Parkyju, kako čuvati svoje podatke na sigurnom, primjere izvješća te naše uvjete i odredbe zajedno s pravilima privatnosti.




Dodavanje zdravstvenog djelatnika


Možete odlučiti odrediti zdravstvenog djelatnika dijeljenjem njegovih profesionalnih podataka putem aplikacije Parky.

Nakon određivanja, zdravstvenom djelatniku bit će omogućen pristup svim vašim zdravstvenim podacima putem Parky Provider Portala.

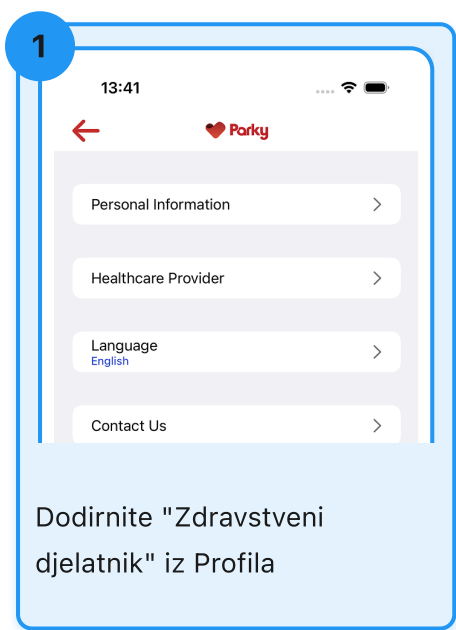
Određenog djelatnika možete ukloniti u bilo kojem trenutku, što će ga spriječiti u pristupu i prošlim i budućim podacima.

1

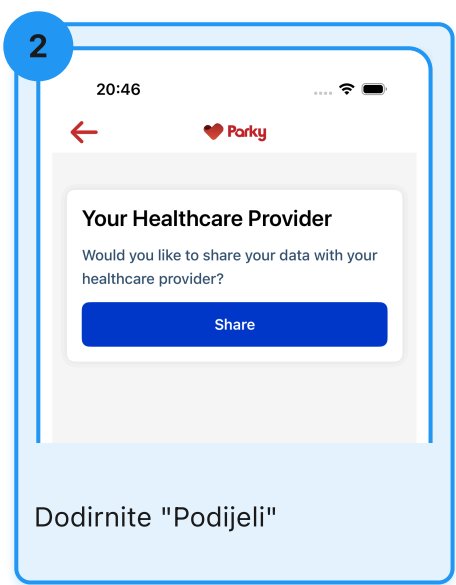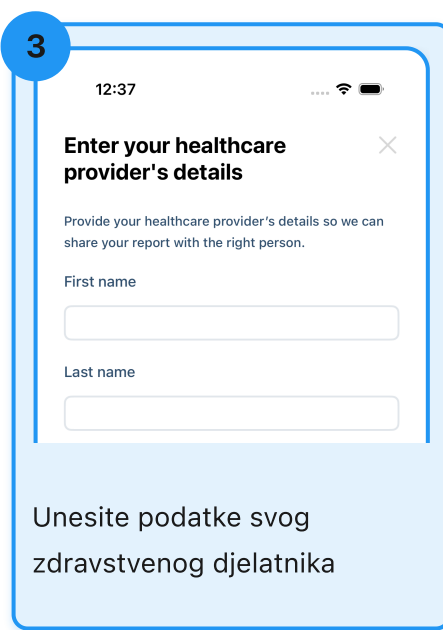
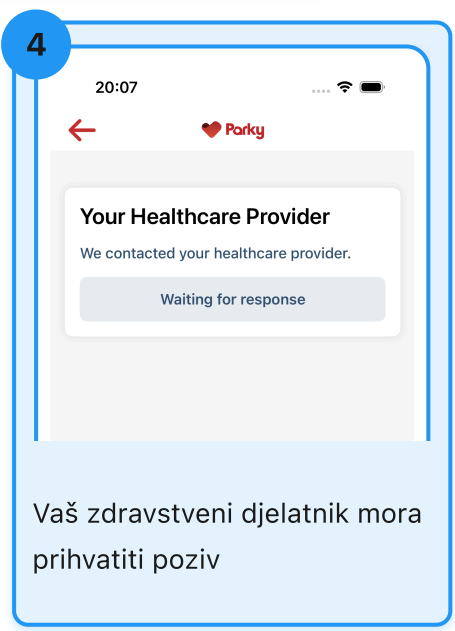
Dodirnite "Zdravstveni djelatnik" iz Profila

2


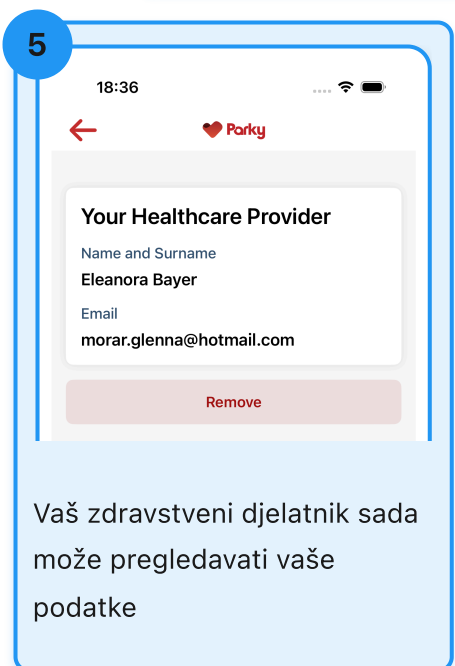
Dodirnite "Podijeli"

3


Unesite podatke svog zdravstvenog djelatnika

4


Vaš zdravstveni djelatnik mora prihvatiti poziv

5


Vaš zdravstveni djelatnik sada može pregledavati vaše podatke

VAŽNO UPOZORENJE UNUTAR APLIKACIJE



Prilikom pokretanja, Parky provodi postupak provjere za sve promjene verzije MM4PD i potvrđuje kompatibilnost uređaja kako bi se osiguralo sigurno i učinkovito funkcioniranje njegovih funkcija.

Ako se pojavi zaslon s pogreškom, kao što je prikazano lijevo u aplikaciji Parky, to znači da Parky nije kompatibilan s trenutnim uređajem, operativnim sustavom ili verzijom softvera.

Hardverski i softverski zahtjevi

Parky je podržan na:

- Apple Watch Series 4 (ili novijim) uređajima s watchOS 10+
- iPhone XS (ili novijim) uređajima s iOS 17+

Klinička interpretacija izvješća

1. Svako izvješće uključuje simptome motoričkih fluktuacija, vrijeme snimanja i izbrojane korake. Ako se korisnik prijavi u plan uzimanja lijekova i pruži informacije o uzimanju lijekova, može se vidjeti i pridržavanje terapije.
2. U izvješću o simptomima, os x prikazuje vrijeme, a os y trajanje simptoma.
3. Legenda za tremor, diskineziju, vremena bez snimanja i propisana vremena uzimanja lijekova prikazana je ispod grafikona.
4. Simptomi se prikupljaju i mjere tijekom vremena snimanja te se u grafikonu prikazuju u intervalima od 15 minuta.
5. Prijavljeni simptomi srednja su trajanja simptoma diskinezije i tremora.
6. Izvješća isključuju podatke koji vjerojatno ne predstavljaju nijedan motorički simptom. Prazan stupčasti grafikon očekuje se za asimptomatskog korisnika ili korisnika bez ikakvog snimanja.
7. Vrijeme snimanja označava ukupno vrijeme tijekom kojeg je korisnik ispravno koristio uređaj i tijekom kojeg nije bilo tehničkih problema u vezi s nadzorom simptoma. Pogledajte odjeljak "Ograničenja".
8. Bez dovoljnog vremena snimanja, neće se generirati nikakva izvješća, kao što je gore navedeno.
9. Isprekidane linije označavaju zakazana vremena uzimanja lijekova.
10. Informacije o pridržavanju terapije prikazuju broj "uzetih" lijekova u odnosu na broj zakazanih lijekova za određeni vremenski interval (tjedno kao posljednjih sedam dana ili mjesečno kao posljednjih 30 dana). "Uzeti" lijekovi izračunavaju se na temelju korisnikova unosa.
11. Informacije o broju koraka označavaju pokretljivost korisnika i prikazuju se kao ukupan iznos unutar određenog vremenskog intervala (dnevno, tjedno ili mjesečno).

KORIŠTENJE PRIKUPLJENIH PODATAKA

Daljinski nadzor simptoma tremora i diskinezije pruža zdravstvenom djelatniku objektivan pregled korisnikovih motoričkih simptoma Parkinsonove bolesti dok je izvan klinike. Kada se procjenjuje zajedno s nemotoričkim simptomima, korisnikovim uvidima i nalazima posjeta klinici, Parky podržava upravljanje pacijentima.

OPĆE UPUTE

1. Korisnici moraju nositi Apple Watch na svojoj najzahvaćenijoj ruci u svakom trenutku.
2. Punjenje Apple Watcha preporučuje se tijekom korisnikovih neaktivnih sati (po mogućnosti tijekom noćnog spavanja).
3. Parky ne može nadzirati simptome kada se Apple Watch ne nosi, što bi uzrokovalo nedostatke u podacima.
4. Bez dovoljnog vremena snimanja, Parky neće moći generirati izvješća o simptomima. Za više informacija pogledajte odjeljak "Ograničenja".
5. Aplikacija Parky ne smije se izbrisati ni na iPhoneu ni na Apple Watchu.
6. Korisnici trebaju unijeti ispravan raspored uzimanja lijekova kako bi osigurali pouzdanost rezultata o pridržavanju terapije. Postavljanje rasporeda uzimanja lijekova preporučuje se obaviti u kliničkom okruženju ako korisnik ili njegovatelj to ne mogu učiniti sami.
7. Korisnici trebaju odgovarati na podsjetnike za lijekove pravovremeno i ispravno.

Ograničenja

1. Parky funkcionira pod sljedećim ograničenjima:

- Parky funkcionira samo na Apple Watchu i iPhoneu koristeći algoritam MM4PD koji je razvio Apple.
- Parky ne funkcionira na nepodržanim uređajima.
- Parky se savjetuje koristiti za idiopatsku Parkinsonovu bolest, a ne za druge parkinsonske sindrome kao što su progresivna supranuklearna paraliza (PSP), multisistemska atrofija (MSA), Lewy i kortikobazalna degeneracija (CBD).
- Korisnik treba nositi Apple Watch na najzahvaćenijoj ruci.
- Praćenje simptoma diskinezije treba razmatrati samo za korisnike s korejom na zahvaćenoj ruci, bilo samoprijavljenom ili dijagnosticiranom od strane zdravstvenog djelatnika.
- Parky izričito prati tremor u mirovanju; ne prati tremor u pokretu ili posturalni tremor i možda neće pratiti tremor prstiju.
- Parky izričito ne prati distoniju ili bradikineziju.
- Rezultati mogu uključivati lažno pozitivne i lažno negativne nalaze. Korisnikova aktivnost, pristajanje remena sata i prateća stanja (kao što su sindrom nemirnih nogu i neparkinsonski tremor) mogu utjecati na kvalitetu rezultata.
- Parky izričito mjeri samo simptome sa zapešća dok se nosi Apple Watch. Međutim, Apple Watch može osjetiti simptome koji se kroz tijelo prenose iz drugih zahvaćenih dijelova tijela, što može dovesti do obmanjujućih ili lažnih mjernih podataka.

2. Parky ne može prikupljati podatke kada je Apple Watch isključen i ne može prenositi podatke kada je iPhone isključen.

Ograničenja (nastavak)

3. Bez odgovarajućeg trajanja snimanja, Parky neće moći generirati izvješća o simptomima. Izvješća se generiraju koristeći sljedeću metodologiju:
 - Intervali od petnaest minuta, koji pokrivaju cjelokupno trajanje snimanja, organiziraju se prema korisnikovu lokalnom vremenu.
 - Intervali s manje od 50 % potrebnih podataka isključuju se.
 - Tjedna i mjesečna izvješća prikazuju srednja trajanja simptoma tremora i diskinezije iz svih dana s podacima.
 - U tjednim i mjesečnim izvješćima prikazuju se samo intervali s podacima prikupljenima iz najmanje pet dana ili koji predstavljaju više od 20 % ukupnog razdoblja.
4. Rasporedi uzimanja lijekova podložni su ispravnosti podataka koje je unio korisnik. Ako korisnik ima poteškoća u korištenju aplikacije, izričito se savjetuje pružanje podrške u kliničkom okruženju.
5. Točnost informacija o pridržavanju terapije ovisi o korisnikovu pravovremenom i točnom odgovoru na obavijesti s podsjetnicima za lijekove. Nedostatak odgovora ili pružanje netočnih interakcija može dovesti do netočnih rezultata o pridržavanju terapije. Kako bi se ublažio taj rizik, zdravstvenim djelatnicima izričito se preporučuje da korisnicima naglase ključnu važnost točnih odgovora na podsjetnike.
6. Informacije o koracima oslanjaju se na korisnikovo dosljedno korištenje i Apple Watcha i iPhonea. Parky ne može prikupljati podatke o koracima ako korisnik ne koristi nijedan od tih uređaja.
7. Ako korisnici žele trajno prestati koristiti Parky, mogu trajno izbrisati svoj račun. Nakon brisanja računa, korisnik se smatra odustalim, a zdravstveni i osobni podaci korisnika trajno se uklanjaju. I korisnik i zdravstveni djelatnik izgubit će pristup korisnikovim Parky izvješćima.

SIGURNOST

1. Korištenje Parkyja i Apple Watcha ne utječe na korisnike s implantatima za duboku moždanu stimulaciju (DBS).
2. Apple Watch otporan je na vodu, ali nije vodonepropustan. Može se nositi i koristiti tijekom vježbanja (izloženost znoju je u redu), na kiši i tijekom pranja ruku.
3. Pogledajte izvorni dokument proizvođača koji se odnosi na korisnički priručnik i vodiče za hardverski korisnički priručnik Apple Watcha: <https://help.apple.com/pdf/watch/8/.../apple-watch-user-guide>
4. Vodič za Apple Watch: <https://support.apple.com/en-us/HT204665>
5. Apple Watch je u skladu sa sljedećim EMC i električnim normama: Električna sigurnost procijenjena je u skladu s IEC 62368-1 (2014), "Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements." Apple Watch je u skladu s EU normama EN 301 489-1 (V2.2.20), EN 301 489-3 (V2.1.1), EN 301 489-17 (V3.2.0) i EN 301 489-52 (V1.1.0).

OPĆA UPOZORENJA I MJERE OPREZA

- Nemojte koristiti aplikaciju Parky ni u koju drugu svrhu osim za bilježenje pokreta pacijenta s poremećajem pokreta.
- Aplikacija Parky namijenjena je samo kao pomoć postojećim kliničkim metodama. Nije namijenjena da bude jedino ili primarno sredstvo kliničke procjene.
- h2o therapeutics ne preporučuje korištenje aplikacije Parky za pacijente koji nisu sposobni komunicirati s aplikacijom Parky na iOS-u ili watchOS-u.
- Nemotorički nalazi, pacijentovi uvidi i klinički posjeti uvijek trebaju biti uključeni u donošenje odluka.
- Izričito se savjetuje usporedba Parky rezultata s kliničkim nalazima i uvidima koje su prijavili pacijenti.
- Pri prvom korištenju, radi provjere dosljednosti protoka podataka, preporučuje se pomno praćenje rezultata pacijenta tijekom 3 do 5 dana po pacijentu. Ovo razdoblje također bi omogućilo otkrivanje svih tehničkih problema.
- Pacijentima treba savjetovati da nose Apple Watch na najzahvaćenijoj ruci.
- Pacijente ili njegovatelje potiče se na unos rasporeda uzimanja lijekova. Ako pacijent to ne može učiniti samostalno ili uz pomoć svojih njegovatelja, zdravstvenim djelatnicima preporučuje se da ponude pomoć u kliničkom okruženju.
- Pacijenti ne bi trebali samostalno procjenjivati napredovanje svoje bolesti isključivo na temelju podataka iz aplikacije Parky.
- U slučaju kvara aplikacije Parky, pacijenti trebaju uzimati lijekove kako im je propisano.
- Aplikacija Parky ne podrazumijeva nikakvu procjenu lijekova.

SIGURNOST PODATAKA

1. Parky prikuplja podatke o kretanju samo kada korisnik nosi Apple Watch.
2. Osim podataka o kretanju, Parky ne prikuplja podatke o mobilnim i telefonskim aktivnostima, zaslonu ili korištenju aplikacija.
3. Korisnikovi podaci mogu se dijeliti samo sa zdravstvenim djelatnikom za kojeg je korisnik ili njegovatelj dao pristanak i mogu se dijeliti samo s jednim zdravstvenim djelatnikom istovremeno.
4. Korisnikovi podaci, uključujući osobne identifikacijske podatke, pohranjuju se na poslužiteljima usklađenima s HIPAA-om koristeći napredni standard enkripcije (AES256). Korisnikovi podaci nikada se ne dijele s trećom stranom, osim s ovlaštenim zdravstvenim djelatnikom.
5. Savjetuje se instalacija softvera za sigurnost mobilnih uređaja kako bi se dodatno osigurala sigurnost uređaja.

NEŽELJENI DOGAĐAJI

1. Ako se korisnikova izvješća o simptomima ne podudaraju s očekivanjima zdravstvenog djelatnika, odmah prestanite koristiti Parky tijekom kliničke prakse.
2. U slučaju bilo kakvih sumnji na pogrešne izračune, tehničkih problema i drugih događaja, obratite se na support@parkynow.com



h2o Therapeutics
Mustafa Kemal Mah. 2131 Cad. No:15
06510 Çankaya / Ankara / Türkiye



(01)8685063631006
(10)P1/1.6.1
(11)20260710



www.parkynow.com