



Benvenuto nella

GUIDA PER L'UTENTE DI PARKY

v1.6.1

DICHIARAZIONE DELLE INDICAZIONI PER L'USO

L'app Parky è destinata a quantificare la cinematica dei sintomi dei disturbi del movimento, tra cui tremore e discinesia, negli adulti (di età pari o superiore a 45 anni) affetti da malattia di Parkinson da lieve a moderata.

INDICE

Per iniziare	3
Impostazioni dello smartwatch	7
All'interno di Parky	10
Requisiti	21
Interpretazione clinica	22
Istruzioni generali	23
Limitazioni	24
Sicurezza	26
Avvertenze generali	27
Sicurezza dei dati	28

Scopri Parky

Parky è uno strumento di monitoraggio remoto progettato per la valutazione continua e obiettiva dei sintomi motori della malattia di Parkinson, come tremori e discinesia. Quantifica i dati dei sensori di movimento tramite l'Apple Watch e fornisce report in tempo reale del profilo dei sintomi, a supporto della gestione del paziente.

Parky si avvale dell'algoritmo clinicamente validato Motor Fluctuations Monitor for Parkinson's Disease (MM4PD) sviluppato da Apple Inc. (Powers et al., 2021¹)

Per il report dello studio clinico, visita <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536284/>

A chi è destinato Parky?

- Parky è destinato esclusivamente agli utenti con malattia di Parkinson idiopatica diagnosticata clinicamente, sufficientemente in grado di utilizzare un Apple Watch e un iPhone.
- Parky funziona al meglio per le persone che manifestano principalmente sintomi di tremore e discinesia.
- Parky non è progettato per valutare le sindromi parkinsoniane come l'atrofia multisistemica (MSA), la paralisi sopranucleare progressiva (PSP), la degenerazione corticobasale (CBD) o la demenza a corpi di Lewy.

¹ Powers R, Etezadi-Amoli M, Arnold EM, Kianian S, Mance I, Gibiansky M, Trietsch D, Alvarado AS, Kretlow JD, Herrington TM, Brillman S, Huang N, Lin PT, Pham HA, Ullal AV. Smartwatch inertial sensors continuously monitor real-world motor fluctuations in Parkinson's disease. Sci Transl Med. 2021 Feb 3;13(579):eabd7865. doi: 10.1126/scitranslmed.abd7865. PMID: 33536284.

Uno sguardo rapido a Parky

Monitoraggio e valutazione innovativi

Parky fornisce informazioni preziose rilevando tremori e discinesia nelle varie fasi della malattia. Raccoglie dati accurati sui sintomi motori per l'intera giornata e consente di effettuare valutazioni ovunque, anche al di fuori di contesti supervisionati.

Gestione dei farmaci e informazioni sui sintomi

Parky La aiuta a tenere sotto controllo i Suoi farmaci con comodi promemoria sull'iPhone e sull'Apple Watch e combina i report dei sintomi con i dati sull'assunzione dei farmaci. Questa combinazione fornisce informazioni chiare e obiettive, aiutando gli operatori sanitari a rilevare eventuali cambiamenti nei sintomi e migliorando così i piani terapeutici.

Maggiore autonomia grazie alla tecnologia

Parky integra sensori indossabili per offrirLe un'alternativa affidabile ai diari del paziente, affrontando la natura soggettiva dell'autovalutazione e prevenendo le lacune nei dati comunemente riscontrate nella tenuta dei diari. Questa integrazione offre un tracciamento continuo e passivo, garantendo un monitoraggio costante della Sua salute.

Tracciamento dell'attività e supporto alla mobilità

Parky non si limita a monitorare i Suoi sintomi motori; traccia anche i Suoi passi quotidiani, offrendo una finestra sui Suoi livelli di attività fisica.

Per iniziare con Parky



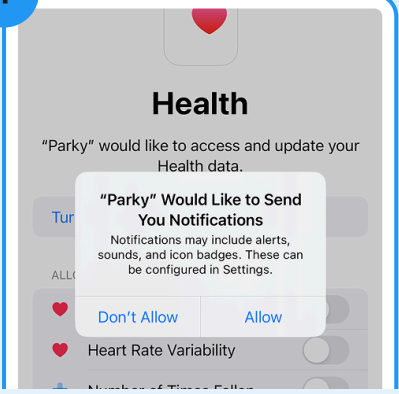
Scansioni il codice QR con la fotocamera del Suo iPhone e segua il messaggio che compare per scaricare Parky dall'App Store.

La invitiamo a scaricare l'app Parky dall'App Store per verificare la compatibilità del dispositivo.

Concessione delle autorizzazioni


Dovrà concedere le autorizzazioni tramite le richieste mostrate di seguito affinché Parky funzioni correttamente. Queste autorizzazioni consentono a Parky di inviare notifiche e di accedere ai dati relativi ai passi, nonché al tracciamento del movimento per l'analisi di tremore e discinesia.

Parky si basa su queste autorizzazioni per fornirLe informazioni complete sulla Sua attività fisica, sui Suoi sintomi e sull'aderenza alla terapia.

1

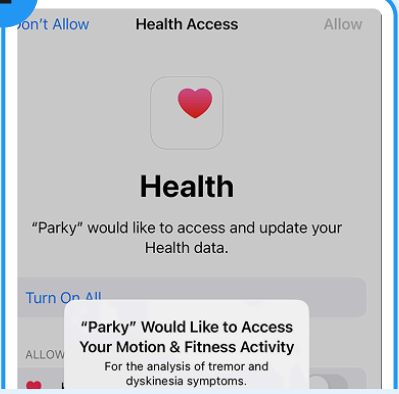
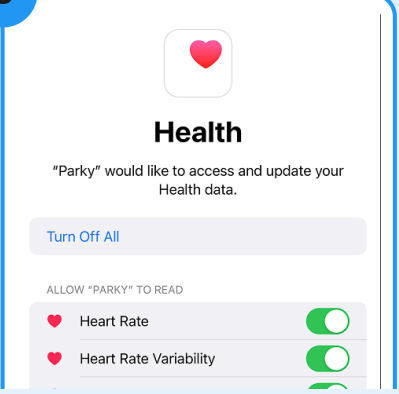
Accesso alle notifiche

Questa autorizzazione Le consente di ricevere promemoria e aggiornamenti da Parky. Senza di essa, non riceverà notifiche per i programmi di assunzione dei farmaci e gli aggiornamenti.

2


Accesso ai dati di movimento

La concessione di questa autorizzazione consente a Parky di tracciare i Suoi movimenti, fondamentale per il monitoraggio di sintomi come tremori e discinesia.

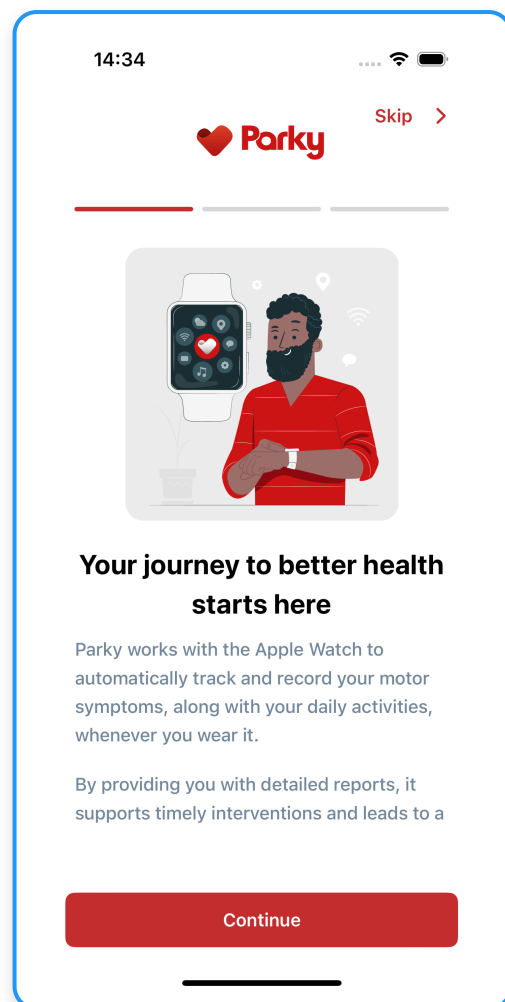
3


Accesso ai dati sanitari

Consentendo l'accesso ai Suoi dati di Salute, Parky può fornire informazioni sui Suoi livelli di attività fisica.


Onboarding

Inizierà con un processo di onboarding che illustra come utilizzare Parky, importanti informazioni sulla sicurezza e come proteggiamo i Suoi dati.



Accesso

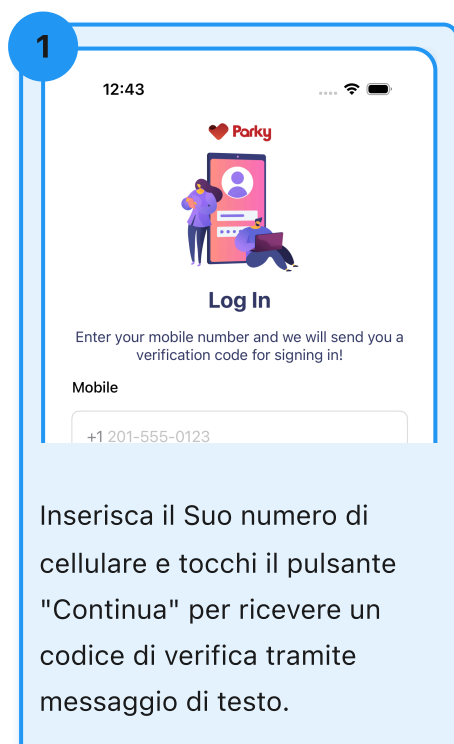Durante l'onboarding, inserirà il Suo numero di cellulare e riceverà un codice di verifica tramite messaggio di testo.



Configurazione delle complicazioni del quadrante

Segua i passaggi indicati di seguito per aggiungere Parky alle complicazioni del quadrante. Parky può monitorare i sintomi motori solo quando le complicazioni del quadrante sono state aggiunte.

1



Tocchi e tenga premuto sullo schermo.

2



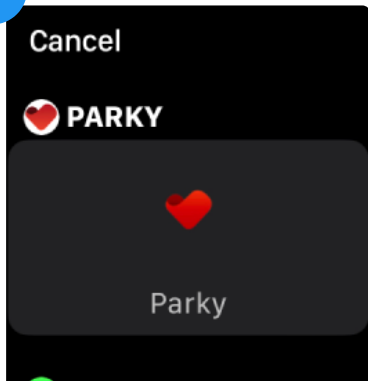
Tocchi "Modifica".

3



Scorra verso sinistra finché non compare la voce "Complicazioni" e selezioni uno spazio qualsiasi.

4



Scorra finché non compare "Parky", quindi tocchi.

5

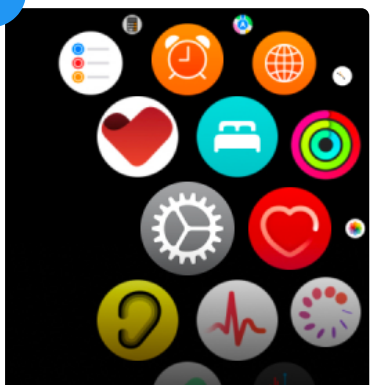


Fatto! Complicazione Parky aggiunta.

Attivazione dei feedback aptici


Segua i passaggi indicati di seguito per attivare i feedback aptici sul Suo Apple Watch. I feedback aptici forniscono un riscontro tramite vibrazione per le notifiche di Parky.

1




Prema la corona (Digital Crown) dell'Apple Watch per visualizzare la schermata Home.

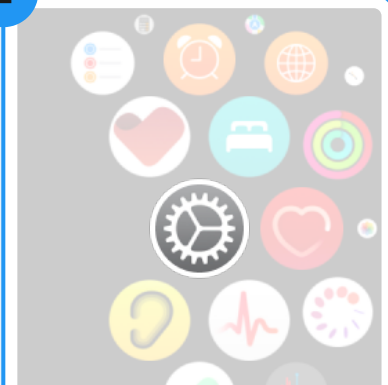2




Tocchi "Impostazioni" dal menu delle icone delle app.

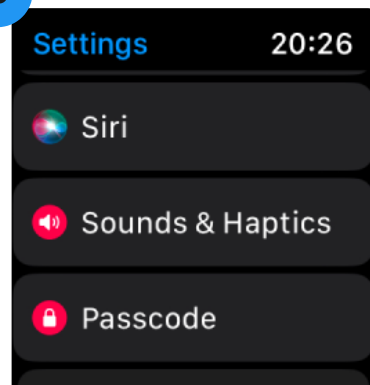3




Scorra verso il basso e tocchi "Suoni e feedback aptici".

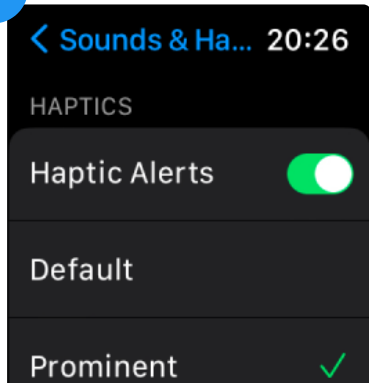4



Si assicuri che "Avvisi aptici" sia attivato scorrendo nuovamente verso il basso.

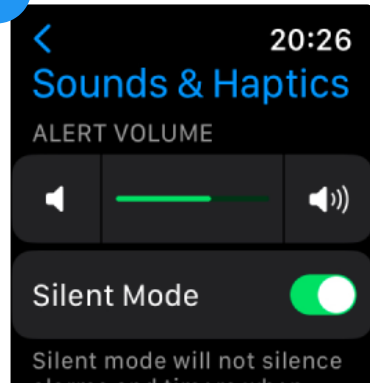5



Ricordi che l'attivazione delle vibrazioni aptiche produrrà anche un suono.

Per segnali più discreti, può sempre tornare qui e attivare la "Modalità Silenzioso".

Utilizzo di Foggy

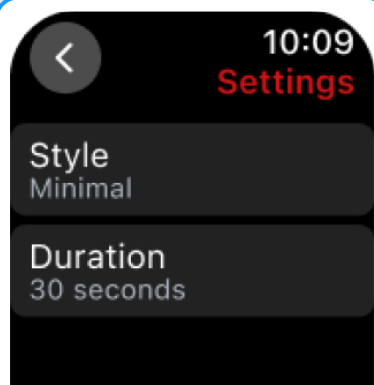


Avvii "Foggy" toccando il pulsante della complicazione oppure premendo il pulsante all'interno dell'app Parky.




Foggy inizia a fornire i segnali non appena lo apre. Tocchi per interrompere oppure lo lasci in funzione.


Personalizzazione di Foggy



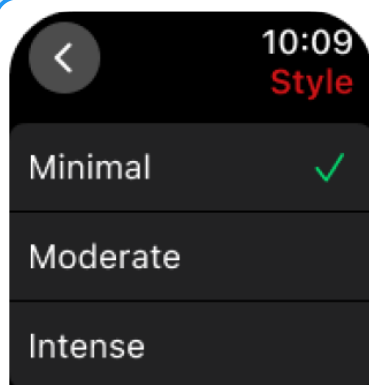Esistono due tipi di impostazioni: "Stile" e "Durata".




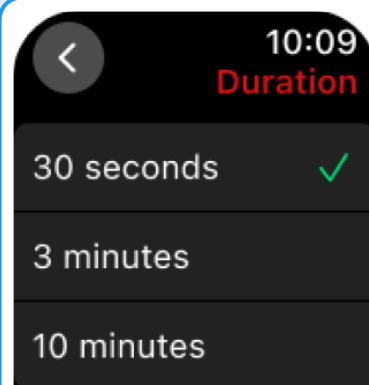Regoli la frequenza di vibrazione nel menu "Stile".



Imposti la durata del segnale di Foggy nel menu "Durata".

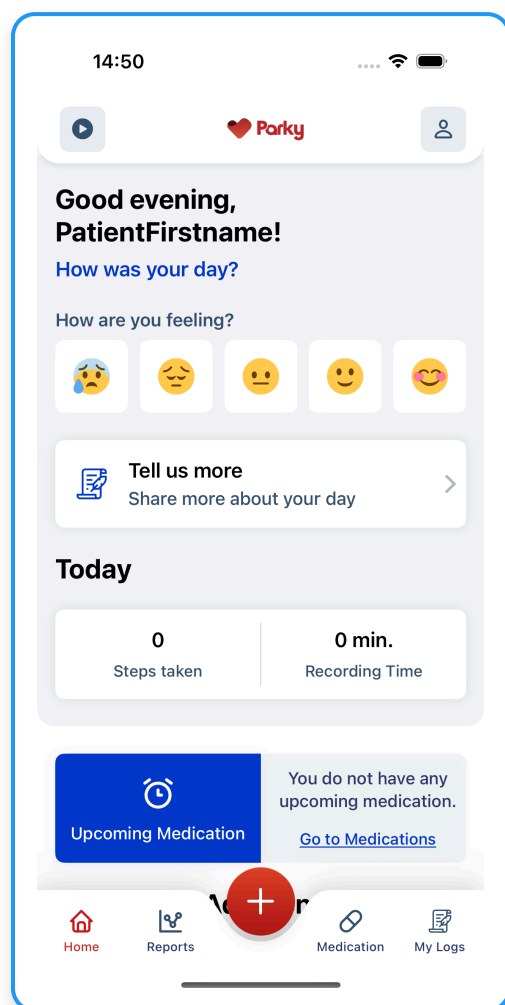All'interno di Parky



Schermata Home

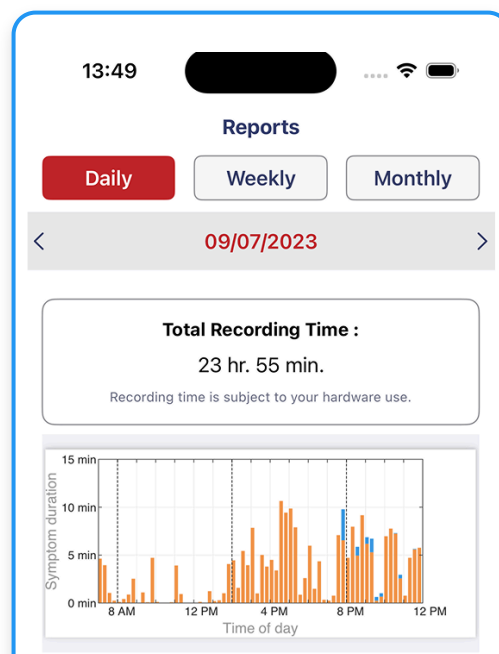
La schermata Home di Parky offre una dashboard intuitiva in cui troverà i promemoria per i prossimi farmaci, potrà tracciare i Suoi passi quotidiani, monitorare i tempi di registrazione e visualizzare le informazioni settimanali e mensili sull'aderenza alla terapia. Inoltre, avrà accesso a un centro di risorse per ulteriori informazioni.

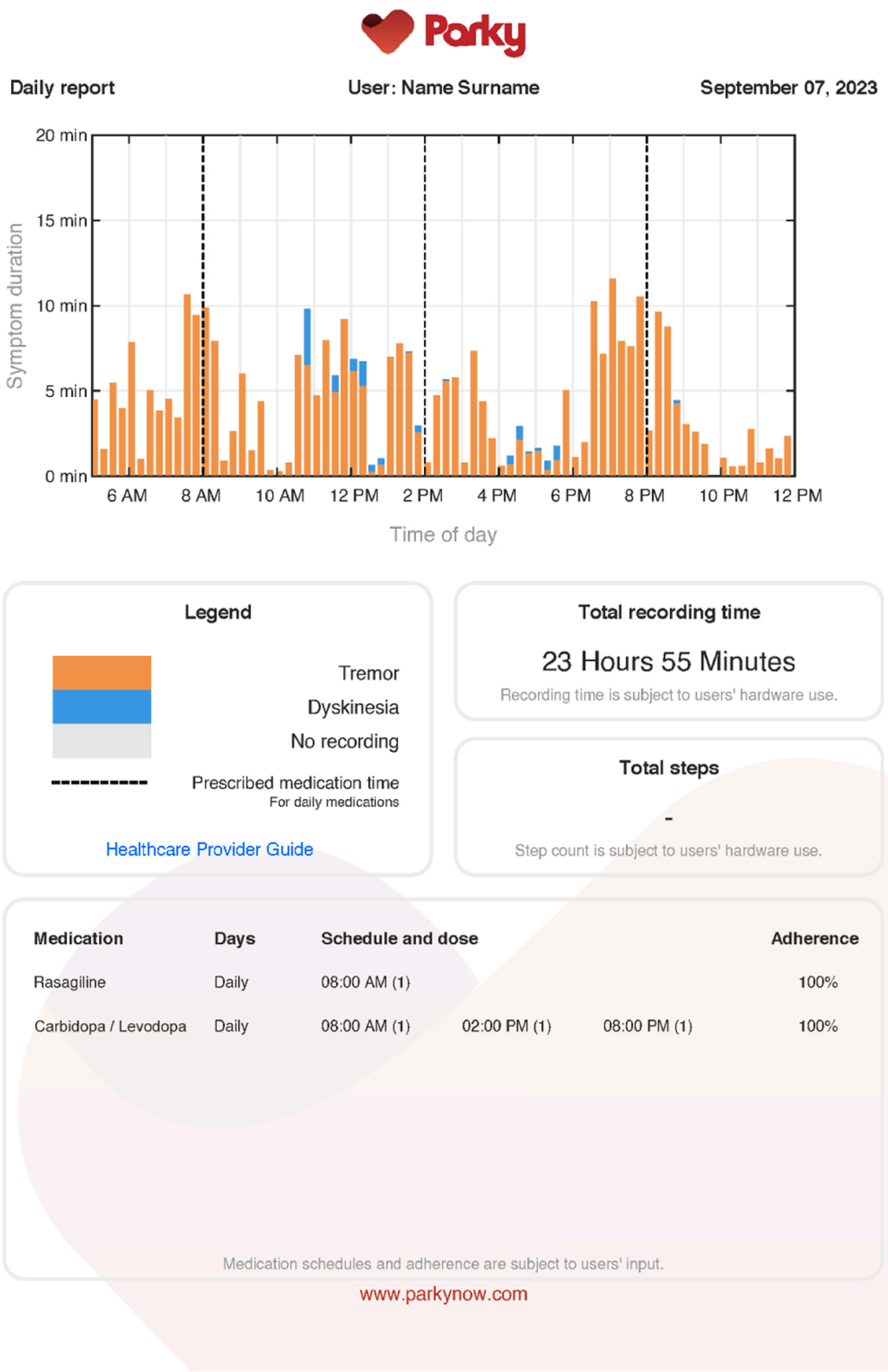
Accesso ai report

Visualizzi i Suoi report dei sintomi nella scheda "Report".


I report vengono mostrati per impostazione predefinita in modalità giornaliera. Selezioni il menu delle schede per visualizzare i report settimanali e mensili, comprese le date retrospettive.

Tocchi il pulsante di esportazione per scaricare un report specifico come PDF in qualsiasi momento.






Registrazione

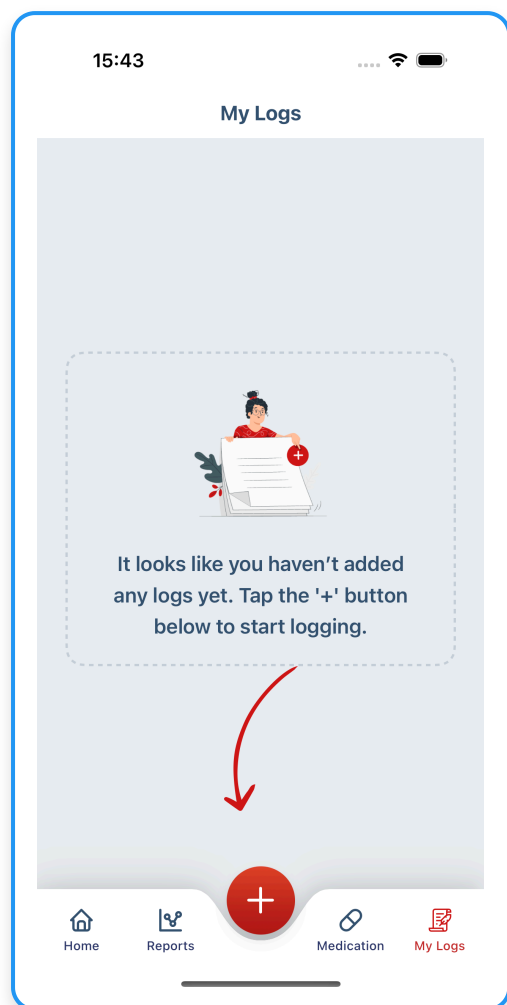

Può registrare facilmente come si sente nel corso della giornata. La aiuta a restare in sintonia con il Suo stato emotivo e a sviluppare una migliore comprensione dei Suoi stati d'animo nel tempo. Inizi oggi a monitorare i Suoi schemi emotivi per migliorare la consapevolezza di sé e favorire un'assistenza personalizzata.


Aggiunta di voci

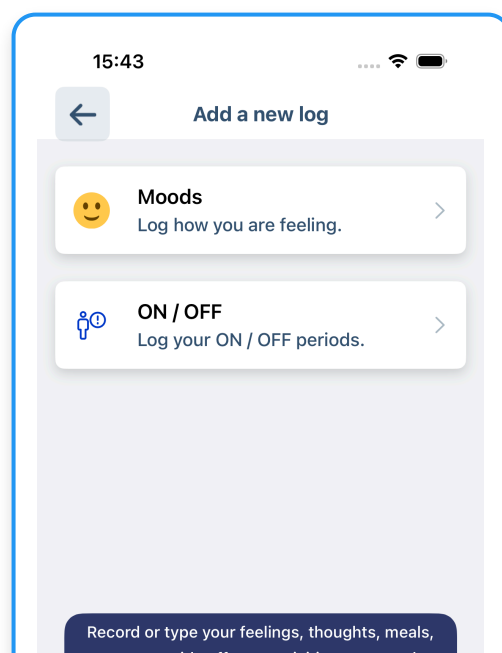Può registrare il Suo umore, i periodi ON/OFF o una voce personalizzata libera rilevante per la Sua assistenza.



Umore

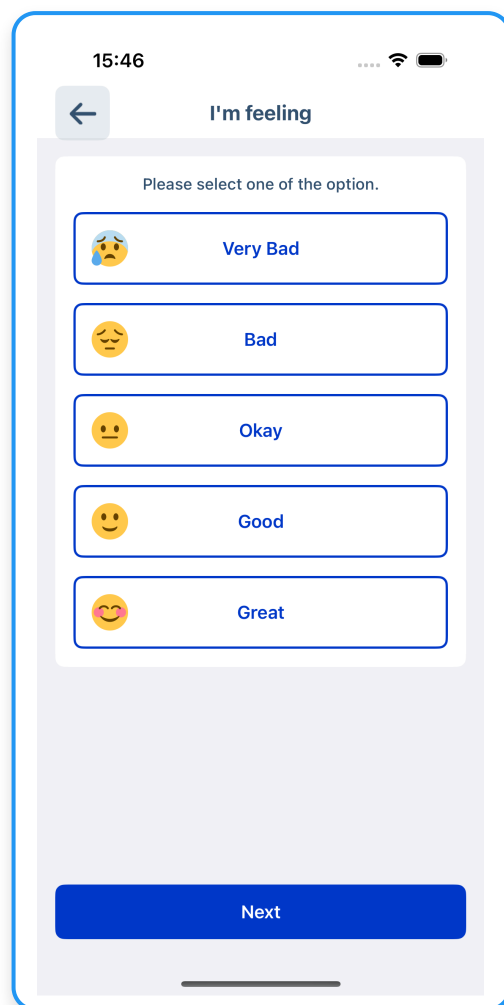Può registrare il Suo umore attuale nel corso della giornata. Dopo aver regolato l'orario della Sua voce, può salvarla e rivederla nella scheda "Le mie voci".



15:46

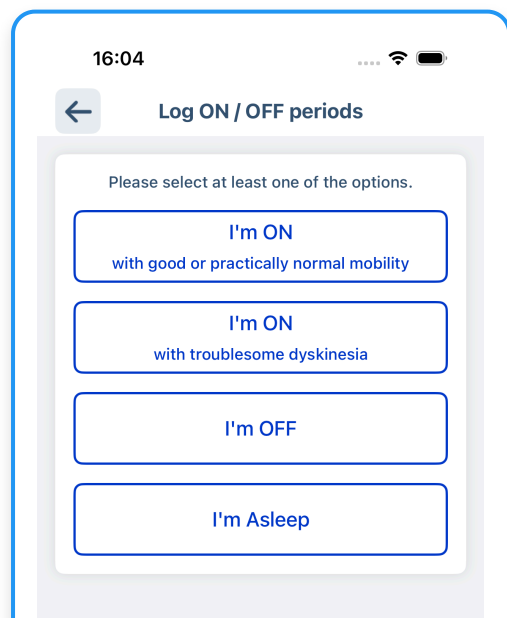
← I'm feeling

Please select one of the option.

- Very Bad
- Bad
- Okay
- Good
- Great

Next

Periodi ON / OFF



16:04

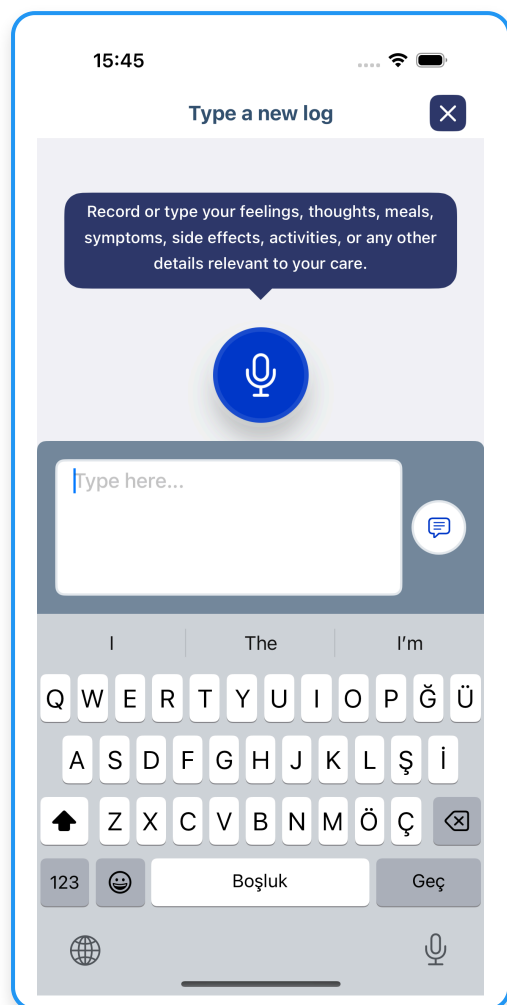
← Log ON / OFF periods

Please select at least one of the options.

- I'm ON
with good or practically normal mobility
- I'm ON
with troublesome dyskinesia
- I'm OFF
- I'm Asleep

Può registrare l'opzione ON/OFF più adatta a un determinato periodo. Allo stesso modo, può salvarla e rivederla nella scheda "Le mie voci".


Voce personalizzata con testo




Può scrivere liberamente le Sue sensazioni, i Suoi pensieri, i Suoi pasti o qualsiasi dettaglio che ritiene importante da registrare. Le voci personalizzate possono essere create tramite input di testo o vocale.

Voce personalizzata con la voce

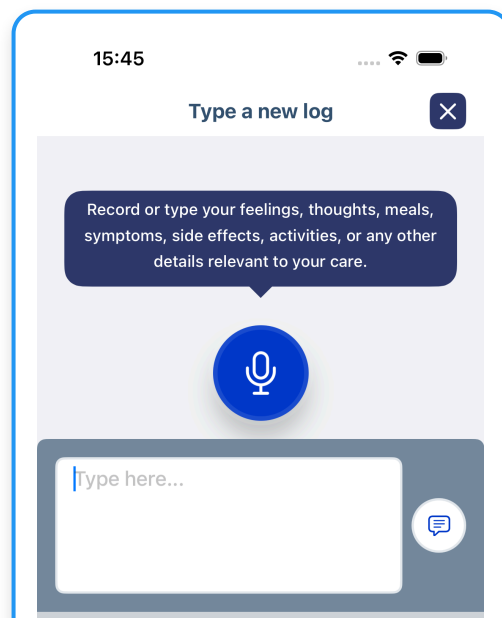
Registri utilizzando la Sua voce. Le registrazioni vocali hanno un limite di tempo di 120 secondi.




Le mie voci

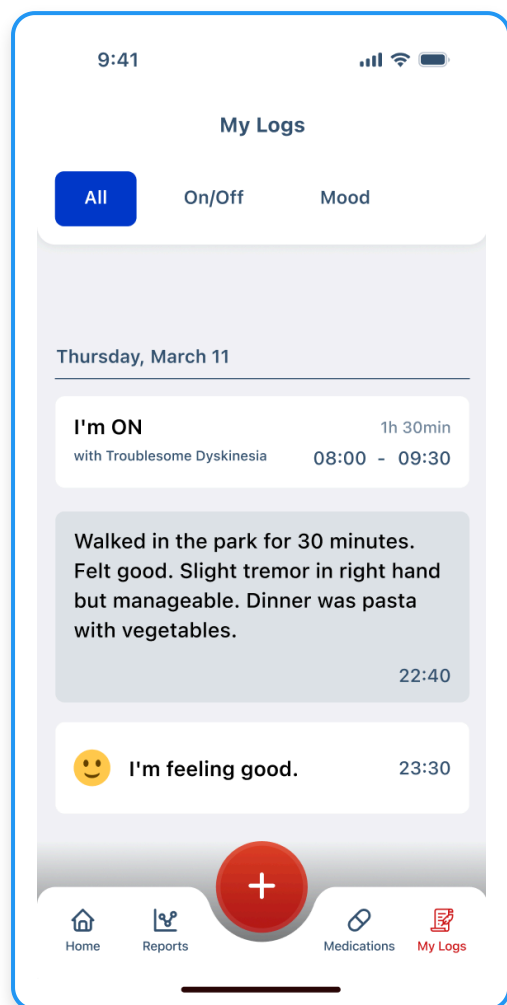

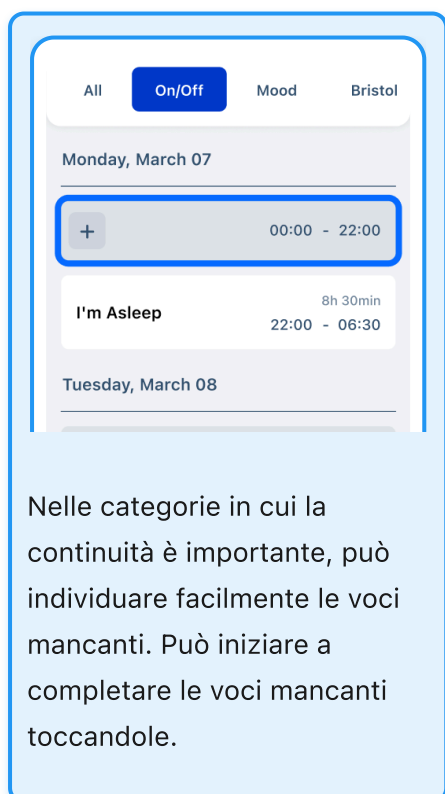
Può visualizzare in anteprima le voci registrate come un feed da "Le mie voci" nella navigazione. Può iniziare ad aggiungere le Sue voci semplicemente toccando l'icona "+". Può anche filtrare l'anteprima del Suo feed.



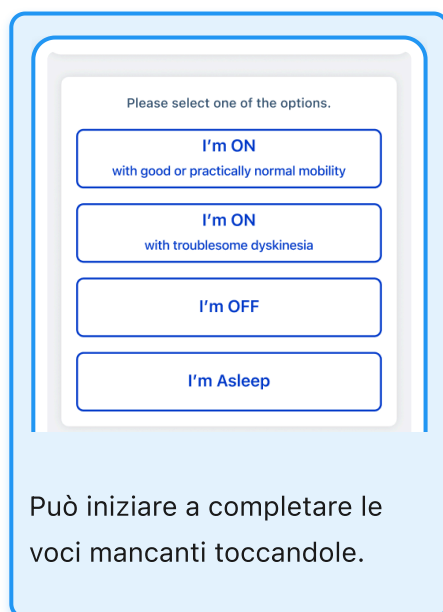Nelle categorie in cui la continuità è importante, può individuare facilmente le voci mancanti. Può iniziare a completare le voci mancanti toccandole.



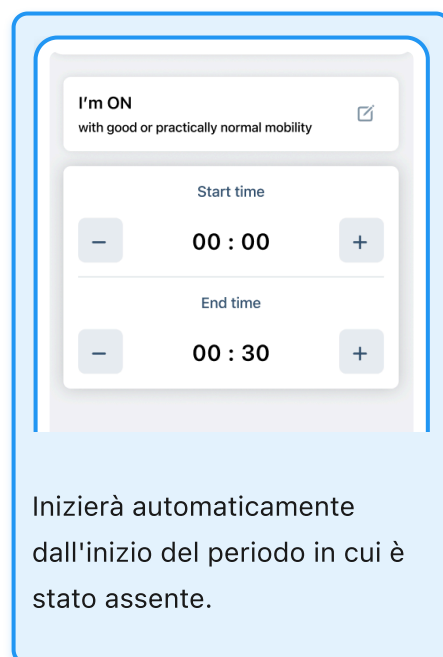
Può iniziare a completare le voci mancanti toccandole.




Inizierà automaticamente dall'inizio del periodo in cui è stato assente.

Modifica delle voci registrate

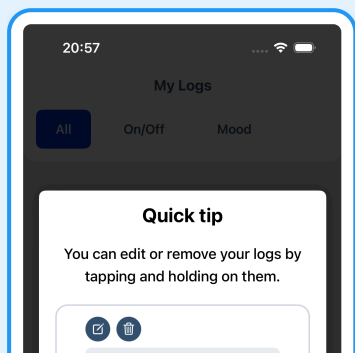
Inizi toccando e tenendo premuta la voce registrata che desidera modificare. Può modificare o rimuovere le Sue voci toccandole e tenendole premute.



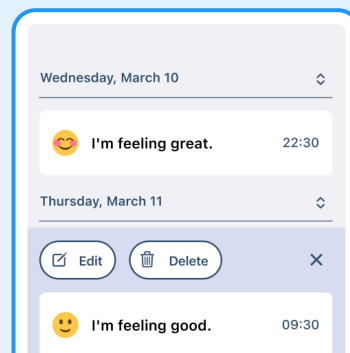
Può modificare le Sue voci registrate toccandole e tenendole premute.



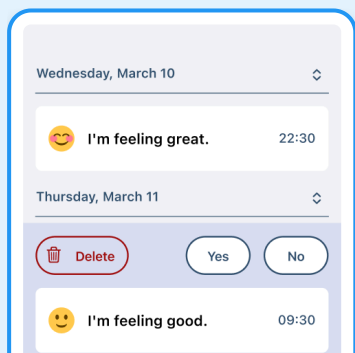Può modificarle o eliminarle dal menu a sovrapposizione.



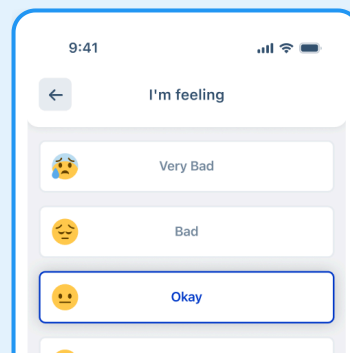Se tocca il pulsante "Elimina", Le verrà chiesto di confermare: la voce verrà eliminata in modo permanente.




Se tocca il pulsante "Modifica", potrà modificare i dettagli della Sua voce.

Configurazione del programma di assunzione dei farmaci

Dovrà inserire il programma corretto di assunzione dei farmaci per sfruttare al meglio Parky. Se il Suo piano terapeutico cambia, può modificare o rimuovere il programma di assunzione dei farmaci in qualsiasi momento.


Inizi toccando "Farmaci" nel menu in basso.

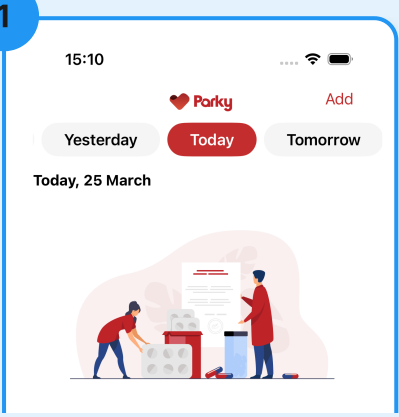1




Tocchi "Aggiungi farmaco" per iniziare ad aggiungere le Sue prescrizioni, una alla volta.

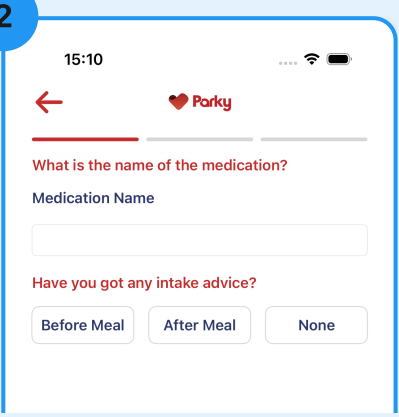2




Le verrà chiesto di inserire il nome del farmaco e le indicazioni sull'assunzione.

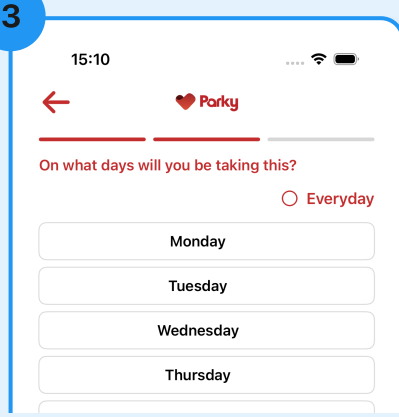3




Scelga i giorni in cui assumerà il farmaco.

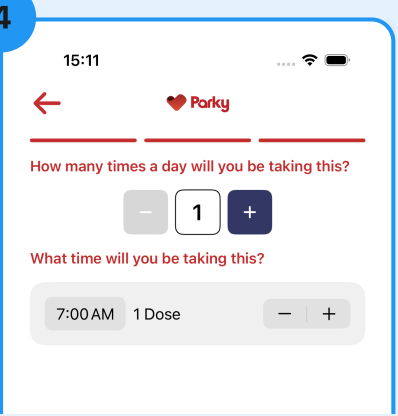4



Inserisca gli orari e le dosi del farmaco.

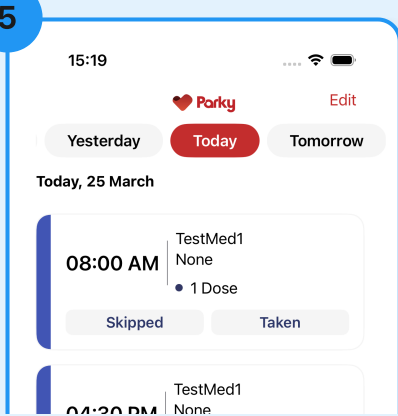5




Tocchi il pulsante "Modifica farmaco" per modificare o eliminare il Suo farmaco.


Utilizzo dei promemoria dei farmaci

- Riceverà notifiche di promemoria in base ai giorni e agli orari impostati nel Suo programma di assunzione dei farmaci.
- Può contrassegnare il Suo farmaco come "Assunto" o "Saltato" sul Suo iPhone o Apple Watch.
- Se non risponde a una notifica, può comunque rispondere in seguito tramite la scheda "Farmaci".
- Per garantire l'accuratezza delle informazioni sull'aderenza alla terapia, risponda ai promemoria dei farmaci in modo tempestivo e corretto.

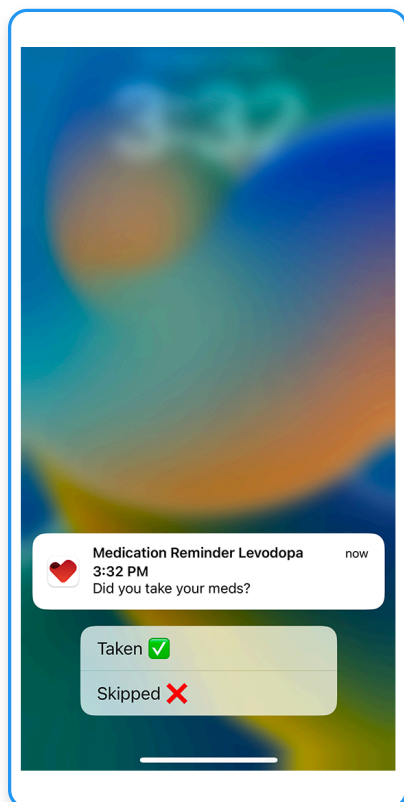Può rispondere ai promemoria come "Assunto" o "Saltato" sul Suo iPhone o Apple Watch.



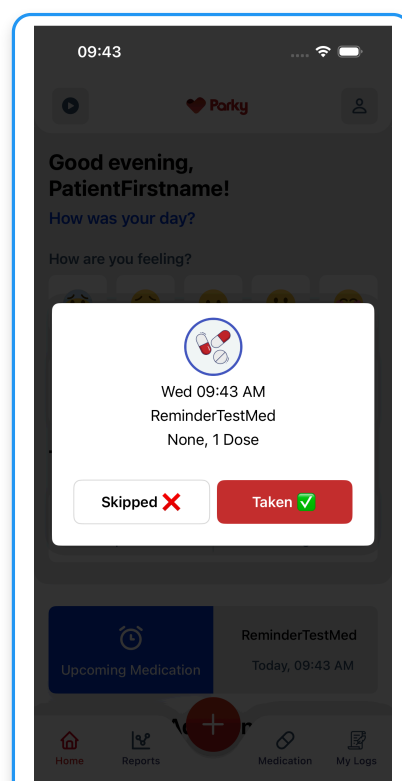Risponda ai promemoria con "Assunto" o "Saltato".




Schermata del profilo

Può visualizzare il Suo stato, i Suoi dati personali e il Suo fuso orario nella scheda "Profilo".

Può contattarci per ricevere assistenza o trovare soluzioni ai problemi più comuni nelle sezioni "Contattaci" e "Assistenza e risoluzione dei problemi".

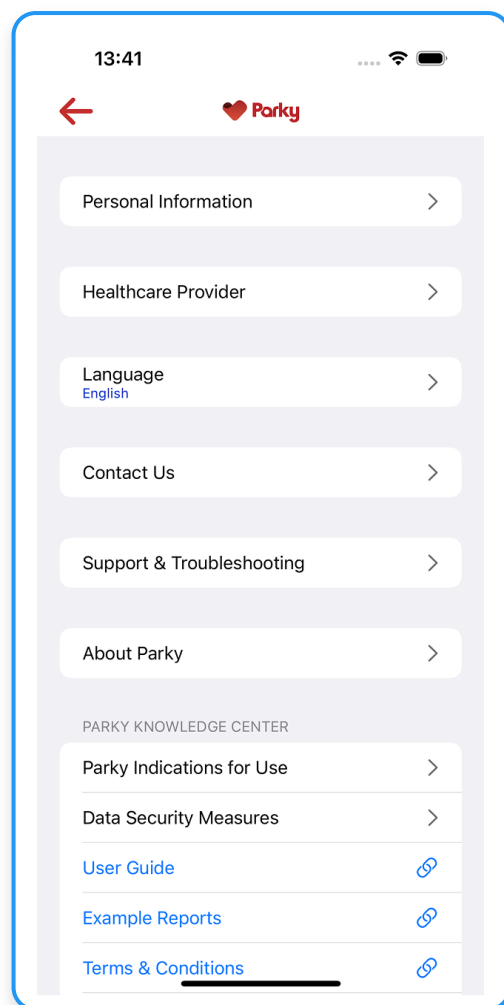Non perda il nostro "Centro informazioni Parky" nella stessa scheda, dove troverà informazioni importanti su Parky, su come mantenere al sicuro i Suoi dati, esempi di report e i nostri termini e condizioni insieme all'informativa sulla privacy.




Aggiunta di un operatore sanitario


Può scegliere di designare un operatore sanitario condividendo le sue informazioni professionali tramite l'app Parky.

Una volta designato, l'operatore sanitario avrà accesso a tutte le Sue cartelle cliniche tramite il Parky Provider Portal.

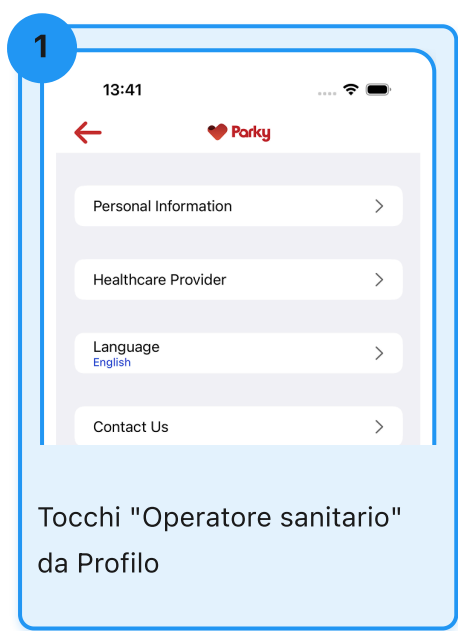
Può rimuovere l'operatore sanitario designato in qualsiasi momento, impedendogli così di accedere sia ai dati passati sia a quelli futuri.

1

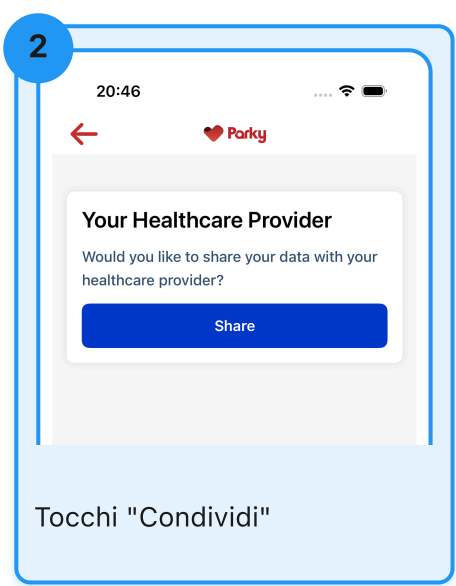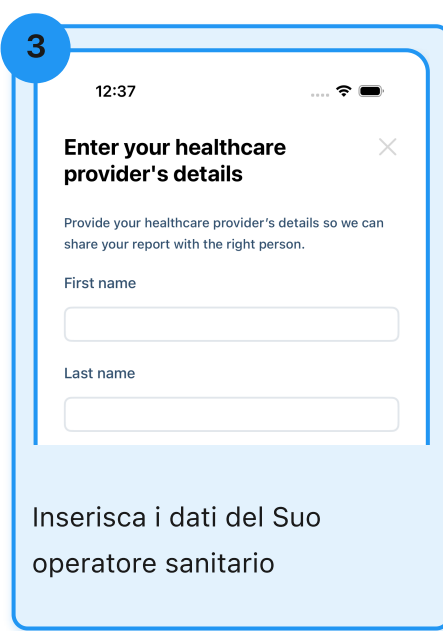
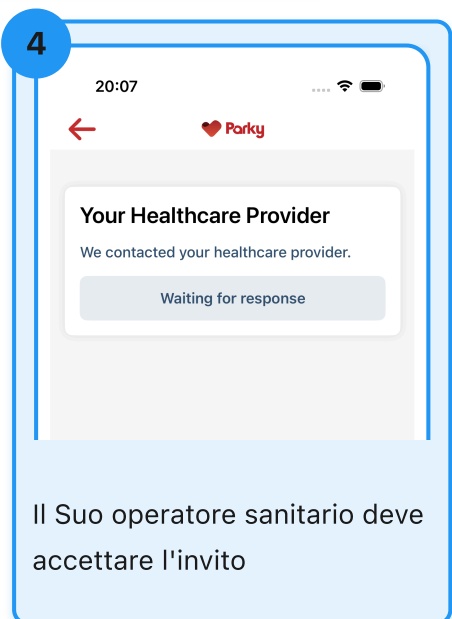
Tocchi "Operatore sanitario" da Profilo

2


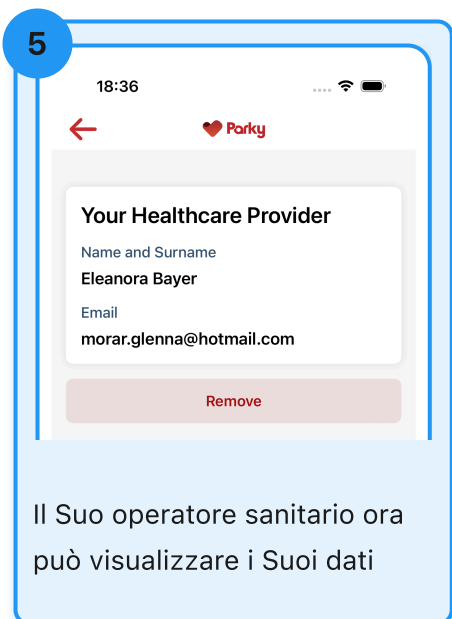
Tocchi "Condividi"

3


Inserisca i dati del Suo operatore sanitario

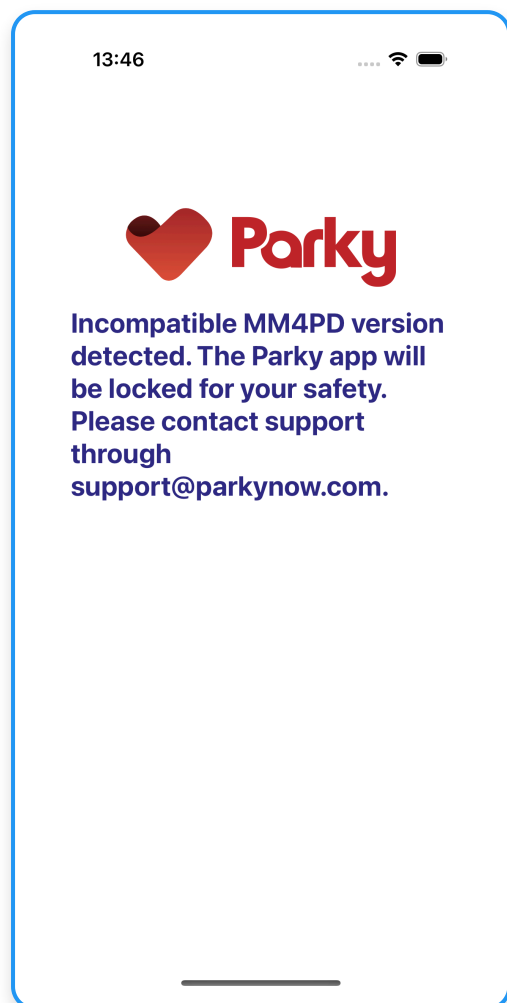
4


Il Suo operatore sanitario deve accettare l'invito

5


Il Suo operatore sanitario ora può visualizzare i Suoi dati

IMPORTANTE AVVERTENZA NELL'APP



All'avvio, Parky esegue un processo di verifica per eventuali modifiche della versione di MM4PD e conferma la compatibilità del dispositivo per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente delle sue funzioni.

Qualora dovesse comparire una schermata di errore, come quella mostrata a sinistra nell'applicazione Parky, ciò indica che Parky non è compatibile con il dispositivo, il sistema operativo o la versione del software attuali.

Requisiti hardware e software

Parky è supportato su:

- Dispositivi Apple Watch Series 4 (o successivi) con watchOS 10+
- Dispositivi iPhone XS (o successivi) con iOS 17+

Interpretazione clinica dei report

1. Ogni report include i sintomi di fluttuazione motoria, il tempo di registrazione e i passi conteggiati. Se l'utente accede al piano di assunzione dei farmaci e fornisce informazioni sull'assunzione dei farmaci, è possibile visualizzare anche l'aderenza.
2. Nel report dei sintomi, l'asse x mostra il tempo e l'asse y mostra la durata dei sintomi.
3. La legenda relativa a tremore, discinesia, tempi senza registrazione e orari dei farmaci prescritti è mostrata sotto il grafico.
4. I sintomi vengono raccolti e misurati durante l'intero tempo di registrazione e sono riportati nel grafico a intervalli di 15 minuti
5. I sintomi riportati corrispondono alle durate medie dei sintomi di discinesia e tremore.
6. I report escludono i dati che difficilmente rappresentano un sintomo motorio. Per un utente asintomatico o un utente privo di qualsiasi registrazione è prevedibile un istogramma vuoto.
7. Il tempo di registrazione indica il tempo totale durante il quale l'utente ha utilizzato correttamente il dispositivo e durante il quale non si sono verificati problemi tecnici relativi al monitoraggio dei sintomi. Faccia riferimento alla sezione "Limitazioni".
8. Senza tempi di registrazione sufficienti, non verrà generato alcun report, come indicato sopra.
9. Le linee tratteggiate indicano gli orari programmati per l'assunzione dei farmaci.
10. Le informazioni sull'aderenza alla terapia mostrano il numero di farmaci "assunti" rispetto al numero di farmaci programmati per un determinato intervallo di tempo (settimanale come gli ultimi sette giorni o mensile come gli ultimi 30 giorni). I farmaci "assunti" vengono calcolati in base ai dati inseriti dall'utente.
11. Le informazioni sul conteggio dei passi indicano la mobilità dell'utente e sono mostrate come quantità totale all'interno di un determinato intervallo di tempo (giornaliero, settimanale o mensile).

L'UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI

Il monitoraggio remoto dei sintomi di tremore e discinesia fornisce all'operatore sanitario una visione obiettiva dei sintomi motori della malattia di Parkinson dell'utente al di fuori della clinica. Valutato insieme ai sintomi non motori, alle osservazioni dell'utente e ai risultati delle visite in clinica, Parky supporta la gestione del paziente.

ISTRUZIONI GENERALI

1. Gli utenti devono indossare l'Apple Watch sul braccio più colpito in ogni momento.
2. Si consiglia di mettere in carica l'Apple Watch durante le ore di inattività dell'utente (preferibilmente durante il sonno notturno).
3. Parky non può monitorare i sintomi quando l'Apple Watch non viene indossato, il che causerebbe lacune nei dati.
4. Senza tempi di registrazione sufficienti, Parky non sarà in grado di generare report dei sintomi. Per maggiori informazioni, consulti la sezione "Limitazioni".
5. L'app Parky non deve essere eliminata né dall'iPhone né dall'Apple Watch.
6. Gli utenti devono inserire il programma corretto di assunzione dei farmaci per garantire l'affidabilità dei risultati relativi all'aderenza alla terapia. Si consiglia di configurare il programma di assunzione dei farmaci in un ambiente clinico se l'utente o il caregiver non è in grado di farlo da solo.
7. Gli utenti devono rispondere ai promemoria dei farmaci in modo tempestivo e corretto.

Limitazioni

1. Parky opera nel rispetto dei seguenti vincoli:

- Parky funziona solo su Apple Watch e iPhone utilizzando l'algoritmo MM4PD sviluppato da Apple.
- Parky non funziona su dispositivi non supportati.
- Si consiglia di utilizzare Parky per la malattia di Parkinson idiopatica e di non utilizzarlo per altre sindromi parkinsoniane come la paralisi sopranucleare progressiva (PSP), l'atrofia multisistemica (MSA), la degenerazione a corpi di Lewy e la degenerazione corticobasale (CBD).
- L'utente deve indossare l'Apple Watch sul braccio più colpito.
- Il tracciamento dei sintomi discinetici deve essere preso in considerazione solo per gli utenti con corea sul braccio colpito, riferita personalmente o diagnosticata da un operatore sanitario.
- Parky traccia esplicitamente il tremore a riposo; non traccia il tremore d'azione o il tremore posturale e potrebbe non tracciare il tremore delle dita.
- Parky non traccia esplicitamente la distonia o la bradicinesia.
- I risultati possono includere falsi positivi e falsi negativi. L'attività dell'utente, l'aderenza del cinturino dell'orologio e le condizioni concomitanti (come la sindrome delle gambe senza riposo e il tremore non parkinsoniano) possono influire sulla qualità dei risultati.
- Parky misura esplicitamente solo i sintomi a livello del polso mentre viene indossato l'Apple Watch. Tuttavia, l'Apple Watch può rilevare sintomi trasmessi attraverso il corpo da altre parti del corpo colpite, con il rischio di produrre metriche fuorvianti o errate.

2. Parky non può raccogliere dati quando l'Apple Watch è spento e non può trasmettere dati quando l'iPhone è spento.

Limitazioni (continua)

3. Senza durate di registrazione adeguate, Parky non sarà in grado di generare report dei sintomi. I report vengono generati utilizzando la seguente metodologia:
 - Gli intervalli di quindici minuti, che coprono l'intera durata della registrazione, sono organizzati in base all'ora locale dell'utente.
 - Gli intervalli con meno del 50% dei dati richiesti vengono esclusi.
 - I report settimanali e mensili mostrano le durate medie dei sintomi di tremore e discinesia di tutti i giorni con dati.
 - Nei report settimanali e mensili vengono visualizzati solo gli intervalli con dati raccolti da almeno cinque giorni o che rappresentano oltre il 20% del periodo totale.
4. I programmi di assunzione dei farmaci dipendono dalla correttezza dei dati inseriti dall'utente. Se l'utente ha difficoltà nell'utilizzo dell'app, si consiglia vivamente di fornire supporto in contesti clinici.
5. L'accuratezza delle informazioni sull'aderenza alla terapia dipende dalla risposta tempestiva e accurata dell'utente alle notifiche di promemoria dei farmaci. La mancata risposta o l'inserimento di interazioni inaccurate possono portare a risultati errati sull'aderenza alla terapia. Per mitigare questo rischio, si raccomanda vivamente agli operatori sanitari di sottolineare agli utenti l'importanza cruciale di rispondere correttamente ai promemoria.
6. Le informazioni sui passi dipendono dall'uso costante da parte dell'utente sia dell'Apple Watch sia dell'iPhone. Parky non può raccogliere i dati sui passi se l'utente non utilizza uno di questi dispositivi.
7. Se gli utenti desiderano interrompere definitivamente l'utilizzo di Parky, possono eliminare in modo permanente il proprio account. Al momento dell'eliminazione dell'account, l'utente è considerato come un abbandono e i dati sanitari e personali dell'utente verranno rimossi in modo permanente. Sia l'utente sia l'operatore sanitario perderanno l'accesso ai report Parky dell'utente.

SICUREZZA

1. L'uso di Parky e dell'Apple Watch non influisce sugli utenti con impianti per la stimolazione cerebrale profonda (DBS).
2. L'Apple Watch è resistente all'acqua ma non impermeabile. Può essere indossato e utilizzato durante l'attività fisica (l'esposizione al sudore è accettabile), sotto la pioggia e durante il lavaggio delle mani.
3. Faccia riferimento al documento originale del produttore relativo al manuale d'uso e alle guide per il manuale d'uso dell'hardware dell'Apple Watch:
<https://help.apple.com/pdf/watch/8/.../apple-watch-user-guide>
4. Guida per l'Apple Watch: <https://support.apple.com/en-us/HT204665>
5. L'Apple Watch è conforme alle seguenti norme EMC ed elettriche: la sicurezza elettrica è stata valutata secondo la norma IEC 62368-1 (2014), "Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements." L'Apple Watch è conforme alle norme UE EN 301 489-1 (V2.2.20), EN 301 489-3 (V2.1.1), EN 301 489-17 (V3.2.0) e EN 301 489-52 (V1.1.0).

AVVERTENZE E PRECAUZIONI GENERALI

- Non utilizzare l'app Parky per scopi diversi dalla registrazione del movimento di un paziente con un disturbo del movimento.
- L'app Parky è destinata esclusivamente a fungere da supporto ai metodi clinici esistenti. Non è destinata a essere l'unico o il principale mezzo di valutazione clinica.
- h2o therapeutics sconsiglia l'uso dell'app Parky per i pazienti che non sono in grado di interagire con l'app Parky su iOS o watchOS.
- I risultati non motori, le osservazioni del paziente e le visite cliniche devono sempre essere coinvolti nel processo decisionale.
- Si consiglia vivamente di confrontare i risultati di Parky con i risultati clinici e con le osservazioni riferite dal paziente.
- Al primo utilizzo, per verificare la coerenza del flusso di dati, si consiglia di osservare attentamente i risultati del paziente per 3-5 giorni per paziente. Questo periodo consentirebbe anche di rilevare eventuali problemi tecnici.
- Si deve consigliare ai pazienti di indossare l'Apple Watch sul braccio più colpito.
- Si incoraggiano i pazienti o i caregiver a inserire il programma di assunzione dei farmaci. Se il paziente non è in grado di farlo in autonomia o con l'aiuto dei propri caregiver, si raccomanda agli operatori sanitari di offrire assistenza in contesti clinici.
- I pazienti non devono autovalutare l'andamento della propria malattia basandosi esclusivamente sui dati dell'app Parky.
- In caso di malfunzionamento dell'app Parky, i pazienti devono assumere i farmaci come prescritto.
- L'app Parky non comporta alcuna valutazione implicita dei farmaci.

SICUREZZA DEI DATI

1. Parky raccoglie i dati di movimento solo quando l'utente indossa un Apple Watch.
2. Oltre ai dati di movimento, Parky non raccoglie dati relativi ad attività mobili e telefoniche, allo schermo o all'utilizzo delle app.
3. I dati dell'utente possono essere condivisi esclusivamente con l'operatore sanitario per il quale l'utente o il caregiver ha fornito il consenso e possono essere condivisi con un solo operatore sanitario alla volta.
4. I dati dell'utente, comprese le informazioni personali identificabili, vengono archiviati su server conformi alle norme HIPAA utilizzando l'Advanced Encryption Standard (AES256). I dati dell'utente non vengono mai condivisi con terze parti, ad eccezione dell'operatore sanitario autorizzato.
5. Si consiglia di installare un software di sicurezza mobile per garantire ulteriormente la sicurezza del dispositivo.

EVENTI AVVERSI

1. Se i report dei sintomi dell'utente non corrispondono alle aspettative dell'operatore sanitario, interrompa immediatamente l'uso di Parky durante la pratica clinica.
2. In caso di sospetti errori di calcolo, problemi tecnici e altri eventi, contatti support@parkynow.com



h2o Therapeutics
Mustafa Kemal Mah. 2131 Cad. No:15
06510 Çankaya / Ankara / Türkiye



(01) 8685063631006
(10) P1/1.6.1
(11) 20260710



www.parkynow.com