



Welkom bij de

PARKY

GEBRUIKERSHANDLEIDING

v1.6.1

INDICATIES VOOR GEBRUIK

De Parky App is bedoeld om de kinematica van symptomen van bewegingsstoornissen te kwantificeren, waaronder tremor en dyskinesie, bij volwassenen (45 jaar of ouder) met lichte tot matige ziekte van Parkinson.

INHOUD

Aan de slag	3
Smartwatch-instellingen	7
Binnen Parky	10
Vereisten	21
Klinische interpretatie	22
Algemene instructies	23
Beperkingen	24
Veiligheid	26
Algemene waarschuwingen	27
Gegevensbeveiliging	28

Maak kennis met Parky

Parky is een hulpmiddel voor monitoring op afstand, ontworpen voor de continue, objectieve beoordeling van motorische symptomen van de ziekte van Parkinson, zoals tremoren en dyskinesie. Het kwantificeert bewegingssensorgegevens via de Apple Watch en levert realtime symptoomprofielrapporten ter ondersteuning van patiëntbeheer.

Parky maakt gebruik van het klinisch gevalideerde Motor Fluctuations Monitor for Parkinson's Disease (MM4PD) algoritme, ontwikkeld door Apple Inc. (Powers et al., 2021¹)

Voor het klinische studierapport, bezoek <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536284/>

Voor wie is Parky bedoeld?

- Parky is alleen bedoeld voor gebruikers met een klinisch gediagnosticeerde idiopathische ziekte van Parkinson die competent genoeg zijn om een Apple Watch en een iPhone te gebruiken.
- Parky werkt het beste voor personen die voornamelijk tremor- en dyskinesiesymptomen ervaren.
- Parky is niet ontworpen om Parkinsonsyndromen te beoordelen zoals Multisysteematrofie (MSA), Progressieve Supranucleaire Verlamming (PSP), Corticobasale Degeneratie (CBD) of Lewy Body Dementie.

¹ Powers R, Etezadi-Amoli M, Arnold EM, Kianian S, Mance I, Gibiansky M, Trietsch D, Alvarado AS, Kretlow JD, Herrington TM, Brillman S, Huang N, Lin PT, Pham HA, Ullal AV. Smartwatch inertial sensors continuously monitor real-world motor fluctuations in Parkinson's disease. Sci Transl Med. 2021 Feb 3;13(579):eabd7865. doi: 10.1126/scitranslmed.abd7865. PMID: 33536284.

Een snelle blik op Parky

Innovatieve monitoring en beoordeling

Parky biedt waardevolle inzichten door tremoren en dyskinesie in verschillende stadia van de ziekte te detecteren. Het verzamelt nauwkeurige gegevens over motorische symptomen gedurende de hele dag en maakt beoordelingen overal mogelijk, zelfs buiten gesuperviseerde omgevingen.

Medicatiebeheer en symptoominzichten

Parky zorgt ervoor dat u uw medicatie bijhoudt met handige herinneringen op uw iPhone en Apple Watch, en combineert symptoomrapporten met medicatiegebruiksgegevens. Deze combinatie biedt duidelijke, objectieve inzichten die zorgverleners helpen bij het detecteren van veranderingen in symptomen, waardoor behandelplannen worden verbeterd.

Empowerment door technologie

Parky integreert draagbare sensoren om u een betrouwbaar alternatief te bieden voor patiëntdagboeken, waardoor de subjectieve aard van zelfevaluatie wordt aangepakt en gegevenshiaten die vaak voorkomen bij het bijhouden van dagboeken worden voorkomen. Deze integratie biedt continue, passieve tracking voor naadloze monitoring van uw gezondheid.

Activiteitsregistratie en mobiliteitsondersteuning

Parky monitort niet alleen uw motorische symptomen; het houdt ook uw dagelijkse stappen bij en biedt een venster op uw fysieke activiteitsniveaus.

Aan de slag met Parky



Scan de QR-code met de camera van uw iPhone en volg de pop-up om Parky te downloaden uit de App Store.


U wordt aangemoedigd om de Parky-app te downloaden uit de App Store om de apparaatcompatibiliteit te controleren.

Machtigingen verlenen

U moet machtigingen verlenen via de hieronder getoonde prompts om Parky correct te laten functioneren. Deze machtigingen stellen Parky in staat om meldingen te verzenden en toegang te krijgen tot gegevens voor stappen, evenals bewegingsregistratie voor tremor- en dyskinesie-analyse.

Parky vertrouwt op deze machtigingen om u volledige inzichten te geven in uw fysieke activiteit, symptomen en medicatietrouw.


1

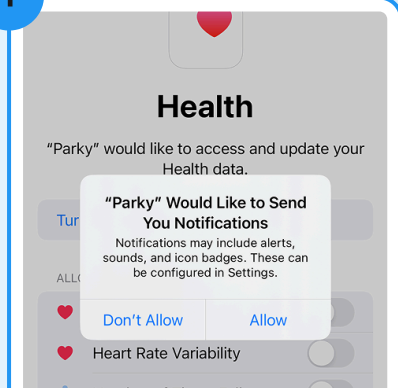

Toegang tot meldingen

Deze machtiging stelt u in staat om herinneringen en updates van Parky te ontvangen. Zonder deze machtiging ontvangt u geen meldingen voor medicatieschema's en updates.


2

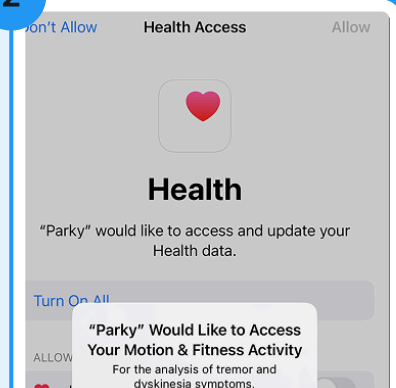

Toegang tot bewegingsgegevens

Door deze machtiging te verlenen, kan Parky uw beweging volgen, wat cruciaal is voor het monitoren van symptomen zoals tremoren en dyskinesie.

3

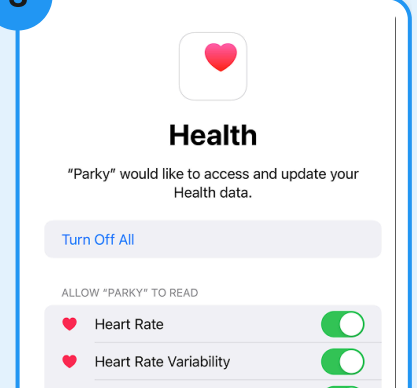


Toegang tot gezondheidsgegevens

Door toegang tot uw Gezondheidsgegevens toe te staan, kan Parky inzichten geven over uw fysieke activiteitsniveaus.



Onboarding

U begint met een onboardingproces dat behandelt hoe Parky te gebruiken, belangrijke veiligheidsinformatie en hoe wij uw gegevens beschermen.

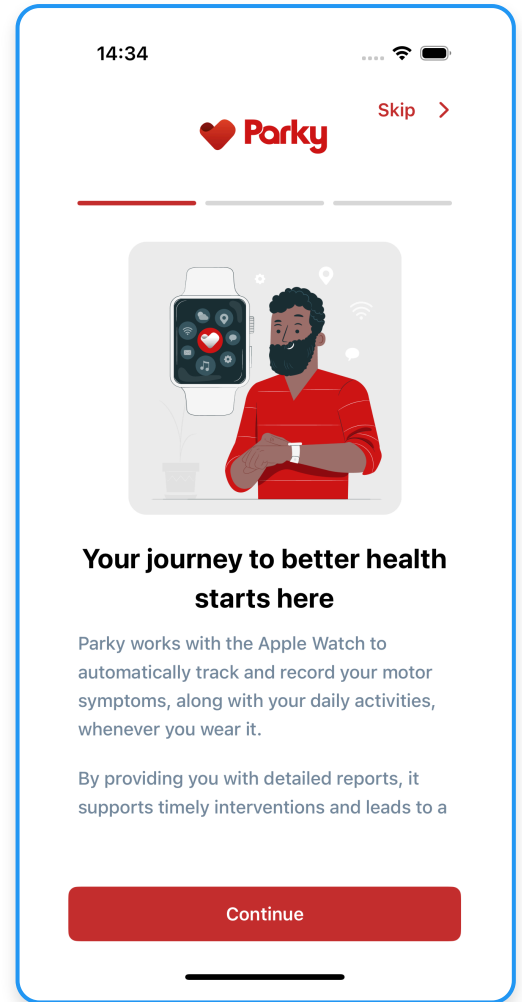

Inloggen

Na onboarding voert u uw mobiele nummer in en ontvangt u een verificatiecode via sms.

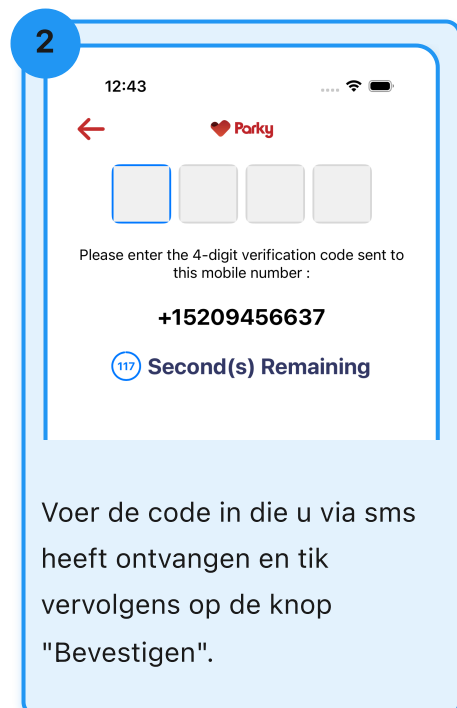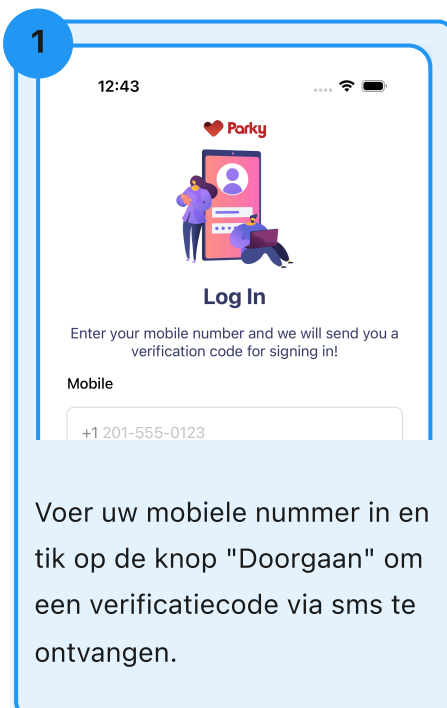

De wijzerplaatcomplicaties instellen

Volg de onderstaande stappen om Parky toe te voegen aan de wijzerplaatcomplicaties. Parky kan alleen motorische symptomen monitoren wanneer wijzerplaatcomplicaties zijn toegevoegd.

1



Tik op het scherm en houd vast.

2




Tik op "Wijzig".

3



Veeg naar links totdat de titel "Complicaties" verschijnt en selecteer een slot.

4

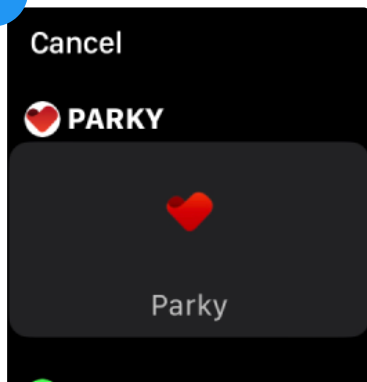

Scroll totdat "Parky" verschijnt en tik erop.

5




Klaar! Parky Complicatie toegevoegd.

Haptische waarschuwingen inschakelen


Volg de onderstaande stappen om haptische waarschuwingen op uw Apple Watch in te schakelen. Haptische waarschuwingen bieden trillingsfeedback voor Parky-meldingen.

1

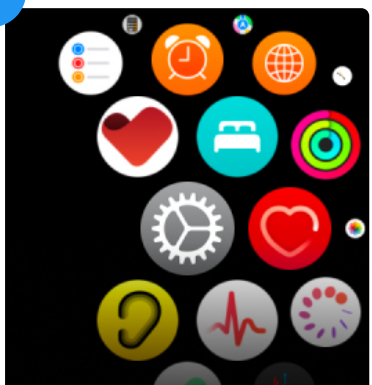


Druk op de Digital Crown van uw Apple Watch om het startscherm te zien.

2

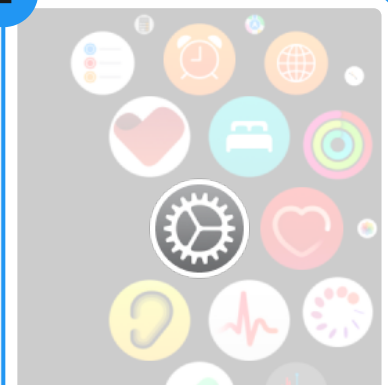


Tik op "Instellingen" in het app-pictogrammenmenu.

3

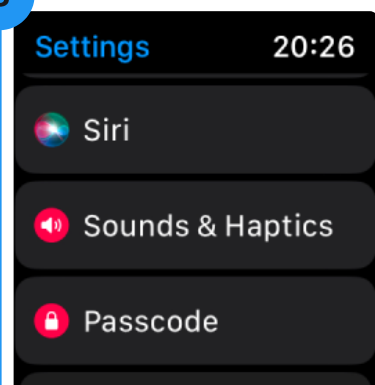


Scroll naar beneden en tik op "Horen en voelen".

4

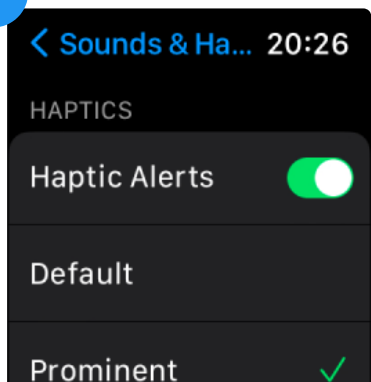

Zorg ervoor dat "Haptische waarschuwingen" is ingeschakeld door opnieuw naar beneden te scrollen.

5

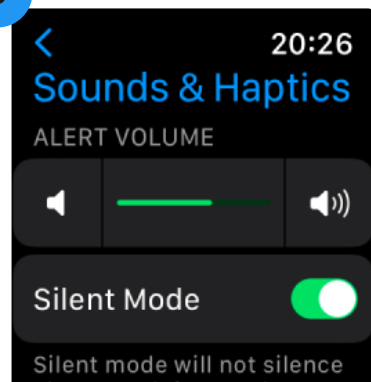

Onthoud dat het inschakelen van haptische trillingen ook geluid zal produceren.

Voor subtielere aanwijzingen kunt u altijd hier terugkomen en de "Stille modus" inschakelen.

Foggy gebruiken




Start "Foggy" door op de complicatieknop te tikken of door op de knop in de Parky-app te drukken.




Foggy begint met aanwijzingen zodra u het opent. Tik om te stoppen of laat het draaien.


Foggy aanpassen

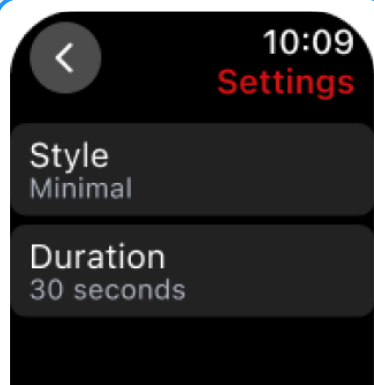

Er zijn twee instellingstypen: "Stijl" en "Duur".

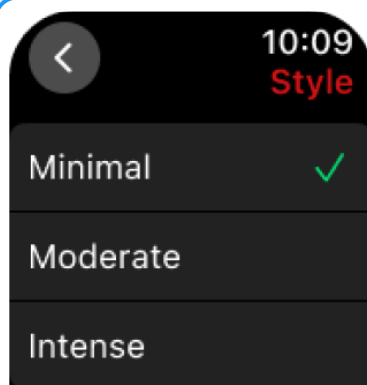


Pas uw trilfrequentie aan in het menu "Stijl".

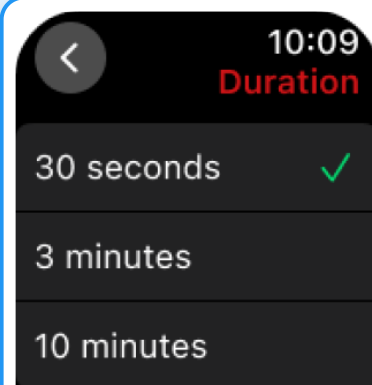

Stel de aanwijzingsduur voor Foggy in via het menu "Duur".

Binnen Parky

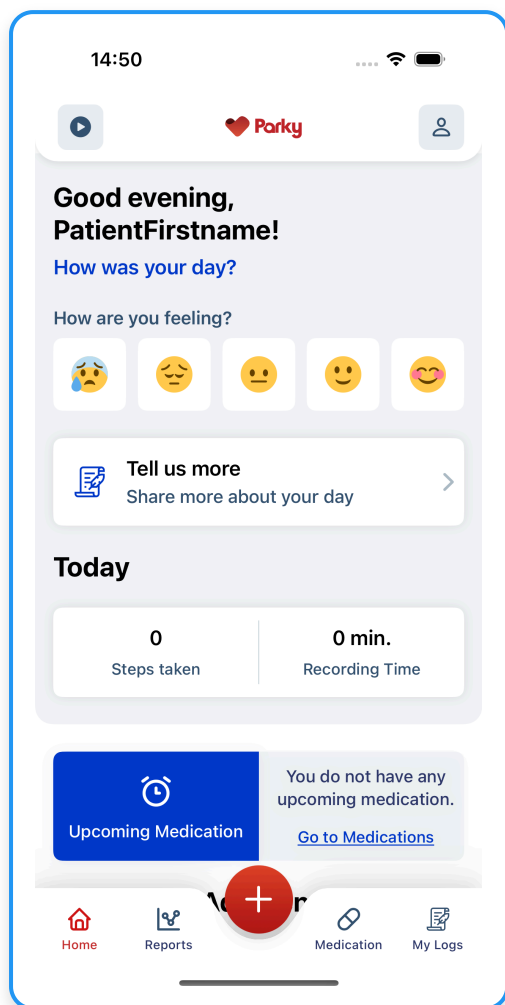

Startscherm


Het startscherm van Parky biedt een gebruiksvriendelijk dashboard waar u herinneringen voor aankomende medicatie vindt, uw dagelijkse stappen bijhoudt, opnametijden monitort en wekelijkse en maandelijkse medicatietrouw informatie bekijkt. Bovendien heeft u toegang tot een hub met bronnen voor meer informatie.

Toegang tot de rapporten

Bekijk uw symptoomrapporten op het tabblad "Rapporten".

Rapporten worden standaard dagelijks weergegeven. Selecteer het tabbladmenu om wekelijkse en maandelijkse rapporten te bekijken, inclusief retrospectieve data.

Tik op de exportknop om op elk moment een specifiek rapport als PDF te downloaden.

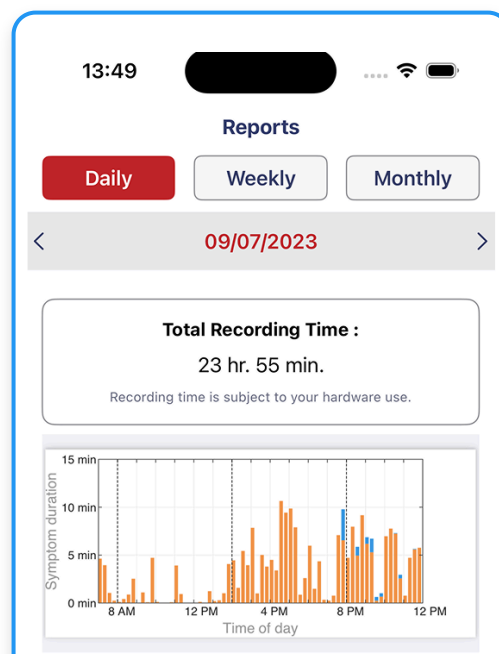




Daily report

User: Name Surname

September 07, 2023

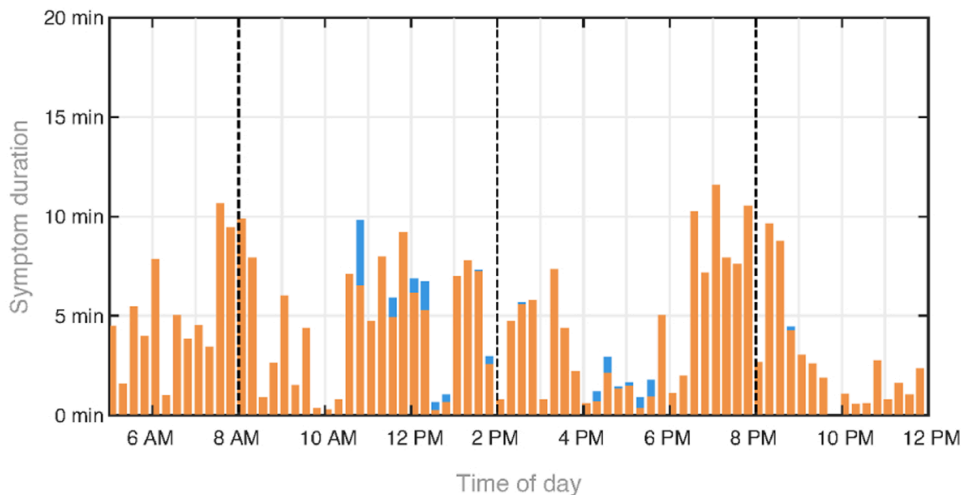

Total recording time

23 Hours 55 Minutes

Recording time is subject to users' hardware use.

Total steps

-

Step count is subject to users' hardware use.


Medication	Days	Schedule and dose	Adherence
Rasagiline	Daily	08:00 AM (1)	100%
Carbidopa / Levodopa	Daily	08:00 AM (1) 02:00 PM (1) 08:00 PM (1)	100%

Medication schedules and adherence are subject to users' input.

www.parkynow.com

Deze rapporten zijn toegankelijk voor de zorgverlener die u via de Parky-app heeft uitgenodigd, zodra zij uw uitnodiging accepteren. De zorgverlener kan uw rapporten bekijken via het Parky-portaal voor zorgverleners. Deze omvatten tremor- en dyskinesiegrafieken, medicatietrouwgegevens, stappentelling en logtijden voor een geselecteerde periode.


Loggen

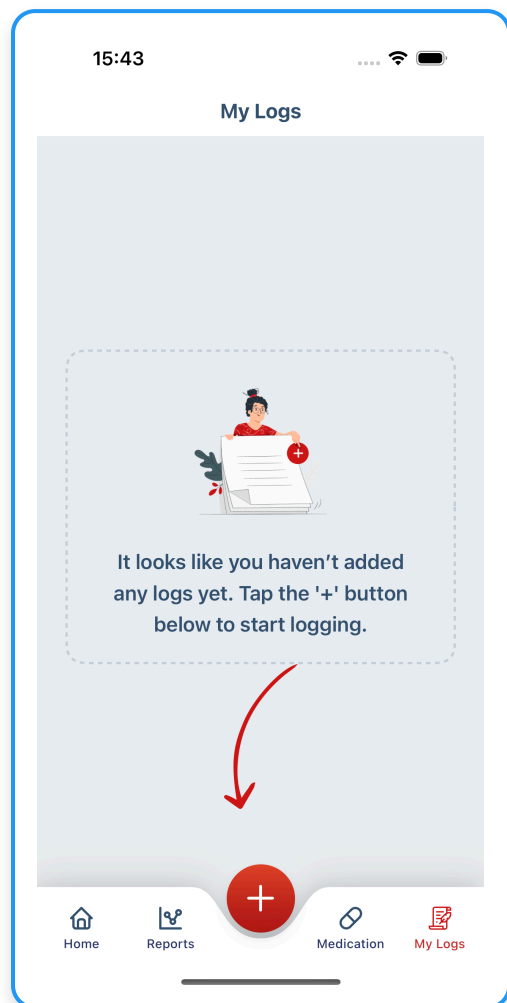

U kunt eenvoudig registreren hoe u zich gedurende de dag voelt. Helpt u in contact te blijven met uw emotionele toestand en een beter begrip van uw stemmingen op te bouwen. Begin vandaag met het volgen van uw emotionele patronen om zelfbewustzijn te verbeteren en gepersonaliseerde zorg te ondersteunen.


Logs toevoegen

U kunt uw stemming, ON / OFF-perioden of vrije aangepaste logs registreren die relevant zijn voor uw zorg.

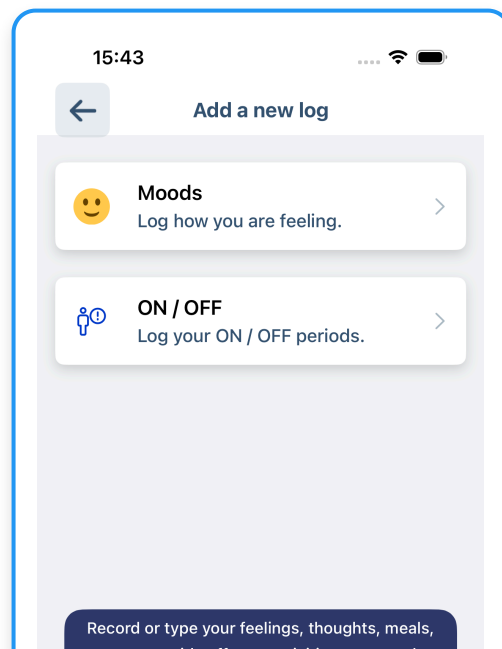


Stemmingen

U kunt uw huidige stemming gedurende de dag loggen. Na het aanpassen van de tijd van uw log, kunt u deze opslaan en bekijken in het tabblad "Mijn logs".

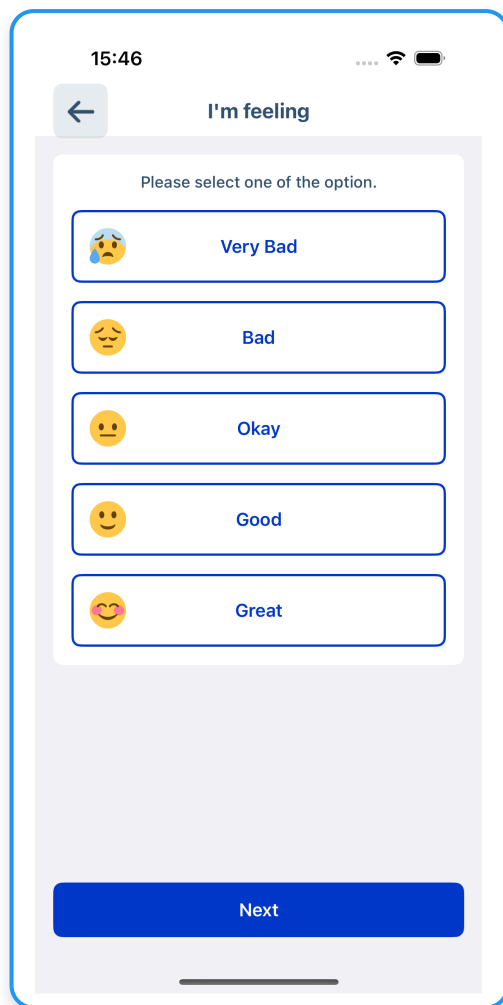


ON / OFF-perioden

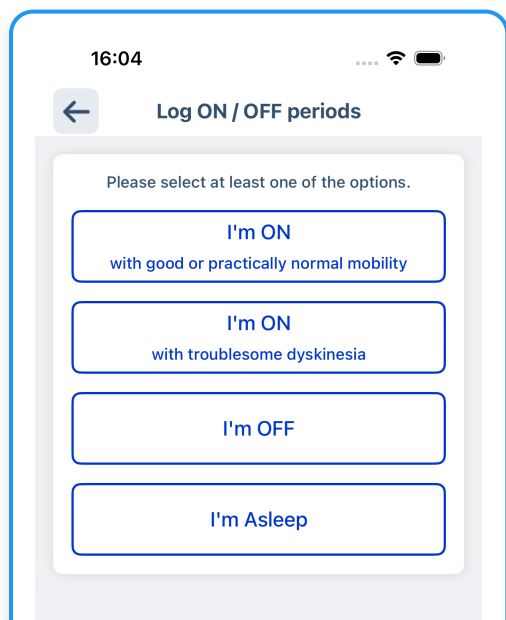

U kunt de meest geschikte ON / OFF-optie voor een periode loggen. Op dezelfde manier kunt u deze opslaan en bekijken in het tabblad "Mijn logs".


Aangepaste log met tekst

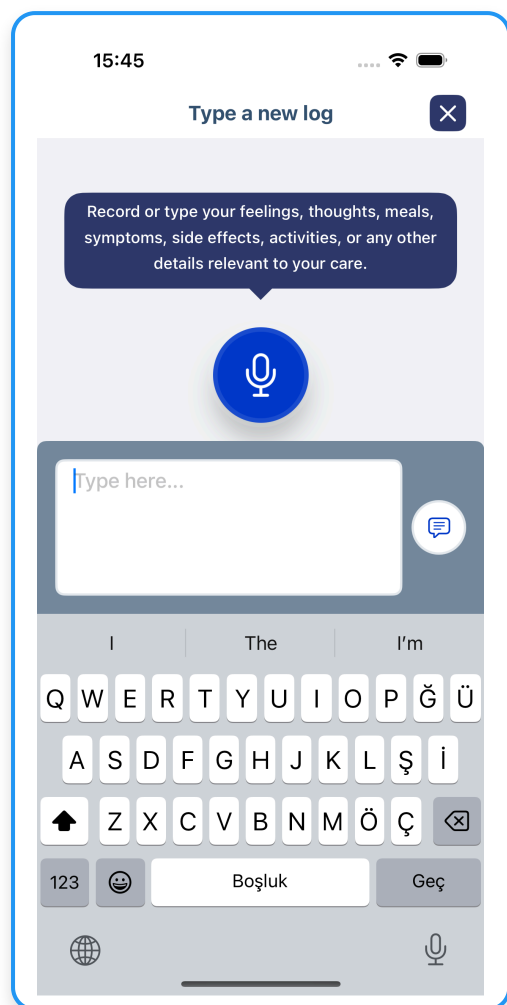


U kunt vrij typen over uw gevoelens, gedachten, maaltijden of andere details die u belangrijk vindt om te loggen. Aangepaste logs kunnen worden gemaakt met tekst- of spraakinvoer.

Aangepaste log met spraak


Neem op met uw stem. Spraakopnames hebben een tijdslimiet van 120 seconden.

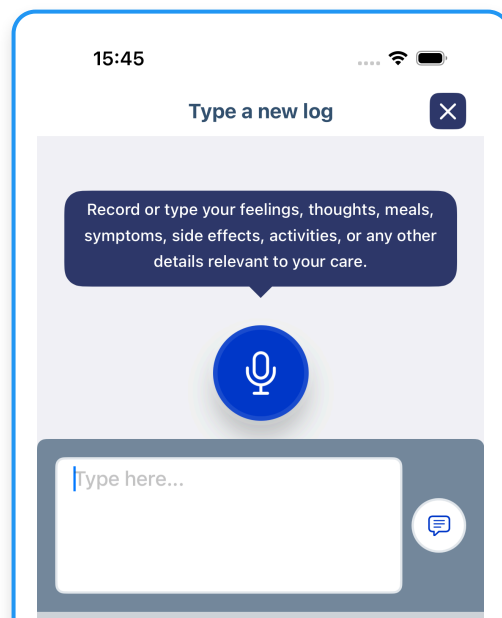


Mijn logs

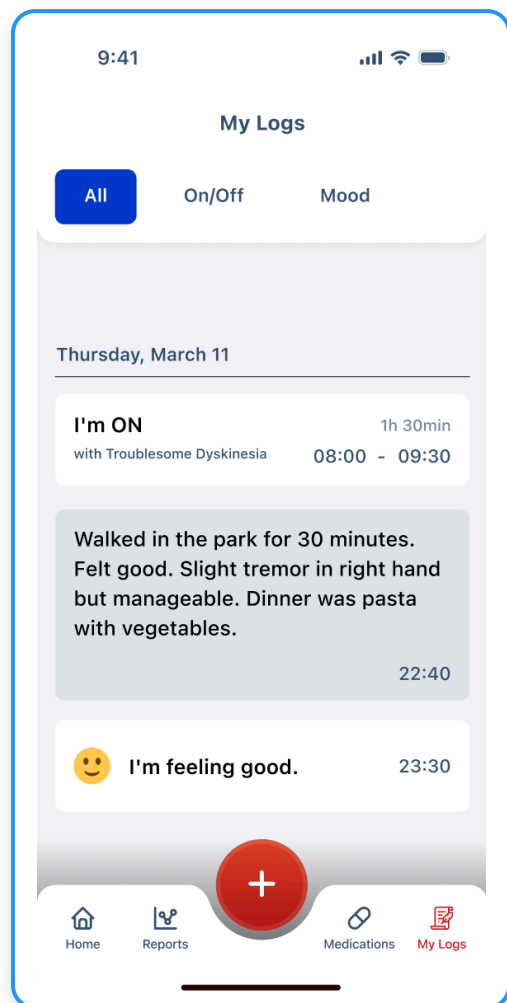


U kunt uw gelogde items als een feed bekijken via "Mijn logs" in de navigatie. U kunt beginnen met het toevoegen van uw logs door simpelweg op het "Plus"-pictogram te tikken. U kunt ook het voorbeeld van uw feed filteren.

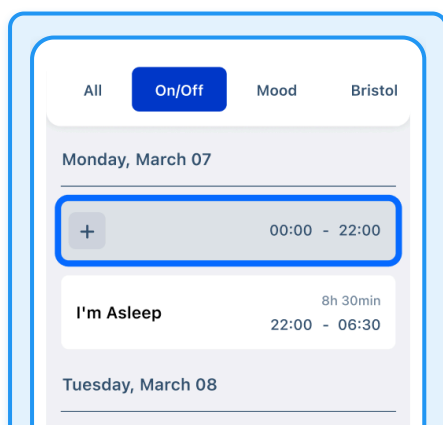

In categorieën waar continuïteit belangrijk is, kunt u eenvoudig uw ontbrekende vermeldingen herkennen. U kunt beginnen met het invullen van uw ontbrekende vermeldingen door erop te

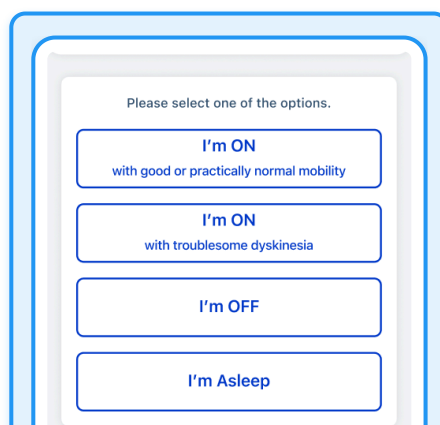


U kunt beginnen met het invullen van uw ontbrekende vermeldingen door erop te tikken.

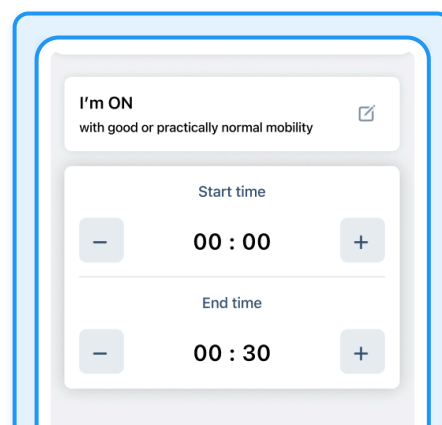


Het begint automatisch bij het begin van de ontbrekende periode.

Uw gelogde items bewerken


Begin door op het gelogde item te tikken en vast te houden dat u wilt bewerken. U kunt uw logs bewerken of verwijderen door erop te tikken en vast te houden.

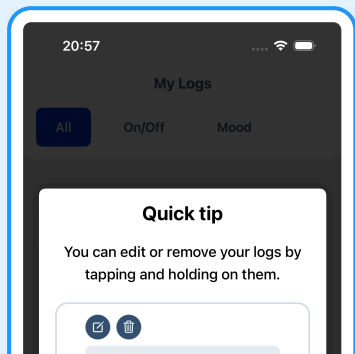


U kunt uw gelogde items bewerken door erop te tikken en vast te houden.

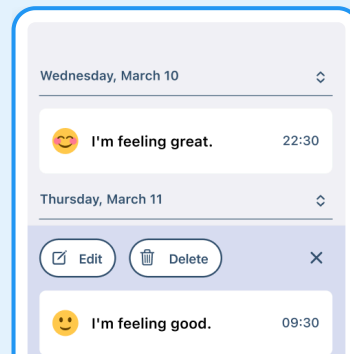

U kunt ze bewerken of verwijderen via het overlay-menu.

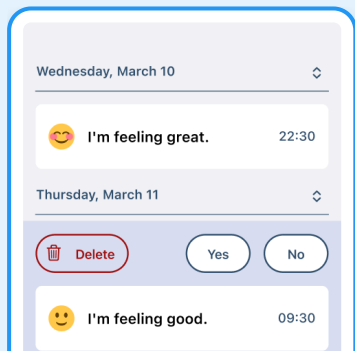

Als u op de knop "Verwijderen" tikt, wordt u gevraagd te bevestigen - de log wordt permanent verwijderd.

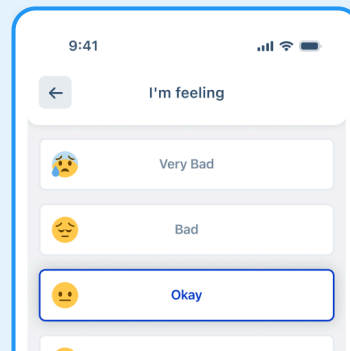


Als u op de knop "Bewerken" tikt, kunt u de details van uw log wijzigen.

Uw medicatieschema instellen

U moet uw correcte medicatieschema invoeren om het meeste uit Parky te halen. Als uw behandelplan verandert, kunt u uw medicatieschema op elk moment bewerken of verwijderen.


Begin door op "Medicatie" in het onderste menu te tikken.

1

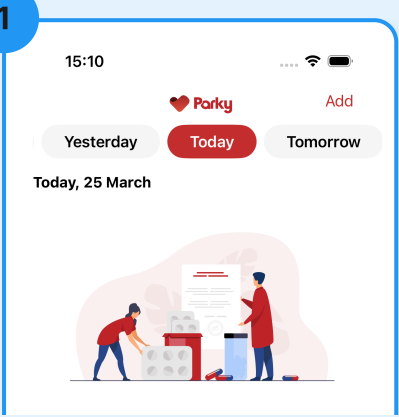


Tik op "Medicatie toevoegen" om te beginnen met het toevoegen van uw recepten, één voor één.

2

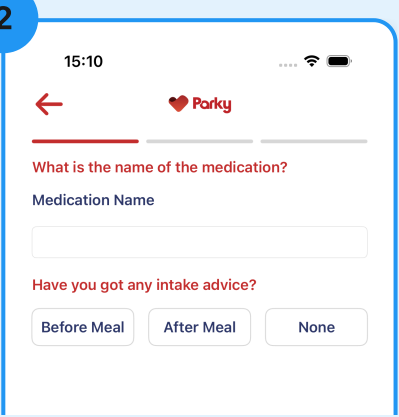


U wordt gevraagd de naam van het medicijn en inname-advies in te voeren.

3

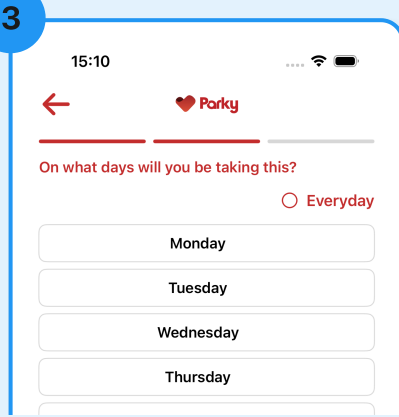


Kies op welke dagen u uw medicatie inneemt.

4

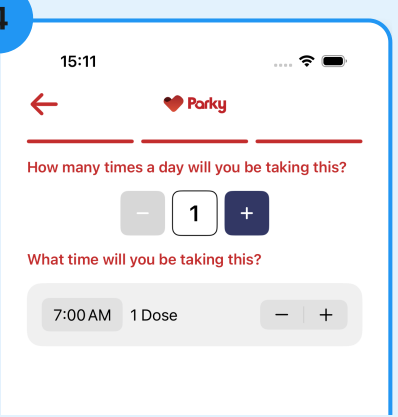

Voer de tijden en doses van de medicatie in.


5

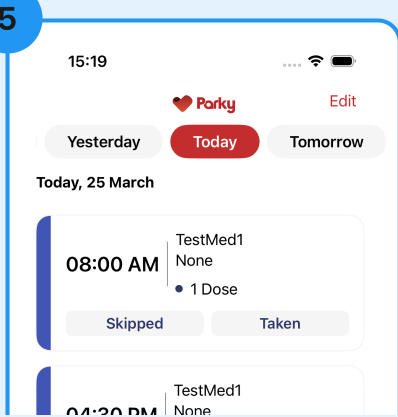

Tik op de knop "Medicatie bewerken" om uw medicatie te bewerken of te verwijderen.


Medicatieherinneringen gebruiken

- U ontvangt herinneringsmeldingen op basis van de dagen en tijden die in uw medicatieschema zijn ingesteld.
- U kunt uw medicatie als "Ingenomen" of "Overgeslagen" markeren op uw iPhone of Apple Watch.
- Als u een melding mist, kunt u later nog steeds reageren via het tabblad "Medicatie".
- Om ervoor te zorgen dat uw medicatietrouw informatie nauwkeurig is, reageer snel en correct op medicatieherinneringen.

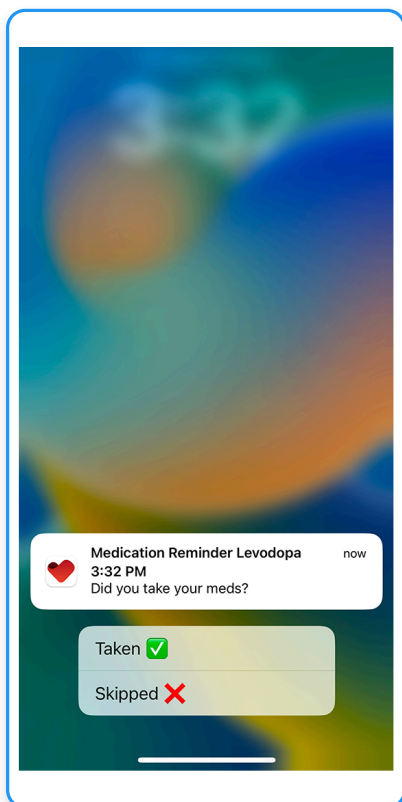

U kunt op de herinneringen reageren als "Ingenomen" of "Overgeslagen" op uw iPhone of Apple Watch.

Reageer op herinneringen met "Ingenomen" of "Overgeslagen".

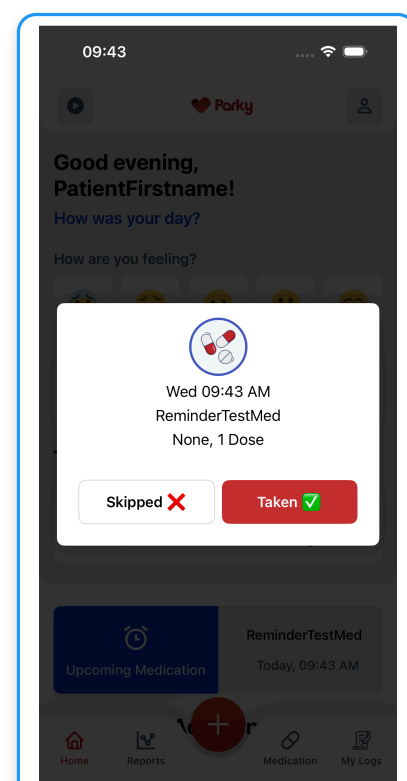


Profielscherm

U kunt uw status, persoonlijke informatie en tijdzone bekijken in het tabblad "Profiel".

U kunt contact met ons opnemen voor hulp of oplossingen vinden voor veelvoorkomende problemen in de secties "Contact opnemen" en "Support & probleemoplossing".

Mis ons "Kenniscentrum" niet op hetzelfde tabblad, waar u belangrijke informatie over Parky vindt, hoe u uw gegevens veilig houdt, voorbeeldrapporten en onze algemene voorwaarden samen met het privacybeleid.

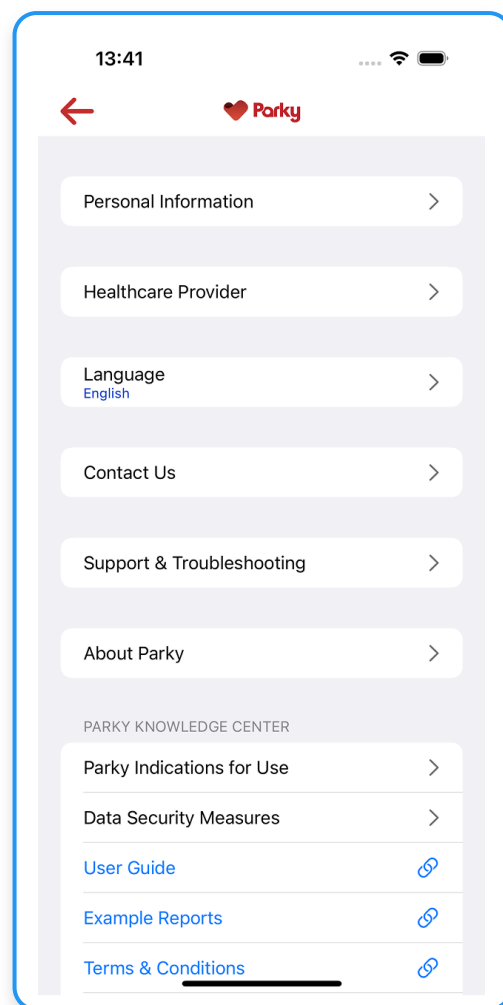


Een zorgverlener toevoegen

U kunt ervoor kiezen om een zorgverlener aan te wijzen door hun professionele informatie te delen via de Parky-app.

Eenmaal aangewezen, krijgt de zorgverlener toegang tot al uw gezondheidsgegevens via het Parky-portaal voor zorgverleners.


U kunt de aangewezen zorgverlener op elk moment verwijderen, waardoor zij geen toegang meer hebben tot zowel vroegere als toekomstige gegevens.

1

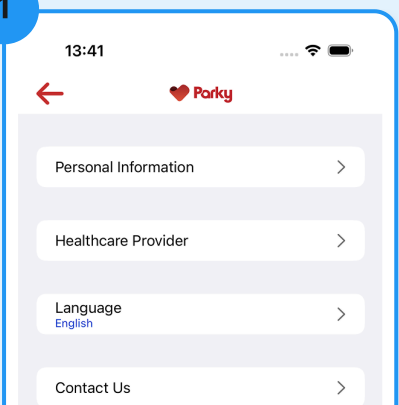


Tik op "Zorgverlener" vanuit Profiel

2

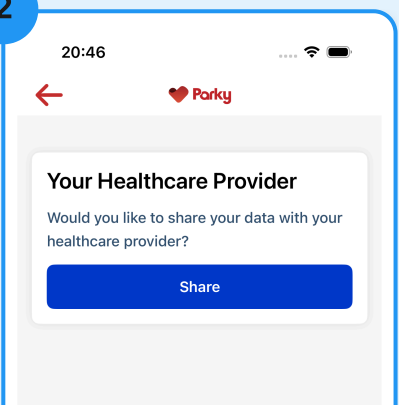


Tik op "Delen"

3

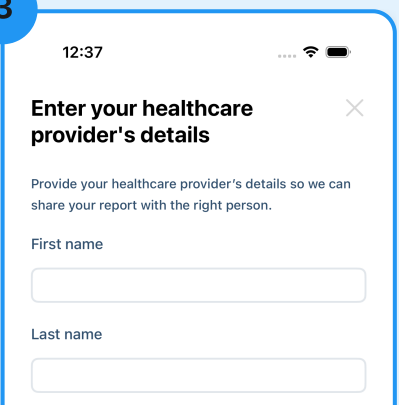


Voer de gegevens van uw zorgverlener in

4

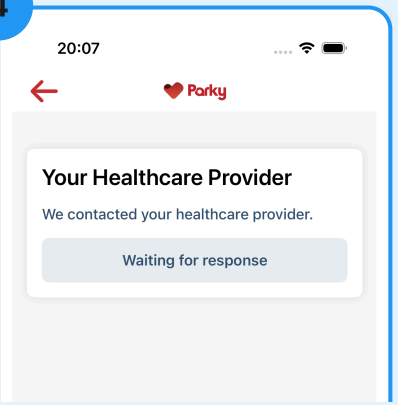


Uw zorgverlener moet de uitnodiging accepteren

5

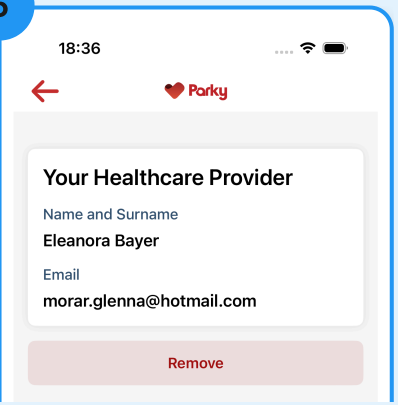

Uw zorgverlener kan nu uw gegevens bekijken

BELANGRIJKE IN-APP WAARSCHUWING

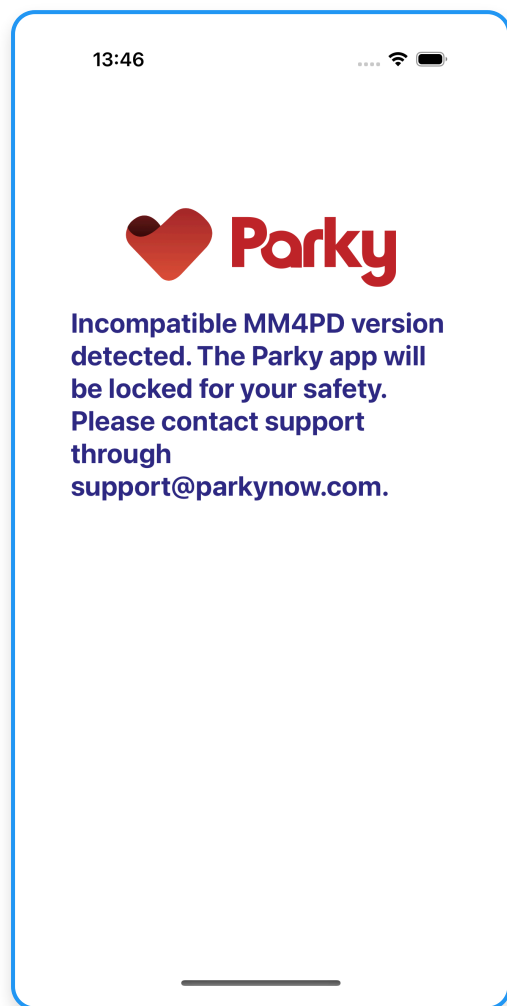

Bij initialisatie voert Parky een verificatieproces uit voor eventuele MM4PD-versiewijzigingen en bevestigt apparaatcompatibiliteit om de veilige en efficiënte werking van de functies te waarborgen.

Als er een foutschermd verschijnt, zoals links weergegeven in de Parky-applicatie, betekent dit dat Parky niet compatibel is met het huidige apparaat, besturingssysteem of softwareversie.

Hardware- en Softwarevereisten

Parky wordt ondersteund op:

- Apple Watch Series 4 (of nieuwer) apparaten met watchOS 10+
- iPhone XS (of nieuwer) apparaten met iOS 17+

Klinische interpretatie van rapporten

1. Elk rapport bevat motorische fluctuatiesymptomen, opnametijd en getelde stappen. Als de gebruiker inlogt op het medicatieplan en informatie verstrekt over het innemen van medicatie, kan ook de medicatietrouw worden gezien.
2. In het symptoomrapport toont de x-as de tijd en de y-as de symptoomduur.
3. De legenda voor tremor, dyskinesie, geen opnametijden en voorgeschreven medicatietijden wordt onder de grafiek weergegeven.
4. Symptomen worden gedurende de opnametijd verzameld en gemeten en worden in de grafiek gepresenteerd met intervallen van 15 minuten.
5. De gerapporteerde symptomen zijn de gemiddelde symptoomduren van dyskinesie en tremor.
6. De rapporten sluiten gegevens uit die waarschijnlijk geen enkel motorisch symptoom vertegenwoordigen. Een leeg staafdiagram wordt verwacht voor een asymptomatische gebruiker of een gebruiker zonder opname.
7. Opnametijd geeft de totale tijd aan dat de gebruiker het apparaat correct heeft gebruikt en dat er geen technische problemen waren met betrekking tot symptoommonitoring. Raadpleeg de sectie "Beperkingen".
8. Zonder voldoende opnametijden worden er geen rapporten gegenereerd, zoals hierboven aangegeven.
9. Stippellijnen geven geplande medicatietijden aan.
10. Medicatietrouw informatie toont het aantal "ingenomen" medicijnen ten opzichte van het aantal geplande medicijnen voor een bepaald tijdsinterval (wekelijks als de laatste zeven dagen of maandelijks als de laatste 30 dagen). "Ingenomen" medicijnen worden berekend op basis van gebruikersinvoer.
11. Stappentelling geeft de mobiliteit van de gebruiker aan en wordt weergegeven als het totale aantal binnen een bepaald tijdsinterval (dagelijks, wekelijks of maandelijks).

HET GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Monitoring op afstand van tremor- en dyskinesiesymptomen biedt de zorgverlener een objectief beeld van de motorische symptomen van de ziekte van Parkinson van de gebruiker buiten de kliniek. Wanneer geëvalueerd met niet-motorische symptomen, gebruikersinzichten en bevindingen uit kliniekbezoeken, ondersteunt Parky het patiëntbeheer.

ALGEMENE INSTRUCTIES

1. Gebruikers moeten de Apple Watch te allen tijde op hun meest aangedane arm dragen.
2. Het opladen van de Apple Watch wordt aanbevolen tijdens de inactieve uren van de gebruiker (bij voorkeur tijdens de nachtrust).
3. Parky kan geen symptomen monitoren wanneer de Apple Watch niet wordt gedragen, wat gegevenshiaten zou veroorzaken.
4. Zonder voldoende opnametijden kan Parky geen symptoomrapporten genereren. Zie de sectie "Beperkingen" voor meer informatie.
5. De Parky-app mag niet worden verwijderd van de iPhone of de Apple Watch.
6. Gebruikers moeten het correcte medicatieschema invoeren om de betrouwbaarheid van de medicatietrouwoutput te waarborgen. Het instellen van het medicatieschema wordt aanbevolen in een klinische omgeving als de gebruiker of mantelzorger dit niet alleen kan doen.
7. Gebruikers moeten tijdig en correct reageren op medicatieherinneringen.

Beperkingen

1. Parky werkt onder de volgende beperkingen:

- Parky werkt alleen op Apple Watch en iPhone met het MM4PD-algoritme ontwikkeld door Apple.
- Parky werkt niet op niet-ondersteunde apparaten.
- Parky wordt geadviseerd te gebruiken voor idiopathische ziekte van Parkinson en niet voor andere Parkinson-syndromen zoals progressieve supranucleaire verlamming (PSP), multisysteematrofie (MSA), Lewy en corticobasale degeneratie (CBD).
- De gebruiker moet de Apple Watch op de meest aangedane arm dragen.
- Dyskinetische symptoomtracking moet alleen worden overwogen voor gebruikers met chorea aan de aangedane arm, hetzij zelfgerapporteerd of gediagnosticeerd door een zorgverlener.
- Parky volgt expliciet rusttremor; het volgt geen actietremor of posturale tremor en volgt mogelijk geen vingertremor.
- Parky volgt niet expliciet dystonie of bradykinesie.
- De resultaten kunnen fout-positieven en fout-negatieven bevatten. De activiteit van de gebruiker, de pasvorm van de horlogeband en bijkomende aandoeningen (zoals rusteloze benensyndroom en niet-Parkinson-tremor) kunnen de kwaliteit van de resultaten beïnvloeden.
- Parky meet expliciet alleen symptomen vanaf de pols terwijl de Apple Watch wordt gedragen. De Apple Watch kan echter symptomen detecteren die via het lichaam worden overgedragen vanuit andere aangedane lichaamsdelen, wat mogelijk kan leiden tot misleidende of onjuiste metingen.

2. Parky kan geen gegevens verzamelen wanneer de Apple Watch is uitgeschakeld en kan de verzamelde gegevens niet verzenden wanneer de iPhone is uitgeschakeld.

Beperkingen (vervolg)

3. Zonder adequate opnameduur kan Parky geen symptoomrapporten genereren. De rapporten worden gegenereerd met de volgende methodologie:
 - Intervallen van vijftien minuten, die de gehele duur van de opname dekken, worden georganiseerd volgens de lokale tijd van de gebruiker.
 - Intervallen met minder dan 50% van de vereiste gegevens worden uitgesloten.
 - De wekelijkse en maandelijkse rapporten tonen de gemiddelde tremor- en dyskinesiesymptoomduren van alle dagen met gegevens.
 - In de wekelijkse en maandelijkse rapporten worden alleen de intervallen met gegevens verzameld van ten minste vijf dagen of die meer dan 20% van de totale periode vertegenwoordigen, weergegeven.
4. Medicatieschema's zijn onderhevig aan de juistheid van de door de gebruiker ingevoerde gegevens. Als de gebruiker moeilijkheden heeft bij het gebruik van de app, wordt sterk geadviseerd om ondersteuning te bieden in klinische omgevingen.
5. De nauwkeurigheid van medicatietrouw informatie is afhankelijk van de snelle en nauwkeurige reactie van de gebruiker op medicatieherinneringsmeldingen. Het niet reageren of het verstrekken van onnauwkeurige interacties kan leiden tot onjuiste medicatietrouw output. Om dit risico te beperken, worden zorgverleners sterk aangemoedigd om het cruciale belang van nauwkeurige herinneringsreacties aan gebruikers te benadrukken.
6. De stappeninformatie is afhankelijk van het consistente gebruik van zowel Apple Watch als iPhone door de gebruiker. Parky kan geen stapgegevens verzamelen als de gebruiker geen van beide apparaten gebruikt.
7. Als gebruikers Parky permanent willen stoppen met gebruiken, kunnen ze hun account permanent verwijderen. Bij accountverwijdering wordt de gebruiker beschouwd als uitgevallen en worden de gezondheids- en persoonlijke gegevens van de gebruiker permanent verwijderd. Zowel de gebruiker als de zorgverlener verliezen de toegang tot de Parky-rapporten van de gebruiker.

VEILIGHEID

1. Het gebruik van Parky en Apple Watch heeft geen invloed op gebruikers met Diepe Hersenstimulatie (DBS) implantaten.
2. Apple Watch is waterbestendig maar niet waterdicht. Het kan worden gedragen en gebruikt tijdens lichaamsbeweging (blootstelling aan zweet is oké), in de regen en tijdens het wassen van de handen.
3. Raadpleeg het originele fabrikantdocument met betrekking tot de gebruikershandleiding en gidsen voor de Apple Watch hardware-gebruikershandleiding:
<https://help.apple.com/pdf/watch/8/.../apple-watch-user-guide>
4. Gids voor Apple Watch: <https://support.apple.com/en-us/HT204665>
5. Apple Watch voldoet aan de volgende EMC- en elektrische normen: Elektrische veiligheid werd beoordeeld volgens IEC 62368-1 (2014), "Audio/video, informatie- en communicatietechnologie-apparatuur – Deel 1: Veiligheidseisen." Apple Watch voldoet aan EU-normen EN 301 489-1 (V2.2.20), EN 301 489-3 (V2.1.1), EN 301 489-17 (V3.2.0) en EN 301 489-52 (V1.1.0).

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

- Gebruik de Parky-app niet voor enig ander doel dan het registreren van de beweging van een patiënt met een bewegingsstoornis.
- De Parky-app is alleen bedoeld als hulpmiddel bij bestaande klinische methoden. Het is niet bedoeld als het enige of primaire middel voor klinische beoordeling.
- h2o therapeutics raadt het gebruik van de Parky-app niet aan voor patiënten die niet in staat zijn om te interacteren met de Parky-app op iOS of watchOS.
- Niet-motorische bevindingen, patiëntinzichten en klinische bezoeken moeten altijd betrokken zijn bij de besluitvorming.
- Het wordt sterk aanbevolen om Parky-resultaten te vergelijken met klinische bevindingen en door patiënten gerapporteerde inzichten.
- Bij eerste gebruik om de consistentie van de gegevensstroom te verifiëren, wordt aanbevolen om patiëntresultaten gedurende 3 tot 5 dagen per patiënt nauwlettend te observeren. Deze periode maakt ook de detectie van eventuele technische problemen mogelijk.
- Patiënten moeten worden geadviseerd om de Apple Watch op de meest aangedane arm te dragen.
- Patiënten of mantelzorgers worden aangemoedigd om het medicatieschema in te voeren. Als de patiënt dit niet zelfstandig of met hulp van mantelzorgers kan doen, wordt zorgverleners aanbevolen om assistentie te bieden in klinische omgevingen.
- Patiënten mogen hun ziekteprogressie niet uitsluitend beoordelen met Parky-appgegevens.
- In geval van een storing van de Parky-app moeten patiënten medicatie innemen zoals voorgeschreven.
- Er is geen geïmpliceerde medicijnevaluatie door de Parky-app.

GEGEVENSBEVEILIGING

1. Parky verzamelt alleen bewegingsgegevens wanneer de gebruiker een Apple Watch draagt.
2. Naast bewegingsgegevens verzamelt Parky geen mobiele en telefoonactiviteiten, scherm- of app-gebruiksgegevens.
3. Gebruikersgegevens kunnen alleen worden gedeeld met de zorgverlener waarvoor de gebruiker of mantelzorger toestemming heeft gegeven en kunnen slechts met één zorgverlener tegelijk worden gedeeld.
4. Gebruikersgegevens, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, worden opgeslagen op HIPAA-conforme servers met Advanced Encryption Standard (AES256). Gebruikersgegevens worden nooit gedeeld met derden, behalve met geautoriseerde zorgverleners.
5. Het wordt geadviseerd om mobiele beveiligingssoftware te installeren om de beveiliging van het apparaat verder te waarborgen.

ONGEWENSTE VOORVALLEN

1. Als de symptoomrapporten van de gebruiker niet overeenkomen met de verwachtingen van de zorgverlener, stop dan onmiddellijk met het gebruik van Parky tijdens de klinische praktijk.
2. Neem in geval van vermoedelijke foutieve berekeningen, technische problemen en andere voorvallen contact op met support@parkynow.com



h2o Therapeutics
Mustafa Kemal Mah. 2131 Cad. No:15
06510 Çankaya / Ankara / Türkiye



(01)8685063631006
(10)P1/1.6.1
(11)20260710



www.parkynow.com