



Bem-vindo ao

# **GUIA DO UTILIZADOR PARKY**

v1.6.1

# DECLARAÇÃO DE INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A aplicação Parky destina-se a quantificar a cinemática dos sintomas de perturbações do movimento, incluindo tremor e discinesia, em adultos (com 45 anos de idade ou mais) com doença de Parkinson ligeira a moderada.

# ÍNDICE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Primeiros passos</b>         | <b>3</b>  |
| <b>Definições do smartwatch</b> | <b>7</b>  |
| <b>Dentro do Parky</b>          | <b>10</b> |
| <b>Requisitos</b>               | <b>21</b> |
| <b>Interpretação clínica</b>    | <b>22</b> |
| <b>Instruções gerais</b>        | <b>23</b> |
| <b>Limitações</b>               | <b>24</b> |
| <b>Segurança</b>                | <b>26</b> |
| <b>Avisos gerais</b>            | <b>27</b> |
| <b>Segurança dos dados</b>      | <b>28</b> |

# Conheça o Parky

O Parky é uma ferramenta de monitorização remota concebida para a avaliação contínua e objetiva dos sintomas motores da doença de Parkinson, como os tremores e a discinesia. Quantifica os dados do sensor de movimento através do Apple Watch e fornece relatórios de perfil de sintomas em tempo real, apoiando a gestão do doente.

O Parky utiliza o algoritmo Motor Fluctuations Monitor for Parkinson's Disease (MM4PD), clinicamente validado e desenvolvido pela Apple Inc. (Powers et al., 2021<sup>1</sup>)

Para o relatório do estudo clínico, visite <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536284/>

---

## A quem se destina o Parky?

- O Parky destina-se apenas a utilizadores com diagnóstico clínico de doença de Parkinson idiopática que sejam suficientemente competentes para utilizar um Apple Watch e um iPhone.
- O Parky funciona melhor em pessoas que apresentam predominantemente sintomas de tremor e discinesia.
- O Parky não foi concebido para avaliar síndromes parkinsonianas como a Atrofia de Múltiplos Sistemas (MSA), a Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), a Degenerescência Corticobasal (CBD) ou a Demência de Corps de Lewy.

<sup>1</sup> Powers R, Etezadi-Amoli M, Arnold EM, Kianian S, Mance I, Gibiansky M, Trietsch D, Alvarado AS, Kretlow JD, Herrington TM, Brillman S, Huang N, Lin PT, Pham HA, Ullal AV. Smartwatch inertial sensors continuously monitor real-world motor fluctuations in Parkinson's disease. Sci Transl Med. 2021 Feb 3;13(579):eabd7865. doi: 10.1126/scitranslmed.abd7865. PMID: 33536284.

# Um olhar rápido sobre o Parky

## Monitorização e avaliação inovadoras

O Parky fornece informações valiosas ao detetar tremores e discinesia em diversas fases da doença. Recolhe dados precisos sobre os sintomas motores ao longo de todo o dia e permite avaliações em qualquer lugar, mesmo fora de ambientes supervisionados.

## Gestão da medicação e informações sobre sintomas

O Parky garante que mantém a sua medicação em dia com lembretes práticos no seu iPhone e Apple Watch, e combina os relatórios de sintomas com os dados de utilização da medicação. Esta combinação fornece informações claras e objetivas, ajudando os profissionais de saúde a detetar quaisquer alterações nos sintomas, melhorando assim os planos de tratamento.

## Capacitação através da tecnologia

O Parky integra sensores vestíveis para lhe oferecer uma alternativa fiável aos diários do doente, abordando a natureza subjetiva da autoavaliação e prevenindo as lacunas de dados frequentes na manutenção de diários. Esta integração oferece um acompanhamento contínuo e passivo, assegurando uma monitorização perfeita da sua saúde.

## Registo de atividade e apoio à mobilidade

O Parky não monitoriza apenas os seus sintomas motores; também regista os seus passos diários, proporcionando uma visão dos seus níveis de atividade física.

## Primeiros passos com o Parky



Digitalize o código QR com a câmara do seu iPhone e siga a janela emergente para descarregar o Parky da App Store.

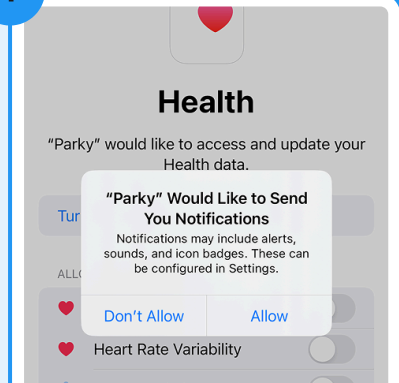
Recomendamos que descarregue a aplicação Parky da App Store para verificar a compatibilidade do dispositivo.

## Conceder autorizações

Terá de conceder as autorizações através dos pedidos apresentados abaixo para que o Parky funcione corretamente. Estas autorizações permitem ao Parky enviar notificações e aceder aos dados de passos, bem como ao registo de movimento para a análise de tremor e discinesia.

O Parky depende destas autorizações para lhe fornecer informações completas sobre a sua atividade física, sintomas e adesão à medicação.


1



### Acesso às notificações

Esta autorização permite-lhe receber lembretes e atualizações do Parky. Sem ela, não receberá notificações relativas aos horários de medicação e atualizações.

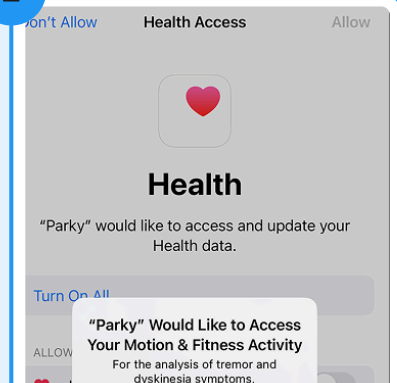
2



### Acesso aos dados de movimento

Conceder esta autorização permite ao Parky registar o seu movimento, o que é crucial para monitorizar sintomas como tremores e discinesia.

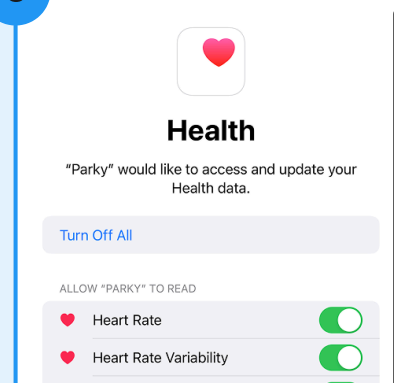3




### Acesso aos dados de saúde

Ao permitir o acesso aos seus dados de Saúde, o Parky pode fornecer informações sobre os seus níveis de atividade física.



## Integração

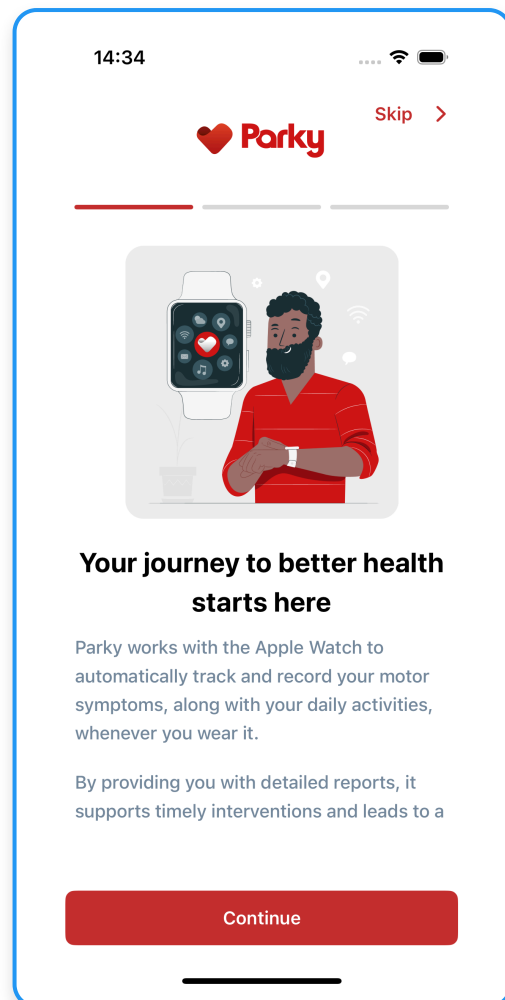Começará com um processo de integração que abrange a forma de utilizar o Parky, informações de segurança importantes e a forma como protegemos os seus dados.



## Iniciar sessão

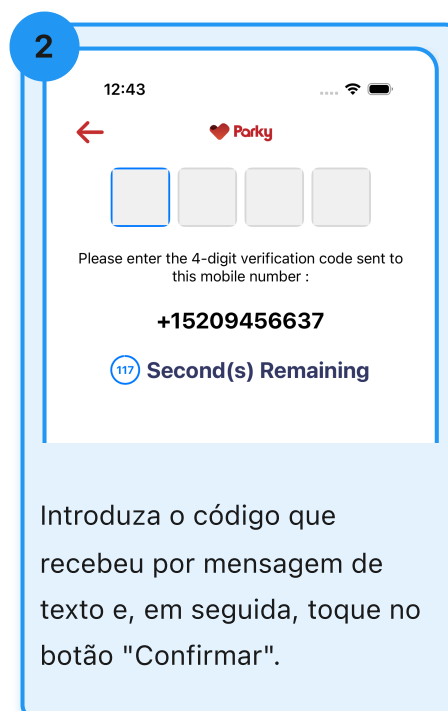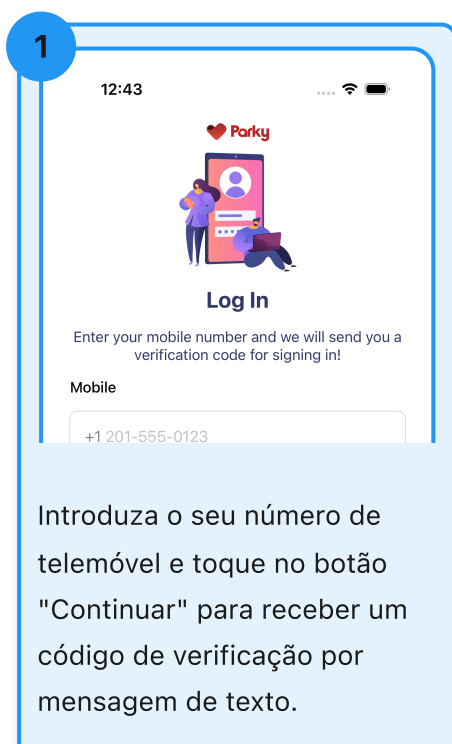Durante a integração, introduzirá o seu número de telemóvel e receberá um código de verificação por mensagem de texto.



## Configurar as complicações do mostrador do relógio

Siga os passos abaixo para adicionar o Parky às complicações do mostrador do relógio. O Parky só pode monitorizar os sintomas motores quando as complicações do mostrador do relógio estão adicionadas.

1



Toque e mantenha premido o ecrã.

2



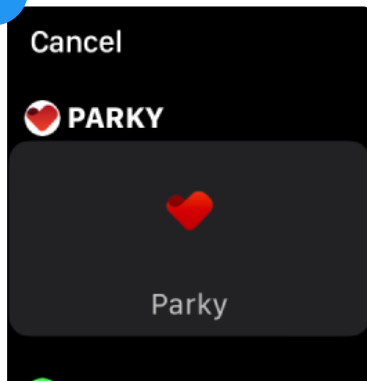
Toque em "Editar".

3



Deslize para a esquerda até surgir o título "Complicações" e selecione qualquer espaço.

4



Percorra até surgir o "Parky" e, em seguida, toque.

5




Concluído! Complicação do Parky adicionada.

## Ativar os alertas hápticos

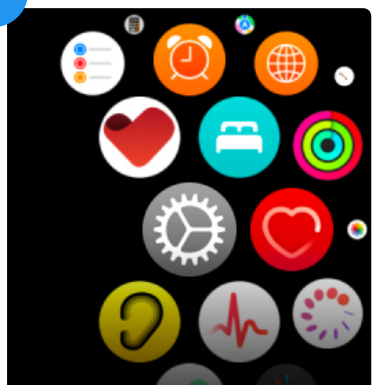
Siga os passos abaixo para ativar os alertas hápticos no seu Apple Watch. Os alertas hápticos fornecem retorno por vibração para as notificações do Parky.

1




Pressione a Digital Crown do seu Apple Watch para ver o ecrã principal.

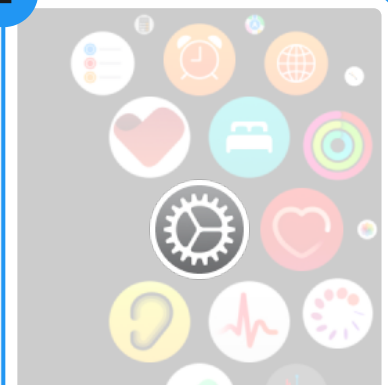2




Toque em "Definições" no menu de ícones das aplicações.

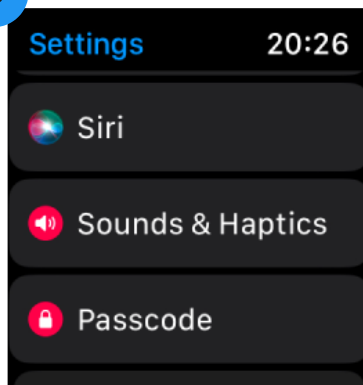3




Percorra para baixo e toque em "Sons e Háptica".

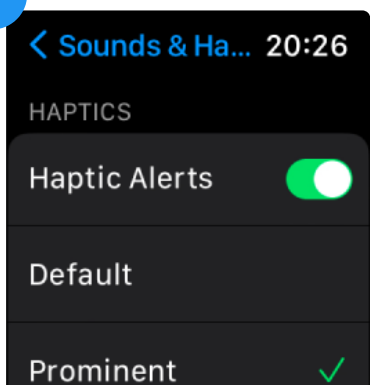4



Certifique-se de que a opção "Alertas Hápticos" está ativada, percorrendo novamente para baixo.

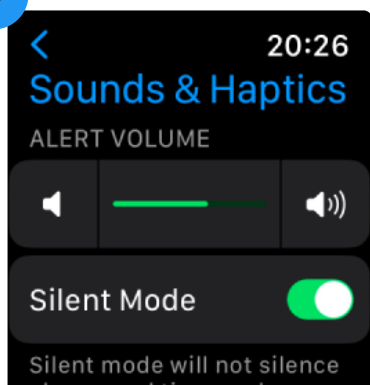5



Lembre-se de que ativar as vibrações hápticas também produzirá som.

Para indicações mais subtis, pode sempre voltar aqui e ativar o "Modo Silencioso".

## Utilizar o Foggy

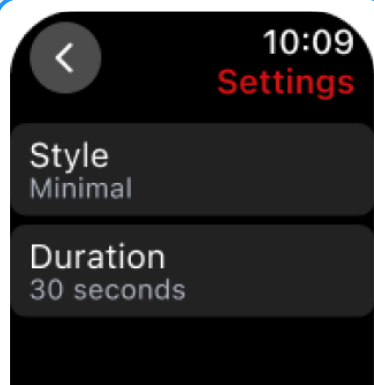


Inicie o "Foggy" tocando no botão da complicação ou pressionando o botão dentro da aplicação Parky.




O Foggy começa a emitir indicações assim que o abre. Toque para parar ou deixe-o em funcionamento.


## Personalizar o Foggy



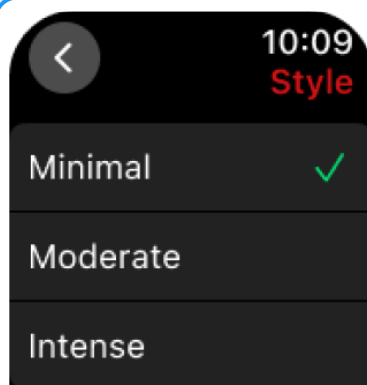Existem dois tipos de definição: "Estilo" e "Duração".




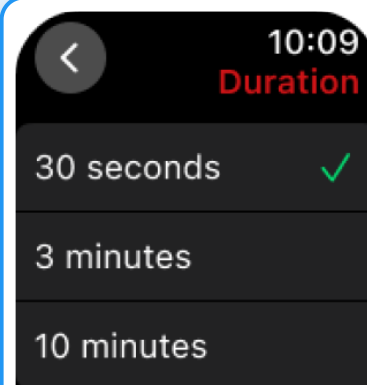Ajuste a frequência de vibração no menu "Estilo".



Defina a duração da indicação do Foggy no menu "Duração".

## Dentro do Parky

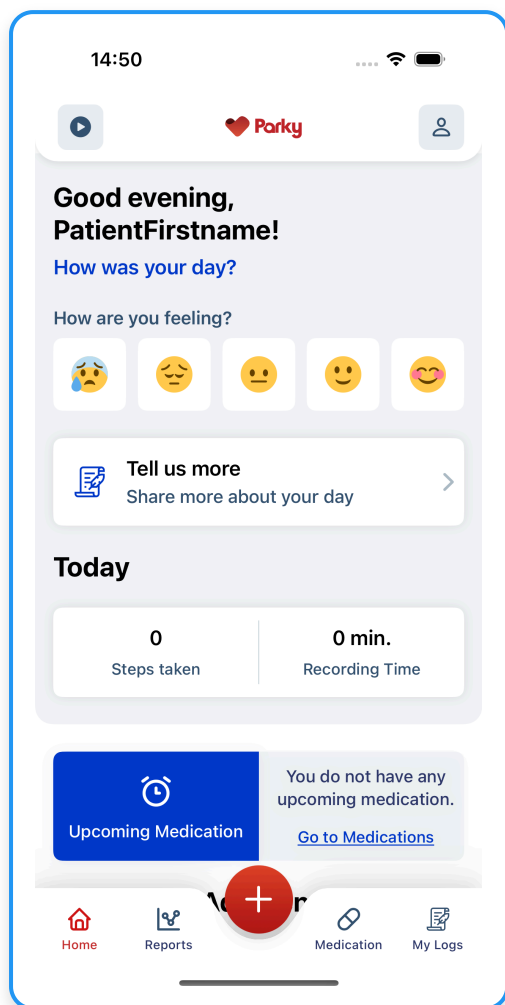

### Ecrã principal

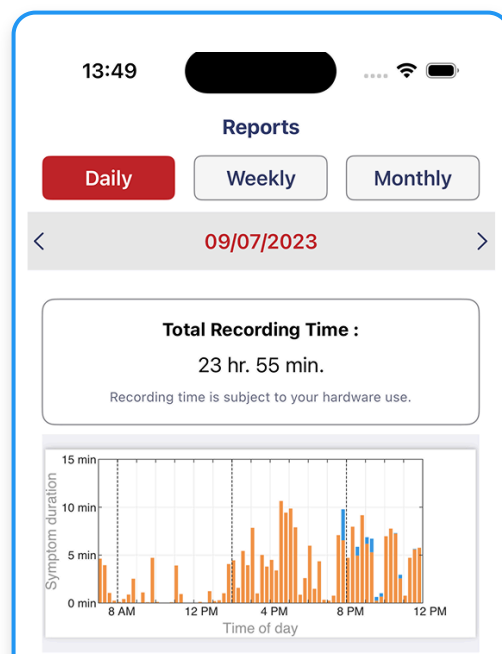
O ecrã principal do Parky oferece um painel intuitivo onde encontrará lembretes para as próximas medicações, registará os seus passos diários, monitorizará os tempos de gravação e visualizará informações sobre a adesão à medicação semanal e mensal. Além disso, terá acesso a um centro de recursos para mais informações.

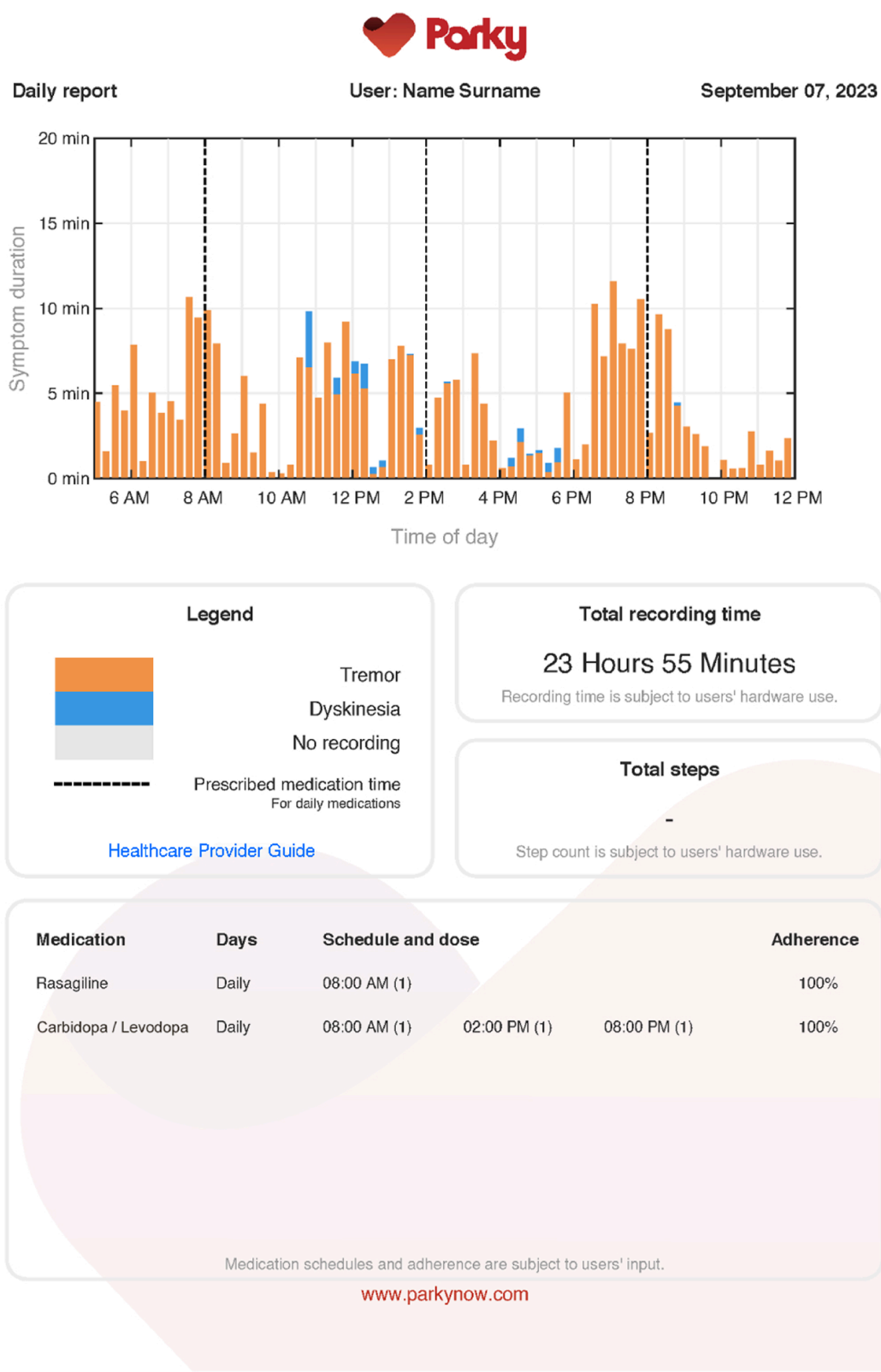
## Aceder aos relatórios

Visualize os seus relatórios de sintomas no separador "Relatórios".


Por predefinição, os relatórios são apresentados de forma diária. Selecione o menu de separadores para visualizar os relatórios semanais e mensais, incluindo datas retrospectivas.

Toque no botão de exportação para descarregar um relatório específico em PDF a qualquer momento.






## Registo

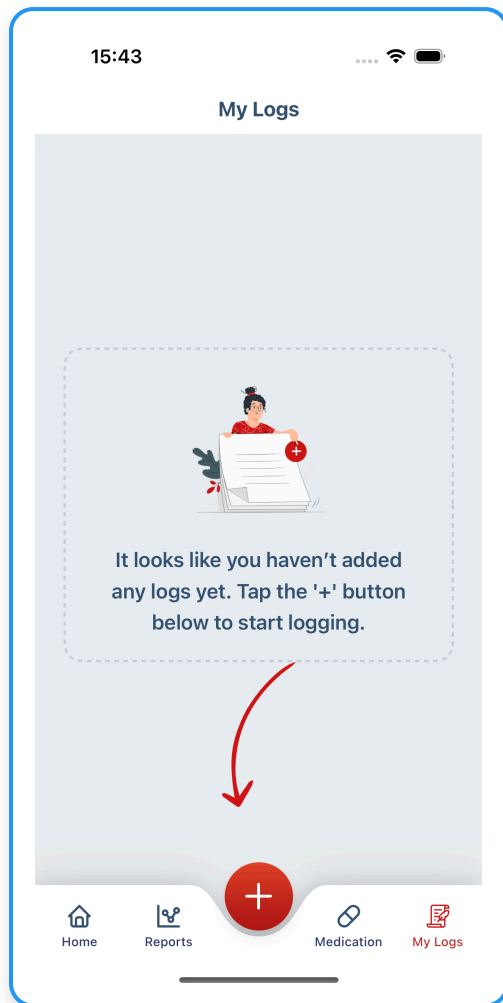

Pode facilmente registar como se sente ao longo do dia. Ajuda-o a manter-se em sintonia com o seu estado emocional e a construir uma melhor compreensão das suas disposições ao longo do tempo. Comece hoje a acompanhar os seus padrões emocionais para reforçar o autoconhecimento e apoiar cuidados personalizados.


## Adicionar registos

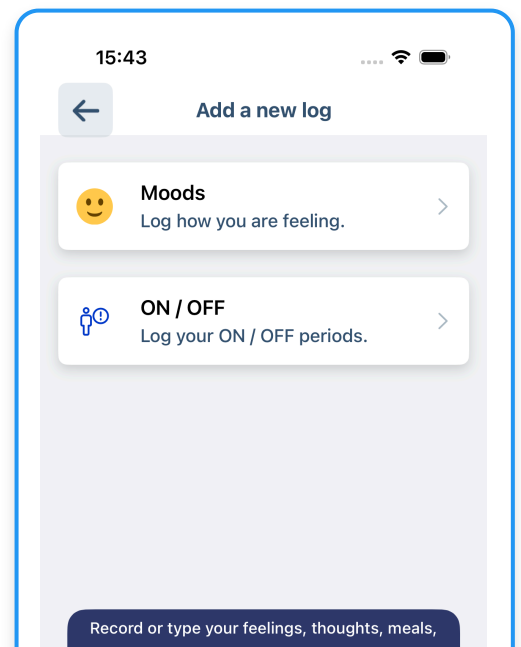Pode registar a sua disposição, os períodos ON/OFF ou um registo personalizado livre relevante para o seu acompanhamento.




## Disposições

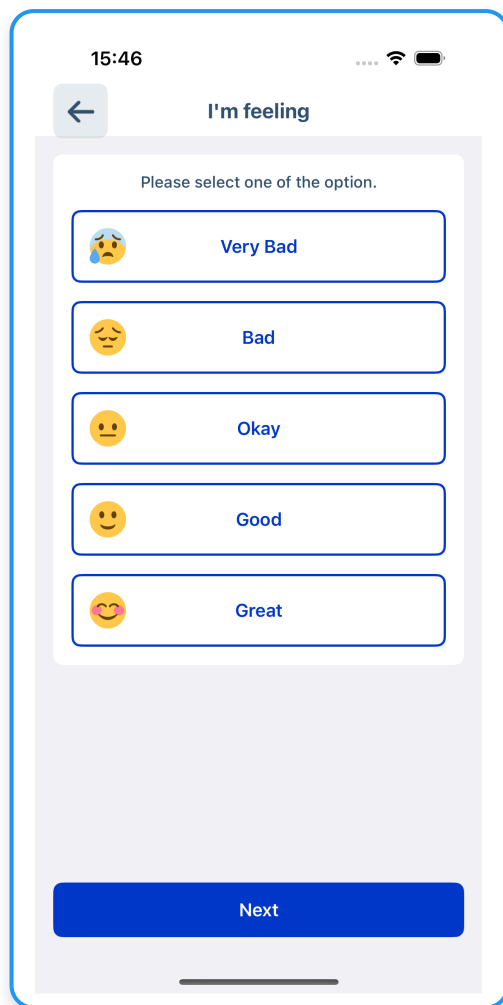Pode registar a sua disposição atual ao longo do dia. Depois de ajustar a hora do seu registo, pode guardá-lo e analisá-lo no separador "Os Meus Registos".




## Períodos ON / OFF

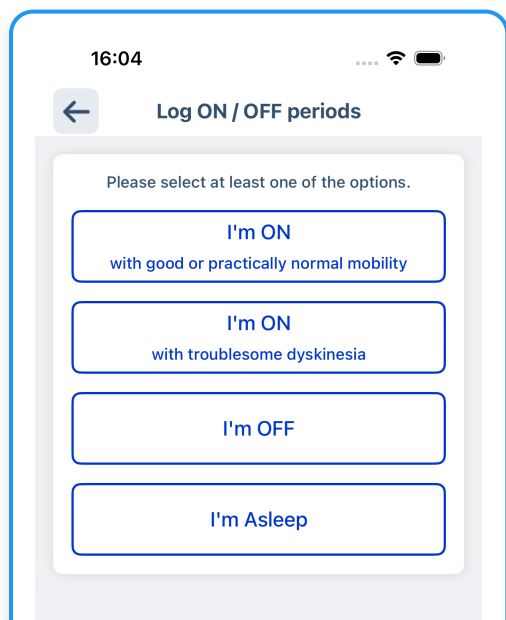

Pode registar a opção ON/OFF mais adequada para um período. Da mesma forma, pode guardá-lo e analisá-lo no separador "Os Meus Registos".


## Registo personalizado com texto

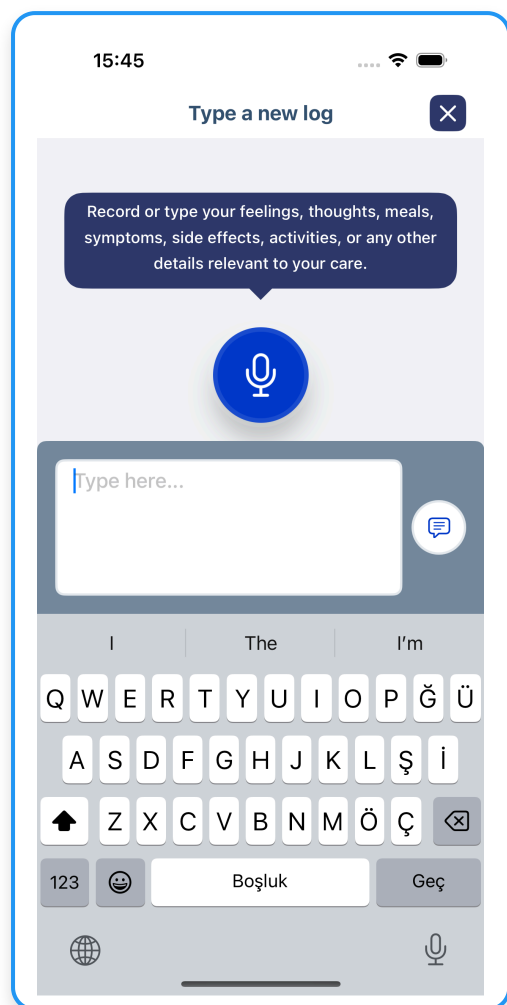


Pode escrever livremente sobre os seus sentimentos, pensamentos, refeições ou quaisquer detalhes que considere importantes registar. Os registos personalizados podem ser criados utilizando entrada de texto ou de voz.

## Registo personalizado com voz

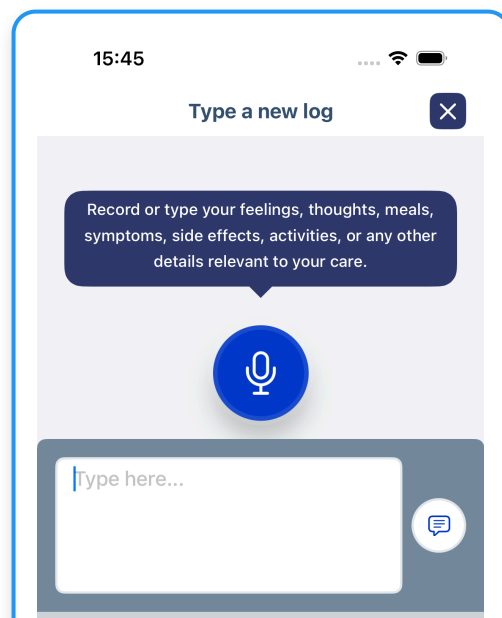
Grave utilizando a sua voz. As gravações de voz têm um limite de tempo de 120 segundos.




# Os meus registos

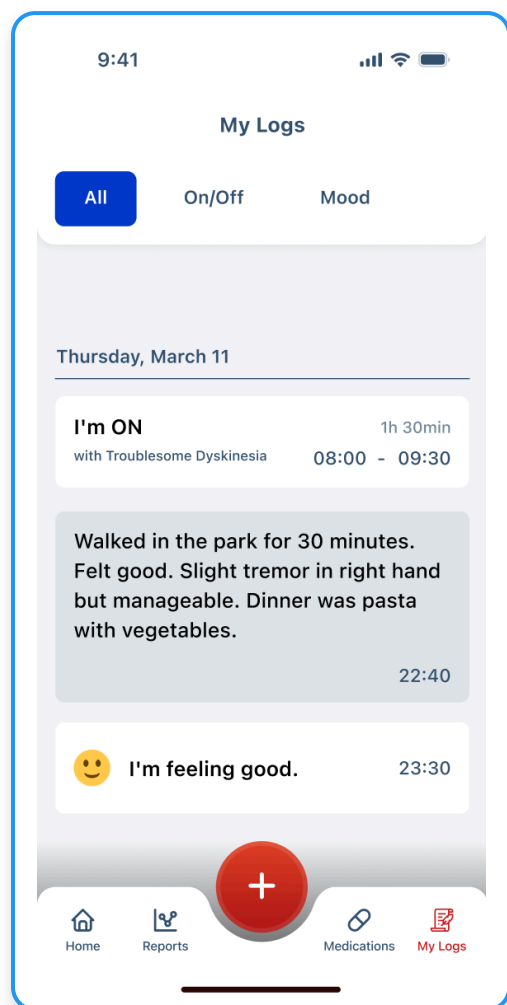

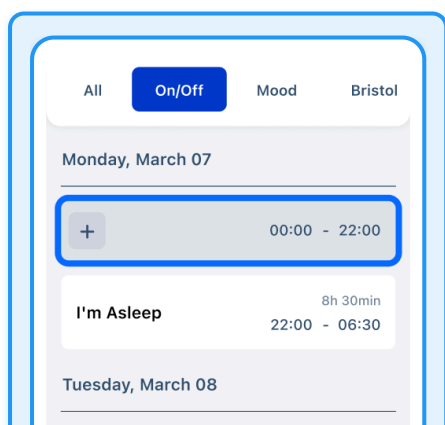
Pode pré-visualizar os seus itens registados sob a forma de um feed a partir de "Os Meus Registos" na navegação. Pode começar a adicionar os seus registos tocando simplesmente no ícone "Mais". Pode também filtrar a pré-visualização do seu feed.



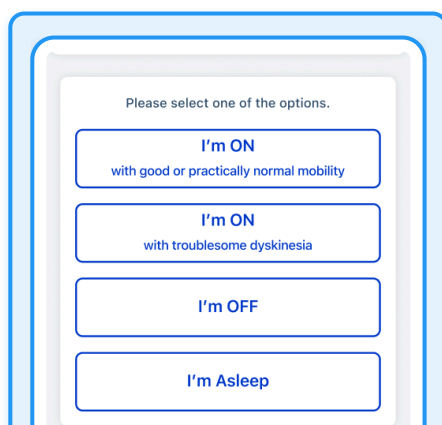Nas categorias em que a continuidade é importante, pode identificar facilmente as suas entradas em falta. Pode começar a preencher as suas entradas em falta tocando nelas.



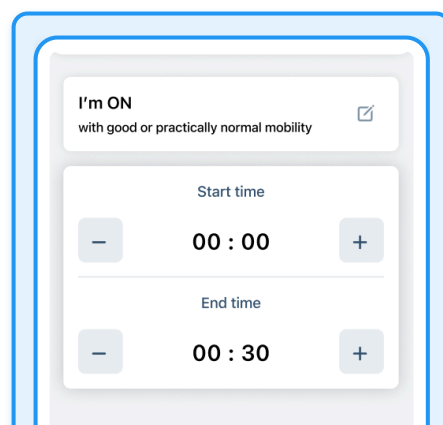
Pode começar a preencher as suas entradas em falta tocando nelas.




Começará automaticamente no início do seu período em falta.

## Editar os seus itens registados

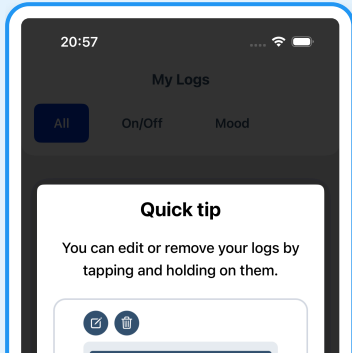
Comece por tocar e manter premido o item registado que pretende editar. Pode editar ou remover os seus registos tocando e mantendo premido sobre eles.



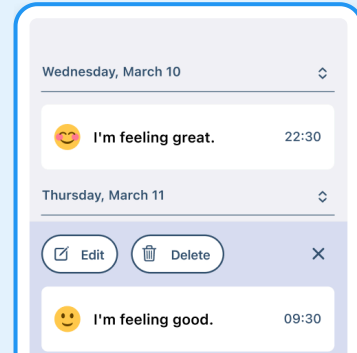
Pode editar os seus itens registados tocando e mantendo premido sobre eles.



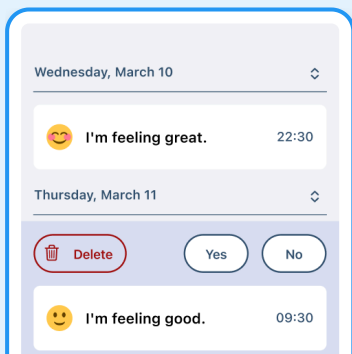Pode editá-los ou eliminá-los a partir do menu sobreposto.



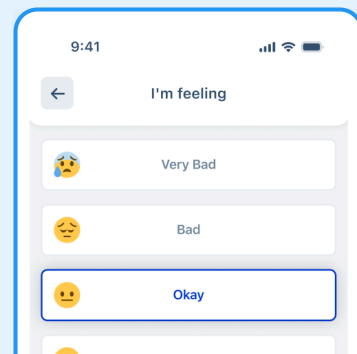Se tocar no botão "Eliminar", ser-lhe-á pedido para confirmar — o registo será eliminado permanentemente.




Se tocar no botão "Editar", pode alterar os detalhes do seu registo.

## Configurar o seu horário de medicação

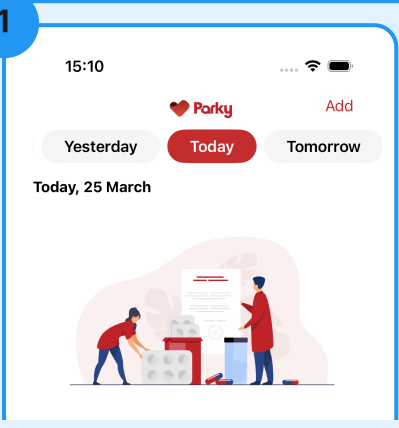Terá de introduzir o seu horário de medicação correto para tirar o máximo partido do Parky. Se o seu plano de tratamento mudar, pode editar ou remover o seu horário de medicação a qualquer momento.


Comece por tocar em "Medicação" no menu inferior.

**1**




Toque em "Adicionar medicamento" para começar a adicionar as suas prescrições, uma de cada vez.

**2**

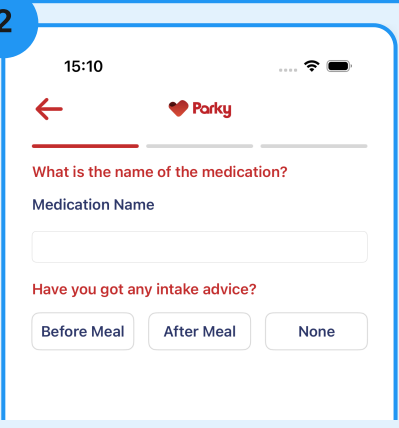


Ser-lhe-á pedido para introduzir o nome do medicamento e a indicação de toma.

**3**

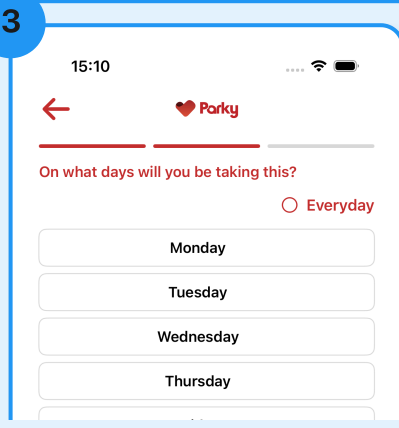


Escolha os dias em que vai tomar a sua medicação.

**4**

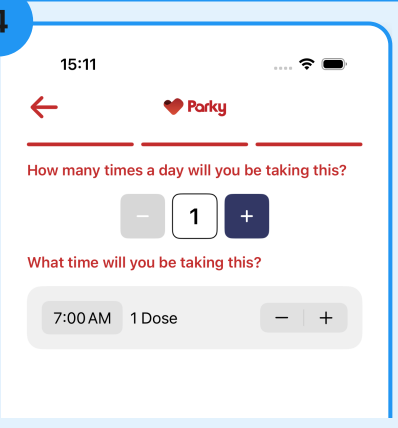

Introduza as horas e as doses da medicação.


**5**

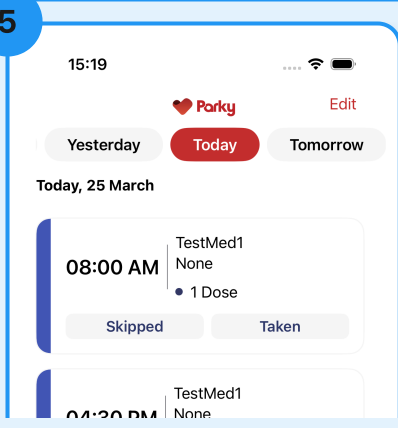

Toque no botão "Editar medicamento" para editar ou eliminar a sua medicação.


## Utilizar os lembretes de medicação

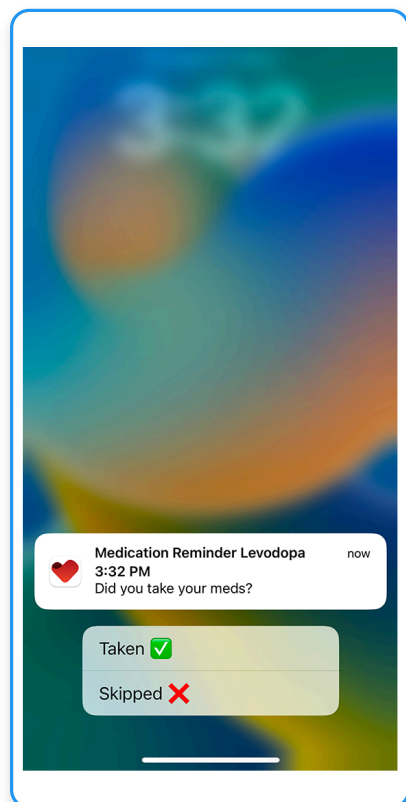- Receberá notificações de lembrete com base nos dias e horas definidos no seu horário de medicação.
- Pode marcar a sua medicação como "Tomado" ou "Ignorado" no seu iPhone ou Apple Watch.
- Se não responder a uma notificação, pode ainda responder mais tarde através do separador "Medicação".
- Para assegurar que as suas informações de adesão à medicação são precisas, responda aos lembretes de medicação de forma rápida e correta.



Pode responder aos lembretes como "Tomado" ou "Ignorado" no seu iPhone ou Apple Watch.

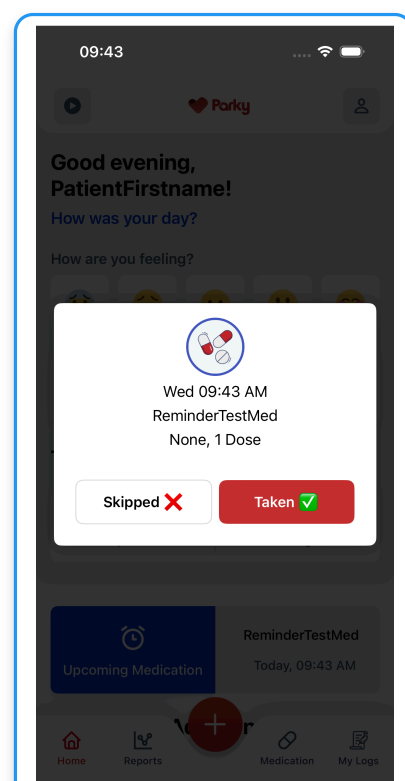Responda aos lembretes com "Tomado" ou "Ignorado".




## Ecrã de perfil

Pode visualizar o seu estado, as suas informações pessoais e o seu fuso horário no separador "Perfil".

Pode contactar-nos para obter ajuda ou encontrar soluções para problemas comuns nas secções "Contacte-nos" e "Suporte e resolução de problemas".

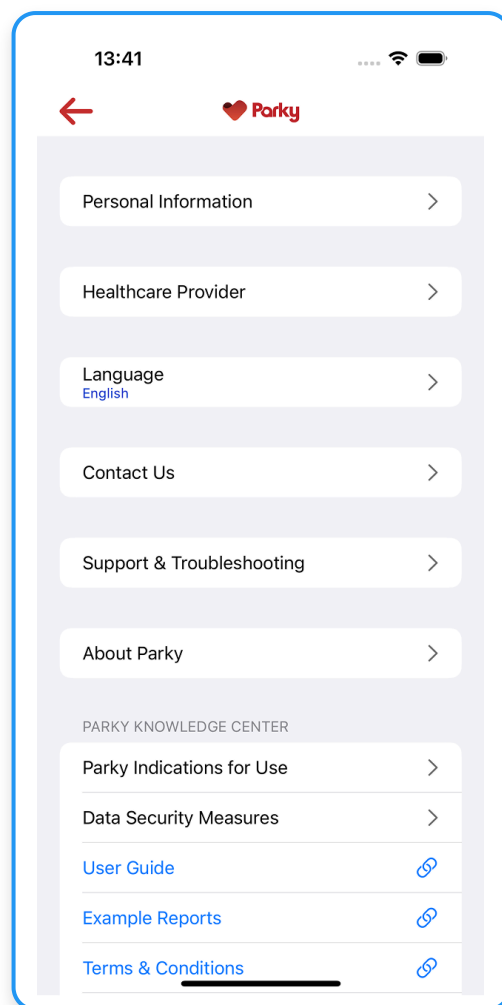Não perca o nosso "Centro de Conhecimento" no mesmo separador, onde encontrará informações importantes sobre o Parky, como manter os seus dados seguros, exemplos de relatórios e os nossos termos e condições, juntamente com a política de privacidade.




## Adicionar um profissional de saúde


Pode optar por designar um profissional de saúde, partilhando as informações profissionais deste através da aplicação Parky.

Uma vez designado, o profissional de saúde terá acesso a todos os seus registos de saúde através do Parky Provider Portal.

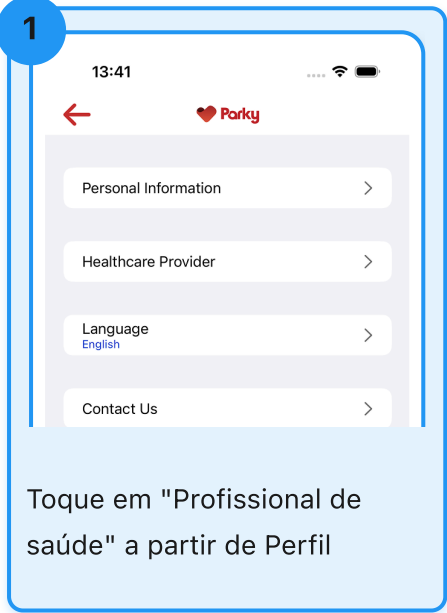
Pode remover o profissional de saúde designado a qualquer momento, o que o impedirá de aceder aos dados passados e futuros.

1

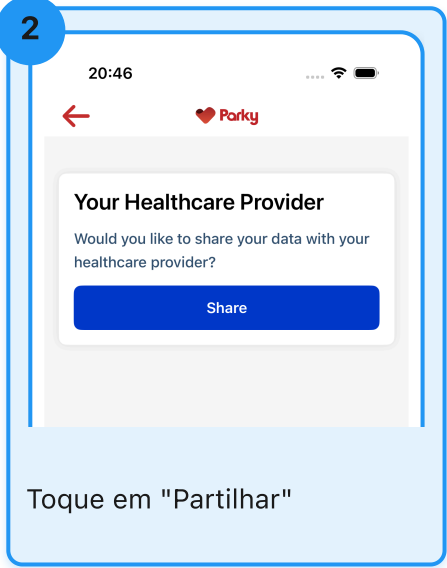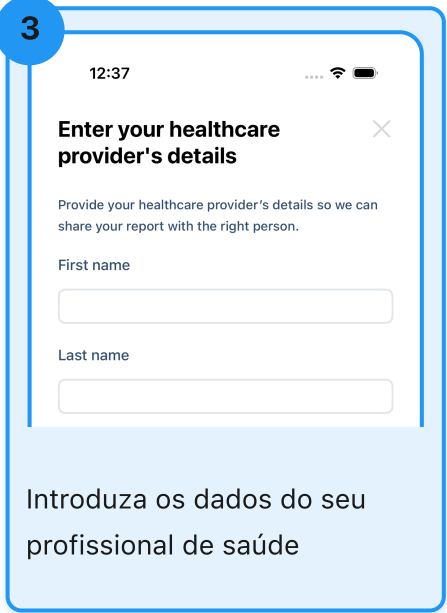
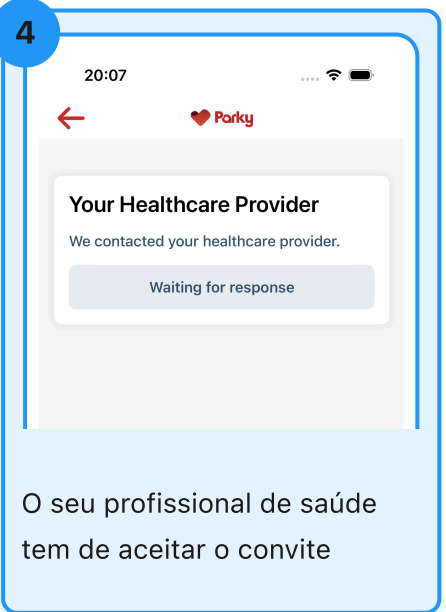
Toque em "Profissional de saúde" a partir de Perfil

2


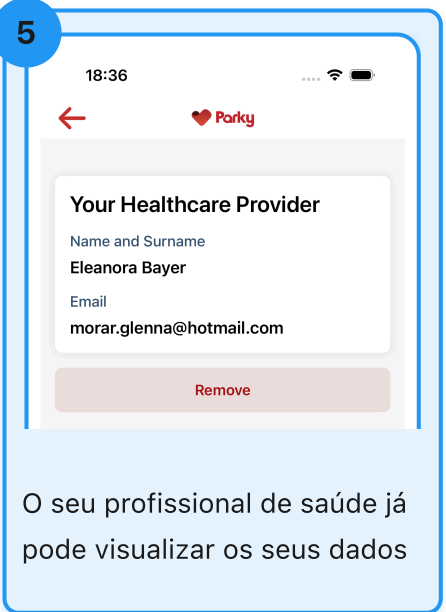
Toque em "Partilhar"

3


Introduza os dados do seu profissional de saúde


4


O seu profissional de saúde tem de aceitar o convite

5


O seu profissional de saúde já pode visualizar os seus dados

## AVISO IMPORTANTE NA APLICAÇÃO

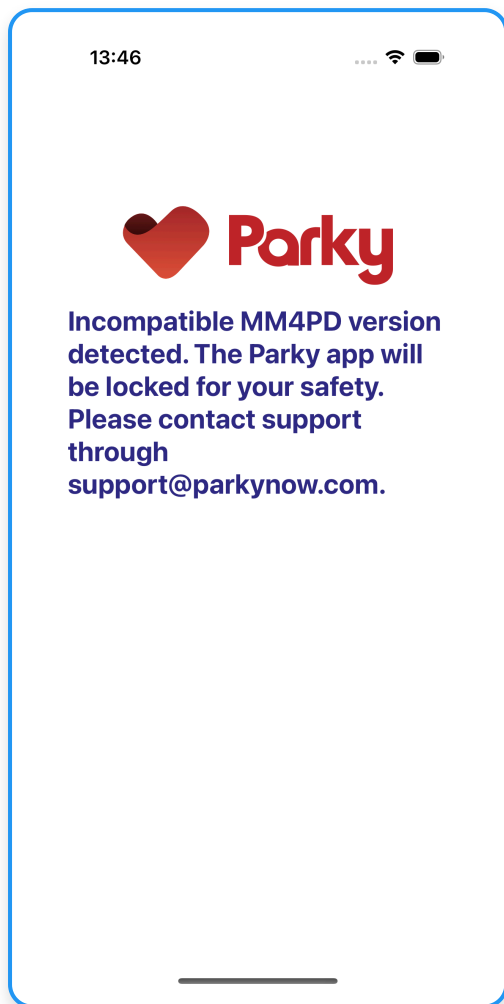

Ao iniciar, o Parky realiza um processo de verificação para detetar quaisquer alterações de versão do MM4PD e confirma a compatibilidade do dispositivo para assegurar o funcionamento seguro e eficiente das suas funções.

Caso surja um ecrã de erro, conforme apresentado à esquerda na aplicação Parky, isto significa que o Parky é incompatível com o dispositivo, o sistema operativo ou a versão de software atuais.

## Requisitos de hardware e software

O Parky é suportado em:

- Dispositivos Apple Watch Series 4 (ou mais recentes) com watchOS 10+
- Dispositivos iPhone XS (ou mais recentes) com iOS 17+

## Interpretação clínica dos relatórios

1. Cada relatório inclui os sintomas de flutuação motora, o tempo de gravação e os passos contados. Se o utilizador iniciar sessão no plano de medicação e fornecer informações sobre a toma dos medicamentos, também é possível visualizar a adesão.
2. No relatório de sintomas, o eixo x indica o tempo e o eixo y indica a duração do sintoma.
3. A legenda relativa ao tremor, à discinesia, aos tempos sem gravação e aos horários de medicação prescrita é apresentada por baixo do gráfico.
4. Os sintomas são recolhidos e medidos ao longo do tempo de gravação e são apresentados no gráfico em intervalos de 15 minutos
5. Os sintomas reportados correspondem às durações médias dos sintomas de discinesia e tremor.
6. Os relatórios excluem os dados que dificilmente representam qualquer sintoma motor. É expectável um gráfico de barras vazio para um utilizador assintomático ou para um utilizador sem qualquer gravação.
7. O tempo de gravação indica o tempo total durante o qual o utilizador utilizou o dispositivo corretamente e em que não houve problemas técnicos relativos à monitorização dos sintomas. Consulte a secção "Limitações".
8. Sem tempos de gravação suficientes, não serão gerados relatórios, conforme indicado acima.
9. As linhas tracejadas indicam os horários de medicação programados.
10. As informações de adesão à medicação mostram o número de medicamentos "tomados" relativamente ao número de medicamentos programados para um determinado intervalo de tempo (semanal, correspondente aos últimos sete dias, ou mensal, correspondente aos últimos 30 dias). Os medicamentos "tomados" são calculados com base na introdução de dados pelo utilizador.
11. A informação de contagem de passos indica a mobilidade do utilizador e é apresentada como o total acumulado num determinado intervalo de tempo (diário, semanal ou mensal).

## A UTILIZAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS

A monitorização remota dos sintomas de tremor e discinesia fornece ao profissional de saúde uma visão objetiva dos sintomas motores da doença de Parkinson do utilizador fora do ambiente clínico. Quando avaliado em conjunto com os sintomas não motores, as informações do utilizador e os achados das consultas presenciais, o Parky apoia a gestão do doente.

## INSTRUÇÕES GERAIS

1. Os utilizadores devem usar o Apple Watch no braço mais afetado em todos os momentos.
2. Recomenda-se carregar o Apple Watch durante as horas de inatividade do utilizador (de preferência durante o sono noturno).
3. O Parky não consegue monitorizar os sintomas quando o Apple Watch não está a ser usado, o que provocaria lacunas de dados.
4. Sem tempos de gravação suficientes, o Parky não conseguirá gerar relatórios de sintomas. Consulte a secção "Limitações" para mais informações.
5. A aplicação Parky não deve ser eliminada, nem no iPhone nem no Apple Watch.
6. Os utilizadores devem introduzir o horário de medicação correto para assegurar a fiabilidade dos resultados de adesão à medicação. Recomenda-se que a definição do horário de medicação seja efetuada num ambiente clínico, caso o utilizador ou o cuidador não a consiga fazer sozinho.
7. Os utilizadores devem responder aos lembretes de medicação de forma atempada e correta.

## Limitações

### 1. O Parky funciona sob as seguintes restrições:

- O Parky funciona apenas no Apple Watch e no iPhone, utilizando o algoritmo MM4PD desenvolvido pela Apple.
- O Parky não funciona em dispositivos não suportados.
- Recomenda-se a utilização do Parky para a doença de Parkinson idiopática, não devendo ser utilizado noutras síndromes parkinsónicas, como a paralisia supranuclear progressiva (PSP), a atrofia de múltiplos sistemas (MSA), a doença de Lewy e a degenerescência corticobasal (CBD).
- O utilizador deve usar o Apple Watch no braço mais afetado.
- O acompanhamento dos sintomas discinéticos só deve ser considerado em utilizadores com coreia no braço afetado, autodeclarada ou diagnosticada por um profissional de saúde.
- O Parky monitoriza explicitamente o tremor em repouso; não monitoriza o tremor de ação nem o tremor postural, e pode não monitorizar o tremor dos dedos.
- O Parky não monitoriza explicitamente a distonia nem a bradicinesia.
- Os resultados podem incluir falsos positivos e falsos negativos. A atividade do utilizador, o ajuste da bracelete do relógio e as condições concomitantes (como a síndrome das pernas inquietas e o tremor não parkinsónico) podem afetar a qualidade dos resultados.
- O Parky mede explicitamente apenas os sintomas a partir do pulso enquanto o Apple Watch é usado. No entanto, o Apple Watch pode detetar sintomas transmitidos através do corpo a partir de outras partes do corpo afetadas, podendo resultar em métricas enganadoras ou falsas.

### 2. O Parky não consegue recolher dados quando o Apple Watch está desligado e não consegue transmitir dados quando o iPhone está desligado.

## Limitações (continuação)

3. Sem durações de gravação adequadas, o Parky não conseguirá gerar relatórios de sintomas. Os relatórios são gerados utilizando a seguinte metodologia:
  - Os intervalos de quinze minutos, que abrangem toda a duração da gravação, são organizados de acordo com a hora local do utilizador.
  - Os intervalos com menos de 50% dos dados necessários são excluídos.
  - Os relatórios semanais e mensais apresentam as durações médias dos sintomas de tremor e discinesia de todos os dias com dados.
  - Nos relatórios semanais e mensais, apenas são apresentados os intervalos com dados recolhidos durante pelo menos cinco dias ou que representem mais de 20% do período total.
4. Os horários de medicação estão sujeitos à exatidão dos dados introduzidos pelo utilizador. Se o utilizador tiver dificuldades na utilização da aplicação, recomenda-se vivamente que seja prestado apoio em contexto clínico.
5. A exatidão das informações de adesão à medicação depende da resposta rápida e precisa do utilizador às notificações de lembrete de medicação. A não resposta ou o fornecimento de interações imprecisas pode conduzir a resultados de adesão à medicação incorretos. Para mitigar este risco, recomenda-se vivamente que os profissionais de saúde realcem aos utilizadores a importância crucial de respostas precisas aos lembretes.
6. A informação de passos depende da utilização consistente, por parte do utilizador, tanto do Apple Watch como do iPhone. O Parky não consegue recolher dados de passos se o utilizador não estiver a utilizar nenhum destes dispositivos.
7. Se os utilizadores pretenderem deixar de utilizar o Parky permanentemente, podem eliminar permanentemente a sua conta. Após a eliminação da conta, o utilizador é considerado um desistente e os dados de saúde e pessoais do utilizador serão removidos permanentemente. Tanto o utilizador como o profissional de saúde perderão o acesso aos relatórios Parky do utilizador.

## SEGURANÇA

1. A utilização do Parky e do Apple Watch não afeta os utilizadores com implantes de Estimulação Cerebral Profunda (DBS).
2. O Apple Watch é resistente à água, mas não é à prova de água. Pode ser usado e utilizado durante o exercício físico (a exposição ao suor não é problemática), à chuva e ao lavar as mãos.
3. Consulte o documento original do fabricante relativo ao manual e aos guias do utilizador do hardware do Apple Watch: <https://help.apple.com/pdf/watch/8/.../apple-watch-user-guide>
4. Guia do Apple Watch: <https://support.apple.com/en-us/HT204665>
5. O Apple Watch está em conformidade com as seguintes normas EMC e elétricas: A segurança elétrica foi avaliada de acordo com a norma IEC 62368-1 (2014), "Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements." O Apple Watch está em conformidade com as normas da UE EN 301 489-1 (V2.2.20), EN 301 489-3 (V2.1.1), EN 301 489-17 (V3.2.0) e EN 301 489-52 (V1.1.0).

## AVISOS GERAIS E PRECAUÇÕES

- Não utilize a aplicação Parky para qualquer outro fim que não seja registar o movimento de um doente com uma perturbação do movimento.
- A aplicação Parky destina-se a servir apenas como apoio aos métodos clínicos existentes. Não se destina a ser o único nem o principal meio de avaliação clínica.
- A h2o therapeutics não recomenda a utilização da aplicação Parky com doentes que não tenham capacidade para interagir com a aplicação Parky em iOS ou watchOS.
- Os achados não motores, as informações do doente e as consultas clínicas presenciais devem estar sempre envolvidos na tomada de decisão.
- Recomenda-se vivamente comparar os resultados do Parky com os achados clínicos e as informações reportadas pelo doente.
- Na utilização inicial, para verificar a consistência do fluxo de dados, recomenda-se que os resultados do doente sejam observados atentamente durante 3 a 5 dias por doente. Este período permitiria também a deteção de quaisquer problemas técnicos.
- Os doentes devem ser aconselhados a usar o Apple Watch no braço mais afetado.
- Os doentes ou cuidadores são incentivados a introduzir o horário de medicação. Se o doente não o conseguir fazer de forma independente ou com a ajuda dos seus cuidadores, recomenda-se que os profissionais de saúde prestem assistência em contexto clínico.
- Os doentes não devem autoavaliar a progressão da sua doença apenas com os dados da aplicação Parky.
- Em caso de falha da aplicação Parky, os doentes devem tomar a medicação conforme prescrito.
- Não existe qualquer avaliação implícita de medicamentos por parte da aplicação Parky.

## SEGURANÇA DOS DADOS

1. O Parky recolhe dados de movimento apenas quando o utilizador usa um Apple Watch.
2. Além dos dados de movimento, o Parky não recolhe atividades móveis e telefónicas, nem dados de ecrã ou de utilização de aplicações.
3. Os dados do utilizador só podem ser partilhados com o profissional de saúde para o qual o utilizador ou o cuidador deu o seu consentimento e só podem ser partilhados com um profissional de saúde de cada vez.
4. Os dados do utilizador, incluindo as informações de identificação pessoal, são armazenados em servidores em conformidade com a HIPAA, utilizando a Advanced Encryption Standard (AES256). Os dados do utilizador nunca são partilhados com terceiros, exceto com o profissional de saúde autorizado.
5. Recomenda-se a instalação de software de segurança móvel para garantir adicionalmente a segurança do dispositivo.

## ACONTECIMENTOS ADVERSOS

1. Se os relatórios de sintomas do utilizador não corresponderem às expectativas do profissional de saúde, interrompa imediatamente a utilização do Parky durante a prática clínica.
2. Em caso de suspeita de erros de cálculo, problemas técnicos e outros acontecimentos, contacte [support@parkynow.com](mailto:support@parkynow.com)



**h2o Therapeutics**  
Mustafa Kemal Mah. 2131 Cad. No:15  
06510 Çankaya / Ankara / Türkiye



(01) 8685063631006  
(10) P1/1.6.1  
(11) 20260710



[www.parkynow.com](http://www.parkynow.com)