



Bun venit la

GHIDUL DE UTILIZARE PARKY

v1.6.1

DECLARAȚIE PRIVIND INDICAȚIILE DE UTILIZARE

Aplicația Parky este destinată cuantificării cinematiei simptomelor tulburărilor de mișcare, inclusiv tremor și dischinezie, la adulții (cu vârsta de 45 de ani sau peste) cu boală Parkinson ușoară până la moderată.

CUPRINS

Primii pași	3
Setările ceasului inteligent	7
În interiorul Parky	10
Cerințe	21
Interpretare clinică	22
Instrucțiuni generale	23
Limitări	24
Siguranță	26
Avertismente generale	27
Securitatea datelor	28

Faceți cunoștință cu Parky

Parky este un instrument de monitorizare la distanță conceput pentru evaluarea continuă și obiectivă a simptomelor motorii ale bolii Parkinson, precum tremorul și dischinezia. Acesta cuantifică datele senzorilor de mișcare prin intermediul Apple Watch și furnizează rapoarte ale profilului simptomelor în timp real, sprijinind gestionarea pacientului.

Parky valorifică algoritmul Motor Fluctuations Monitor for Parkinson's Disease (MM4PD), validat clinic și dezvoltat de Apple Inc. (Powers et al., 2021¹)

Pentru raportul studiului clinic, vă rugăm să accesați <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536284/>

Cui îi este destinat Parky?

- Parky este destinat exclusiv utilizatorilor cu boală Parkinson idiopatică diagnosticată clinic, care sunt suficient de competenți pentru a utiliza un Apple Watch și un iPhone.
- Parky funcționează cel mai bine pentru persoanele care prezintă în principal simptome de tremor și dischinezie.
- Parky nu este conceput pentru a evalua sindroamele parkinsoniene precum atrofia multisistemică (MSA), paralizia supranucleară progresivă (PSP), degenerarea corticobazală (CBD) sau demența cu corpi Lewy.

¹ Powers R, Etezadi-Amoli M, Arnold EM, Kianian S, Mance I, Gibiansky M, Trietsch D, Alvarado AS, Kretlow JD, Herrington TM, Brillman S, Huang N, Lin PT, Pham HA, Ullal AV. Smartwatch inertial sensors continuously monitor real-world motor fluctuations in Parkinson's disease. Sci Transl Med. 2021 Feb 3;13(579):eabd7865. doi: 10.1126/scitranslmed.abd7865. PMID: 33536284.

O privire rapidă asupra Parky

Monitorizare și evaluare inovatoare

Parky oferă informații valoroase prin detectarea tremorului și a dischineziei în diferite stadii ale bolii. Acesta colectează date precise privind simptomele motorii pe parcursul întregii zile și permite efectuarea de evaluări oriunde, chiar și în afara mediilor supravegheate.

Gestionarea medicației și informații despre simptome

Parky vă ajută să vă administrați medicația la timp prin memento-uri practice pe iPhone și Apple Watch și combină rapoartele privind simptomele cu datele privind utilizarea medicației. Această combinație oferă informații clare și obiective, ajutând furnizorii de servicii medicale să detecteze orice modificare a simptomelor, îmbunătățind astfel planurile de tratament.

Autonomie prin tehnologie

Parky integrează senzori purtabili pentru a vă oferi o alternativă fiabilă la jurnalele pacienților, abordând natura subiectivă a autoevaluării și prevenind lacunele de date frecvent întâlnite în ținerea jurnalelor. Această integrare oferă o monitorizare continuă și pasivă, asigurând o supraveghere fără întreruperi a sănătății dumneavoastră.

Urmărirea activității și sprijin pentru mobilitate

Parky nu vă monitorizează doar simptomele motorii; urmărește și pașii dumneavoastră zilnici, oferind o perspectivă asupra nivelului dumneavoastră de activitate fizică.

Primii pași cu Parky



Scanați codul QR cu camera iPhone-ului dumneavoastră și urmați fereastra pop-up pentru a descărca Parky din App Store.


Vă încurajăm să descărcați aplicația Parky din App Store pentru a verifica compatibilitatea dispozitivului.

Acordarea permisiunilor

Va trebui să acordați permisiuni prin solicitările afișate mai jos pentru ca Parky să funcționeze corect. Aceste permisiuni îi permit lui Parky să trimită notificări și să acceseze date privind pașii, precum și urmărirea mișcării pentru analiza tremorului și a dischineziei.

Parky se bazează pe aceste permisiuni pentru a vă oferi informații complete despre activitatea dumneavoastră fizică, simptome și aderența la tratament.


1

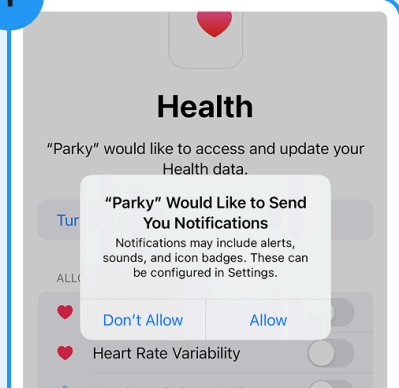

Acces la notificări

Această permisiune vă permite să primiți memento-uri și actualizări de la Parky. Fără ea, nu veți primi notificări pentru programul de medicație și actualizări.


2

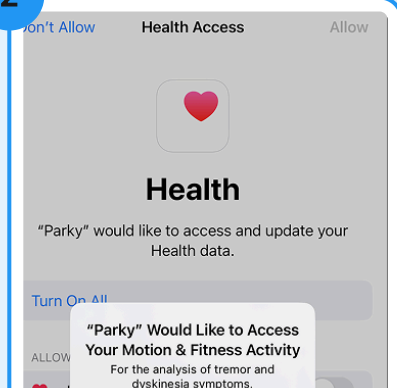

Acces la datele de mișcare

Acordarea acestei permisiuni îi permite lui Parky să vă urmărească mișcarea, ceea ce este esențial pentru monitorizarea simptomelor precum tremorul și

3

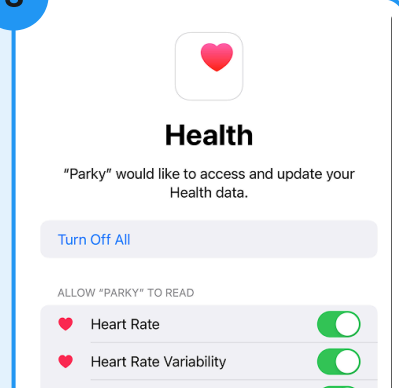


Acces la datele de sănătate

Permițând accesul la datele dumneavoastră de sănătate, Parky vă poate oferi informații despre nivelul dumneavoastră de activitate fizică.



Configurarea inițială

Veți începe cu un proces de configurare inițială care acoperă modul de utilizare a Parky, informații importante privind siguranța și modul în care vă protejăm datele.

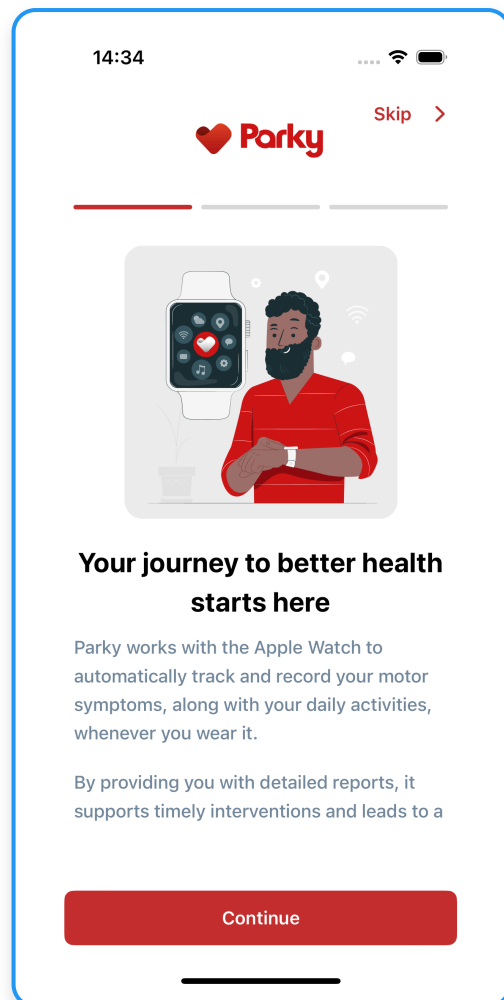

Autentificare

La configurarea inițială, veți introduce numărul dumneavoastră de telefon mobil și veți primi un cod de verificare prin mesaj text.

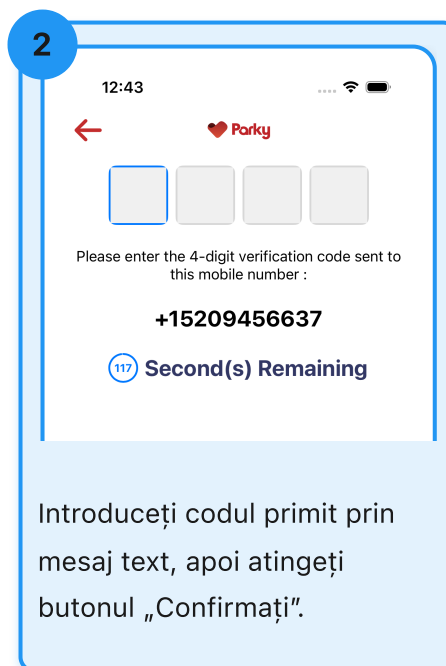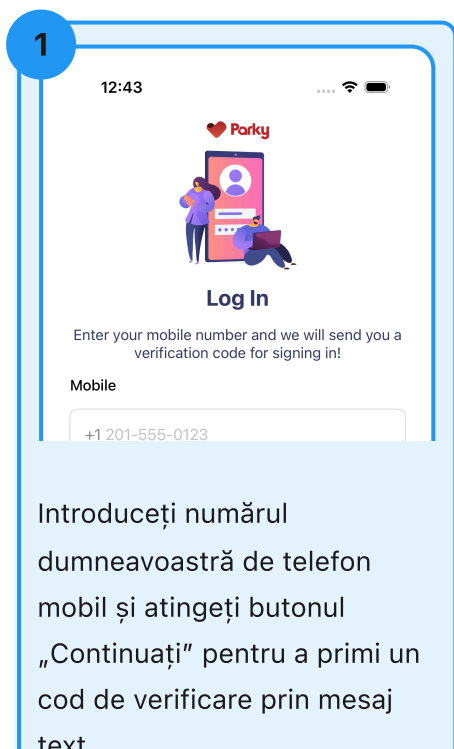

Configurarea complicațiilor de pe cadranul ceasului

Urmați pașii de mai jos pentru a adăuga Parky la complicațiile de pe cadranul ceasului. Parky poate monitoriza simptomele motorii doar atunci când complicațiile de pe cadranul ceasului sunt adăugate.

1



Atingeți și țineți apăsat pe ecran.

2




Atingeți „Editați”.

3



Glisați spre stânga până când apare titlul „Complicații” și selectați orice slot.

4

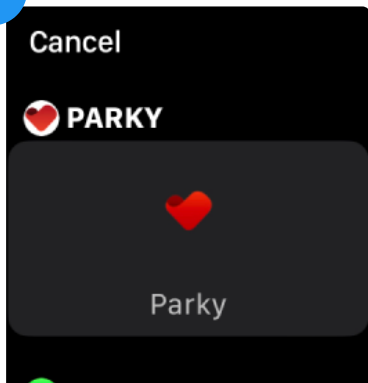

Derulați până când apare „Parky”, apoi atingeți.

5




Gata! Complicația Parky a fost adăugată.

Activarea alertelor haptice


Urmați pașii de mai jos pentru a activa alertele haptice pe Apple Watch. Alertele haptice oferă feedback prin vibrații pentru notificările Parky.

1

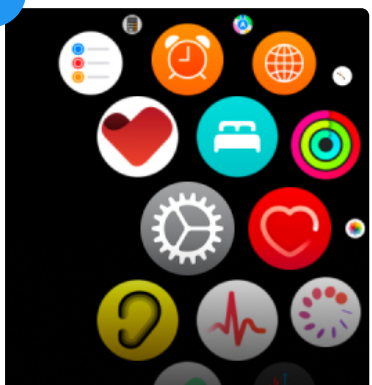


Apăsați butonul coroană (Digital Crown) al Apple Watch pentru a vedea ecranul principal.

2

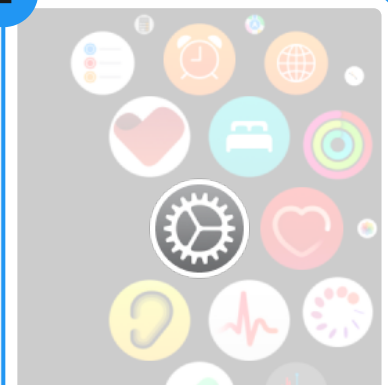


Atingeți „Reglaje” din meniul cu pictogramele aplicațiilor.

3

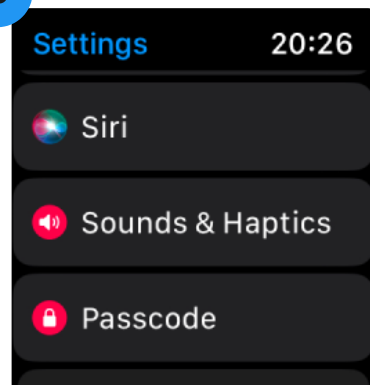


Derulați în jos și atingeți „Sunete și semnale haptice”.

4

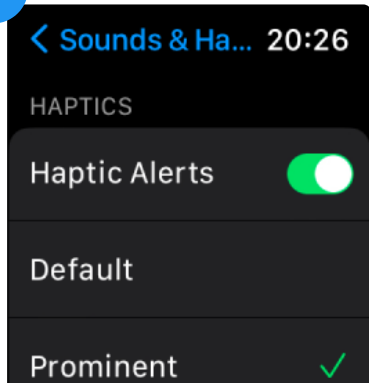

Asigurați-vă că „Alerte haptice” este activat derulând din nou în jos.

5

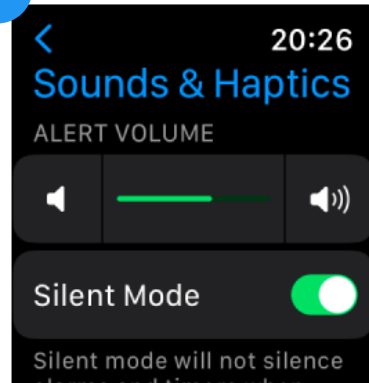

Rețineți că activarea vibrațiilor haptice va produce și un sunet.

Pentru indicii mai discrete, puteți reveni oricând aici și puteți activa „Mod silențios”.

Utilizarea Foggy




Porniți „Foggy” fie atingând butonul complicației, fie apăsând butonul din interiorul aplicației Parky.




Foggy începe să ofere indicii imediat ce îl deschideți. Atingeți pentru a opri sau lăsați-l să ruleze.


Personalizarea Foggy

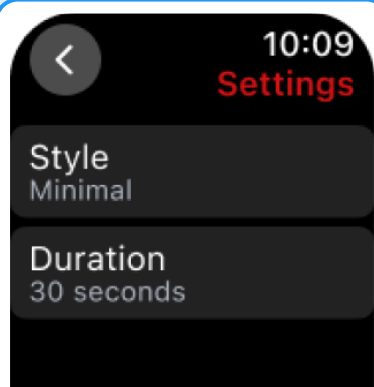

Există două tipuri de setări: „Stil” și „Durată”.

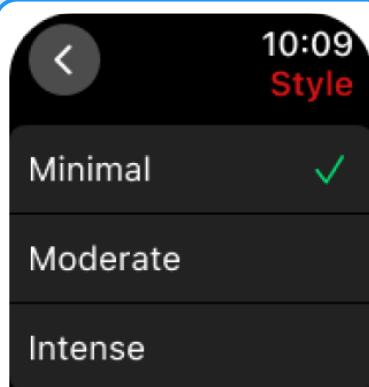


Ajustați frecvența vibrațiilor în meniul „Stil”.

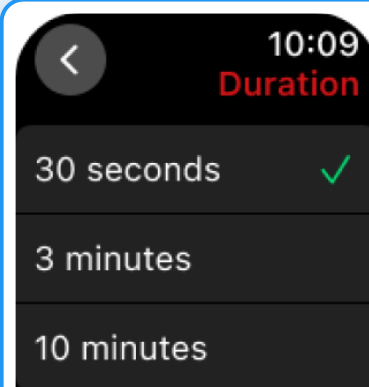

Setați durata indicilor pentru Foggy în meniul „Durată”.

În interiorul Parky

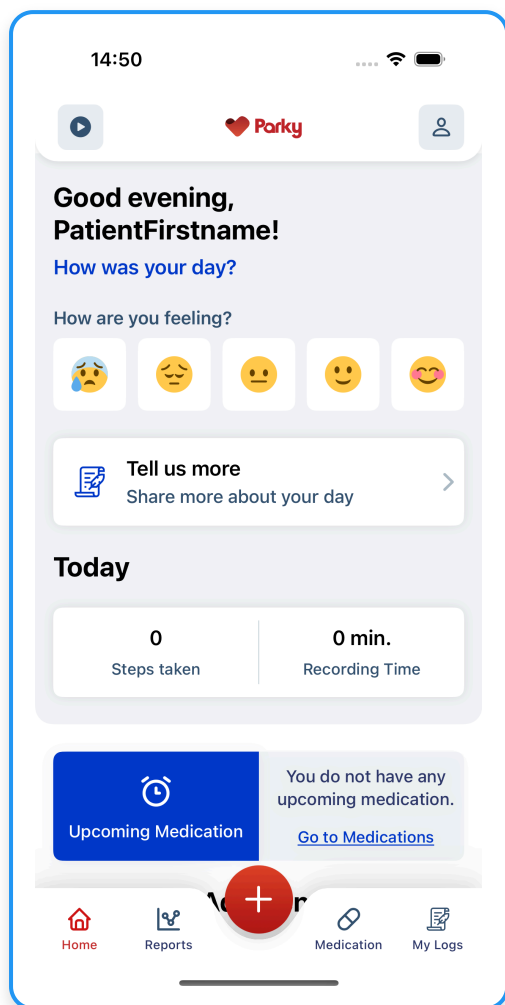

Ecranul principal


Ecranul principal al Parky oferă un tablou de bord ușor de utilizat, unde veți găsi memento-uri pentru medicația următoare, vă veți urmări pașii zilnici, veți monitoriza timpii de înregistrare și veți vizualiza informațiile săptămânale și lunare privind aderența la tratament. În plus, veți avea acces la un centru de resurse pentru informații suplimentare.


Accesarea rapoartelor

Vizualizați rapoartele privind simptomele în fila „Rapoarte”.


Rapoartele vor fi afișate în mod implicit zilnic. Selectați meniul filei pentru a vizualiza rapoartele săptămânale și lunare, inclusiv datele retrospective.

Atingeți butonul de export pentru a descărca un anumit raport în format PDF oricând.

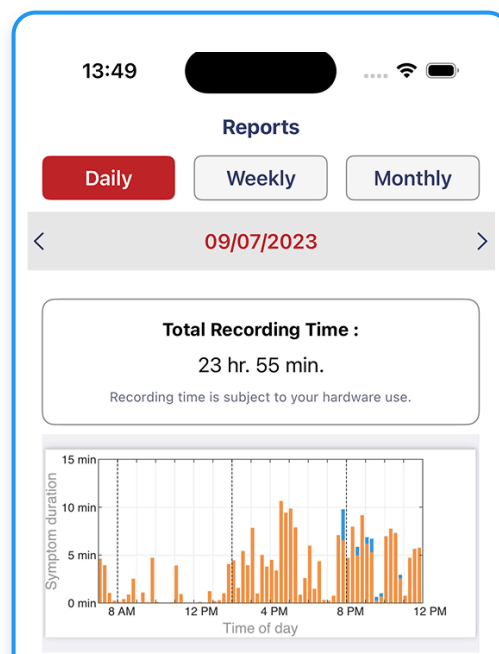

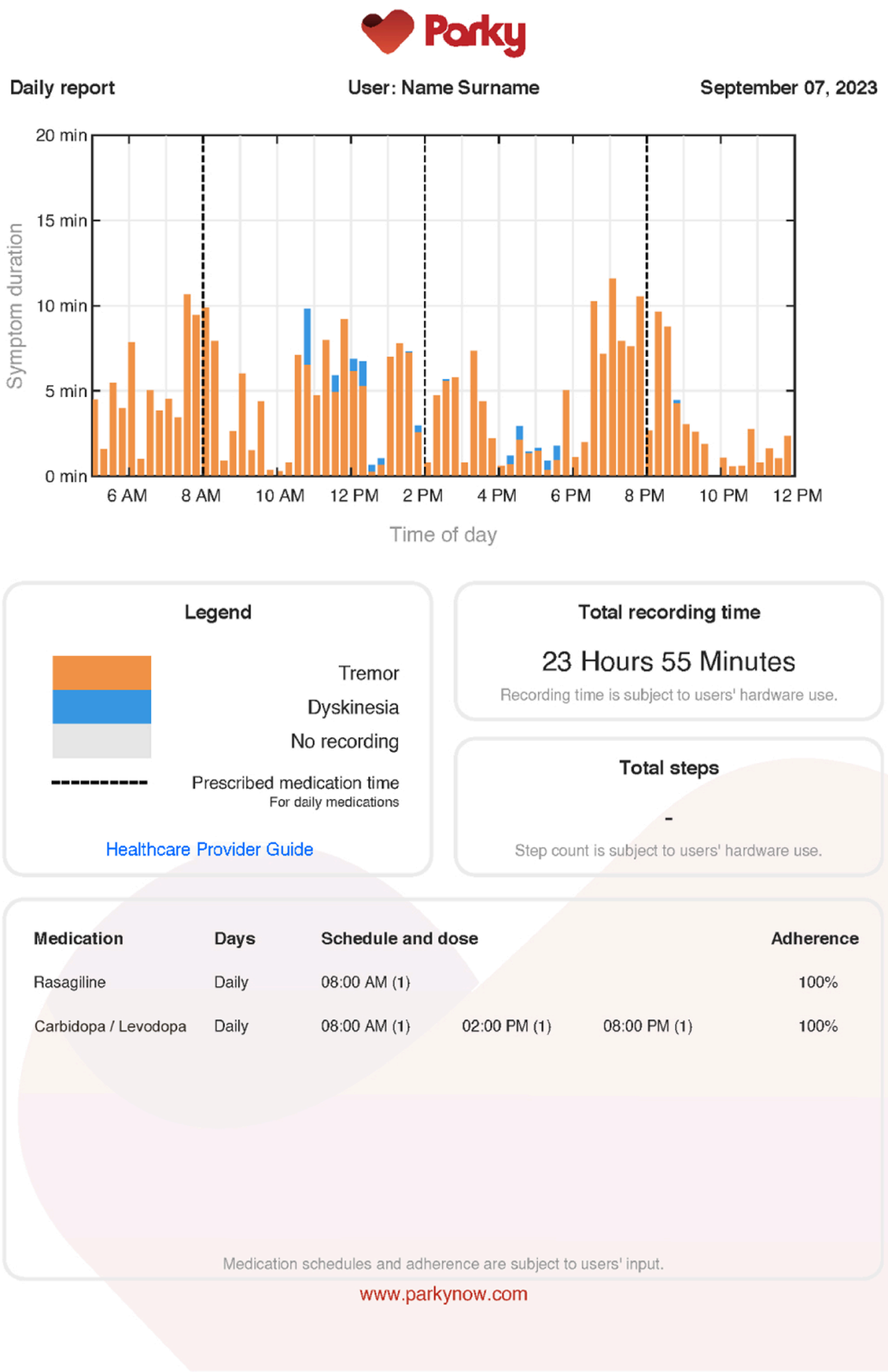


Înregistrarea

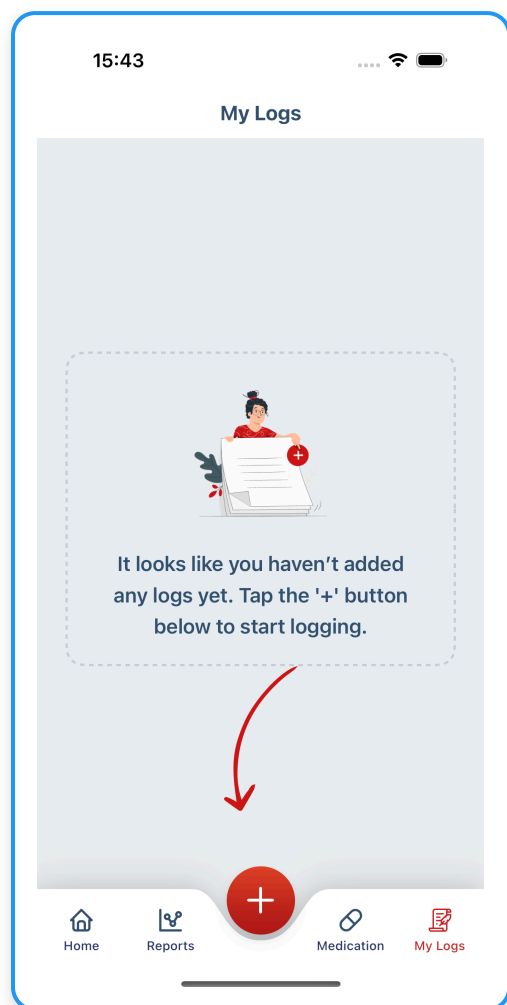

Puteți înregistra cu ușurință cum vă simțiți pe parcursul zilei. Vă ajută să rămâneți în contact cu starea dumneavoastră emoțională și să vă înțelegeți mai bine dispozițiile în timp. Începeți astăzi să vă urmăriți tiparele emoționale pentru a vă spori conștiința de sine și a sprijini o îngrijire personalizată.


Adăugarea înregistrărilor

Puteți înregistra dispoziția, perioadele ON / OFF sau o înregistrare personalizată liberă, relevantă pentru îngrijirea dumneavoastră.

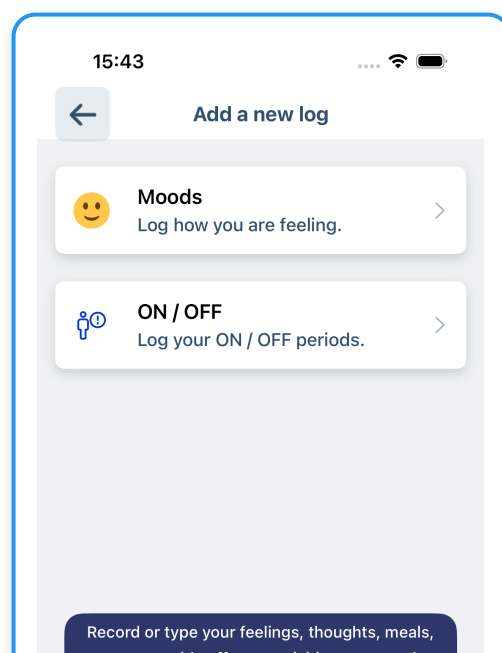


Dispoziții

Puteți înregistra dispoziția dumneavoastră actuală pe parcursul zilei. După ajustarea orei înregistrării, o puteți salva și revedea în fila „Înregistrările mele”.

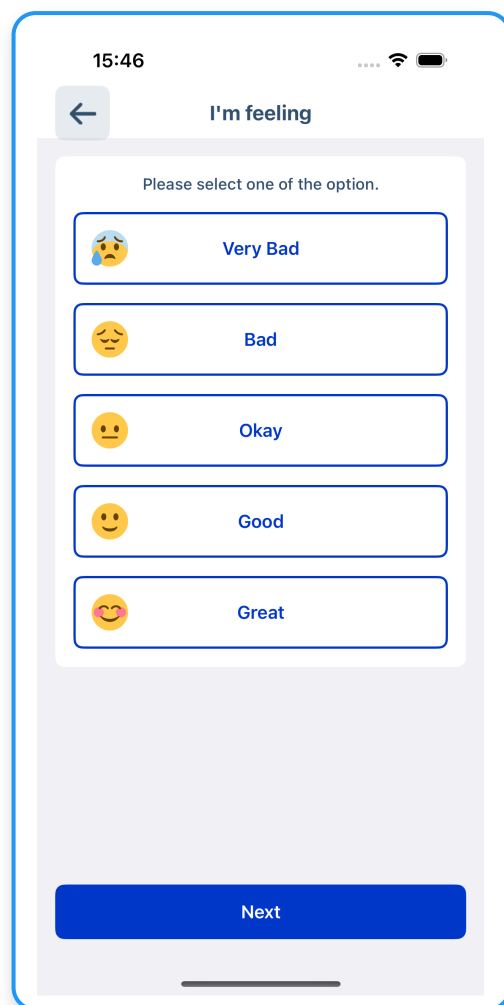


Perioade ON / OFF

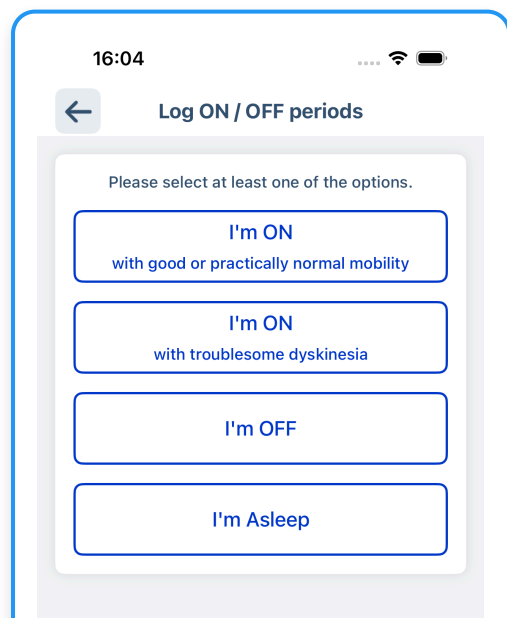

Puteți înregistra cea mai potrivită opțiune ON / OFF pentru o perioadă. În mod similar, o puteți salva și revedea în fila „Înregistrările mele”.


Înregistrare personalizată cu text

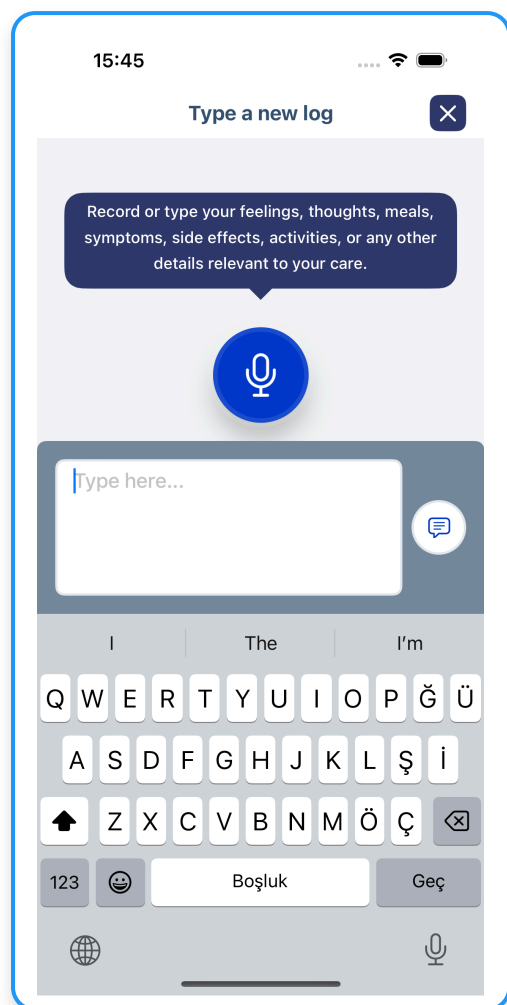


Puteți scrie liber despre sentimentele, gândurile, mesele dumneavoastră sau orice alte detalii pe care le considerați importante de înregistrat. Înregistrările personalizate pot fi create folosind text sau introducere vocală.

Înregistrare personalizată cu voce

Înregistrați folosind vocea dumneavoastră.
Înregistrările vocale au o limită de timp de 120 de secunde.

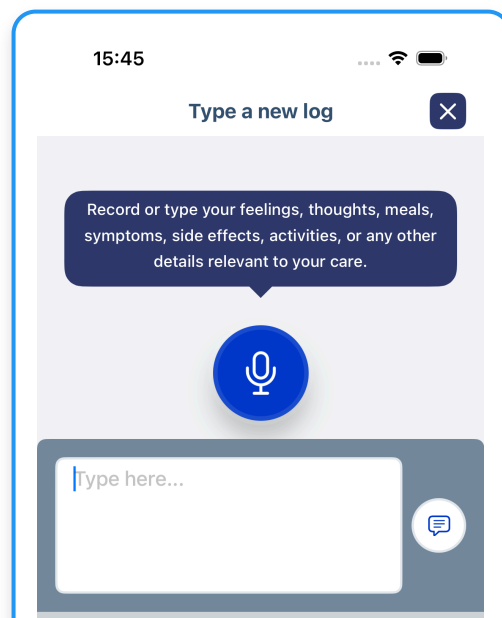


Înregistrările mele

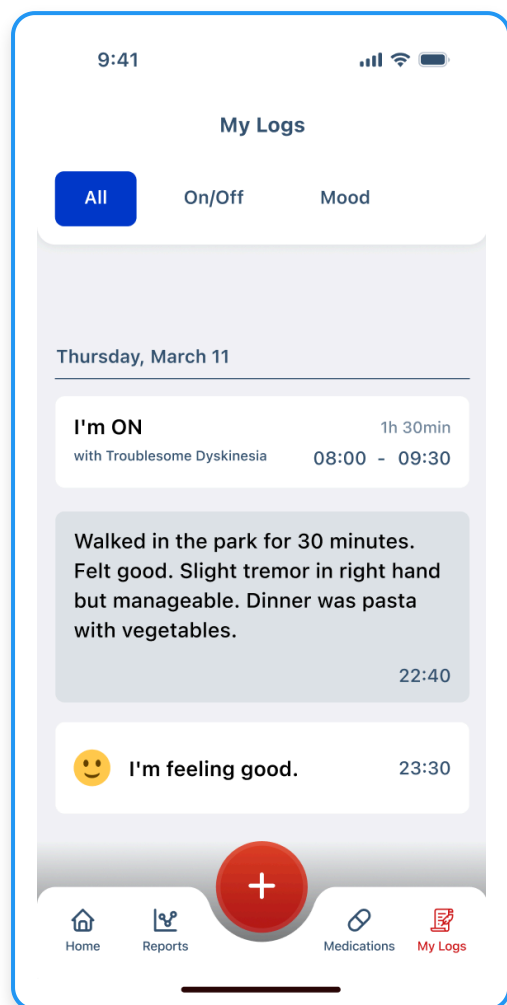


Puteți previzualiza elementele înregistrate ca un flux din „Înregistrările mele” din meniul de navigare.


Puteți începe să adăugați înregistrări atingând pur și simplu pictograma „Plus”. De asemenea, puteți filtra previzualizarea fluxului dumneavoastră.

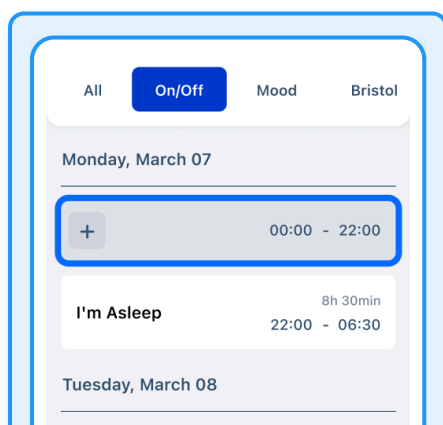

În categoriile în care continuitatea este importantă, vă puteți identifica cu ușurință intrările lipsă. Puteți începe să completați intrările lipsă atingându-le.

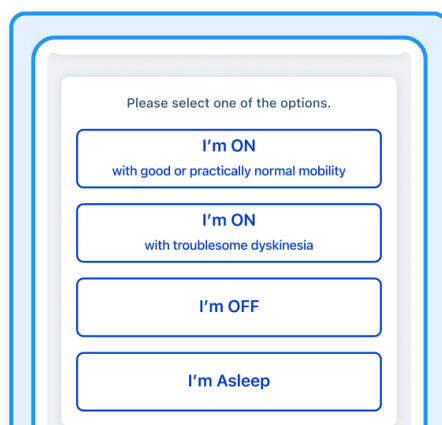


Puteți începe să completați intrările lipsă atingându-le.

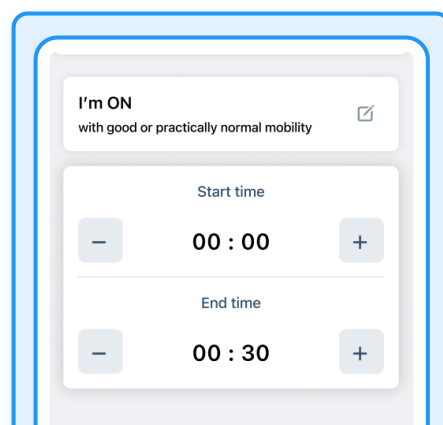


Aceasta va începe automat de la începutul perioadei dumneavoastră de absență.

Editarea elementelor înregistrate


Începeți prin a atinge și a ține apăsat elementul înregistrat pe care doriți să îl editați. Vă puteți edita sau elimina înregistrările atingându-le și ținându-le apăstate.

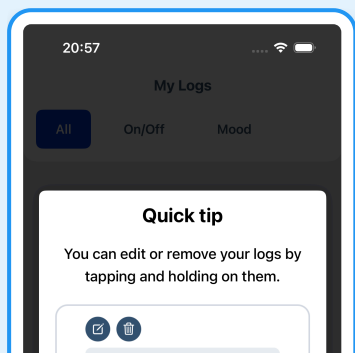


Vă puteți edita elementele înregistrate atingându-le și ținându-le apăstate.

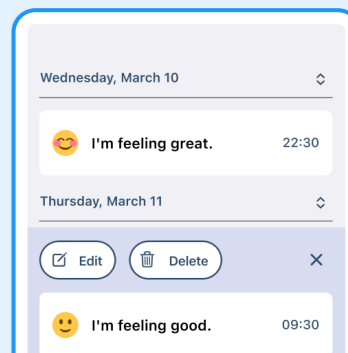

Le puteți edita sau șterge din meniul suprapus.

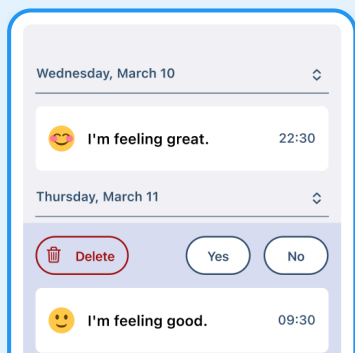

Dacă atingeți butonul „Ștergeți”, vi se va cere să confirmați - înregistrarea va fi ștearsă definitiv.

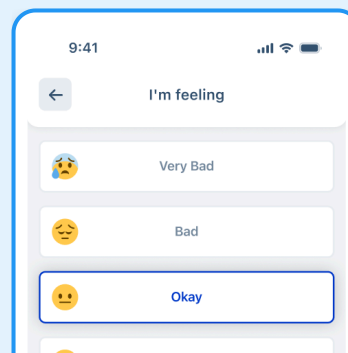


Dacă atingeți butonul „Editați”, puteți modifica detaliile înregistrării dumneavoastră.

Configurarea programului dumneavoastră de medicație

Va trebui să introduceți programul corect de medicație pentru a profita la maximum de Parky. Dacă planul dumneavoastră de tratament se modifică, puteți edita sau elimina programul de medicație în orice moment.


Începeți prin a atinge „Medicamente” din meniul de jos.

1

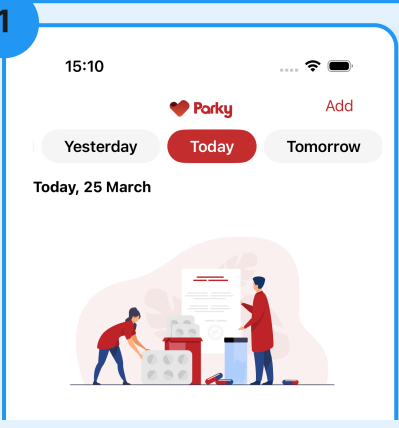


Atingeți „Adăugați medicament” pentru a începe să adăugați prescripțiile, pe rând.

2

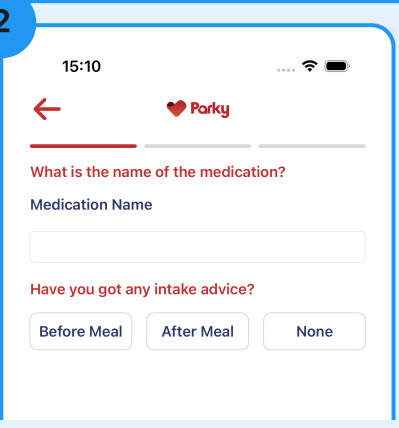


Vi se va solicita să introduceți numele medicamentului și recomandarea privind administrarea.

3

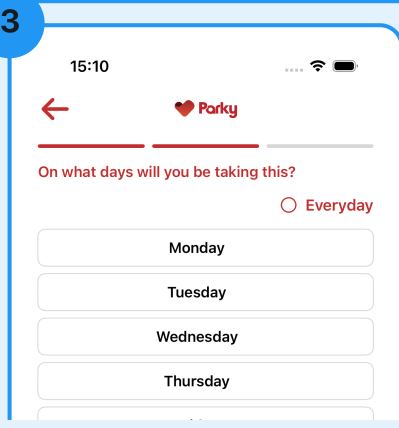


Alegeți zilele în care veți lua medicamentul.

4

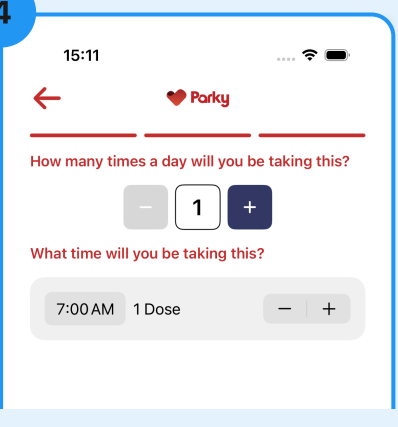

Introduceți orele și dozele medicamentului.


5

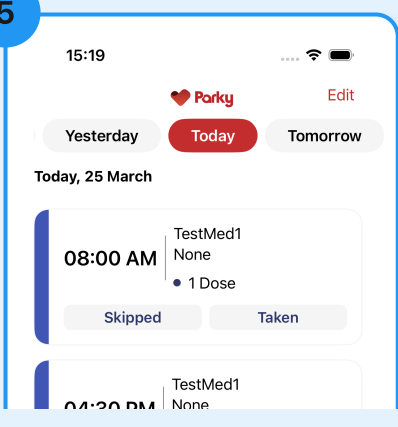

Atingeți butonul „Editați medicamentul” pentru a edita sau șterge medicamentul.


Utilizarea memento-urilor pentru medicamente

- Veți primi notificări de tip memento în funcție de zilele și orele setate în programul dumneavoastră de medicație.
- Vă puteți marca medicamentul ca „Luat” sau „Omis” pe iPhone sau pe Apple Watch.
- Dacă nu reușiți să răspundeți la o notificare, puteți răspunde ulterior prin fila „Medicamente”.
- Pentru a vă asigura că informațiile privind aderența la tratament sunt corecte, răspundeți prompt și corect la memento-urile pentru medicamente.

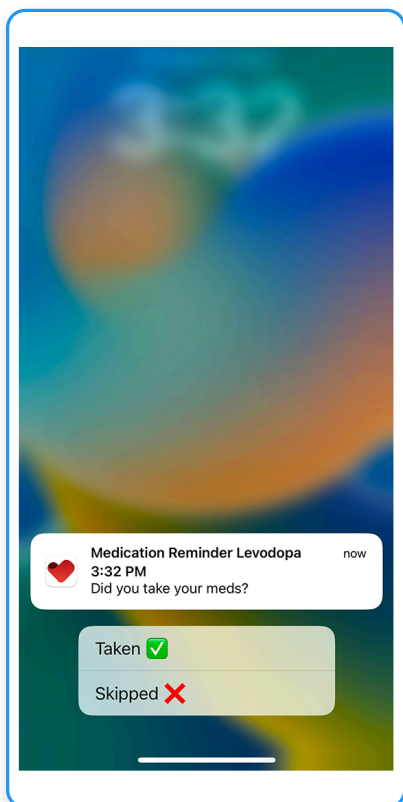

Puteți răspunde la memento-uri cu „Luat” sau „Omis” pe iPhone sau pe Apple Watch.

Răspundeți la memento-uri cu „Luat” sau „Omis”.

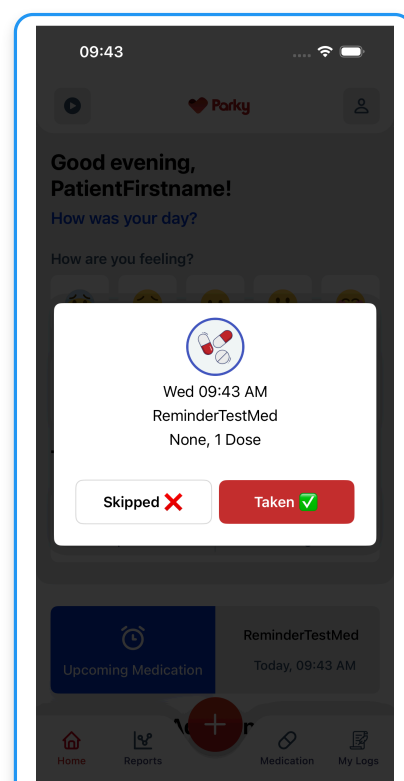


Ecranul de profil

Vă puteți vizualiza starea, informațiile personale și fusul orar în fila „Profil”.

Ne puteți contacta pentru ajutor sau puteți găsi soluții la problemele frecvente în secțiunile „Contactați-ne” și „Asistență și depanare”.

Nu ratați „Centrul de cunoștințe” din aceeași filă, unde veți găsi informații importante despre Parky, despre cum să vă păstrați datele în siguranță, exemple de rapoarte și termenii și condițiile noastre, împreună cu politica de confidențialitate.





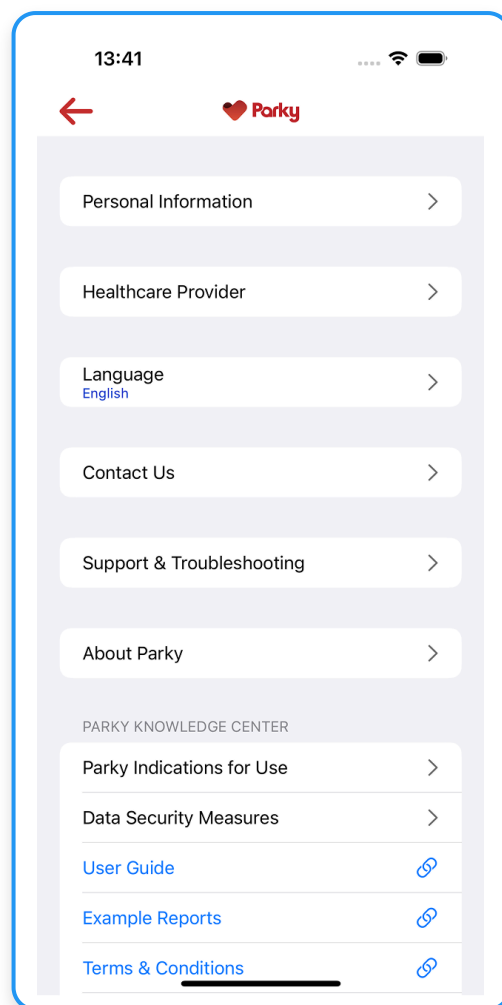


Adăugarea unui furnizor de servicii medicale


Puteți alege să desemnați un furnizor de servicii medicale prin partajarea informațiilor sale profesionale prin intermediul aplicației Parky.

Odată desemnat, furnizorul de servicii medicale va avea acces la toate înregistrările dumneavoastră de sănătate prin intermediul Parky Provider Portal.

Puteți elimina furnizorul desemnat în orice moment, ceea ce îl va împiedica să acceseze atât datele anterioare, cât și pe cele viitoare.

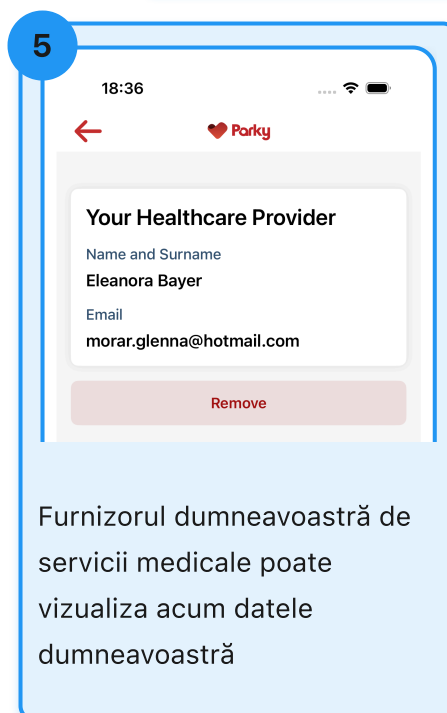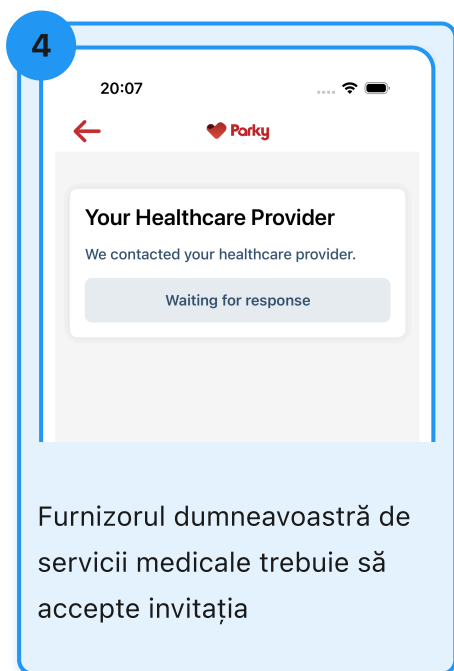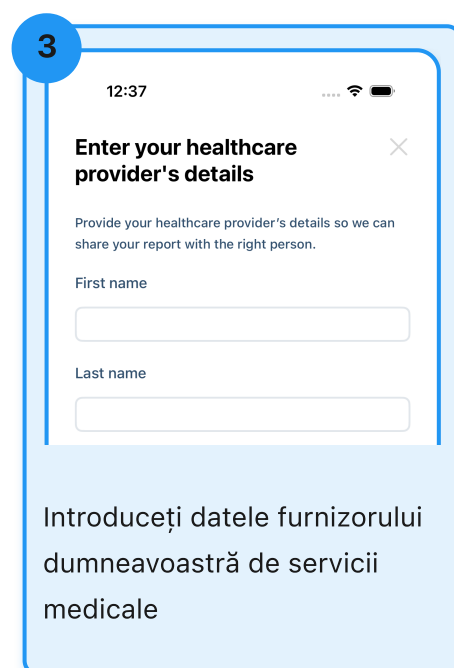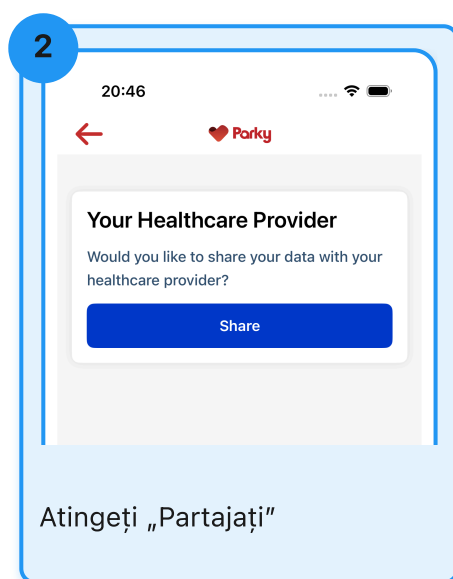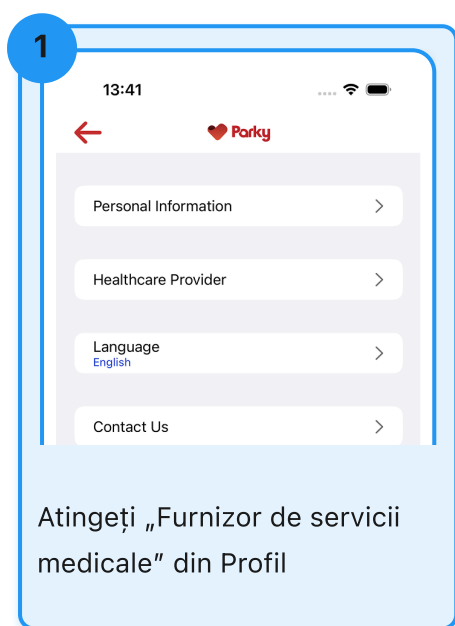

AVERTISMENT IMPORTANT ÎN APLICAȚIE

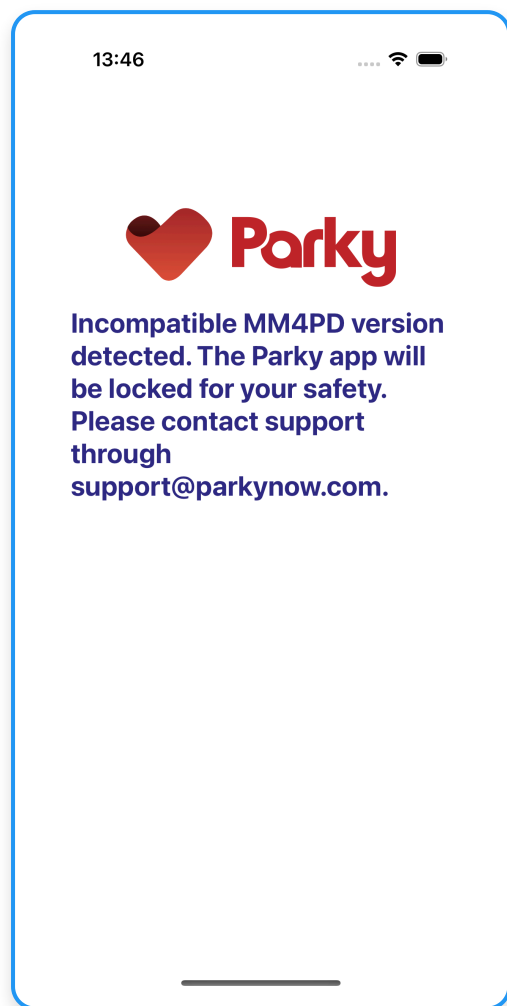

La inițializare, Parky efectuează un proces de verificare pentru orice modificări ale versiunii MM4PD și confirmă compatibilitatea dispozitivului pentru a asigura funcționarea sigură și eficientă a funcțiilor sale.

Dacă apare un ecran de eroare, așa cum este afișat în stânga în aplicația Parky, aceasta înseamnă că Parky este incompatibil cu dispozitivul, sistemul de operare sau versiunea de software actuală.

Cerințe hardware și software

Parky este compatibil cu:

- Dispozitive Apple Watch Series 4 (sau mai noi) cu watchOS 10+
- Dispozitive iPhone XS (sau mai noi) cu iOS 17+

Interpretarea clinică a rapoartelor

1. Fiecare raport include simptomele fluctuațiilor motorii, timpul de înregistrare și numărul de pași. Dacă utilizatorul se conectează la planul de medicație și furnizează informații privind administrarea medicamentelor, poate fi vizualizată și aderența.
2. În raportul privind simptomele, axa x indică timpul, iar axa y indică durata simptomelor.
3. Legenda pentru tremor, dischinezie, timpii fără înregistrare și orele prescrise de medicație este afișată sub grafic.
4. Simptomele sunt colectate și măsurate pe parcursul timpului de înregistrare și sunt prezentate în grafic la intervale de 15 minute.
5. Simptomele raportate reprezintă duratele medii ale simptomelor de dischinezie și tremor.
6. Rapoartele exclud datele care este puțin probabil să reprezinte vreun simptom motor. Un grafic cu bare gol este de așteptat pentru un utilizator asimptomatic sau pentru un utilizator fără nicio înregistrare.
7. Timpul de înregistrare indică timpul total în care utilizatorul a folosit dispozitivul corect și în care nu au existat probleme tehnice privind monitorizarea simptomelor. Vă rugăm să consultați secțiunea „Limitări”.
8. Fără timpi de înregistrare suficienți, nu vor fi generate rapoarte, așa cum este indicat mai sus.
9. Liniile întrerupte indică orele programate de medicație.
10. Informațiile privind aderența la tratament indică numărul de medicamente „luate” raportat la numărul de medicamente programate pentru un anumit interval de timp (săptămânal, ca ultimele șapte zile, sau lunar, ca ultimele 30 de zile). Medicamentele „luate” sunt calculate pe baza datelor introduse de utilizator.
11. Informațiile privind numărul de pași indică mobilitatea utilizatorului și sunt afișate ca total în cadrul unui anumit interval de timp (zilnic, săptămânal sau lunar).

UTILIZAREA DATELOR COLECTATE

Monitorizarea la distanță a simptomelor de tremor și dischinezie oferă furnizorului de servicii medicale o perspectivă obiectivă asupra simptomelor motorii ale bolii Parkinson ale utilizatorului în afara clinicii. Atunci când este evaluat împreună cu simptomele non-motorii, informațiile furnizate de utilizator și constatările vizitelor în clinică, Parky sprijină gestionarea pacientului.

INSTRUCȚIUNI GENERALE

1. Utilizatorii trebuie să poarte Apple Watch pe brațul cel mai afectat în permanență.
2. Încărcarea Apple Watch este recomandată în timpul orelor inactive ale utilizatorului (de preferință în timpul somnului de noapte).
3. Parky nu poate monitoriza simptomele atunci când Apple Watch nu este purtat, ceea ce ar cauza lacune de date.
4. Fără timpi de înregistrare suficienți, Parky nu va putea genera rapoarte privind simptomele. Vă rugăm să consultați secțiunea „Limitări” pentru mai multe informații.
5. Aplicația Parky nu trebuie ștearsă nici de pe iPhone, nici de pe Apple Watch.
6. Utilizatorii trebuie să introducă programul corect de medicație pentru a asigura fiabilitatea rezultatelor privind aderența la tratament. Se recomandă ca programarea medicației să fie configurată într-un mediu clinic dacă utilizatorul sau îngrijitorul nu o poate face singur.
7. Utilizatorii trebuie să răspundă la memento-urile pentru medicamente în mod prompt și corect.

Limitări

1. Parky funcționează în următoarele condiții:

- Parky funcționează doar pe Apple Watch și iPhone, folosind algoritmul MM4PD dezvoltat de Apple.
- Parky nu funcționează pe dispozitive incompatibile.
- Se recomandă utilizarea Parky pentru boala Parkinson idiopatică și nu pentru alte sindroame parkinsoniene precum paralizia supranucleară progresivă (PSP), atrofia multisistemică (MSA), demența cu corpi Lewy și degenerarea corticobazală (CBD).
- Utilizatorul trebuie să poarte Apple Watch pe brațul cel mai afectat.
- Urmărirea simptomelor de dischinezie trebuie luată în considerare numai pentru utilizatorii cu coree la brațul afectat, fie autodeclarată, fie diagnosticată de un furnizor de servicii medicale.
- Parky urmărește în mod explicit tremorul de repaus; nu urmărește tremorul de acțiune sau tremorul postural și este posibil să nu urmărească tremorul degetelor.
- Parky nu urmărește în mod explicit distonia sau bradikinezia.
- Rezultatele pot include rezultate fals pozitive și fals negative. Activitatea utilizatorului, potrivirea brățării ceasului și afecțiunile concomitente (precum sindromul picioarelor neliniștite și tremorul non-parkinsonian) pot afecta calitatea rezultatelor.
- Parky măsoară în mod explicit doar simptomele de la nivelul încheieturii mâinii în timp ce Apple Watch este purtat. Cu toate acestea, Apple Watch poate detecta simptome transmise prin corp de la alte părți afectate ale corpului, ceea ce poate duce la valori înșelătoare sau false.

2. Parky nu poate colecta date atunci când Apple Watch este oprit și nu poate transmite date atunci când iPhone este oprit.

Limitări (continuare)

3. Fără durate de înregistrare adecvate, Parky nu va putea genera rapoarte privind simptomele.

Rapoartele sunt generate folosind următoarea metodologie:

- Intervalele de cincisprezece minute, care acoperă întreaga durată a înregistrării, sunt organizate în funcție de ora locală a utilizatorului.
- Intervalele cu mai puțin de 50% din datele necesare sunt excluse.
- Rapoartele săptămânale și lunare afișează duratele medii ale simptomelor de tremor și dischinezie din toate zilele cu date.
- În rapoartele săptămânale și lunare sunt afișate doar intervalele cu date colectate din cel puțin cinci zile sau care reprezintă peste 20% din perioada totală.

4. Programele de medicație depind de corectitudinea datelor introduse de utilizator. Dacă utilizatorul întâmpină dificultăți în utilizarea aplicației, se recomandă cu insistență oferirea de asistență în mediul clinic.

5. Acuratețea informațiilor privind aderența la tratament depinde de răspunsul prompt și corect al utilizatorului la notificările de tip memento pentru medicamente. Nereușita de a răspunde sau furnizarea de interacțiuni inexacte poate duce la rezultate incorecte privind aderența la tratament. Pentru a atenua acest risc, furnizorii de servicii medicale sunt încurajați cu insistență să sublinieze utilizatorilor importanța crucială a răspunsurilor corecte la memento-uri.

6. Informațiile privind pașii depind de utilizarea constantă de către utilizator atât a Apple Watch, cât și a iPhone. Parky nu poate colecta date privind pașii dacă utilizatorul nu folosește niciunul dintre aceste dispozitive.

7. Dacă utilizatorii doresc să înceteze definitiv utilizarea Parky, își pot șterge definitiv contul. La ștergerea contului, utilizatorul este considerat ca renunțând, iar datele de sănătate și personale ale utilizatorului vor fi eliminate definitiv. Atât utilizatorul, cât și furnizorul de servicii medicale vor pierde accesul la rapoartele Parky ale utilizatorului.

SIGURANȚĂ

1. Utilizarea Parky și a Apple Watch nu afectează utilizatorii cu implanturi de stimulare cerebrală profundă (DBS).
2. Apple Watch este rezistent la apă, dar nu este impermeabil. Poate fi purtat și utilizat în timpul exercițiilor fizice (expunerea la transpirație nu este o problemă), în ploaie și în timpul spălării mâinilor.
3. Vă rugăm să consultați documentul original al producătorului privind manualul de utilizare și ghidurile pentru manualul de utilizare a hardware-ului Apple Watch:
<https://help.apple.com/pdf/watch/8/.../apple-watch-user-guide>
4. Ghid pentru Apple Watch: <https://support.apple.com/en-us/HT204665>
5. Apple Watch este conform cu următoarele standarde EMC și electrice: Siguranța electrică a fost evaluată în conformitate cu IEC 62368-1 (2014), „Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements.” Apple Watch este conform cu standardele UE EN 301 489-1 (V2.2.20), EN 301 489-3 (V2.1.1), EN 301 489-17 (V3.2.0) și EN 301 489-52 (V1.1.0).

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII GENERALE

- Nu utilizați aplicația Parky în niciun alt scop decât pentru a înregistra mișcarea unui pacient cu o tulburare de mișcare.
- Aplicația Parky este destinată doar ca instrument auxiliar pentru metodele clinice existente. Nu este destinată să fie singurul sau principalul mijloc de evaluare clinică.
- h2o therapeutics nu recomandă utilizarea aplicației Parky pentru pacienții care nu au capacitatea de a interacționa cu aplicația Parky pe iOS sau watchOS.
- Constatările non-motorii, informațiile furnizate de pacient și vizitele clinice trebuie să fie întotdeauna implicate în luarea deciziilor.
- Se recomandă cu insistență compararea rezultatelor Parky cu constatările clinice și cu informațiile raportate de pacient.
- La utilizarea inițială, pentru a verifica consistența fluxului de date, se recomandă observarea atentă a rezultatelor pacientului timp de 3 până la 5 zile per pacient. Această perioadă ar permite, de asemenea, detectarea oricăror probleme tehnice.
- Pacienții trebuie sfătuiți să poarte Apple Watch pe brațul cel mai afectat.
- Pacienții sau îngrijitorii sunt încurajați să introducă programul de medicație. Dacă pacientul nu poate face acest lucru în mod independent sau cu ajutorul îngrijitorilor, se recomandă ca furnizorii de servicii medicale să ofere asistență în mediul clinic.
- Pacienții nu trebuie să își autoevalueze evoluția bolii bazându-se exclusiv pe datele aplicației Parky.
- În cazul unei defecțiuni a aplicației Parky, pacienții trebuie să ia medicamentele conform prescripției.
- Nu există nicio evaluare implicită a medicamentelor de către aplicația Parky.

SECURITATEA DATELOR

1. Parky colectează date de mișcare doar atunci când utilizatorul poartă un Apple Watch.
2. În afară de datele de mișcare, Parky nu colectează activitățile mobile și telefonice, datele privind ecranul sau utilizarea aplicațiilor.
3. Datele utilizatorului pot fi partajate doar cu furnizorul de servicii medicale pentru care utilizatorul sau îngrijitorul și-a dat consimțământul și pot fi partajate doar cu un singur furnizor de servicii medicale la un moment dat.
4. Datele utilizatorului, inclusiv informațiile de identificare personală, sunt stocate pe servere conforme HIPAA folosind standardul de criptare avansat (AES256). Datele utilizatorului nu sunt niciodată partajate cu terți, cu excepția furnizorului de servicii medicale autorizat.
5. Se recomandă instalarea unui software de securitate mobilă pentru a asigura suplimentar securitatea dispozitivului.

EVENIMENTE ADVERSE

1. Dacă rapoartele privind simptomele utilizatorului nu corespund așteptărilor furnizorului de servicii medicale, încetați imediat utilizarea Parky în cadrul practicii clinice.
2. În cazul oricăror calcule eronate suspectate, probleme tehnice și alte evenimente, contactați support@parkynow.com



h2o Therapeutics
Mustafa Kemal Mah. 2131 Cad. No:15
06510 Çankaya / Ankara / Türkiye



(01)8685063631006
(10)P1/1.6.1
(11)20260710



www.parkynow.com