



Välkommen till

PARKY ANVÄNDARGUIDE

v1.6.1

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Parky-appen är avsedd att kvantifiera kinematiken hos rörelsestörningssymtom, inklusive tremor och dyskinesi, hos vuxna (45 år eller äldre) med mild till måttlig Parkinsons sjukdom.

INNEHÅLL

Kom igång	3
Inställningar för smartklocka	7
Inuti Parky	10
Krav	21
Klinisk tolkning	22
Allmänna instruktioner	23
Begränsningar	24
Säkerhet	26
Allmänna varningar	27
Datasäkerhet	28

Möt Parky

Parky är ett verktyg för distansövervakning utformat för kontinuerlig, objektiv bedömning av motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom, såsom tremor och dyskinesi. Det kvantifierar data från rörelsesensorer via Apple Watch och levererar symtomprofilrapporter i realtid som stöd för patienthantering.

Parky använder den kliniskt validerade algoritmen Motor Fluctuations Monitor for Parkinson's Disease (MM4PD) som utvecklats av Apple Inc. (Powers et al., 2021¹)

För den kliniska studierapporten, besök <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536284/>

Vem är Parky avsedd för?

- Parky är endast avsedd för användare med kliniskt diagnostiserad idiopatisk Parkinsons sjukdom som är tillräckligt kapabla att använda en Apple Watch och en iPhone.
- Parky fungerar bäst för personer som främst upplever symtom på tremor och dyskinesi.
- Parky är inte utformad för att bedöma parkinsonsyndrom såsom multipel systematrofi (MSA), progressiv supranukleär pares (PSP), kortikobasal degeneration (CBD) eller Lewykroppsdemens.

¹ Powers R, Etezadi-Amoli M, Arnold EM, Kianian S, Mance I, Gibiansky M, Trietsch D, Alvarado AS, Kretlow JD, Herrington TM, Brillman S, Huang N, Lin PT, Pham HA, Ullal AV. Smartwatch inertial sensors continuously monitor real-world motor fluctuations in Parkinson's disease. Sci Transl Med. 2021 Feb 3;13(579):eabd7865. doi: 10.1126/scitranslmed.abd7865. PMID: 33536284.

En snabb titt på Parky

Innovativ övervakning och bedömning

Parky ger värdefulla insikter genom att upptäcka tremor och dyskinesi i sjukdomens olika stadier. Den samlar in exakta data om motoriska symtom under hela dagen och möjliggör bedömningar var som helst, även utanför övervakade miljöer.

Medicinhantering och symtominsikter

Parky ser till att du har koll på dina mediciner med praktiska påminnelser på din iPhone och Apple Watch, och kombinerar symtomrapporter med data om medicinanvändning. Denna kombination ger tydliga, objektiva insikter som hjälper vårdgivare att upptäcka eventuella förändringar i symtom och därigenom förbättra behandlingsplaner.

Stärkt genom teknik

Parky integrerar bärbara sensorer för att erbjuda dig ett tillförlitligt alternativ till patientdagböcker, vilket hanterar den subjektiva karaktären hos självbedömning och förebygger de datagap som ofta uppstår vid dagboksföring. Denna integration erbjuder kontinuerlig, passiv spårning som säkerställer sömlös övervakning av din hälsa.

Aktivitetsspårning och rörelsestöd

Parky övervakar inte bara dina motoriska symtom; den spårar även dina dagliga steg och ger en inblick i dina fysiska aktivitetsnivåer.

Kom igång med Parky



Skanna QR-koden med kameran på din iPhone och följ popup-fönstret för att ladda ner Parky från App Store.

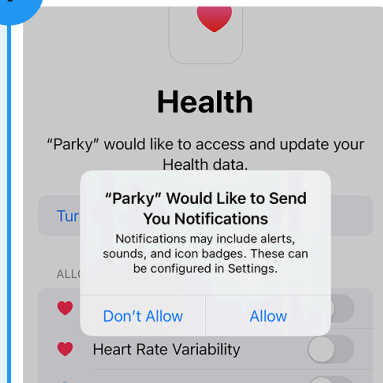
Du uppmanas att ladda ner Parky-appen från App Store för att kontrollera enhetskompatibiliteten.

Bevilja behörigheter

Du behöver bevilja behörigheter via de instruktioner som visas nedan för att Parky ska fungera korrekt. Dessa behörigheter gör det möjligt för Parky att skicka aviseringar och få åtkomst till data om steg samt rörelsespårning för analys av tremor och dyskinesi.

Parky är beroende av dessa behörigheter för att ge dig fullständiga insikter om din fysiska aktivitet, dina symtom och din läkemedelsföljsamhet.


1



Åtkomst till aviseringar

Den här behörigheten gör det möjligt för dig att ta emot påminnelser och uppdateringar från Parky. Utan den får du inga aviseringar om medicinscheman och uppdateringar.

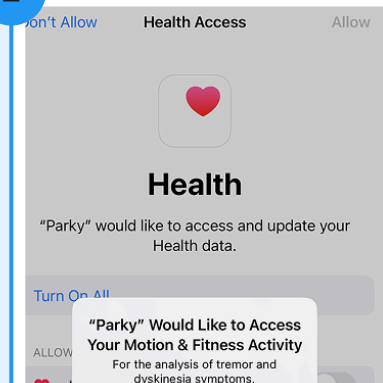
2



Åtkomst till rörelsedata

Genom att bevilja den här behörigheten kan Parky spåra dina rörelser, vilket är avgörande för att övervaka symtom som tremor och dyskinesi.

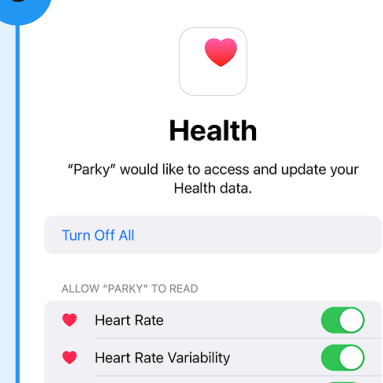3




Åtkomst till hälsodata

Genom att tillåta åtkomst till dina hälsodata kan Parky ge insikter om dina fysiska aktivitetsnivåer.



Introduktion

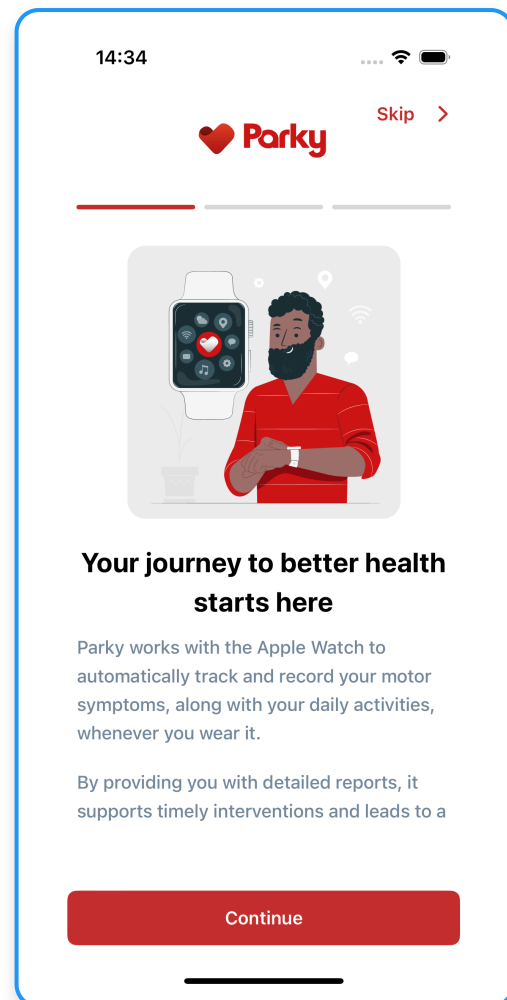Du börjar med en introduktionsprocess som omfattar hur du använder Parky, viktig säkerhetsinformation och hur vi skyddar dina data.



Logga in

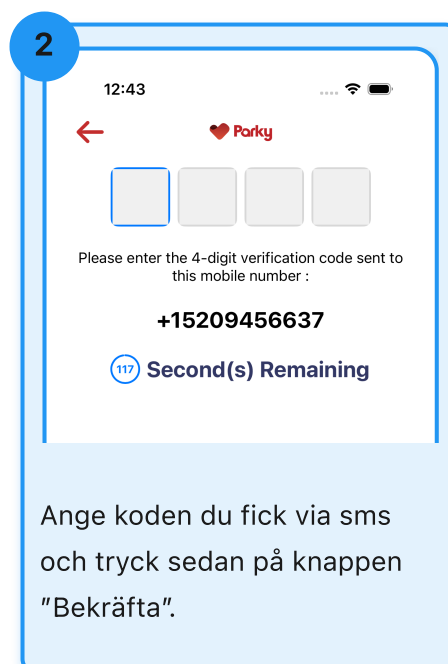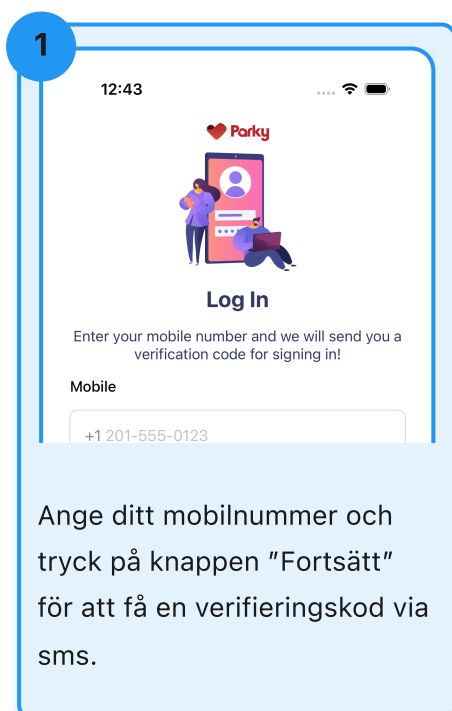Vid introduktionen anger du ditt mobilnummer och får en verifieringskod via sms.



Ställa in urtavlekomplikationerna

Följ stegen nedan för att lägga till Parky i urtavlekomplikationerna. Parky kan endast övervaka motoriska symtom när urtavlekomplikationer har lagts till.

1



Tryck och håll på skärmen.

2



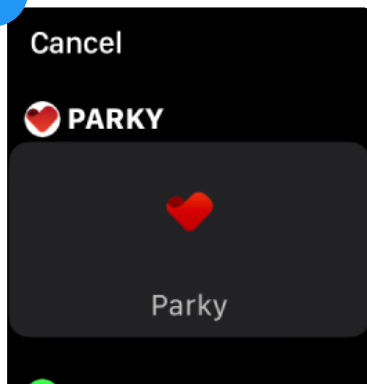
Tryck på "Redigera".

3



Svep åt vänster tills rubriken "Komplikationer" visas och välj valfri plats.

4



Bläddra tills "Parky" visas och tryck sedan.

5

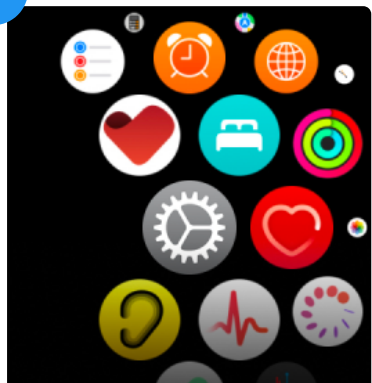


Klart! Parky-komplikationen har lagts till.

Aktivera haptiska aviseringar


Följ stegen nedan för att aktivera haptiska aviseringar på din Apple Watch. Haptiska aviseringar ger vibrationsåterkoppling för Parky-aviseringar.

1




Tryck på Digital Crown på din Apple Watch för att se hemskärmen.

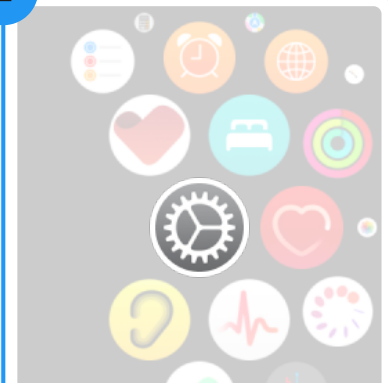2




Tryck på "Inställningar" i menyn med appikoner.

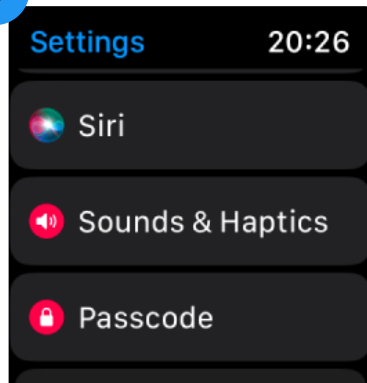3




Bläddra ner och tryck på "Ljud och haptik".

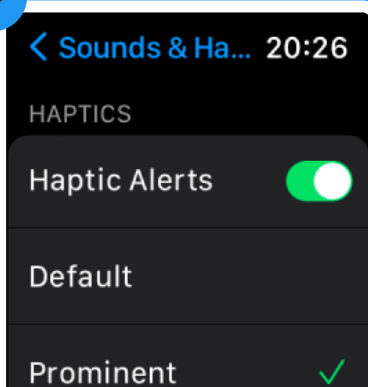4



Se till att "Haptiska aviseringar" är aktiverat genom att bläddra ner igen.

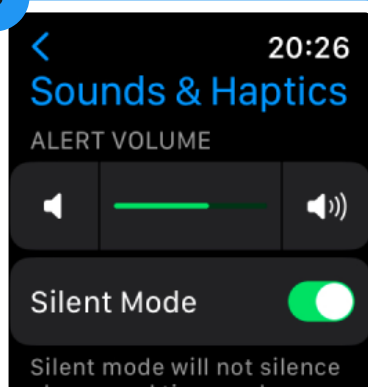5



Kom ihåg att aktivering av haptiska vibrationer också ger ett ljud.

För mer diskreta signaler kan du alltid komma tillbaka hit och aktivera "Tyst läge".

Använda Foggy

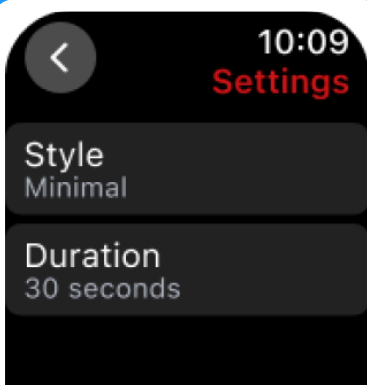


Starta "Foggy" antingen genom att trycka på komplikationsknappen eller genom att trycka på knappen inuti Parky-appen.




Foggy börjar ge signaler så snart du öppnar den. Tryck för att stoppa eller låt den fortsätta.


Anpassa Foggy



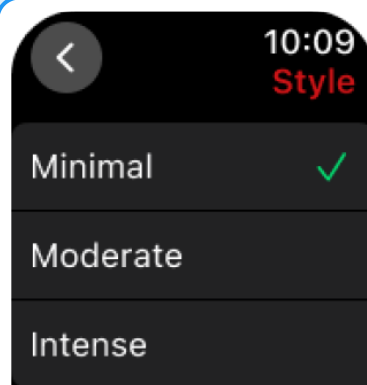Det finns två typer av inställningar: "Stil" och "Längd".




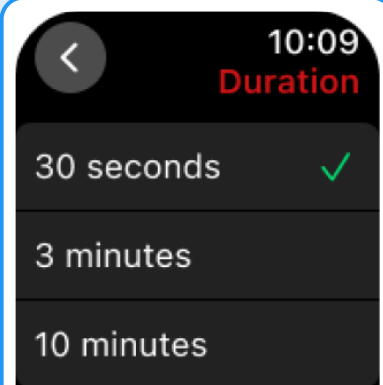Justera din vibrationsfrekvens i menyn "Stil".



Ställ in signallängden för Foggy i menyn "Längd".

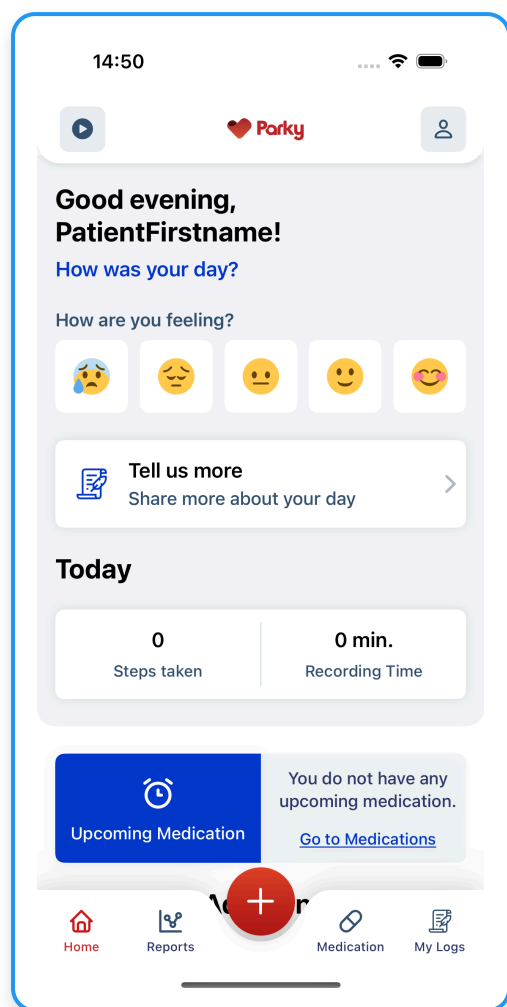Inuti Parky



Hemskärm

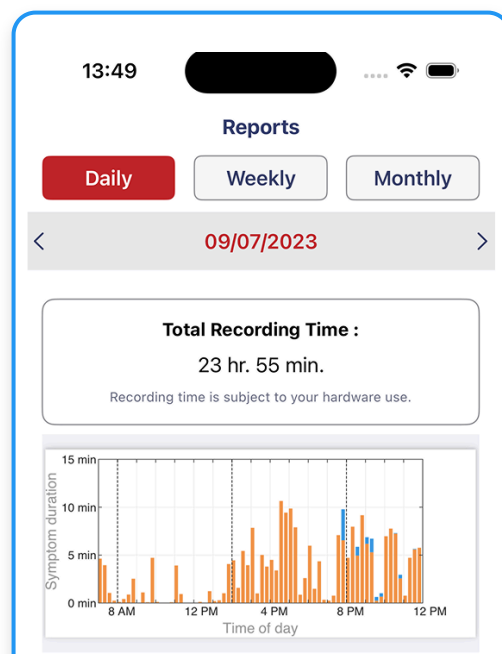
Parkys hemskärm erbjuder en användarvänlig översikt där du hittar påminnelser för kommande mediciner, spårar dina dagliga steg, övervakar inspelningstider och ser information om veckovis och månadsvis läkemedelsföljsamhet. Dessutom har du tillgång till en samling resurser för mer information.

Åtkomst till rapporterna

Visa dina symtomrapporter på fliken "Rapporter".

Rapporter visas som standard dagligen. Välj flikmenyn för att visa veckovisa och månadsvisa rapporter, inklusive retrospektiva datum.

Tryck på exportknappen för att när som helst ladda ner en specifik rapport som PDF.






Daily report

User: Name Surname

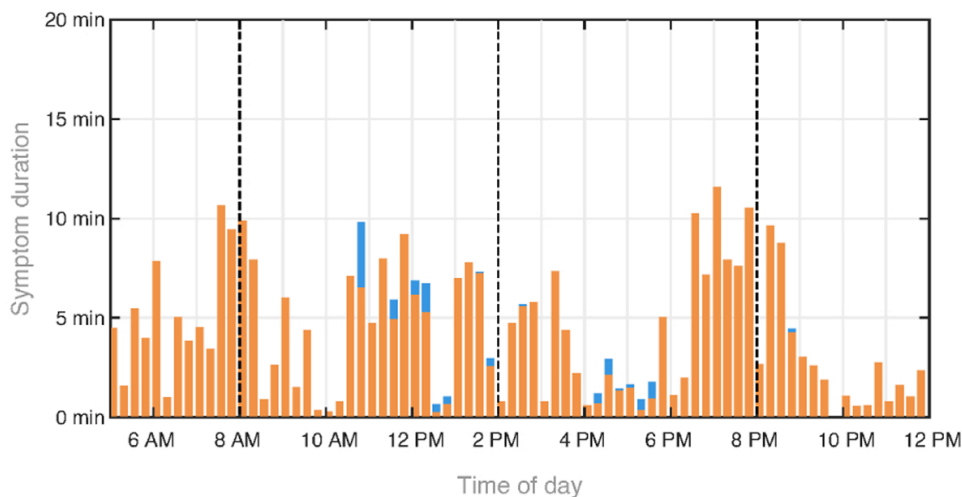September 07, 2023



Legend



Tremor

Dyskinesia

No recording



Prescribed medication time
For daily medications

Healthcare Provider Guide

Total recording time

23 Hours 55 Minutes

Recording time is subject to users' hardware use.

Total steps

•

Step count is subject to users' hardware use.


Medication	Days	Schedule and dose			Adherence
Rasagiline	Daily	08:00 AM (1)			100%
Carbidopa / Levodopa	Daily	08:00 AM (1)	02:00 PM (1)	08:00 PM (1)	100%

Medication schedules and adherence are subject to users' input.

www.parkynow.com

Dessa rapporter blir tillgängliga för den vårdgivare som du har bjudit in via Parky-appen, så snart de accepterar din inbjudan. Vårdgivaren kan visa dina rapporter via Parky Provider Portal. Dessa omfattar diagram över tremor och dyskinesi, data om läkemedelsföljsamhet, stegantal och noteringstider för en vald period.

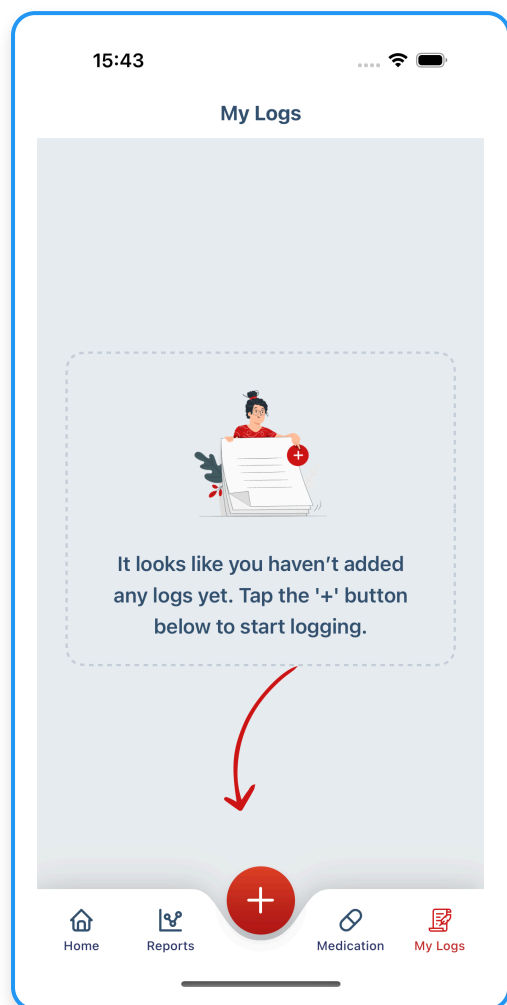
Notera



Du kan enkelt registrera hur du mår under dagen. Det hjälper dig att hålla kontakt med ditt känslomässiga tillstånd och bygga upp en bättre förståelse för dina humör över tid. Börja spåra dina känslomässiga mönster i dag för att öka självmedvetenheten och stödja personanpassad vård.


Lägga till noteringar

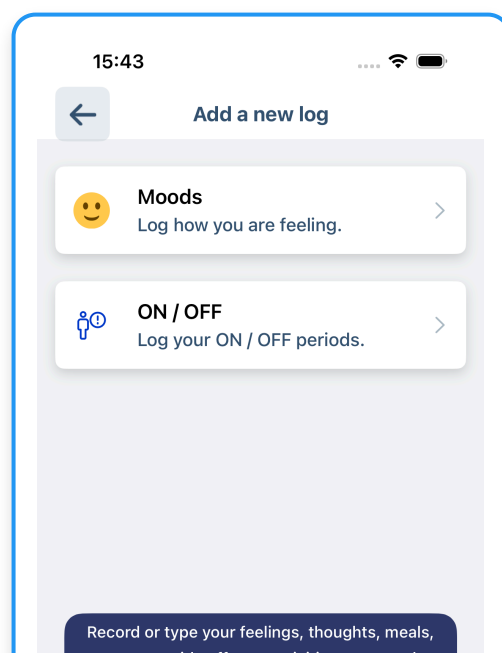Du kan notera ditt humör, ON/OFF-perioder eller en valfri anpassad notering som är relevant för din vård.



Humör

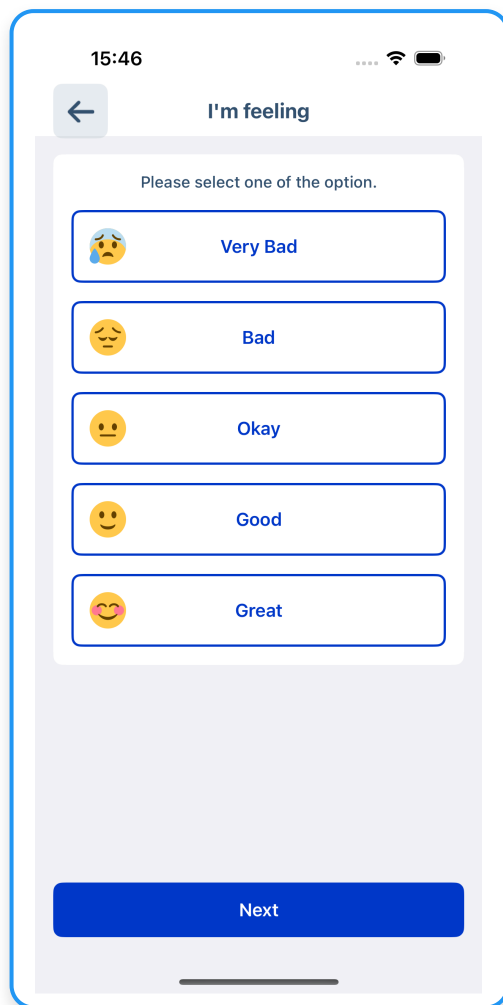Du kan notera ditt aktuella humör under dagen. Efter att du har justerat tiden för din notering kan du spara den och granska den på fliken "Mina noteringar".



15:46

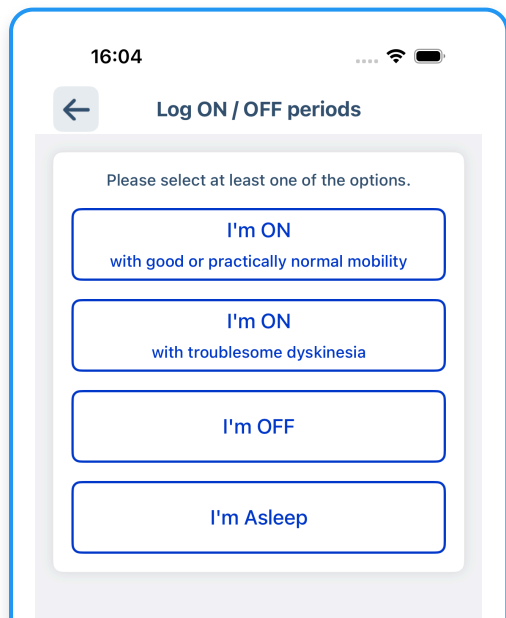
← I'm feeling

Please select one of the option.

- Very Bad
- Bad
- Okay
- Good
- Great

Next

ON/OFF-perioder



16:04

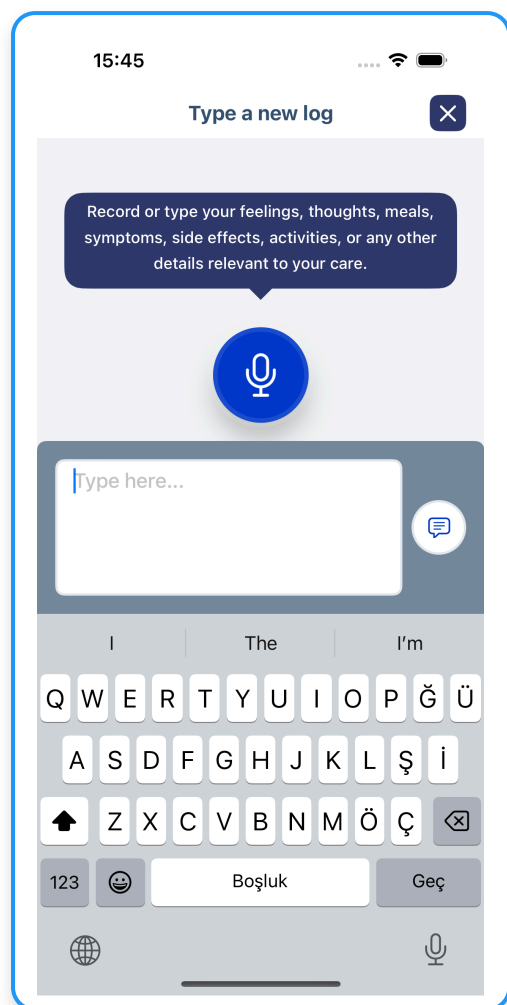
← Log ON / OFF periods

Please select at least one of the options.

- I'm ON
with good or practically normal mobility
- I'm ON
with troublesome dyskinesia
- I'm OFF
- I'm Asleep

Du kan notera det lämpligaste ON/OFF-alternativet för en period. På samma sätt kan du spara den och granska den på fliken "Mina noteringar".


Anpassad notering med text




Du kan skriva fritt om dina känslor, tankar, måltider eller andra detaljer som du tycker är viktiga att notera. Anpassade noteringar kan skapas med text- eller röstinmatning.

Anpassad notering med röst

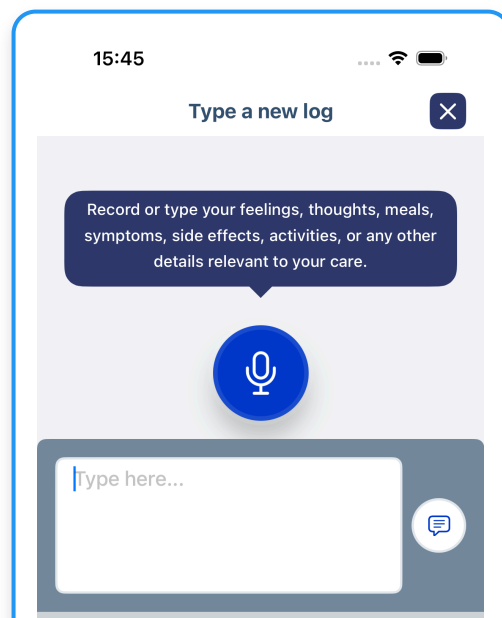
Spela in med rösten. Röstinspelningar har en tidsgräns på 120 sekunder.




Mina noteringar

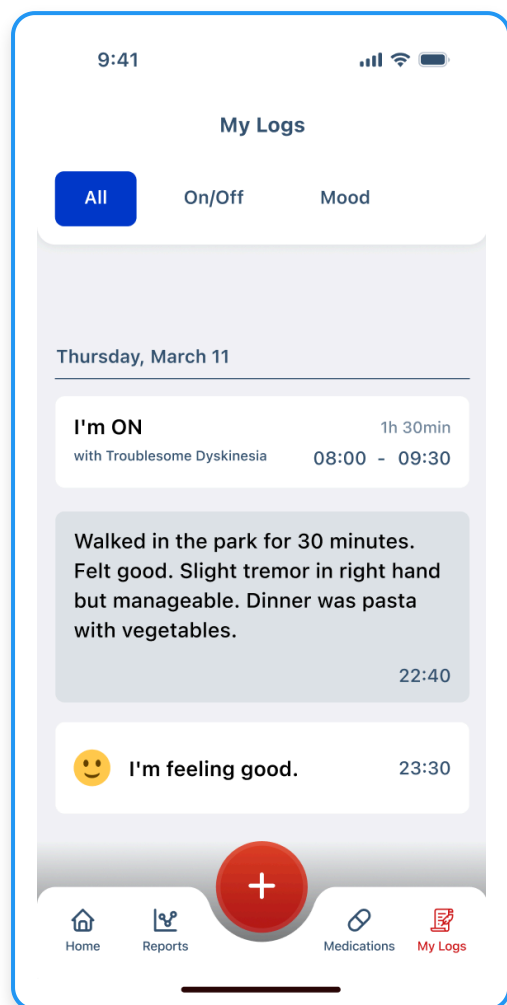

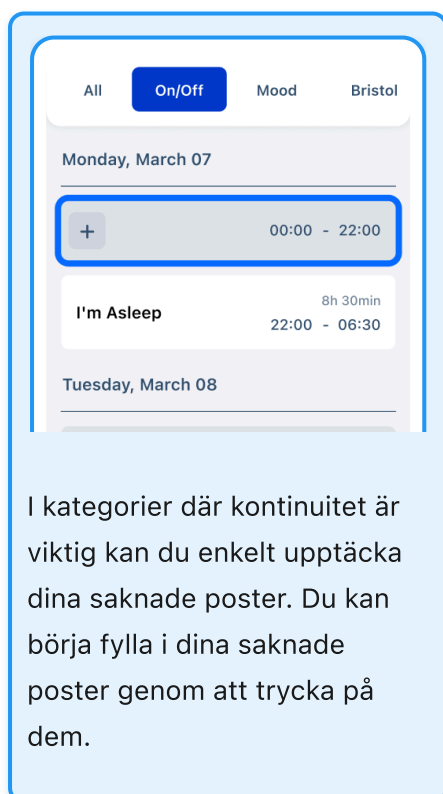
Du kan förhandsgranska dina noterade objekt som ett flöde från "Mina noteringar" i navigeringen. Du kan börja lägga till dina noteringar genom att helt enkelt trycka på "Plus"-ikonen. Du kan även filtrera förhandsgranskningen av ditt flöde.



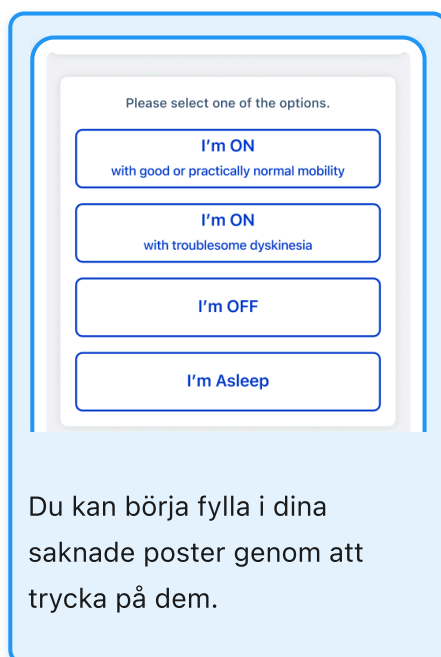I kategorier där kontinuitet är viktig kan du enkelt upptäcka dina saknade poster. Du kan börja fylla i dina saknade poster genom att trycka på dem.



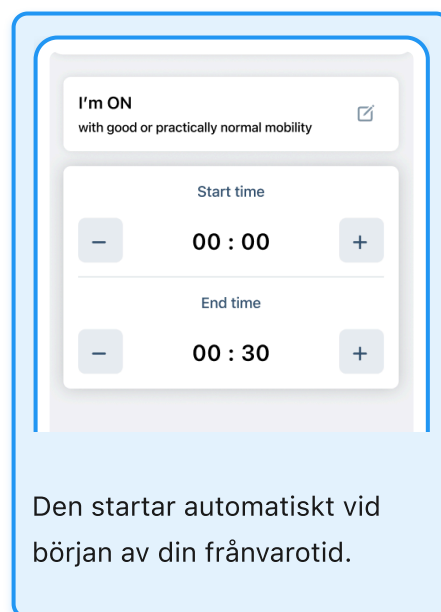
Du kan börja fylla i dina saknade poster genom att trycka på dem.




Den startar automatiskt vid början av din frånvarotid.

Redigera dina noterade objekt

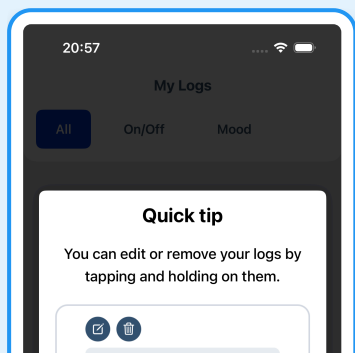
Börja med att trycka och hålla på det noterade objekt du vill redigera. Du kan redigera eller ta bort dina noteringar genom att trycka och hålla på dem.



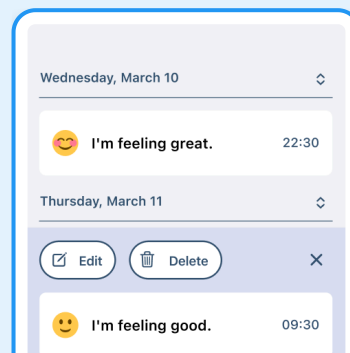
Du kan redigera dina noterade objekt genom att trycka och hålla på dem.



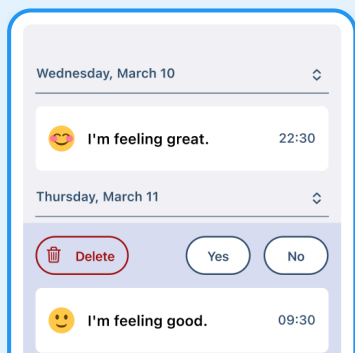Du kan antingen redigera eller radera dem från överläggsmenyn.



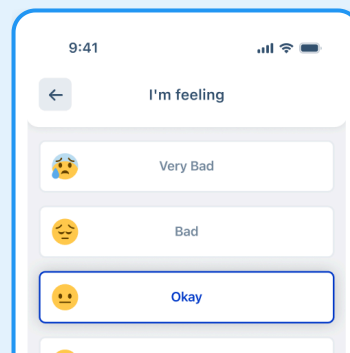Om du trycker på knappen "Radera" ombeds du att bekräfta – noteringen raderas permanent.




Om du trycker på knappen "Redigera" kan du ändra detaljerna i din notering.

Ställa in ditt medicinschema

Du behöver ange ditt korrekta medicinschema för att få ut mesta möjliga av Parky. Om din behandlingsplan ändras kan du redigera eller ta bort ditt medicinschema när som helst.


Börja med att trycka på "Medicin" i den nedre menyn.

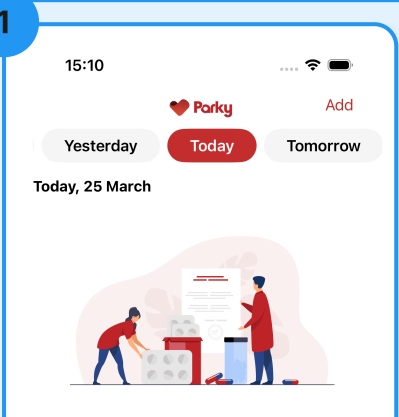1




Tryck på "Lägg till medicin" för att börja lägga till dina recept, ett i taget.

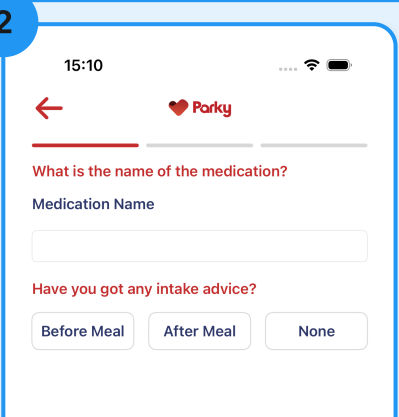2




Du ombeds att ange medicinens namn och intagsråd.

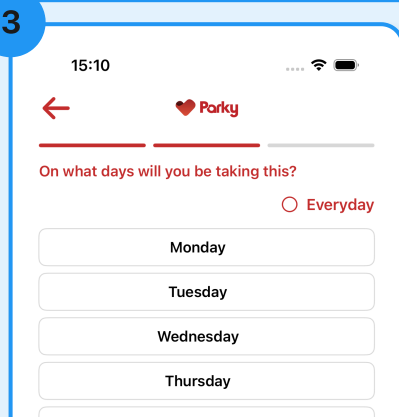3




Välj vilka dagar du kommer att ta din medicin.

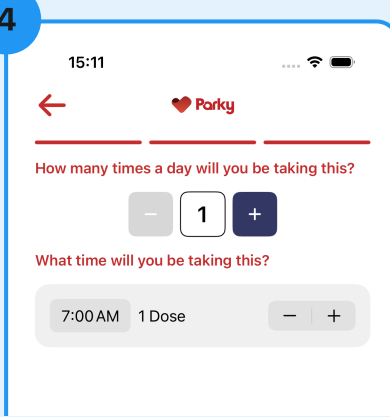4



Ange tider och doser för medicinen.

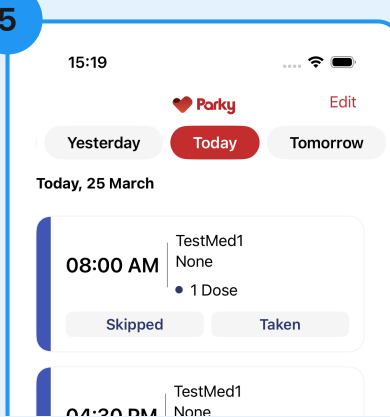5




Tryck på knappen "Redigera medicin" för att redigera eller radera din medicin.


Använda medicinpåminnelser

- Du får påminnelseaviseringar baserade på de dagar och tider som ställts in i ditt medicinschema.
- Du kan markera din medicin som "Tagen" eller "Överhoppad" på din iPhone eller Apple Watch.
- Om du missar att svara på en avisering kan du fortfarande svara senare via fliken "Medicin".
- För att säkerställa att din information om läkemedelsföljsamhet är korrekt, svara på medicinpåminnelser snabbt och korrekt.

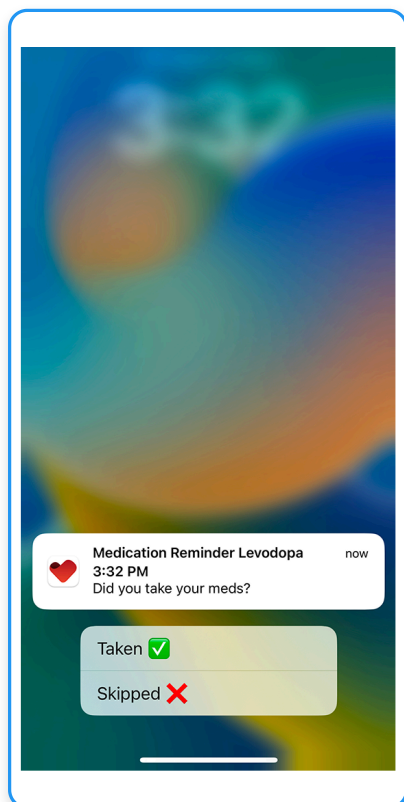Du kan svara på påminnelserna med "Tagen" eller "Överhoppad" på din iPhone eller Apple Watch.



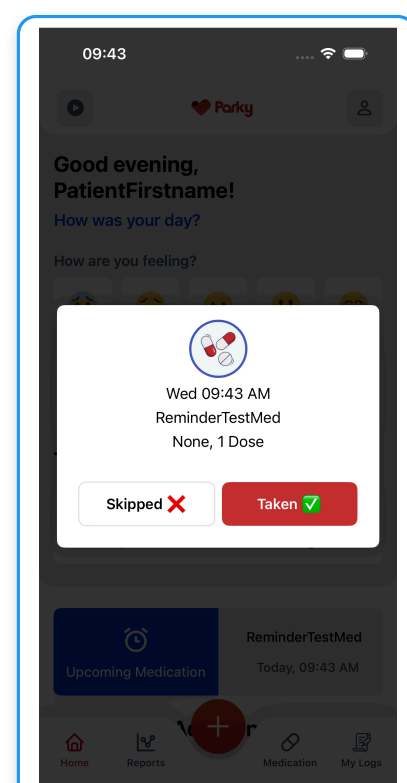Svara på påminnelser med "Tagen" eller "Överhoppad".




Profilskärm

Du kan visa din status, personliga information och tidszon på fliken "Profil".

Du kan kontakta oss för hjälp eller hitta lösningar på vanliga problem i avsnitten "Kontakta oss" och "Support och felsökning".

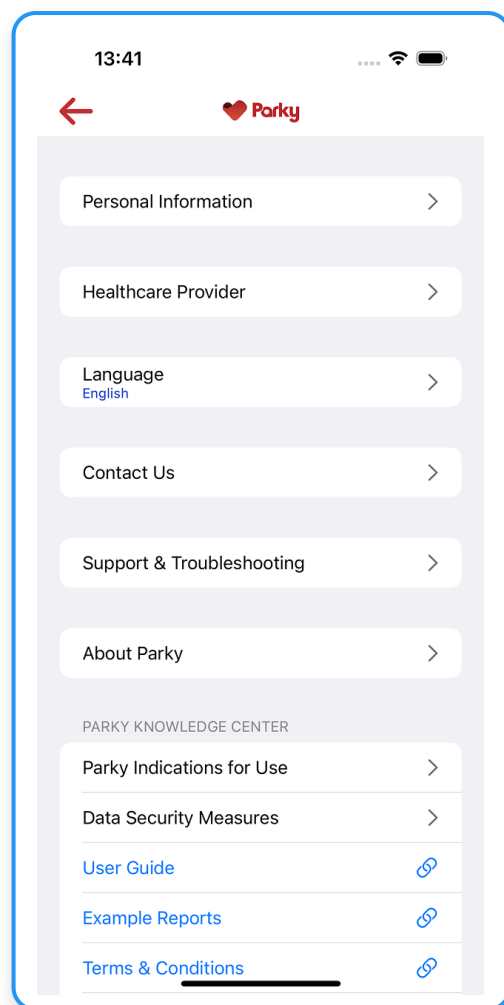Missa inte vårt "Kunskapscenter" på samma flik, där du hittar viktig information om Parky, hur du håller dina data säkra, exempelrapporter och våra villkor tillsammans med integritetspolicyn.




Lägga till en vårdgivare


Du kan välja att utse en vårdgivare genom att dela deras professionella information via Parky-appen.

När vårdgivaren har utsetts får den åtkomst till alla dina hälsojournaler via Parky Provider Portal.

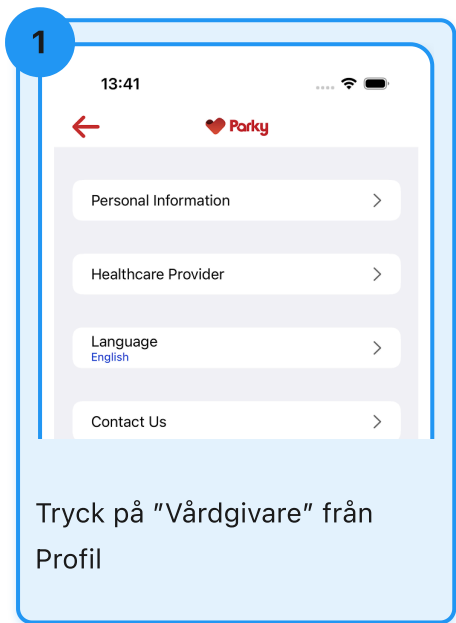
Du kan ta bort den utsedda vårdgivaren när som helst, vilket hindrar den från att få åtkomst till både tidigare och framtida data.

1

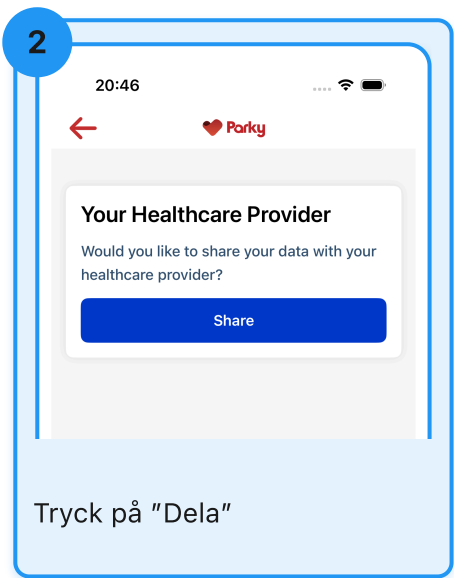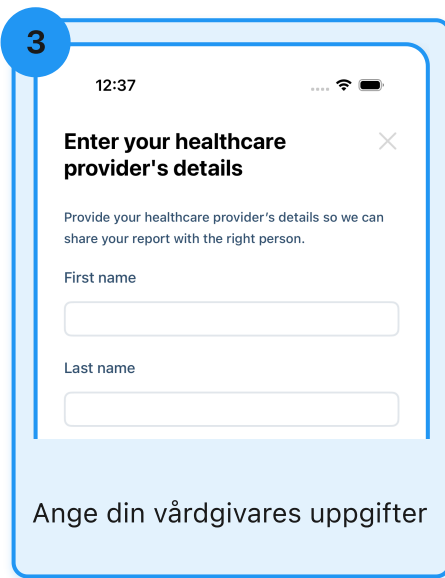
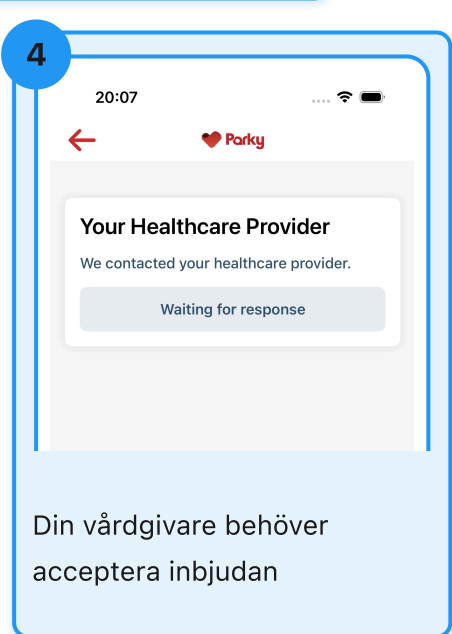
Tryck på "Vårdgivare" från Profil

2


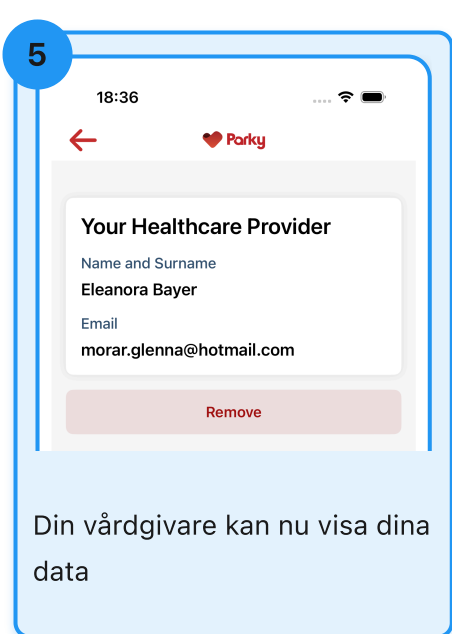
Tryck på "Dela"

3


Ange din vårdgivares uppgifter

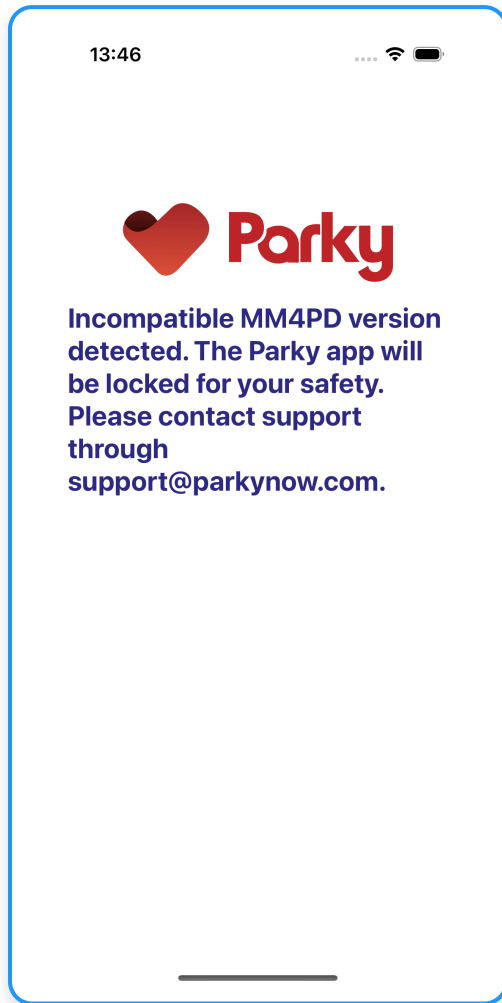
4


Din vårdgivare behöver acceptera inbjudan

5


Din vårdgivare kan nu visa dina data

VIKTIG VARNING I APPEN



Vid initiering utför Parky en verifieringsprocess för eventuella ändringar i MM4PD-versionen och bekräftar enhetskompatibiliteten för att säkerställa en säker och effektiv drift av dess funktioner.

Om en felskärm visas, som visas till vänster i Parky-applikationen, betyder det att Parky är inkompatibel med den aktuella enheten, operativsystemet eller programvaruversionen.

Hårdvaru- och programvarukrav

Parky stöds på:

- Apple Watch Series 4 (eller nyare) enheter med watchOS 10+
- iPhone XS (eller nyare) enheter med iOS 17+

Klinisk tolkning av rapporter

1. Varje rapport innehåller symtom på motoriska fluktuationer, inspelningstid och räknade steg. Om användaren loggar in i medicinplanen och anger information om medicinintag kan även följsamheten ses.
2. I symtomrapporten visar x-axeln tiden och y-axeln symtomlängden.
3. Förklaringen för tremor, dyskinesi, tider utan inspelning och ordinerade medicintider visas under diagrammet.
4. Symtom samlas in och mäts under hela inspelningstiden och presenteras i diagrammet med intervall på 15 minuter.
5. De rapporterade symtomen är de genomsnittliga symtomlängderna för dyskinesi och tremor.
6. Rapporterna utesluter data som sannolikt inte representerar något motoriskt symtom. Ett tomt stapeldiagram förväntas för en asymtomatisk användare eller en användare som saknar någon inspelning.
7. Inspelningstid anger den totala tid som användaren har använt enheten korrekt och att det inte fanns några tekniska problem gällande symtomövervakning. Se avsnittet "Begränsningar".
8. Utan tillräckliga inspelningstider genereras inga rapporter, som anges ovan.
9. Streckade linjer anger schemalagda medicintider.
10. Information om läkemedelsföljsamhet visar antalet "tagna" mediciner i förhållande till antalet schemalagda mediciner för ett givet tidsintervall (veckovis som de senaste sju dagarna eller månadsvis som de senaste 30 dagarna). "Tagna" mediciner beräknas baserat på användarens inmatning.
11. Information om stegantal anger användarens rörlighet och visas som det totala antalet inom ett givet tidsintervall (dagligen, veckovis eller månadsvis).

ANVÄNDNINGEN AV INSAMLADE DATA

Distansövervakning av symtom på tremor och dyskinesi ger vårdgivaren en objektiv bild av användarens motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom utanför kliniken. När de utvärderas tillsammans med icke-motoriska symtom, användarinsikter och fynd från klinikbesök stödjer Parky patienthanteringen.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

1. Användare måste alltid bära Apple Watch på sin mest påverkade arm.
2. Laddning av Apple Watch rekommenderas under användarens inaktiva timmar (helst under nattsömnen).
3. Parky kan inte övervaka symtom när Apple Watch inte bärs, vilket skulle orsaka datagap.
4. Utan tillräckliga inspelningstider kan Parky inte generera symtomrapporter. Se avsnittet "Begränsningar" för mer information.
5. Parky-appen får inte raderas vare sig på iPhone eller på Apple Watch.
6. Användare bör ange korrekt medicinschema för att säkerställa tillförlitligheten hos utdata om läkemedelsföljsamhet. Att ställa in medicinschemat rekommenderas i en klinisk miljö om användaren eller vårdaren inte kan göra det på egen hand.
7. Användare bör svara på medicinpåminnelser i tid och på ett korrekt sätt.

Begränsningar

1. Parky fungerar under följande begränsningar:

- Parky fungerar endast på Apple Watch och iPhone med MM4PD-algoritmen som utvecklats av Apple.
- Parky fungerar inte på enheter som inte stöds.
- Parky rekommenderas att användas för idiopatisk Parkinsons sjukdom och inte för andra parkinsonsyndrom såsom progressiv supranukleär pares (PSP), multipel systematrofi (MSA), Lewy och kortikobasal degeneration (CBD).
- Användaren bör bära Apple Watch på den mest påverkade armen.
- Spårning av dyskinetiska symtom bör endast övervägas för användare med korea i den påverkade armen, antingen självrapporterad eller diagnostiserad av en vårdgivare.
- Parky spårar uttryckligen vilotremor; den spårar inte aktionstremor eller posturell tremor, och den spårar eventuellt inte fingertremor.
- Parky spårar inte uttryckligen dystoni eller bradykinesi.
- Resultaten kan innehålla falskt positiva och falskt negativa värden. Användarens aktivitet, klockbandets passform och samtidiga tillstånd (såsom restless legs-syndrom och icke-parkinsonsk tremor) kan påverka resultatens kvalitet.
- Parky mäter uttryckligen endast symtom från handleden medan Apple Watch bärs. Apple Watch kan dock känna av symtom som överförs genom kroppen från andra påverkade kroppsdelar, vilket möjligen kan resultera i missvisande eller felaktiga mätvärden.

2. Parky kan inte samla in data när Apple Watch är avstängd och kan inte överföra data när iPhone är avstängd.

Begränsningar (fortsättning)

3. Utan tillräcklig inspelningstid kan Parky inte generera symtomrapporter. Rapporterna genereras med följande metodik:
 - Intervall på femton minuter, som täcker hela inspelningens längd, organiseras enligt användarens lokala tid.
 - Intervall med mindre än 50 % av de nödvändiga data utesluts.
 - De veckovisa och månadsvisa rapporterna visar de genomsnittliga symtomlängderna för tremor och dyskinesi från alla dagar med data.
 - I de veckovisa och månadsvisa rapporterna visas endast de intervall med data som samlats in från minst fem dagar eller som representerar mer än 20 % av den totala perioden.
4. Medicinscheman är beroende av att de data som anges av användaren är korrekta. Om användaren har svårigheter att använda appen rekommenderas det starkt att tillhandahålla stöd i kliniska miljöer.
5. Noggrannheten hos information om läkemedelsföljsamhet är beroende av användarens snabba och korrekta svar på medicinpåminnelseaviseringar. Att inte svara eller att ge felaktiga interaktioner kan leda till felaktiga utdata om läkemedelsföljsamhet. För att minska denna risk uppmuntras vårdgivare starkt att betona för användarna hur avgörande viktigt det är att svara korrekt på påminnelser.
6. Steginformationen är beroende av att användaren konsekvent använder både Apple Watch och iPhone. Parky kan inte samla in stegdata om användaren inte använder någon av dessa enheter.
7. Om användare vill sluta använda Parky permanent kan de radera sitt konto permanent. Vid radering av kontot betraktas användaren som en avhoppare, och användarens hälso- och personuppgifter tas bort permanent. Både användaren och vårdgivaren förlorar åtkomsten till användarens Parky-rapporter.

SÄKERHET

1. Användningen av Parky och Apple Watch påverkar inte användare med implantat för djup hjärnstimulering (DBS).
2. Apple Watch är vattentålig men inte vattentät. Den kan bäras och användas under träning (exponering för svett är okej), i regn och vid handtvätt.
3. Se den ursprungliga tillverkarens dokument gällande användarhandboken och guiderna för Apple Watch hårdvaruanvändarhandbok: <https://help.apple.com/pdf/watch/8/.../apple-watch-user-guide>
4. Guide för Apple Watch: <https://support.apple.com/en-us/HT204665>
5. Apple Watch uppfyller följande EMC- och elektriska standarder: Elektrisk säkerhet bedömdes enligt IEC 62368-1 (2014), "Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements." Apple Watch uppfyller EU-standarderna EN 301 489-1 (V2.2.20), EN 301 489-3 (V2.1.1), EN 301 489-17 (V3.2.0) och EN 301 489-52 (V1.1.0).

ALLMÄNNA VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Använd inte Parky-appen för något annat ändamål än att registrera rörelserna hos en patient med en rörelsestörning.
- Parky-appen är endast avsedd som ett hjälpmedel till befintliga kliniska metoder. Den är inte avsedd att vara det enda eller primära sättet för klinisk bedömning.
- h2o therapeutics rekommenderar inte att Parky-appen används för patienter som saknar förmågan att interagera med antingen Parky-appen på iOS eller watchOS.
- Icke-motoriska fynd, patientinsikter och kliniska besök ska alltid involveras i beslutsfattandet.
- Det rekommenderas starkt att jämföra Parky-resultat med kliniska fynd och patientrapporterade insikter.
- Vid första användningen, för att verifiera konsistensen i dataflödet, rekommenderas det att patientresultat observeras noga i 3 till 5 dagar per patient. Denna period skulle även möjliggöra upptäckt av eventuella tekniska problem.
- Patienter bör rådas att bära Apple Watch på den mest påverkade armen.
- Patienter eller vårdare uppmuntras att mata in medicinschemat. Om patienten inte kan göra detta självständigt eller med hjälp av sina vårdare rekommenderas vårdgivare att erbjuda hjälp i kliniska miljöer.
- Patienter bör inte självutvärdera sin sjukdomsutveckling enbart med data från Parky-appen.
- I händelse av fel på Parky-appen bör patienter ta medicin enligt ordination.
- Det förekommer ingen underförstådd läkemedelsutvärdering från Parky-appens sida.

DATASÄKERHET

1. Parky samlar endast in rörelsedata när användaren bär en Apple Watch.
2. Förutom rörelsedata samlar Parky inte in data om mobil- och telefonaktiviteter, skärm- eller appanvändning.
3. Användardata kan endast delas med den vårdgivare som användaren eller vårdaren har gett samtycke till och kan endast delas med en vårdgivare i taget.
4. Användardata, inklusive personligt identifierbar information, lagras på HIPAA-kompatibla servrar med Advanced Encryption Standard (AES256). Användardata delas aldrig med tredje part förutom med behörig vårdgivare.
5. Det rekommenderas att installera en programvara för mobil säkerhet för att ytterligare säkerställa enhetens säkerhet.

BIVERKNINGAR

1. Om användarens symtomrapporter inte stämmer överens med vårdgivarens förväntningar, sluta omedelbart använda Parky under klinisk praxis.
2. Vid eventuella misstänkta felberäkningar, tekniska problem och andra händelser, kontakta support@parkynow.com



h2o Therapeutics
Mustafa Kemal Mah. 2131 Cad. No:15
06510 Çankaya / Ankara / Türkiye



(01)8685063631006
(10)P1/1.6.1
(11)20260710



www.parkynow.com